



SUGITA
Booster CLIP
杉田ブースタークリップ

INDEX



MIZUHO Corporation

3-30-13 Hongo, Bunkyo-ku, Tokyo 113-0033, Japan

TEL(03)3815-3096 FAX(03)3813-5068

<https://www.mizuho.co.jp>

CK07-939-01WW

2023-07 Ver.11

English.....	1	Italiano.....	65
Deutsche.....	21	Español.....	87
Français.....	43	日本語	109

INSTRUCTIONS FOR THE USE OF SUGITA BOOSTER CLIP

Index

- | | |
|---|---------------------------------|
| 1 . Specifications | 10. Warning |
| 2 . Types | 11. Use of MRI |
| 3 . Spring Type | 12. Caution |
| 4 . Action Mechanism | 13. Defects and Adverse Events |
| 5 . Surface Finish | 14. Storage - Care and Handling |
| 6 . Blade Cross-sectional Shape | 15. Validated Cleaning and |
| 7 . Indication for Use | Sterilization Procedure |
| 8 . Directions for Use | - Sterilization - |
| 9 . Contraindications and
Prohibitions | - Storage - |

1. Specifications

Sugita Booster Clip is used to reinforce the closing force of Sugita Aneurysm Clips Permanent Type (standard and large types) as shown in [Table 1].

“Sugita Booster Clip” herein referred to as “clip”.


This clip should be used only in tandem with a previously applied Sugita Aneurysm Clip. **Never apply directly to the cerebral aneurysm or to any blood vessel.** This clip must be placed as close to the spring of the Sugita Aneurysm Clip as possible and must securely grip the proximal part of the clip blades. [Figure 1]

This clip should not be used with clips other than the standard or large Sugita Aneurysm Clips Permanent Type.

[Table 1]

Applicable Type	Prod. Code
Standard Type	07-940-01~09・64~66・68・69 07-943-01~03
Large Type	07-940-10~18・20~25・47~50 60~63・70~73

SUGITA BOOSTER CLIP

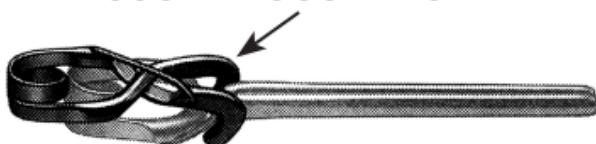

[Figure 1]

This clip is made of cobalt-chromium-nickel-molybdenum-iron alloy (ISO5832-7/ASTM F1058 G2).


ASTM: American Society for Testing and Materials

ISO: International Organization for Standardization

This clip is designed for **single-use only**, is exclusively indicated only for use with the Sugita Aneurysm Clips Applying Forceps (hereinafter this is called “clip applier”), and requires cleaning and sterilization prior to use. Reuse may cause breakage of clips and may cause injury or infection.

In order to ensure the traceability, a lot number is shown on each clip.

The closing force of each clip is measured during the final quality assurance stage with a computerized electronic scale at a specified measuring point as shown in **[Figure 2]**. The result of this measurement is shown in newtons and grams on the package label.

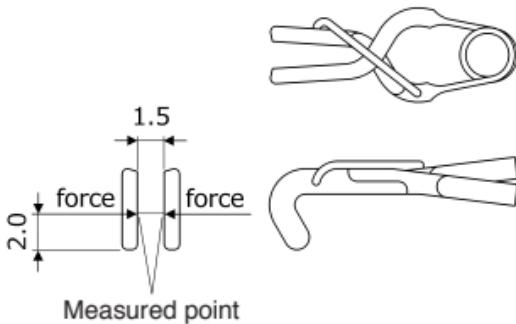

[Figure 2]

2. Types

Permanent Type

Type	Color
Booster	Blade tip-yellow

For specific dimensions and shapes, please see this clip's catalog.

3. Spring Type: Integral Coil

4. Action Mechanism: Alligator Action

5. Surface Finish

- Clip Body: Satin
- Material Treatment: Electrolytic Polish

6. Blade Cross-sectional Shape: Rolled

7. Indication for Use

This device is used to reinforce the closing force of standard and large Sugita Aneurysm Clips for permanent occlusion (permanent clips).


8. Directions for Use

This clip is packaged non-sterile, and must be properly sterilized before use.

This clip must be held with the clip applier.

When holding the clip, it must be verified that the spring of the clip is correctly placed in the holding jaws of the clip applier as shown in **[Figure 3]**.

Improper holding of the clip may cause damage or ejection from the clip applier. As this may present a risk during surgery, ensure correct holding of the clip.

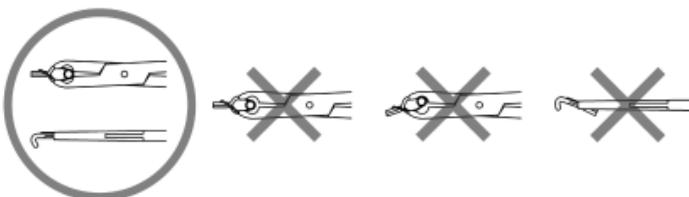

[Figure 3]

- Do not hold the clip in angled positions.
 - If the spring of the clip is not properly held with the holding jaws of the clip applier, the clip may slip or spring out from the jaws. This may also damage the
-

spring of the clip, and there is a risk of breakage and reduced holding force.

It is recommended that doctors record the type, lot, and serial number of the clip used in the operation record for each patient.

To support traceability, Patient/Trace labels are included in the clip package.

9. Contraindications and Prohibitions

1) Prohibition of reuse

This clip is for single use only. The clip must be discarded once the blades of the clip have been opened or the clip has come into contact with the blood or tissue of a patient. Reuse may cause breakage of clips and may cause injury or infection.

2) Prohibition of use for unintended purposes

This clip should not be used for purposes other

than reinforcing the closing force of Sugita Aneurysm Clips Permanent Type (standard and large types). Do not use this clip with Fenestrated, Long, or Mini Sugita Aneurysm Clips Permanent Type.

- 3) To prevent changes in the clips closing force or in the mechanical features of the clip when it is handled, only use the exclusive clip applier. Do not use clip applicators from other manufacturers.
 - 4) Do not open the blades of clip directly with fingers. This may cause corrosion or alter the proper holding force. The blades of clip should be opened only when spring of the clip is placed in the proper position inside the clip applier.
 - 5) Modifying or adulteration of this clip is not allowed.
 - 6) In order to avoid a galvanic current, do not use this clip with implants from other manufacturers or with implants made of different materials. A
-

-
- galvanic current may cause corrosion and weaken the holding force.
- 7) This clip must not be used in patients with serious allergies to metals or exogenous materials.
 - 8) This clip must not be used in patients with infectious diseases or sepsis as a complication.
 - 9) This clip must not be sterilized using low-temperature hydrogen peroxide gas plasma.
This clip is not compatible with sterilization using low-temperature hydrogen peroxide gas plasma.
[Sterilization using such method may cause surface color deterioration and affect its characteristics.]

10. Warning

- 1) It is recommended the patient is informed about the procedure and characteristics of this clip.
 - 2) Closing status of the blades of clip should be verified immediately following surgery.
-

[The most serious adverse events that may be reported in conjunction with this clip include displacement of the clip, slip-out of the clip, ejection of the clip from the clip applier, clip fracture, laceration of a cerebral aneurysm, cerebrovascular injury, hemorrhage, death, etc.]

3) Handling of this clip:

Rough handling of this clip may cause deformation or damage to the clip and may harm the patient.

11. Use of MRI



MR Conditional

Non-clinical testing demonstrated that this clip is MR Conditional. A patient with this clip can be scanned

safely in an MR system under the following conditions:

- Static magnetic field of 1.5 tesla or 3 tesla, only
- Maximum spatial gradient magnetic field of 1,000 gauss/cm (10 T/m)
- Maximum MR system reported, whole body averaged specific absorption rate (SAR) of 2 W/kg for 15 minutes of scanning (i.e., per pulse sequence) in the Normal Operating Mode

Under the scan conditions defined, this clip is expected to produce a maximum temperature rise of 2.4 °C (4.32 °F) after 15 minutes of continuous scanning (i.e., per pulse sequence).

In non-clinical testing, the image artifact caused by this clip extends approximately 25 mm from this clip when imaged using a gradient echo pulse sequence and a 3 Tesla MR system.

NOTE: Do not take the clip applier into the MR environment.

The clip applier contains material which has been determined to be MR Unsafe.

12. Caution

Use of this clip is restricted to surgeons with proper training in the use of this clip.

13. Defects and Adverse Events

1) Serious adverse events

- Displacement of the clip (slippage)
- Ejection of the clip from clip applier
- Breakage of the clip
- Rupture of a cerebral aneurysm
- Cerebrovascular injury
- Hemorrhage
- Death

2) Other adverse events

- Infection of surgical wound
- General surgical complications
- Delayed clip displacement due to the application of magnetic field
- Occlusion of adjacent blood vessel
- Foreign body reaction

14. Storage – Care and Handling

This clip is prepared in a non-sterile package and should be stored in its package in a cool, dry, and secure location.

Do not use any clip applier other than the exclusive clip applier.

Handling of this clip should be minimized to reduce contamination or damage.

15. Validated Cleaning and Sterilization Procedure

This clip is supplied non-sterile. Therefore, this clip must be sterilized by the users (healthcare professionals) prior to surgery using validated sterilization processes in accordance with guidelines stipulated by the government.

Proper sterilization and handling of this clip is important for assuring that the clips meet sterile specifications prior to surgery as an aid in minimizing the occurrence of infection in the surgical patient.

Other procedures for minimizing contamination in the operating room, including the use of a surgical unit with laminar flow equipment at the doctor's discretion, are also important.

Sterilization equipment should be validated to assure that it sterilizes specific load configurations properly.

The end user is responsible to validate the sterilization process in the individual sterilizer and assure the sterility.

Sterilization equipment should be cleaned and maintained in accordance with standardized operating procedures specified by its manufacturer.

Clean and sterilize the clip applier according to the clip applier instruction manual.

This clip and instruments must be cleaned to reduce bioburden before first sterilization and resterilization.

Do not use chlorine-based solutions when cleaning this clip. This could cause metallic corrosion.

1) Cleaning

Put the clip in the designated Sugita Clip Case or Sugita Clip Tray (hereinafter this is called “clip case or tray”) and close the lid.

<In case of using Ultrasonic cleaner>

(1) Fully immerse the case (tray) in the water (tap water) of the washing tank.

(2) Ultrasonic cleaning

Cleaning time: 15 minutes or more

Detergent: Neutral enzyme type detergent
(Diluted concentration 1.0%)

(3) Rinsing

- Make sump water with running water, immerse the case (tray) completely in water (tap water or deionized water), shake the case (tray) 5 times up and down.
- Renew the water and shake the case (tray) 5 times up and down in the water again.
- Perform a series of rinsing operations three or more times in total.

(4) Dry thoroughly.

Recommended drying condition: 110 °C (230 °F),
30 minutes or more

<In case of using washer disinfecter (automatic washing)>

Stage	Procedure	Temperature [°C (°F)]	Time [min]	Quality of water	Remarks
I	Preclean	<25 (77)	3	Tap water	—
II	Washing	55 (131)	10	Tap water	Alkaline detergent (such as cleaning agent for aluminum)-Diluted concentration 0.5%
III	Rinsing	<25 (77)	4	Deionized water	Set rinsing process program as "1 time (1 minute) × 4 times = 4 minutes"
IV	Hot water disinfection	—	—	Deionized water	Follow the program of the device.
V	Drying	—	—	—	

2) Inspection

Check clips visually one by one and do not use if the following abnormalities are found.

- Damage
- Deformation
- Corruption
- Inappropriate blade position (deviation, clearance, tip unevenness, etc.)
- Remaining dirt

Since the color of the surface may be faded in repetitive processing, do not use clips that cannot be clearly distinguished with color coding.

3) Packaging

Place clip in the designated clip case or tray and close the lid.

Then pack the case (tray) containing the clip using standard medical packaging material (non-woven fabric or sterilized bag) with protective sterile barrier complying with ISO 11607 for steam sterilization.

- Sterilization -

<Validated Sterilization Method>

Standard followed	ISO 17665-1		
Sterilization method	Pre-vacuum steam sterilization (Autoclave sterilization)		
Sterilization conditions	Sterilization temp.	Retention time	Drying time
	132 °C / 270 °F*	4 minutes or more	20 minutes or more
	134 °C / 273 °F*	3 minutes or more	20 minutes or more

*According to the Guideline for Disinfection and Sterilization in Healthcare Facilities, 2008 (Update: May 2019)

Do not sterilize using low-temperature hydrogen peroxide gas plasma. It may cause discoloration and/or deformation.

With a high-pressure steam sterilizer that has been confirmed to function properly, the validation of sterilization is verified by a medical institution, sterilization conditions with a proven effectiveness shall be applied.

- Storage -

Do not store the clip in high temperatures, or in areas with high humidity and/or where the temperature varies. Please store the clip in clean dust-free and dry area.

GEBRAUCHSHINWEISE FÜR SUGITA BOOSTER-CLIP

Inhaltsverzeichnis

- | | |
|------------------------------------|---|
| 1 . Technische Daten | 10. Warnhinweis |
| 2 . Typen | 11. MR-Verwendung |
| 3 . Federtyp | 12. Vorsichtshinweis |
| 4 . Funktionsmechanismus | 13. Mängel und unerwünschte Ereignisse |
| 5 . Oberfläche | |
| 6 . Klingenquerschnitt | 14. Lagerung, Pflege und Handhabung |
| 7 . Indikationen für den Gebrauch | 15. Validiertes Reinigungs- und Sterilisationsverfahren |
| 8 . Gebrauchshinweise | - Sterilisation - |
| 9 . Kontraindikationen und Verbote | - Lagerung - |

1. Technische Daten

Der Sugita Booster-Clip wird verwendet, um die Schließkraft von Sugita Aneurysma-Clips der permanenten Ausführung (Standard- und große Ausführung) zu verstärken, wie in **[Tabelle 1]** dargestellt.

„Sugita Booster-Clip“ im Folgenden als „Clip“ bezeichnet.

Dieser Clip ist ausschließlich zusammen mit einem zuvor eingesetzten Sugita Aneurysma-Clip zu verwenden. **Niemals direkt am zerebralen Aneurysma oder an irgendwelchen Blutgefäßen anwenden.** Dieser Clip muss so nahe am Federmechanismus des Sugita Aneurysma-Clips wie möglich platziert werden und den proximalen Teil der Clip-Klingen sicher umfassen. **[Abbildung 1]**


Dieser Clip darf nicht mit anderen Clips als den Sugita Aneurysma-Clips der permanenten Ausführung in Standard- und großer Ausführung

verwendet werden.

[Tabelle 1]

Anwendungstyp	Produktcode
Standardausführung	07-940-01~09 · 64~66 · 68 · 69 07-943-01~03
Große Ausführung	07-940-10~18 · 20~25 · 47~50 60~63 · 70~73

SUGITA BOOSTER-CLIP

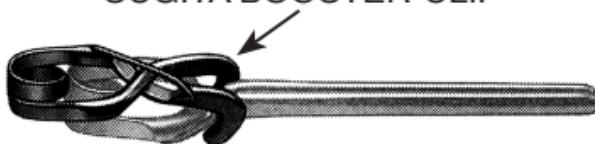

[Abbildung 1]

Dieser Clip ist aus einer Kobalt-Chrom-Nickel-Molybdän-Eisen-Legierung (ISO5832-7/ASTM

F1058 G2) hergestellt.

ASTM: American Society for Testing and Materials


ISO: International Organization for Standardization

Dieser Clip ist ausschließlich für den **einmaligen Gebrauch** und nur in Verbindung mit der Verwendung des Sugita Aneurysma-Clipsetzers (im Folgenden „Clip-Applikator“ genannt) bestimmt und muss vor Gebrauch gereinigt und sterilisiert werden. Eine Wiederverwendung kann den Bruch des Clips zur Folge haben und zu Verletzungen oder Infektionen führen.

Zur Gewährleistung der Rückverfolgbarkeit ist auf jedem Clip eine Lot-Nummer angegeben.

Die Schließkraft jedes einzelnen Clips wird in der letzten Stufe der Qualitätssicherung mit einer computergestützten elektronischen Messvorrichtung an einem bestimmten Messpunkt gemessen, wie in **[Abbildung 2]** gezeigt. Das Ergebnis dieser Messung wird in Newton und Gramm auf dem Verpackungsetikett

angezeigt.

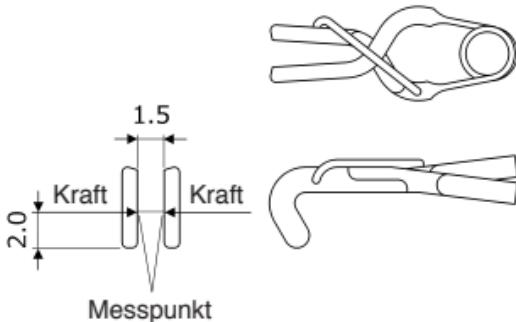

[Abbildung 2]

2. Typen

Permanente Ausführung

Typ	Farbe
Booster	Klingenspitze-gelb

Genaue Abmessungen und Formen sind im Katalog dieses Clips aufgeführt.

3. Federtyp: Integrierte Spule

4. Funktionsmechanismus

: Krokodil-Mechanismus

5. Oberfläche

- Clip-Körper: Satiniert
- Werkstoffbehandlung: Elektrolytisch poliert

6. Klingenquerschnitt: Gewalzt

7. Indikationen für den Gebrauch

Diese Vorrichtung wird verwendet, um die Schließkraft von Sugita permanenten Aneurysma-Clips in Standard- und großer Ausführung für die permanente Okklusion (Clips in permanenter Ausführung) zu verstärken.

8. Gebrauchshinweise


Dieser Clip ist nicht steril verpackt und muss vor

Gebrauch ordnungsgemäß sterilisiert werden.

Dieser Clip muss mit dem Clip-Applikator platziert werden.

Bei der Platzierung des Clips ist unbedingt darauf zu achten dass die Feder des Clips korrekt zwischen den Haltebacken des Clip-Applikators platziert ist, so wie in **[Abbildung 3]** gezeigt.

Durch eine falsche Platzierung kann der Clip beschädigt werden oder aus dem Clip-Applikator herausfallen. Da dies während einer Operation ein hohes Risiko darstellt, den korrekten Sitz des Clips sicherstellen.

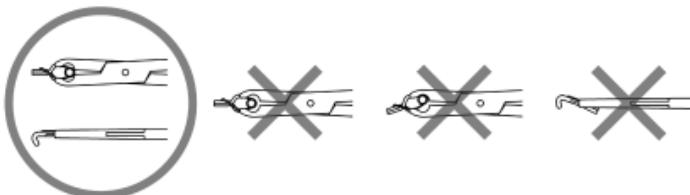

[Abbildung 3]

-
- Den Clip nicht angewinkelt im Clip-Applikator halten.
 - Wird der Federteil des Clips nicht korrekt in den Haltebacken des Clip-Applikators gehalten, kann der Clip verrutschen oder aus den Haltebacken herausschnellen. Dies kann auch dem Federteil des Clips beschädigen und es besteht das Risiko des Bruchs und einer reduzierten Haltekraft.

Es ist empfehlenswert, dass die Ärzte den Typ und die Lot- und die Seriennummern des verwendeten Clips für jeden einzelnen Patienten stets notieren.

Um die Rückverfolgung zu gewährleisten, sind Patienten- und Rückverfolgungsetiketten in der Clip-Verpackung enthalten.

9. Kontraindikationen und Verbote

1) Verbot der Wiederverwendung

Dieser Clip ist ausschließlich für den einmaligen

Gebrauch bestimmt. Der Clip muss entsorgt werden, sobald die Clip-Klingen einmal geöffnet wurden oder der Clip mit Blut oder Geweben eines Patienten in Berührung gekommen ist. Eine Wiederverwendung kann den Bruch des Clips zur Folge haben und zu Verletzungen oder Infektionen führen.

2) Verbot der Verwendung für nicht vorgesehene Zwecke

Dieser Clip darf ausschließlich zur Stärkung der Schließkraft von Sugita Aneurysma-Clips der permanenten Ausführung (Standard- und große Ausführung) verwendet werden. Diesen Clip nicht mit anderen Sugita Aneurysma-Clips der permanenten Ausführung in gefensterter, langer oder Mini-Ausführung verwenden.

3) Um Veränderungen der Schließkräfte des Clips oder der mechanischen Eigenschaften des Clips bei der Handhabung zu verhindern, nur den exklusiven

-
- Clip-Applikator verwenden. Verwenden Sie keine Clip-Applikatoren von anderen Herstellern.
- 4) Die Klingen des Clips nicht direkt mit den Fingern öffnen. Dies kann zu Korrosion führen oder die korrekte Haltekraft verändern. Die Klingen des Clips sollten nur geöffnet werden, wenn die Clip-Feder in der richtigen Position innerhalb des Clip-Applikators eingesetzt ist.
 - 5) Änderung oder Verfälschung dieses Clip sind nicht gestattet.
 - 6) Um einen galvanischen Strom zu vermeiden, darf dieser Clip nicht mit Implantaten anderer Hersteller oder mit Implantaten aus anderen Materialien verwendet werden. Ein galvanischer Strom kann Korrosion verursachen und die Haftkraft schwächen.
 - 7) Dieser Clip darf nicht bei Patienten verwendet werden, die schwere Allergien gegen Metalle oder exogene Materialien haben.
-

-
- 8) Dieser Clip darf nicht bei Patienten mit Infektionskrankheiten oder Sepsiskomplikationen verwendet werden.
 - 9) Dieser Clip darf nicht mit Niedertemperatur-Wasserstoffperoxid-Gasplasma sterilisiert werden. Dieser Clip ist nicht zur Sterilisation mit Niedertemperatur-Wasserstoffperoxid-Gasplasma geeignet. [Eine Sterilisation mit diesem Verfahren kann zu einer Verschlechterung der Oberflächenfarbe führen und die Eigenschaften beeinträchtigen.]

10. Warnhinweis

- 1) Es wird empfohlen, dass der Patient aufgeklärt wird über das Verfahren und die Eigenschaften dieses Clips.
 - 2) Der Schließzustand der Clip-Klingen ist unmittelbar nach dem Eingriff zu kontrollieren. [Zu den schwersten unerwünschten Ereignissen, die in Zusammenhang mit diesem Clip auftreten
-

können, gehören die Delokation des Clips, das Verrutschen des Clips, Herausfallen des Clips aus dem Clip-Applikator, ein Bruch des Clips, eine Läsion des zerebralen Aneurysmas, zerebrovaskuläre Verletzungen, Blutungen, Tod, etc.]

3) Handhabung dieses Clip:

Eine grobe Handhabung dieses Clip kann zu Verformungen oder Beschädigungen dieses Clips führen und könnte dem Patienten schaden.

11. MR-Verwendung



Bedingt MR-tauglich

Nicht-klinische Tests haben gezeigt, dass dieser Clip bedingt MR-tauglich ist. Ein Patient mit diesem Clip kann unter folgenden Bedingungen ohne Gefährdung

in einem MR-System untersucht werden:

- Nur statisches Magnetfeld von 1,5 Tesla oder 3 Tesla
- Maximales räumliches Gradientenmagnetfeld von 1.000 Gauss/cm (10 T/m)
- Maximale für das MR-System angegebene, über den ganzen Körper gemittelte spezifische Absorptionsrate (SAR) von 2 W/kg bei einem Scavorgang von 15 Minuten (d. h. pro Pulssequenz) im normalen Betriebsmodus

Unter den definierten Scan-Bedingungen bewirkt dieser Clip voraussichtlich einen Temperaturanstieg von 2,4 °C bei einem unterbrechungsfreien Scan von 15 Minuten Dauer (d. h. pro Pulssequenz).

In nicht-klinischen Tests erstreckt sich das von diesem Clip verursachte Bildartefakt bei einer Gradientenecho-Pulssequenz in einem MR-System mit 3 Tesla ungefähr 25 mm über diesen Clip hinaus.

HINWEIS: Der Clip-Applikator darf nicht in die

MR-Umgebung eingeführt werden.
Der Clip-Applikator enthält Materialien,
die in der MR als nicht sicher eingestuft
wurden.

12. Vorsichtshinweis

Die Verwendung dieses Clip ist Chirurgen mit einer entsprechenden Ausbildung in der Verwendung dieses Clip vorbehalten.

13. Mängel und unerwünschte Ereignisse

1) Schwere unerwünschte Ereignisse

- Delokation des Clips (Abrutschen)
 - Herausfallen des Clips aus dem Clip-Applikator
 - Bruch des Clips
 - Ruptur eines zerebralen Aneurysmas
 - Zerebrovaskuläre Verletzung
 - Blutung
 - Tod
-

2) Weitere unerwünschte Ereignisse

- Infektion der Operationswunde
- Allgemeine chirurgische Komplikationen
- Verzögerte Delokation des Clips durch Anwendung starker Magnetfelder
- Okklusion des benachbarten Blutgefäßes
- Fremdkörperreaktion

14. Lagerung, Pflege und Handhabung

Dieser Clip wird in einer nicht-sterilen Verpackung ausgeliefert und ist in der Verpackung an einem kühlen, trockenen und sicheren Ort aufzubewahren.

Keine anderen Clipsetzer als den speziellen Clip-Applikator verwenden.

Diesen Clip so wenig wie möglich anfassen, um eine Kontamination oder Beschädigung zu reduzieren.

15. Validiertes Reinigungs- und Sterilisationsverfahren

Dieser Clip ist bei der Lieferung nicht steril. Daher muss dieser Clip vor der Operation von den Anwendern (medizinische Fachkräfte) durch validierte Sterilisationsverfahren in Einklang mit gesetzlichen Bestimmungen sterilisiert werden.

Eine ordnungsgemäße Sterilisation und Handhabung dieses Clips sind wichtig, um zu gewährleisten, dass die Clips den Anforderungen an die Sterilität vor dem Eingriff entsprechen und um das Auftreten von Infektionen beim operierten Patienten zu vermeiden.

Weitere Verfahren zur Minimierung der Kontamination in einem Operationssaal wie die Benutzung von Operationsräumen mit laminarer Luftströmung, je nach Ermessen des Chirurgen, sind ebenfalls von Bedeutung.

Die Sterilisationsgeräte validieren, so dass sichergestellt ist, dass sie den spezifischen

Anforderungen entsprechen. Der Endanwender ist dafür verantwortlich, den Sterilisationsprozess in dem jeweiligen Sterilisator zu validieren und die Sterilität zu gewährleisten.

Die Sterilisationsgeräte immer gemäß den Standardverfahren, wie sie vom Hersteller des Geräts spezifiziert sind, reinigen und warten.

Clip-Applikator gemäß Betriebsanleitung des Clip-Applikators reinigen und sterilisieren.

Dieser Clip und diese Instrumente müssen vor der ersten Sterilisation und Resterilisation gereinigt werden, um die mikrobielle Belastung zu reduzieren.

Aufgrund des Korrosionsrisikos des Metalls dürfen zur Reinigung des Clip keine chlorhaltigen Lösungen verwendet werden.

1) Reinigung

Den Clip in den vorgesehenen Behälter für Sugita-Clips oder in das Tray für Sugita-Clips (im Folgenden

„Clip-Behälter oder -Tray“) legen und den Deckel schließen.

<Bei Verwendung eines Ultraschallreinigers>

- (1) Den Behälter (Tray) vollständig in das Wasser (Leitungswasser) des Waschtanks eintauchen.
- (2) Ultraschallreinigung

Reinigungszeit: 15 Minuten oder länger

Reinigungsmittel: Neutrales Enzymwaschmittel (verdünnte Konzentration von 1,0 %)

(3) Spülen

- Wasser ablassen und fließendes Wasser (Leitungswasser oder deionisiertes Wasser) in den Waschtank einlaufen lassen. Das Gehäuse (Tray) vollständig in das Wasser eintauchen, und das Gehäuse (Tray) fünfmal auf und ab schütteln.
- Das Wasser erneuern, und das Gehäuse (Tray) erneut fünfmal im Wasser auf und ab schütteln.
- Eine Reihe von Spülvorgängen dreimal oder mehrmals durchführen.

(4) Gründlich trocknen lassen.

Empfohlene Trocknungsbedingung:

Bei 110 °C, 30 Minuten oder länger

<Bei Verwendung eines Reinigungs-/Desinfektionsgeräts
(automatisches Waschen)>

Phase	Verfahren	Temperatur [°C]	Zeit [min]	Wasserqualität	Bemerkungen
I	Vorreinigung	<25	3	Leitungswasser	—
II	Reinigung	55	10	Leitungswasser	Alkalisches Reinigungsmittel (z. B. Reinigungsmittel für Aluminium) Verdünnte Konzentration von 0,5 %
III	Spülen	<25	4	Deionisiertes Wasser	Spülprogramm wie folgt einstellen „1-mal (1 Minute) × 4-mal = 4 Minuten“
IV	Heißwasserd esinfektion	—	—	Deionisiertes Wasser	Das Programm des Geräts einhalten.
V	Trocknen	—	—	—	

2) Inspektion

Die Clips nacheinander visuell überprüfen und nicht verwenden, wenn die folgenden Anomalien vorliegen.

-
- Beschädigung
 - Verformung
 - Beeinträchtigung
 - Falsche Klingenposition
(Abweichung, Spiel, Unebenheiten der Spitze usw.)
 - Restschmutz

Da eine wiederholte Behandlung zur Verblassung der Oberfläche führen kann, dürfen keine Clips verwendet werden, die sich anhand der Farbkodierung nicht eindeutig unterscheiden lassen.

3) Einpacken

Den Clip in den vorgesehenen Clip-Behälter oder in das Tray legen und den Deckel schließen.

Anschließend den Behälter (Tray) mit dem Clip unter Verwendung von medizinischem Standardverpackungsmaterial (Vliesstoff oder sterilisierter Beutel) mit einer sterilen Schutzbarriere gemäß ISO 11607 für die Dampfsterilisation

einpacken.

- Sterilisation -

<Validierte Sterilisationsmethode>

Standard folgte	ISO 17665-1		
Sterilisationsmethode	Dampfsterilisation mit Vorvakuum (Sterilisation im Autoklaven)		
Sterilisationsbedingungen	Sterilisationstemperatur	Verweilzeit	Trockenzeit
	132 °C	4 Minuten oder länger	20 Minuten oder länger
	134 °C	3 Minuten oder länger	20 Minuten oder länger

Verwenden Sie bei der Sterilisation kein Niedertemperatur-Wasserstoffperoxid-Gas-Plasma. Dies könnte zu Verfärbungen und/oder Verformungen führen.

Bei einem Hochdruck-Dampfsterilisator, dessen einwandfreie Funktion bestätigt wurde, wird die Validierung der Sterilisation durch eine medizinische Einrichtung verifiziert, es sind Sterilisationsbedingungen mit nachgewiesener Wirksamkeit anzuwenden.

- Lagerung -

Den Clip nicht bei hohen Temperaturen oder an Orten mit hoher Luftfeuchtigkeit und/oder mit Temperaturvariationen lagern. Den Clip an einem sauberen, staubfreien und trockenen Ort aufbewahren.

MODE D'EMPLOI DU CLIP DE RENFORT SUGITA

Table des matières

- | | |
|---|---|
| 1 . Caractéristiques techniques | 10. Avertissement |
| 2 . Types | 11. Utilisation sous IRM |
| 3 . Type de ressort | 12. Mise en garde |
| 4 . Mécanisme d'action | 13. Défaillances et événements
indésirables |
| 5 . Traitement de surface | |
| 6 . Forme de la lame en coupe
transversale | 14. Conservation, entretien et manipulation |
| 7 . Indication | 15. Procédure de nettoyage et de
stérilisation validée |
| 8 . Mode d'emploi | - Stérilisation - |
| 9 . Contre-indications et
interdictions | - Stockage - |

1. Caractéristiques techniques

Le clip de renfort Sugita est destiné à accentuer la force de fermeture des clips permanents pour anévrisme Sugita (types standard et grand) tel qu'indiqué dans le **[Tableau 1]**.


Le « clip de renfort Sugita » sera ci-après dénommé le « clip ».

Ce clip doit être uniquement utilisé en association avec un clip pour anévrisme Sugita précédemment mis en place. **Ne jamais appliquer directement sur un anévrisme** cérébral ni sur un vaisseau sanguin. Ce clip doit être placé le plus près possible du mécanisme de ressort du clip pour anévrisme Sugita et doit être fermement serré sur la section proximale des lames du clip. **[Figure 1]**

Ce clip ne doit pas être utilisé avec des clips autres que les clips permanents pour anévrisme Sugita de type standard ou grand.

[Tableau 1]

Type approprié	Réf. prod.
Type standard	07-940-01~09·64~66·68·69 07-943-01~03
Type grand	07-940-10~18·20~25·47~50 60~63·70~73

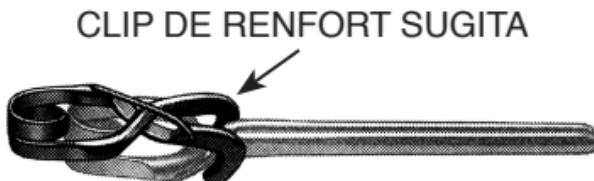

[Figure 1]

Ce clip est fabriqué en alliage de cobalt-chrome-nickel-molybdène-fer (ISO 5832-7/ASTM F1058 G2).


ASTM: American Society for Testing and Materials

ISO: International Organization for Standardization

Ce clip est destiné à **un usage unique seulement**, est indiqué pour utilisation exclusivement en association avec le forceps d'application de clips pour anévrisme Sugita (ci-après appelé « l'applicateur de clip »), et exige une stérilisation avant utilisation. Une réutilisation peut entraîner une rupture des clips et peut provoquer des blessures ou une infection.

Afin d'assurer sa traçabilité, un numéro de lot figure sur chaque clip.

La force de fermeture de chaque clip est mesurée pendant la phase de contrôle qualité finale avec une échelle électronique informatisée réglée sur un point de mesure donné tel qu'illustré à la **[Figure 2]**. La mesure obtenue est indiquée en newtons et en grammes sur l'étiquette de l'emballage.

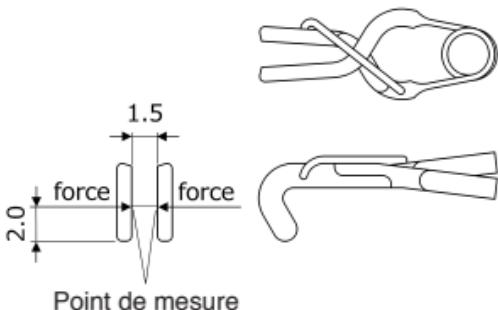

[Figure 2]

2. Types

Type permanent

Type	Couleur
Booster	Extrémité de lame-jaune

Pour connaître des dimensions et formes particulières, consulter le catalogue de ce clip.

3. Type de ressort: Spirale intégrale

4. Mécanisme d'action: Action crocodile

5. Traitement de surface

- Corps du clip : Satin
- Traitement du matériau : Polissage électrolytique

6. Forme de la lame en coupe transversale

: Laminée

7. Indication

Ce dispositif est destiné à accentuer la force de fermeture des clips pour anévrisme Sugita de types standard et grand pour l'occlusion permanente (clips permanents).

8. Mode d'emploi


Ce clip est conditionné non stérile, et il doit être

correctement stérilisé avant utilisation.

Ce clip doit être manipulé à l'aide de l'applicateur de clip.

Pendant la manipulation du clip, il est nécessaire de vérifier que le ressort du clip est correctement placé dans les mâchoires de l'applicateur de clip tel qu'indiqué sur la [Figure 3].

La manipulation inappropriée du clip risque de causer des dommages ou une éjection hors de l'applicateur de clip. En raison du risque que cela représente pour une intervention chirurgicale, veiller à manipuler le clip correctement.

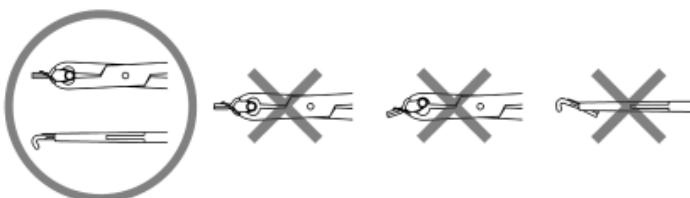

[Figure 3]

-
- Ne pas tenir le clip en position inclinée.
 - Si le ressort du clip n'est pas tenu correctement dans les mâchoires de l'applicateur de clip, il risque de glisser ou d'être éjecté violemment des mâchoires. Cela peut également endommager le ressort du clip, et il y a un risque de rupture et de réduction de la force de maintien.

Il est recommandé aux médecins d'enregistrer le type de clip ainsi que son numéro de lot et de série utilisés pour chaque patient.

Afin d'établir une traçabilité, l'étui du clip contient des étiquettes pour le suivi du patient.

9. Contre-indications et interdictions

1) Ne pas réutiliser

Ce clip est à usage unique exclusivement. Un clip doit être jeté dès que les lames du clip ont été ouvertes ou que le clip est entré en contact avec le

sang ou les tissus d'un patient. Une réutilisation peut entraîner une rupture des clips et peut provoquer des blessures ou une infection.

2) Interdiction d'utilisations non appropriées

Ce clip ne doit pas être utilisé dans un autre but que celui d'accentuer la force de fermeture des clips permanents pour anévrisme Sugita (types standard et grand). Ne pas utiliser ce clip avec les clips permanents Sugita de types fenêtré, long ou mini.

3) Pour éviter les modifications dans la force de fermeture des clips ou dans les propriétés mécaniques du clip lors de sa manipulation, seul l'applicateur de clip spécifique doit être utilisé. Ne pas utiliser les applicateurs de clip d'autres fabricants.

4) Ne pas ouvrir les lames du clip directement avec les doigts. Cela peut provoquer une corrosion ou

affecter la force de manipulation. Les lames du clip ne doivent être ouvertes que lorsque le ressort du clip est convenablement positionné dans l'applicateur de clip.

- 5) Toute modification ou altération de ce clip est interdite.
 - 6) Afin d'éviter un courant galvanique, ne pas utiliser ce clip avec les implants d'autres fabricants ou avec des implants fabriqués avec un autre matériau. Un courant galvanique peut provoquer une corrosion ou affaiblir la force de maintien.
 - 7) Ce clip ne doit pas être utilisé sur des patients souffrant d'allergies sévères aux métaux ou aux matières exogènes.
 - 8) Ce clip ne doit pas être utilisé chez des patients souffrant de maladies infectieuses ou de complications septicémiques.
 - 9) Ce clip ne doit pas être stérilisé par plasma gazeux
-

de peroxyde d'hydrogène à faible température.

Ce clip n'est pas adapté pour la stérilisation par plasma gazeux de peroxyde d'hydrogène à faible température. [Ce procédé de stérilisation risque de provoquer une décoloration de surface et de modifier les caractéristiques du clip.]

10. Avertissement

- 1) Il est conseillé d'informer le patient de la procédure et des caractéristiques de ce clip.
 - 2) Immédiatement après l'intervention chirurgicale, vérifier que les lames du clip soient bien fermées.
[Les principaux événements indésirables associés à l'utilisation de ce clip peuvent inclure la migration ou le détachement du clip, l'éjection du clip de l'applicateur de clip, la rupture du clip, la lacération de l'anévrisme cérébral, des lésions de vaisseaux sanguins cérébraux, une hémorragie, la mort, etc.]
-

3) Manipulation de ce clip :

Toute manipulation brusque de ce clip est susceptible d'entraîner une déformation ou des dommages au niveau du clip et de blesser le patient.

11. Utilisation sous IRM



Compatibilité conditionnelle avec l'IRM

Les tests non cliniques ont démontré que ce clip a la compatibilité conditionnelle avec l'IRM. Un patient équipé de ce clip peut être soumis à une IRM en toute sécurité dans les conditions suivantes:

- champ magnétique statique de 1,5 ou 3 teslas uniquement
 - gradient de champ magnétique spatial maximal
-

-
- de 1000 gauss/cm (10 T/m)
 - système à IRM maximale signalée, taux spécifique moyen du corps (SAR) de 2 W/kg pendant 15 minutes (soit par séquence d'impulsions) en mode d'exploitation normale

Dans les conditions d'exploitation définies, il est prévu que ce clip produise une augmentation de température maximale de 2,4 °C après 15 minutes de balayage continu (soit par séquence d'impulsions).

Au cours des tests non cliniques, les artefacts d'image causés par ce clip s'étendent sur 25 mm environ à partir du clip lorsque l'on utilise une séquence d'impulsions d'échos à gradient et un système d'IRM à 3 teslas.

NOTE : Ne pas introduire l'applicateur de clip dans l'environnement IRM.

L'applicateur de clip contient des matériaux

qui ont été déterminés comme étant peu sûrs dans cet environnement.

12. Mise en garde

L'utilisation de ce clip est réservée aux chirurgiens dûment formés à l'utilisation de ce clip.

13. Défaillances et événements indésirables

1) Événements indésirables graves

- Détachement du clip (glissement)
- Éjection du clip de l'applicateur de clip
- Rupture du clip
- Rupture d'un anévrisme cérébral
- Lésions de vaisseaux sanguins cérébraux
- Hémorragie
- Mort

2) Autres événements indésirables

- Infection du site chirurgical
- Complications chirurgicales générales
- Détachement retardé du clip dû à l'application d'un champ magnétique
- Occlusion de vaisseaux sanguins adjacents
- Réaction à un corps étranger

14. Conservation, entretien et manipulation

Ce clip est fourni dans un emballage non stérile qui doit être conservé dans un endroit frais, sec et sûr.

Ne pas utiliser d'applicateur autre que l'applicateur de clip spécifique.

La manipulation de ce clip doit être minimale pour réduire la contamination ou les dommages.

15. Procédure de nettoyage et de stérilisation validée

Ce clip est fourni non stérile. Ce clip doit donc être stérilisé par les utilisateurs (professionnels de la santé) avant l'intervention selon des procédures de stérilisation approuvées et conformes aux recommandations en vigueur dans chaque pays.

La stérilisation et la manipulation correctes de ce clip sont essentielles pour s'assurer qu'il réponde aux exigences de stérilité de l'intervention chirurgicale visant à réduire au minimum la survenue d'une infection chez le patient.

D'autres procédures visant également à minimiser les contaminations dans une salle d'opération, notamment une unité chirurgicale avec flux laminaire laissée à la discrétion du chirurgien, sont également importantes.

L'appareil de stérilisation doit être validé pour

s'assurer que chaque configuration de charge est convenablement stérilisée. L'utilisateur final est chargé de valider le processus de stérilisation dans le stérilisateur individuel et d'assurer la stérilité.

L'appareil de stérilisation doit être nettoyé et entretenu selon les procédures opératoires normalisées définies par le fabricant.

L'applicateur de clip doit être nettoyé et stérilisé conformément au mode d'emploi de l'applicateur de clip.

Ce clip et les instruments doivent être nettoyés pour réduire la charge microbienne avant la première stérilisation et toute nouvelle stérilisation.

Ne pas utiliser de solutions à base de chlore pour nettoyer ce clip. Elles peuvent provoquer la corrosion du métal.

1) Nettoyage

Placer le clip dans l'étui Sugita ou le plateau Sugita désigné (ci-après appelé «l'étui ou le plateau») et fermer le couvercle.

<En cas d'utilisation d'un système de nettoyage à ultrasons>

(1) Immerger complètement l'étui (ou le plateau) dans l'eau (du robinet) de la cuve de lavage.

(2) Nettoyage aux ultrasons

Temps de nettoyage : 15 minutes ou plus

Détergent : Détergent de type neutre aux enzymes (concentration diluée à 1,0 %)

(3) Rinçage

- Rincer à l'eau courante (eau du robinet ou eau déionisée), puis immerger complètement l'étui (ou le plateau) dans l'eau, agiter l'étui (ou le plateau) 5 fois de haut en bas.

- Renouveler l'eau et agiter l'étui (ou le plateau)

de nouveau 5 fois de haut en bas.

- Répéter la série des opérations de rinçage trois fois ou plus au total.

(4) Laisser sécher complètement.

Condition de séchage recommandée : 110 °C, pendant 30 minutes ou plus

<En cas d'utilisation d'un laveur-désinfecteur (lavage automatique)>

Étape	Procédure	Température [°C]	Temps [minutes]	Qualité de l'eau	Notes
I	Prélavage	<25	3	Eau du robinet	–
II	Lavage	55	10	Eau du robinet	Détergent alcalin (par ex. détergent pour aluminium) Concentration diluée à 0,5 %.
III	Rinçage	<25	4	Eau désionisée	Régler le programme de rinçage comme suit, « 1 fois (1 minute) × 4 fois = 4 minutes »
IV	Désinfection à l'eau chaude	–	–	Eau désionisée	Suivre le programme de l'appareil.
V	Séchage	–	–	–	

2) Inspection

Contrôler les clips visuellement un par un et ne pas utiliser si les anomalies suivantes ont été constatées.

- Dommages
- Déformation
- Dégradation
- Position inappropriée des lames (écart, jeu, irrégularité de la pointe, etc.)
- Saleté résiduelle

Étant donné que la surface peut se décolorer à la suite de traitements répétitifs, ne pas utiliser de clips qui ne peuvent pas être clairement distingués par un code de couleur.

3) Emballage

Placer le clip dans l'étui ou le plateau désigné et fermer le couvercle.

Ensuite, emballer l'étui (ou le plateau) contenant le

clip en utilisant du matériel d'emballage médical standard (tissu non tissé ou sachet stérilisé) avec une barrière de protection stérile conforme à la norme ISO 11607 pour la stérilisation à la vapeur.

- Stérilisation -

<Procédé de stérilisation validé>

Norme suivie	ISO17665-1		
Méthode de stérilisation	Stérilisation à la vapeur sous vide(Stérilisation en autoclave)		
Conditions de stérilisation	Temp.de stérilisation	Durée	Temps de séchage
	132 °C	4 minutes ou plus	20 minutes ou plus
	134 °C	3 minutes ou plus	20 minutes ou plus

Ne pas stériliser au gaz plasma de peroxyde d'hydrogène à basse température. Cela risquerait de provoquer une décoloration et/ou une déformation.

La validation de la stérilisation doit être vérifiée par une institution médicale et les conditions de stérilisation dont l'efficacité a été prouvée doivent être appliquées avec un stérilisateur à la vapeur haute

pression dont le fonctionnement correct a été confirmé.

- Stockage -

Ne pas stocker le clip à des températures élevées ou dans un endroit très humide et/ou à température variable. Conserver le clip dans un endroit propre et sec, exempt de poussière.

ISTRUZIONI PER L'USO DELLA CLIP DI RINFORZO SUGITA

Indice

- | | |
|---------------------------------------|---|
| 1 . Specifiche tecniche | 11. Uso della RM |
| 2 . Modelli | 12. Cautele da adottare |
| 3 . Modello a molla | 13. Difetti ed eventi avversi |
| 4 . Meccanismo d'azione | 14. Conservazione, cura e manipolazione |
| 5 . Finitura superficiale | 15. Procedura di pulizia e
sterilizzazione convalidata |
| 6 . Sezione trasversale della
lama | - Sterilizzazione -
- Conservazione - |
| 7 . Indicazioni per l'uso | |
| 8 . Istruzioni per l'uso | |
| 9 . Controindicazioni e divieti | |
| 10. Avvertenze | |

1. Specifiche tecniche

La clip di rinforzo Sugita è utilizzata per aumentare la forza di chiusura delle clip per aneurisma Sugita di tipo permanente (modelli standard e grande) come mostrato nella [Tabella 1].


La “clip di rinforzo Sugita” è di seguito indicata come “clip”.

Questa clip deve essere usata solo in combinazione con una clip per aneurisma Sugita applicata in precedenza. **Non applicare mai la clip direttamente all’aneurisma cerebrale o a un vaso sanguigno.** Questa clip deve essere collocata il più vicino possibile al meccanismo a molla della clip per aneurisma Sugita e deve realizzare una presa sicura della parte prossimale delle lame della clip. [Figura 1]

Questa clip deve essere usata solo con clip per aneurisma Sugita di tipo permanente standard o grandi.

[Tabella 1]

Modello applicabile	Codice prodotto
Modello standard	07-940-01~09·64~66·68·69 07-943-01~03
Modello grande	07-940-10~18·20~25·47~50 60~63·70~73

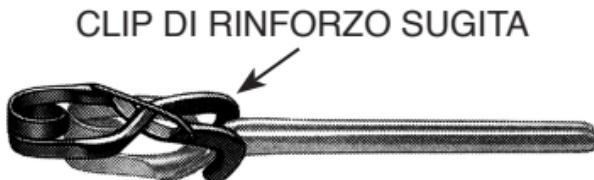

[Figura 1]

Questa clip è realizzata in lega di cobalto-cromo-nichel-molibdeno-ferro (ISO 5832-7/ASTM F1058 G2).


ASTM: American Society for Testing and Materials

ISO: International Organization for Standardization

La clip è progettata per essere utilizzata **una sola volta**, esclusivamente con le pinze posaclip per clip per aneurisma Sugita (di seguito indicate come “pinze posaclip”) e deve essere sottoposta a pulizia e sterilizzazione prima dell’uso. Il riutilizzo può provocare la rottura delle clip e può causare lesioni o infezione.

Per garantirne la tracciabilità, su ogni clip è impresso in modo permanente un numero di lotto.

La forza di chiusura di ciascuna clip viene misurata nella fase finale delle procedure di controllo qualità, con l’ausilio di una bilancia computerizzata, in un punto di misura specifico, come mostrato nella **[Figura 2]**. Il risultato di questa misura è mostrato in newton e in grammi ed è riportato sull’etichetta della confezione.

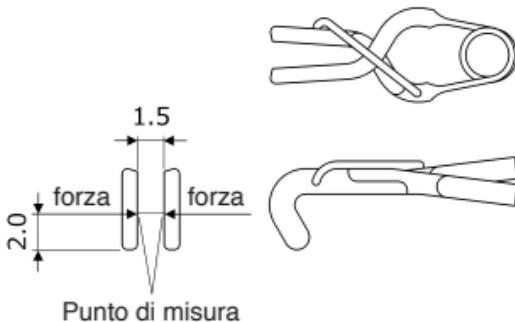

[Figura 2]

2. Modelli

Modello permanente

Modello	Colore
Rinforzo	Punta della lama -giallo

Per le dimensioni e le forme disponibili, si rimanda al catalogo delle clip.

3. Modello a molla: avvolgimento integrale

4. Meccanismo d'azione: A coccodrillo

5. Finitura Superficiale

- Corpo della clip: Satinato
- Trattamento del materiale: Lucidatura elettrolitica

6. Sezione trasversale della lama

: Arrotondata

7. Indicazioni per l'uso

Questo dispositivo viene utilizzato per aumentare la forza di chiusura delle clip per aneurisma Sugita standard e grandi per occlusione permanente (clip permanenti).

8. Istruzioni per l'uso


La clip viene fornita in confezione non sterile e deve

essere adeguatamente sterilizzata prima dell'uso.

La clip deve essere manipolata con le pinze posaclip.

Quando si manipola la clip, è indispensabile verificare che la molla della clip sia inserita correttamente nei becchi delle pinze posaclip, come mostrato nella **[Figura 3]**.

Una presa non corretta può causare danni alla clip o farla scivolare dalle pinze posaclip. Poiché ciò può comportare rischi durante l'intervento chirurgico, verificare che la clip sia stata afferrata nel modo corretto.

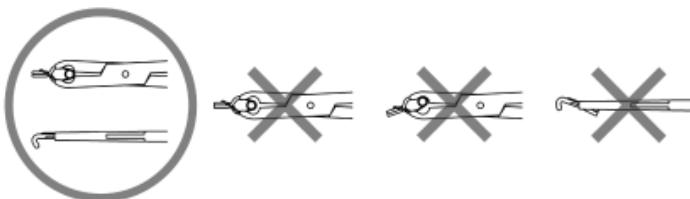

[Figura 3]

-
- Non tenere la clip in posizione inclinata.
 - Una presa non corretta della sezione della molla della clip con i becchi delle pinze posaclip potrebbe causare lo scivolamento o l'uscita della clip dalle scanalature. Ciò potrebbe inoltre danneggiare la molla della clip, provocarne la rottura e ridurne la forza di tenuta.

Si raccomanda ai medici di annotare il modello e il numero di lotto e di serie della clip utilizzata per ciascun paziente nella cartella operatoria.

Per facilitare la tracciabilità, la confezione della clip contiene un'etichetta per registrare le dovute informazioni.

9. Controindicazioni e divieti

1) Divieto di riutilizzo

La clip deve essere utilizzata una sola volta. La clip va eliminata una volta che le sue lame siano

state aperte o che la clip sia entrata in contatto con il sangue o il tessuto di un paziente. Il riutilizzo può provocare la rottura delle clip e può causare lesioni o infezione.

2) Divieto di utilizzo per altri scopi

La clip non deve essere utilizzata per scopi diversi dalla sua funzione, ossia aumentare la forza di chiusura delle clip per aneurisma Sugita di tipo permanente (modelli standard e grande). Non usare questa clip con le clip per aneurisma Sugita finestrate, lunghe o mini di tipo permanente.

3) Per evitare variazioni della forza di chiusura delle clip o delle caratteristiche meccaniche della clip, quando si manipola quest'ultima, usare esclusivamente le apposite pinze posaclip. Non usare pinze posaclip di altri produttori.

4) Non aprire le lame della clip direttamente con le dita. Ciò potrebbe provocare corrosione o alterare la

corretta forza di tenuta. Le lame della clip devono essere aperte solo quando la molla della clip è in posizione corretta all'interno delle pinze posaclip.

- 5) È vietato modificare o alterare la clip.
 - 6) Al fine di evitare una corrente galvanica, non usare la clip con impianti di altri produttori o con impianti costituiti da materiali differenti. Una corrente galvanica può provocare corrosione e può indebolire la forza di tenuta.
 - 7) Non usare la clip in pazienti con allergie gravi ai metalli o a materiali esogeni.
 - 8) Non usare la clip in pazienti con complicanze dovute a malattie infettive o alla sepsi.
 - 9) La clip non deve essere sterilizzata con gas plasma di perossido d'idrogeno a bassa temperatura.
La clip non è compatibile con la sterilizzazione con gas plasma di perossido d'idrogeno a bassa temperatura [la sterilizzazione con tale metodo può
-

causare il deterioramento del colore della sua superficie e alterare le sue caratteristiche].

10. Avvertenze

- 1) Si consiglia di informare il paziente circa la procedura e le caratteristiche della clip.
- 2) Lo stato di chiusura delle lame della clip deve essere verificato immediatamente dopo l'intervento chirurgico.

[Gli eventi avversi più gravi che possono manifestarsi con questa clip includono lo spostamento della clip dalla sua sede, lo scivolamento e l'espulsione della stessa dalle pinze posaclip, la rottura della clip, la lacerazione di un aneurisma cerebrale, lesioni cerebrovascolari, emorragie, morte, ecc.]

- 3) Manipolazione della clip:

La manipolazione brusca della clip potrebbe causare deformazione o danni alla clip o danneggiare il

paziente.

11. Uso della RM



Compatibilità condizionata con la RM

Test non clinici hanno dimostrato che la presente clip è un dispositivo a compatibilità condizionata con la RM. Un paziente con questa clip può essere sottoposto a scansione in un sistema di RM in tutta sicurezza nelle seguenti condizioni:

- solo campi magnetici statici di 1,5 tesla o 3 tesla
- massimo gradiente spaziale del campo magnetico di 1.000 gauss/cm (10 T/m)
- massimo tasso di assorbimento specifico (SAR) medio per sangue intero indicato dal sistema di

RM di 2 W/kg per 15 minuti di scansione (ad esempio, per sequenza di impulsi) nel normale modo di funzionamento

Nelle condizioni di scansione definite, si prevede che la clip produca un aumento di temperatura massimo di 2,4 °C dopo 15 minuti di scansione continua (ad esempio, per sequenza di impulsi).

Nei test non clinici, l'artefatto nell'immagine generato dalla clip si estende per circa 25 mm dalla clip se si utilizza una sequenza di impulsi "gradient echo" e un sistema di RM da 3 tesla.

NOTA: Non introdurre le pinze posaclip nell'ambiente della RM.

Le pinze posaclip contengono materiali individuati come non sicuri nella RM.

12. Cautele da adottare

L'uso di questa clip è riservato ai chirurghi con adeguata formazione per l'uso della stessa.

13. Difetti ed eventi avversi

1) Eventi avversi gravi

- Spostamento della clip (dalla sua sede)
- Espulsione della clip dalle pinze posaclip
- Rottura della clip
- Lacerazione dell'aneurisma cerebrale
- Lesioni cerebrovascolari
- Emorragie
- Morte

2) Altri eventi avversi

- Infezione della ferita chirurgica
 - Complicanze chirurgiche generali
 - Spostamento ritardato della clip dovuto all'applicazione di un campo magnetico
-

-
- Occlusione dei vasi sanguigni adiacenti
 - Reazione a un corpo estraneo

14. Conservazione, cura e manipolazione

La clip viene fornita in una confezione non sterile e deve essere conservata nella stessa in un luogo fresco, asciutto e sicuro.

Non adoperare pinze posaclip diverse da quelle appositamente previste.

La manipolazione della clip deve essere ridotta al minimo al fine di ridurre il rischio di contaminazione o di danneggiarla.

15. Procedura di pulizia e sterilizzazione convalidata

La clip viene fornita in confezione non sterile. Pertanto, la clip deve essere sterilizzata dagli utilizzatori (operatori sanitari) prima dell'intervento

chirurgico attenendosi ai protocolli di sterilizzazione approvati, in conformità con le direttive stabilite dalle autorità governative.

Le corrette sterilizzazione e manipolazione della clip sono importanti per garantire le adeguate caratteristiche di sterilità della clip prima dell'intervento e per ridurre al minimo il rischio di infezioni intraoperatorie nel paziente.

A discrezione del medico, altri importanti accorgimenti possono essere previsti per ridurre al minimo i rischi di contaminazione in sala operatoria, compreso l'uso di una cappa a flusso laminare.

Controllare le apparecchiature di sterilizzazione per verificare che la loro capacità sia adeguata al carico specifico. L'utilizzatore finale è responsabile della convalida del processo di sterilizzazione del singolo sterilizzatore e della sterilità del prodotto.

La pulizia e la manutenzione delle apparecchiature di

sterilizzazione devono essere eseguite in conformità con il protocollo operativo standard specificato dalla casa produttrice.

Pulire e sterilizzare le pinze posaclip seguendo le istruzioni fornite nel manuale delle pinze posaclip.

Al fine di ridurre la carica batterica, la clip e la necessaria strumentazione devono essere pulite precedentemente alla prima e alla successiva sterilizzazione.

Non usare soluzioni a base di cloro per la pulizia di questa clip: esse potrebbero provocare la corrosione del metallo.

1) Pulizia

Mettere la clip nell'apposito contenitore per le clip Sugita o vassoio per le clip Sugita (nel seguito indicato come “contenitore o vassoio per le clip”) e chiudere il coperchio.

<In caso di utilizzo di un pulitore a ultrasuoni>

(1) Immergere completamente il contenitore (vassoio) nell'acqua (di rubinetto) della vasca di lavaggio.

(2) Pulizia a ultrasuoni

Tempo di pulizia: 15 minuti o più

Detergente: detergente enzimatico neutro (concentrazione diluita all'1,0%)

(3) Risciacquo

- Fare scorrere via l'acqua e riempire la vasca con acqua corrente (acqua di rubinetto o deionizzata), immergere completamente nell'acqua il contenitore (vassoio) e scuotere 5 volte in alto e in basso.
- Cambiare l'acqua e scuotere di nuovo il contenitore (vassoio) 5 volte in alto e in basso.
- Eseguire una serie di operazioni di risciacquo per tre o più volte.

(4) Fare asciugare perfettamente.

Condizioni di asciugatura consigliate: 110 °C, per 30 minuti o più

<In caso di utilizzo di una lavatrice disinettatrice (lavaggio automatico)>

Fase	Procedura	Temperatura [°C]	Tempo [minuti]	Qualità dell'acqua	Note
I	Pre-pulizia	<25	3	Acqua di rubinetto	—
II	Lavaggio	55	10	Acqua di rubinetto	Detergente alcalino (ad esempio, un detergente per alluminio) Concentrazione diluita allo 0,5%
III	Risciacquo	<25	4	Acqua deionizzata	Impostare il programma della procedura di risciacquo come “1 volta (1 minuto) × 4 volte = 4 minuti”
IV	Disinfezione con acqua bollente	—	—	Acqua deionizzata	Seguire il programma del dispositivo.
V	Asciugatura	—	—	—	

2) Ispezione

Controllare visivamente le clips una per una e non

utilizzarle se si riscontrano le seguenti anomalie.

- danni
- deformazioni
- degradazione
- non corretta posizione delle lame (deviazione, gioco, irregolarità delle punte ecc.)
- sporcizia residua

Poiché la superficie può scolorirsi in seguito a trattamenti ripetitivi, non utilizzare clips che non possano essere chiaramente distinte con il codice dei colori.

3) Confezionamento

Mettere la clip nell'apposito contenitore o vassoio per le clip e chiudere il coperchio.

Quindi, confezionare il contenitore (vassoio) con la clip impiegando il relativo materiale di confezionamento sanitario standard (tessuto non

tessuto o sacchetto di sterilizzazione) con barriera protettiva sterile conforme con ISO 11607 per la sterilizzazione a vapore.

- Sterilizzazione -

Standard seguito	ISO 17665-1		
Metodo di sterilizzazione	Sterilizzazione a vapore prima di fare il vuoto(Sterilizzazione in autoclave)		
Condizioni di sterilizzazione	Temperatura di sterilizzazione	Tempo di ritenzione	Tempo di essiccazione
	132 °C	4 minuti o più	20 minuti o più
	134 °C	3 minuti o più	20 minuti o più

Non eseguire la sterilizzazione con gas plasma di perossido di idrogeno a bassa temperatura. Può provocare scolorimento e/o deformazione.

La validazione della sterilizzazione è verificata da un istituto medico con uno sterilizzatore a vapore ad alta pressione del quale sia stato confermato il corretto funzionamento e devono essere applicate condizioni di sterilizzazione con un'efficacia dimostrata.

- Conservazione -

Non conservare la clip a temperature elevate o in aree con elevata umidità e/o temperatura variabile. Conservare la clip in luogo pulito non polveroso e asciutto.

INSTRUCCIONES DE USO DEL CLIP DE REFUERZO SUGITA

Tabla de contenidos

- | | |
|---|--|
| 1 . Especificaciones | 12. Precauciones |
| 2 . Tipos | 13. Anomalías y acontecimientos
adversos |
| 3 . Tipo de resorte | 14. Almacenamiento: cuidado y
manipulación |
| 4 . Mecanismo de acción | 15. Procedimiento de limpieza y
esterilización validado |
| 5 . Acabado de la superficie | - Esterilización - |
| 6 . Forma transversal de la hoja | - Almacenamiento - |
| 7 . Indicaciones de uso | |
| 8 . Instrucciones de uso | |
| 9 . Contraindicaciones y
prohibiciones | |
| 10. Advertencias | |
| 11. Uso de IRM | |

1. Especificaciones

El clip de refuerzo Sugita se utiliza para reforzar la fuerza de cierre de los clips de aneurisma Sugita de tipo permanente (tipos estándar o ancho) como se muestra en la **[Tabla 1]**.


El “clip de refuerzo Sugita” en adelante se denomina “clip”.

Este clip solo debe utilizarse conjuntamente con un clip de aneurisma Sugita aplicado previamente. **Nunca debe aplicarse directamente sobre el aneurisma cerebral ni sobre ningún vaso sanguíneo.** Este clip debe colocarse lo más cerca posible del mecanismo de resorte del clip de aneurisma Sugita y debe sujetarse de forma segura a la parte proximal de las hojas del clip. **[Figura 1]**

Este clip no debe utilizarse con ningún otro clip que no sea el clip de aneurisma Sugita estándar o ancho de tipo permanente.

[Tabla 1]

Tipo de aplicación	Código de producto
Tipo estándar	07-940-01~09·64~66·68·69 07-943-01~03
Tipo ancho	07-940-10~18·20~25·47~50 60~63·70~73

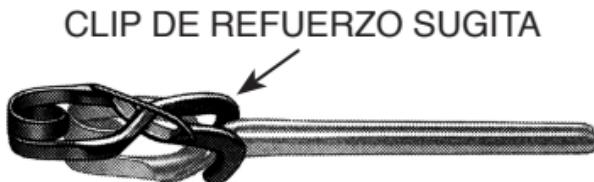

[Figura 1]

Este clip está fabricado con una aleación de cobalto, cromo, níquel, molibdeno y hierro (ISO5832-7/ASTM F1058 G2).


ASTM: American Society for Testing and Materials

ISO: International Organization for Standardization

Este clip está diseñado para **un solo uso** y está indicado exclusivamente para el uso con las pinzas aplicadoras de los clips de aneurisma Sugita (en adelante denominadas “aplicadores de clips”). Además, el clip debe limpiarse y esterilizarse antes de su uso. La reutilización podría ocasionar la rotura de los clips y provocar lesiones o producir una infección.

Para garantizar su trazabilidad, cada clip tiene grabado el número de lote.

Durante la etapa final de garantía de calidad se mide la fuerza de cierre de cada clip con una báscula electrónica informatizada en un punto de medición específico como se muestra en la **[Figura 2]**. El resultado de esta medición se muestra en newtons y gramos en la etiqueta del paquete.

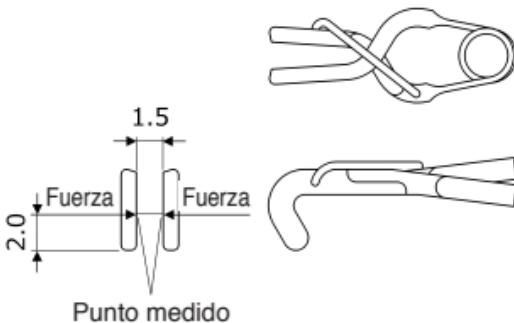

[Figura 2]

2. Tipos

Tipo permanente

Tipo	Color
Refuerzo	Punta de la hoja- amarillo

Para dimensiones y formas específicas, consulte el catálogo de este clip.

3. Tipo de resorte: Bobina Integral

4. Mecanismo de acción: Acción de cocodrilo

5. Acabado de la superficie

- Cuerpo del clip: Satinado
- Tratamiento del material: Pulido electrolítico

6. Forma transversal de la hoja: Laminada

7. Indicaciones de uso

Este dispositivo se utiliza para reforzar la fuerza de cierre de los clips de aneurisma Sugita estándar o anchos para la oclusión permanente (clips permanentes).

8. Instrucciones de uso


Este clip se envasa sin esterilizar y debe esterilizarse

correctamente antes de su uso.

Este clip debe sujetarse con el aplicador de clips.

Al sujetar el clip, se debe comprobar que su resorte esté correctamente colocado en las mordazas de sujeción del aplicador de clips como se muestra en la **[Figura 3]**.

Si el clip no está bien sujeto podría causar daños o salir expulsado del aplicador de clips. Dado que esto puede suponer un riesgo durante la cirugía, confirme la correcta sujeción del clip.

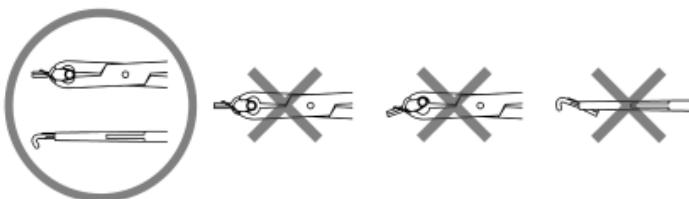

[Figura 3]

-
- No sujetar el clip en posición angular.
 - Si el resorte del clip no está bien sujeto con las mordazas de sujeción del aplicador de clips, el clip podría deslizarse o salirse de las mordazas. Esto podría causar daños en el resorte del clip y tal vez romperlo o reducir su fuerza de sujeción.

Se recomienda que los médicos registren el tipo y los números de lote y de serie del clip utilizado en el registro de operación de cada paciente.

El envase del clip contiene las etiquetas Paciente/ Seguimiento para facilitar la trazabilidad.

9. Contraindicaciones y prohibiciones

1) No reutilizar

Este clip es de un solo uso. El clip debe desecharse una vez que se hayan abierto sus hojas o este haya entrado en contacto con sangre o tejidos de un paciente. La reutilización podría ocasionar la

rotura de los clips y provocar lesiones o producir una infección.

2) No utilizar para fines no previstos

Este clip no debe utilizarse para ningún otro fin que no sea reforzar la fuerza de cierre de los clips de aneurisma Sugita de tipo permanente (tipos estándar o ancho). No utilizar este clip con los clips de aneurisma Sugita de tipo permanente que sean de tipo fenestrado, largo o mini.

3) Utilizar únicamente el aplicador de clips exclusivo durante la manipulación del clip para evitar cambios en las fuerzas de cierre del clip o en sus características mecánicas. No utilizar aplicadores de clips de otros fabricantes.

4) No abrir las hojas del clip directamente con los dedos.

Esto puede causar corrosión o alterar la correcta fuerza de sujeción. Las hojas del clip solo deben abrirse cuando el resorte del clip esté colocado en una

-
- posición correcta dentro del aplicador del clips.
- 5) No está permitida la modificación o alteración de este clip.
- 6) No utilizar este clip con implantes de otros fabricantes ni con implantes de diferentes materiales, para evitar una corriente galvánica.
Una corriente galvánica puede causar corrosión o debilitar la fuerza de sujeción.
- 7) No utilizar este clip en pacientes con serias alergias a los metales o materiales exógenos.
- 8) No utilizar este clip en pacientes con enfermedades infecciosas ni sepsis como complicación.
- 9) No esterilizar este clip con gas plasma de peróxido de hidrógeno a baja temperatura.
Este clip no es compatible con la esterilización mediante gas plasma de peróxido de hidrógeno a baja temperatura. [La esterilización con este método podría deteriorar el color de la superficie y
-

afectar a sus características.]

10. Advertencias

- 1) Se recomienda informar al paciente acerca del procedimiento y las características de este clip.
- 2) Inmediatamente después de la cirugía debe comprobarse que las hojas del clip de aneurisma cerebral estén debidamente cerradas.

[Entre los acontecimientos adversos más graves que cabe esperar con el uso de este clip se incluyen el desplazamiento del clip, el deslizamiento del clip, la expulsión del clip del aplicador de clips, la fractura del clip, la laceración del aneurisma cerebral, lesiones cerebrovasculares, hemorragia, muerte, etc.]

- 3) Manipulación de este clip:

La manipulación brusca de este clip podría provocar deformaciones o daños en el clip y

lastimar el paciente.

11. Uso de IRM



RM condicional

Pruebas no clínicas demostraron que este clip es RM condicional. Un paciente con este clip implantado puede someterse de manera segura a un sistema de RM bajo las siguientes condiciones:

- Campo magnético estático de 1,5 tesla o 3 tesla, exclusivamente
- Campo magnético de gradiente espacial máximo de 1.000 gauss/cm (10 T/m)
- Sistema de RM máximo que se informa, tasa de absorción específica promedio en todo el cuerpo

(TAE) de 2 W/kg durante 15 minutos de exploración (p. ej., por secuencia de pulsos) en el modo de funcionamiento normal

En las condiciones de exploración definidas, está previsto que este clip produzca un aumento de temperatura máximo de 2,4 °C después de 15 minutos de exploración continua (es decir, por secuencia de pulsos).

En pruebas no clínicas, el artefacto de imagen producido por este clip se extiende aproximadamente a 25 mm desde este clip cuando se toma una imagen con una secuencia de pulsos de eco de gradiente y un sistema RM de 3 tesla.

NOTA: No llevar el aplicador de clips al entorno RM.

El aplicador de clips contiene material que se considera inseguro para RM.

12. Precauciones

El uso de este clip está restringido a cirujanos que cuenten con la debida formación en el uso del clip.

13. Anomalías y acontecimientos adversos

1) Acontecimientos adversos graves

- Desplazamiento del clip (deslizamiento)
- Expulsión del clip del aplicador de clips
- Rotura del clip
- Rotura de un aneurisma cerebral
- Lesión cerebrovascular
- Hemorragia
- Muerte

2) Otros acontecimientos adversos

- Infección de la herida quirúrgica
 - Complicaciones quirúrgicas generales
 - Desplazamiento posterior del clip por la
-

-
- aplicación de un campo magnético
 - Oclusión del vaso sanguíneo adyacente
 - Reacción ante un cuerpo extraño

14. Almacenamiento: cuidado y manipulación

Este clip viene preparado en un envase no estéril y debe conservarse en su envase en un lugar fresco, seco y seguro.

No utilizar ningún tipo de aplicador de clips que no sea el aplicador de clips exclusivo.

Debe minimizarse la manipulación de este clip para reducir la contaminación o daños.

15. Procedimiento de limpieza y esterilización validado

Este clip se suministra sin esterilizar. Por lo tanto, los usuarios (profesionales sanitarios) deben esterilizar el clip antes de la cirugía mediante los procesos de esterilización validados de acuerdo con las directrices gubernamentales estipuladas.

Es importante esterilizar y manipular correctamente este clip para garantizar que cumpla las especificaciones de esterilidad antes de la cirugía y ayudar así a minimizar la aparición de infecciones en el paciente quirúrgico.

Otros procedimientos que también son importantes para minimizar la contaminación en un quirófano incluyen el uso de una unidad quirúrgica con equipos de flujo laminar a criterio del cirujano.

El equipo de esterilización debe validarse para garantizar que esterilice correctamente configuraciones

de carga específicas. El usuario final es el responsable de validar el proceso de esterilización en el esterilizador individual y garantizar la esterilidad.

El equipo de esterilización debe limpiarse y mantenerse de acuerdo con los procedimientos operativos estandarizados especificados por el fabricante.

Limpiar y esterilizar el aplicador de clips según el manual de instrucciones del aplicador de clips.

Este clip, así como los instrumentos, deben limpiarse para reducir la carga biológica antes de la primera esterilización y la reesterilización.

No utilizar soluciones que contengan cloro para lavar este clip. Eso podría provocar la corrosión de los metales.

1) Limpieza

Colocar el clip en el estuche Sugita específico o la

bandeja Sugita específica (en adelante, “el estuche o la bandeja de clips”) y cerrar la tapa.

<Si utiliza la limpieza por ultrasonido>

- (1) Sumergir completamente el estuche o la bandeja en el agua (agua del grifo) del depósito de lavado.
- (2) Limpieza por ultrasonido

Tiempo de limpieza: 15 minutos o más

Detergente: detergente de tipo enzimático neutro (concentración diluida 1,0%)

- (3) Aclarado

- Llenar el sumidero de agua corriente (agua del grifo o agua desionizada), sumergir completamente el estuche o la bandeja en el agua y agitar el estuche o la bandeja 5 veces hacia arriba y hacia abajo.
 - Cambiar el agua y agitar el estuche o la bandeja otras 5 veces hacia arriba y hacia abajo en el
-

agua.

- Realizar una serie de operaciones de aclarado, tres o más veces en total.

(4) Secar bien.

Condiciones de secado aconsejadas: 110 °C, durante 30 minutos o más

<Si utiliza una lavadora desinfectadora (lavado automático)>

Paso	Procedimiento	Temperatura [°C]	Tiempo [min]	Tipo de agua	Notas
I	Limpieza preliminar	<25	3	Agua del grifo	-
II	Lavado	55	10	Agua del grifo	Detergente alcalino (como agente de limpieza para el aluminio) Concentración diluida 0,5%
III	Aclarado	<25	4	Agua desionizada	Ajustar el proceso de aclarado de la manera siguiente : 1 vez (1 minuto) × 4 veces = 4 minutos
IV	Desinfección con agua caliente	-	-	Agua desionizada	Siga el programa del dispositivo.
V	Secado	-	-	-	

2) Inspección

Controlar visualmente los clips, uno por uno, y no usarlos si se observa una de las siguientes anomalías.

- Daños
- Deformación
- Deterioro
- Posición inapropiada de la hoja
(desviación, holgura, desnivel de la punta, etc.)
- Restos de suciedad

Como el color de la superficie podría desvanecerse con la repetición de los procesos, no utilice clips que ya no puedan distinguirse con claridad mediante el código de colores.

3) Envoltura

Colocar el clip en el estuche o la bandeja de clips (según las especificaciones) y cerrar la tapa.

Luego, envolver el estuche (la bandeja) que contiene

el clip utilizando material estándar de embalaje médico (tela no tejida o bolsa esterilizada) con barrera estéril de protección según la norma ISO 11607 para la esterilización por vapor.

- Esterilización -

<Método de esterilización validado>

Estándares utilizados	ISO 17665-1		
Método de esterilización	Esterilización por vapor con prevacío(Esterilización en autoclave)		
Condiciones de esterilización	Temp. de esterilización	Tiempo de exposición	Tiempo de secado
	132 °C	4 minutos o más	20 minutos o más
	134 °C	3 minutos o más	20 minutos o más

No lleve a cabo la esterilización con gas plasma con peróxido de hidrógeno a baja temperatura. Podría producirse decoloración y/o deformaciones.

Una institución médica debe verificar la validación de la esterilización y deben aplicarse condiciones de esterilización con una eficacia probada mediante el uso de un esterilizador de vapor a alta presión cuyo

correcto funcionamiento se haya confirmado.

- Almacenamiento -

No almacenar el clip a altas temperaturas ni en lugares con mucha humedad y/o con variaciones de temperatura. Conservar el clip en un lugar limpio, seco, y sin polvo.

杉田ブースタークリップ取扱説明書

目 次

- | | |
|--------------|--------------|
| 1. 仕様 | 11. MRIの使用 |
| 2. 種類 | 12. 注意 |
| 3. スプリング形式 | 13. 不具合・有害事象 |
| 4. 作動機構 | 14. 保管上の注意事項 |
| 5. 表面仕上げ | 15. 洗浄及び滅菌手順 |
| 6. ブレード部断面形状 | － 滅菌 － |
| 7. 使用適応 | － 保管 － |
| 8. 使用方法 | |
| 9. 禁忌・禁止 | |
| 10. 警告 | |

1. 仕様

杉田ブースタークリップは、[表1]に示すパーマネントタイプの杉田クリップのスタンダードタイプあるいはラージタイプに組み合わせて閉鎖力を増加する目的で用います。

「杉田ブースタークリップ」を以下「本品」とします。


本品は、既にクリッピングされている杉田クリップに対し、縦並びのみ掛ける事が出来ます。脳動脈瘤や、血管には直接掛けてはいけません。本品は杉田クリップのバネ部になるべく近いところに掛けて、そのクリップのブレード基部を確実にグリップするようにしてください。[図1]

本品は、パーマネントタイプの杉田クリップスタンダードタイプとラージタイプ以外には使用しないでください。

[表1]

適用タイプ	Prod. Code
スタンダード	07-940-01~09・64~66・68・69 07-943-01~03
ラージ	07-940-10~18・20~25・47~50 60~63・70~73

SUGITA BOOSTER CLIP

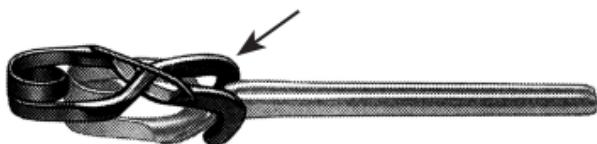

[図1]

本品の材料は冶金学上の優れた特性を持つコバルトクロームニッケルモリブデン合金 (ISO 5832-7/ASTM F1058 G2) を使用しています。

ASTM: American Society for Testing and


Materials

ISO: International Organization for Standardization

本品は専用の杉田クリップ用鉗子（以下「クリップ鉗子」とします）を使用して一回限り、使用することができます。再使用はクリップの折損原因となり、組織の損傷や感染等の危険があります。

本品にはトレーサビリティを可能にすべく、ロット番号が表示されています。

閉鎖力は最終的品質保証段階で【図2】に示す指定の位置で、コンピュータ化された電子ゲージ計測器で測定されます。測定結果として、ニュートン及びグラムでラベル表示されています。

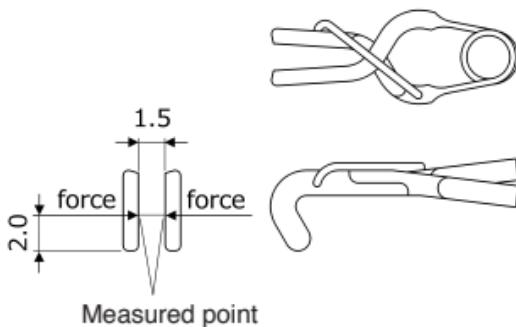

[図2]

2. 種類

Permanent Type

形状	識別色
ブースター	ブレード先端部 - 黄色

寸法や形状については本品のカタログを参照してください。

3. スプリング形式 : Integral Coil

-
4. 作動機構 : Alligator Action
 5. 表面仕上げ
 - Clip Body : Satin
 - Material Treatment : Electrolytic Polish
 6. ブレード部断面形状 : Rolled
 7. 使用適応

本品は、パーマネントタイプの杉田クリップ（スタンダード、ラージタイプ）と組み合わせて閉鎖力を増加する目的で用います。
 8. 使用方法


本品は未滅菌包装で用意されており、使用に際しては、適正な滅菌処理を行わなければなりません。

本品を把持する際は、クリップ鉗子を使用し
-

なければなりません。

また、クリップの把持方法は〔図3〕に示すように、クリップのバネ部が適切にクリップ鉗子の把持部に入っていることを確認しなければなりません。

クリップの把持方法が適切でない場合、クリップが破損または、クリップ鉗子から飛び出す原因となり、手術に危険を招くことがありますので、正しく把持してください。

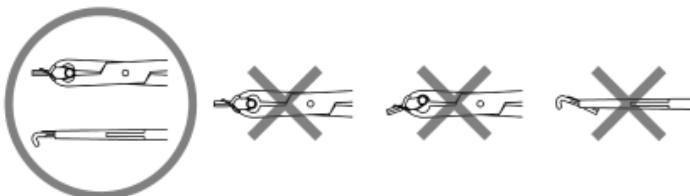

〔図3〕

- ・クリップを曲がった角度で把持しないでください。
-

-
- ・クリップのバネ部がクリップ鉗子の把持部に適切に把持されていない場合には、クリップが滑ったり、弾かれたりすることがあります。また、クリップのバネ部にダメージを与え、バネ部の折損及び把持力の低下を招く危険性があります。

医師には患者の手術記録に、使用したクリップの種類とロット番号およびシリアル番号を記録しておくことをお勧めします。

パッケージには、トレースラベルが添付されています。

9. 禁忌・禁止

1) 再使用の禁止

本品は、1回限りの使用に限定とすること。一度でもクリップ鉗子にて把持されたり、患者の血液又は組織に触れたりした場合には廃棄すること。再使用はクリップの折損

原因となり、組織の損傷や感染等の危険があります。

2) 機能以外の使用禁止

本品は、パーマネントタイプの杉田クリップ（スタンダード、ラージタイプ）と組み合わせて閉鎖力を増加する以外の目的で使用しないこと。

窓付ラージ、ロング、ミニタイプには使用しないこと。

3) クリップの閉鎖力や機械的特性が変化することが無いよう、専用のクリップ鉗子を使用すること。他社製のクリップ鉗子を使用しないこと。

4) 指で圧縮してクリップのブレードを開かないこと。腐食の原因となり、また適切な把持力を損なう危険があります。クリップのブレードは、適切なクリップ鉗子内に正しくバネ部が設置された場合にのみ開くこと。

-
- 5) 本品を改造したり他の物と接合させたりしないこと。
 - 6) ガルバニック電流を回避するため、他社製インプラント及び材質の異なるインプラントと併用しないこと。腐食の原因となり、また適切な把持力を損なう危険があります。
 - 7) 金属や異物に対して重篤なアレルギーがある患者に使用禁止。
 - 8) 感染巣の転移や敗血症併発のおそれがある感染症の患者への使用禁止。
 - 9) 過酸化水素低温ガスプラズマ滅菌の禁止
本品は過酸化水素低温ガスプラズマ滅菌には適合しておりません。[表面が褪色し、性状に影響を及ぼします。]

10. 警告

- 1) 本品の使用や、これに関わる手術に由来する利点と欠点について、それぞれの患者に
-

-
- 十分な説明を行うこと。
- 2) 術後直ちに脳動脈瘤クリップの閉鎖状態を確認すること。
[本品の使用により予想される重大な有害事象として、クリップの移動やスリップアウト、クリップ鉗子からのクリップの脱落、クリップの破損、脳動脈瘤の破裂、脳血管損傷、出血、死亡等が考えられます]
- 3) 本品の取り扱い
本品を変形あるいはキズをつける等の粗雑な取扱いはしないこと。重大な有害事象が発生する恐れがあります。

11. MRIの使用



MR Conditional

本品は、MR Conditional（条件付きMR適合性）であることが、非臨床試験で確認されています。本品を使用する患者は、下記の条件においてMRI撮影を行うことができます。

- ・ 静磁場：1.5 Tまたは3 Tのみ
- ・ 静磁場の最大空間傾斜磁場：1000 Gauss/cm (10 T/m)
- ・ 15分間撮影時、全身平均比吸収率 (SAR) が2 W/kg (パルスシーケンスあたり)

定義されたスキャン条件の下で、本品は、15分間の連続撮影 (パルスシーケンスあたり) 後に最高2.4 °Cの温度上昇を生じると予想されます。

非臨床試験では、3T MRシステムにおいて、グラディエントエコーパルスシーケンスで撮像し画像化した場合に引き起こされる画像アーチファクトは、約25 mm伸びていました。

注：クリップ鉗子はMR環境下に持ち込まないでください。

MR Unsafe (MR危険) であることが確認された原材料を含んでいます。

12. 注意

本品の使用は、適正な訓練と脳動脈瘤クリップの使用経験をもつ医師のみに限られます。

13. 不具合・有害事象

1) 重大な有害事象

- ・クリップ脱離（スリップアウト）
- ・クリップ鉗子からのクリップの脱出
- ・クリップの破損

-
- ・脳動脈瘤の破裂
 - ・脳血管損傷
 - ・出血
 - ・死亡

2) その他の有害事象

- ・手術創の感染症
- ・一般的な手術合併症
- ・磁場にかけたための後発性クリップ脱離
- ・近隣血管閉塞
- ・異物反応

14. 保管上の注意事項

本品は未滅菌で用意されており、元の包装のまま涼しい乾燥した安全な場所に保管してください。

本品の取り扱いには専用のクリップ鉗子以外の鉗子は使用できません。

本品の汚染をできる限り少なくするため、そ

の取り扱いは最小限度にとどめるようにしなければなりません。

15. 洗浄及び滅菌手順

本品は未滅菌で供給されます。したがって、使用者（医療従事者）が国の定めるガイドラインに沿って検証された方法で滅菌を行ってください。

手術に先立ち、本品を適正に滅菌して正しく取り扱うことは、患者が感染症を起こす可能性を最小限にとどめる一助として、滅菌仕様との適合を保証するうえで大切なことです。

医師の判断によるラミナー・フロー（層流）設備のある手術室の使用を含め、手術室での汚染を最小限にとどめるための他の手順も重要です。

滅菌装置が特定の処理様態で適正に滅菌ができるることを保証するため、装置の検証を行う必要があります。滅菌装置が適正に作動するか検証

し、無菌性を保証することは使用者の責任です。

滅菌装置は滅菌装置メーカーの標準手順に従って適正な洗浄を行い、維持しなければなりません。

クリップ鉗子は、クリップ鉗子の取扱説明書に従い洗浄・滅菌を行ってください。

本品とインスツルメンツは、最初の滅菌と再滅菌の前にバイオバーデンを減少させるために洗浄する必要があります。

洗浄には金属腐食の原因となる塩素系の溶液は使用しないでください。

1) 洗浄

本品を専用の滅菌ケースに入れ、蓋をする。

<超音波洗浄の場合>

- (1) 洗浄槽中の水中（水道水）にケースが完全に浸漬するように沈める。
-

(2) 超音波洗浄する。

洗浄時間：15分以上

洗浄剤：中性酵素系洗浄剤（希釈濃度1.0 %）

(3) すすぎ洗浄

- ・流水（水道水または脱イオン水）で溜め水を作り、ケースを水中に完全に浸漬させ、ケースを上下に5回洗振する。
- ・水を交換して、再度、水中でケースを上下に5回洗振する。
- ・一連のすすぎ作業を計3回以上実施する。

(4) 十分に乾燥させる。

推奨乾燥条件：110 °C・30分以上

<ウォッシャーディスインフェクター(自動洗浄)の場合>

段階	手順	温度 [℃]	時間 [分]	水質	備考
I	前洗浄	<25	3	水道水	-
II	洗浄	55	10	水道水	アルカリ洗浄剤(アルミ対応の洗浄剤など) 希釀濃度0.5%
III	すすぎ	<25	4	脱イオン水	すすぎ工程のプログラムを「1回(1分)×4回=4分」に設定する。
IV	热水消毒	-	-	脱イオン水	装置のプログラムに従う。
V	乾燥	-	-	-	

2) 検査

製品を1個ずつ目視にて点検し、下記の項目が認められた場合は使用しないこと。

- ・損傷
- ・変形
- ・破損
- ・不適切なブレード位置(ずれ、すきま、先端不揃いなど)
- ・汚れの残存

繰り返しの処理において、表面の色が褪せ

ことがあるため、色分けを明確に識別できなくなってしまった製品は使用しないこと。

3) 包装

本品を専用の滅菌ケースに入れて蓋をする。
その後、微生物バリア性を有する（ISO 11607
に適合する）高圧蒸気滅菌用の医療用包装材料
「不織布もしくは滅菌バッグ」を用いて包装する。

－ 滅菌 －

<妥当性確認済み滅菌方法>

規格	ISO 17665-1		
滅菌方法	プレバキューム式の高圧蒸気滅菌		
滅菌条件	滅菌温度	保持時間	乾燥時間
	132 °C	4分以上	20分以上
	134 °C	3分以上	20分以上

過酸化水素低温ガスプラズマ滅菌は行わない
でください。表面が褪色し、性状に影響を及ぼ
します。

適切に機能することが確認された高圧蒸気滅菌装置により、医療機関で滅菌バリデーションが検証され、有効性が立証された滅菌条件により滅菌を行ってください。

－保管－

高温・多湿を避け、温度や湿度が極端に変化しない、水や塵埃のかからない清潔な場所に保管する。