

Lesen Sie diese Bedienungsanleitung, bevor Sie das Produkt verwenden.
Bewahren Sie die Anleitung gut auf, damit Sie bei Bedarf darauf zurückgreifen können.

Gebrauchsanleitung

Armschutz (Trade Name: Arm Shield)

Warnung

Wenn Sie OP-Tisch-Zubehör verwenden, beobachten Sie den Patienten genau. Wenn sich ein Patient über einen längeren Zeitraum hinweg in der gleichen Lage befindet, können unter Umständen Nervenlähmung und/oder wundgelegene Stellen auftreten.

Kontraindikation/Verbot


1. Dieses Produkt wurde nur für die Verwendung mit Mizuho-OP-Tischen geprüft.
2. Überschreiten Sie die zulässige Last nicht, die unter „Spezifikationen, 4. Zulässige Last“ angegeben ist. Andernfalls könnte das Produkt beschädigt werden.

Symbolmarkierung für Etikettierung

MD : Medizinprodukt

Spezifikationen

1. Technische Zeichnung

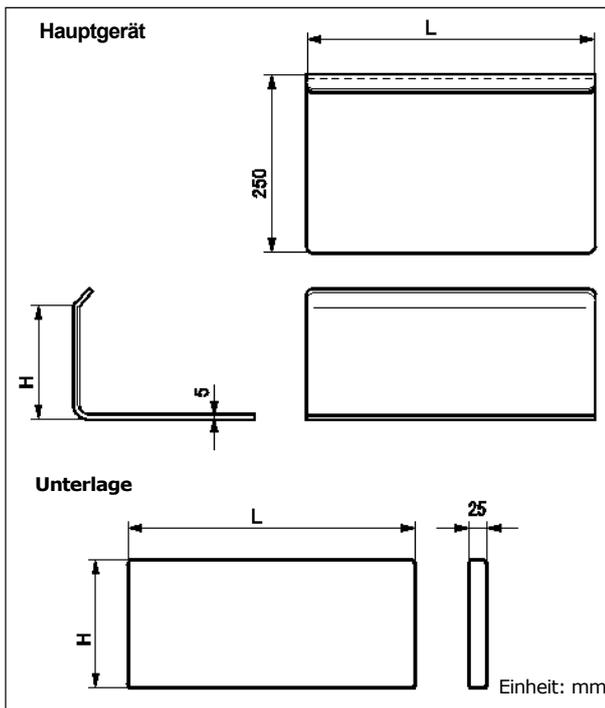

Codenr.	Produktbeschreibung	L (mm)	H (mm)
08-069-18	Unterlage für Armschutz (Pad for Arm Shield)	400	180
08-069-45	Unterlage für Armschutz (150 mm) (Pad for Arm Shield (150mm))	400	150
08-086-07	Armschutz (Arm Shield)	400	160
08-086-27	Armschutz mit Unterlage (130 mm) (Arm Shield with Pad (130mm))	400	130

08-086-28	Armschutz mit Unterlage (160 mm) (Arm Shield with Pad (160mm))	400	160
08-086-29	Armschutz mit Unterlage (190 mm) (Arm Shield with Pad (190mm))	400	190

2. Gewicht (ohne Unterlage)
 - 1,0 kg/Einheit (08-086-07)
 - 0,9 kg/Einheit (08-086-27)
 - 1,0 kg/Einheit (08-086-28)
 - 1,1 kg/Einheit (08-086-29)
3. Material
 - Hauptkörper: Polycarbonat
 - Unterlage: Urethan
4. Zulässige Last
 - Einheit: 13kg
 - Höchstgewicht des Patienten: 450kg


Verwendungszweck

Dies ist Zubehör für einen OP-Tisch, das verhindern soll, dass die Arme des Patienten herunterfallen.

Vorgesehener Benutzer

Dieses Produkt ist für die Anwendung durch medizinisches Fachpersonal bestimmt, einschließlich, aber nicht beschränkt auf Chirurgen, Krankenschwestern und biomedizinische Techniker.

Gebrauchsanleitung

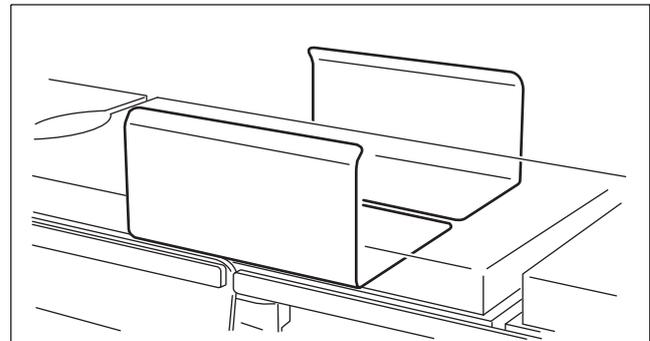

Das Produkt wird unter die Auflage eines OP-Tisches gelegt.

Warnhinweis/Vorsichtsmaßregel

Wichtige Vorsichtsmaßnahmen

1. Stellen Sie bei der Verwendung eines OP-Tisches sicher, dass dieses Produkt nicht mit der Oberfläche des Tisches oder anderen Werkzeugen und Vorrichtungen, die in Kombination damit verwendet werden, in Berührung kommt oder deren Verwendung behindert.
2. Aus hygienischen Gründen sollten Sie für die Stellen, mit denen der Patient in Kontakt kommt, sterilisierte Abdecktücher verwenden.

Lagerung/Lebensdauer

1. Bewahren Sie das Produkt nicht in einer Umgebung mit hohen Temperaturen oder mit hoher Luftfeuchtigkeit und starken Temperaturschwankungen auf.
2. Lebensdauer des Produkts: 7 Jahre (abhängig von Wartung und Inspektion sowie sachgemäßer Aufbewahrung)

Wartung/Inspektion

<Durch den Anwender>

1. Inspektion vor und nach dem Gebrauch
Vergewissern Sie sich vor und nach der Verwendung, dass das Produkt nicht beschädigt ist.
2. Reinigung und Desinfektion
Entfernen Sie Blut, Chemikalien, Fremdstoffe und andere Flecken mit etwas Wasser und desinfizieren Sie das Produkt mit einem Vliestuch oder einem anderen Stoff, der mit Alkohol getränkt wurde.
3. Bei Fehlfunktionen
Falls eine Reparatur dieses Produkts erforderlich ist, kennzeichnen Sie es eindeutig als „Defekt“, „Reparaturbedürftig“ o. ä. und wenden Sie sich an Ihren Händler vor Ort oder direkt an Mizuho.

<Durch Vertreter>

Die Wartung und Inspektion darf nur durch zertifizierte Mizuho-Händler durchgeführt werden.

Packung

2 Stück pro Packung

Garantie

MIZUHO Corporation repariert defekte Teile dieses Produkts ein Jahr ab dem Datum der Lieferung/Installation kostenlos. Ausgenommen sind Schäden durch Reparaturen durch Dritte, höhere Gewalt, unsachgemäßen Gebrauch oder absichtliche Beschädigung. Alle anderen Garantiebedingungen unterliegen den Bestimmungen von MIZUHO Corporation.

Entsorgung

Dieses Gerät ist gemäß den örtlichen Vorschriften zu entsorgen. Für die sachgerechte Entsorgung wenden Sie sich an Ihren örtlichen Händler.

Hinweis

Alle im Zusammenhang mit dem Produkt aufgetretenen schwerwiegenden Vorfälle sind dem Hersteller und der zuständigen Behörde des Ortes, an dem der Anwender und/oder der Patient niedergelassen ist, zu melden.



MIZUHO Corporation
3-30-13 Hongo, Bunkyo-ku, Tokyo 113-0033, Japan
<https://www.mizuho.co.jp>



EMERGO EUROPE
Westervoortsedijk 60
6827 AT Arnhem, The Netherlands