

Notice d'utilisation

Tiroir à Cassette (Trade Name: Cassette Tray)

Contreindications/Interdictions




1. Évitez de manipuler la table d'opération alors que le tiroir à cassette est inséré. Le tiroir risquerait de tomber et d'être endommagé.
2. Manipulez ce produit avec précaution, car il peut se déformer ou être endommagé. Une manipulation brutale peut réduire la durée de vie de ce produit ainsi que celle des outils et des dispositifs utilisés en même temps.
3. Utilisez uniquement des dispositifs adaptés à l'utilisation prévue de ce produit. Une utilisation incorrecte de ce produit pourrait casser ce produit ainsi que les outils et des dispositifs utilisés en même temps.

Symbole utilisé pour l'étiquetage

MD : Dispositif médical

Spécifications

1. Forme

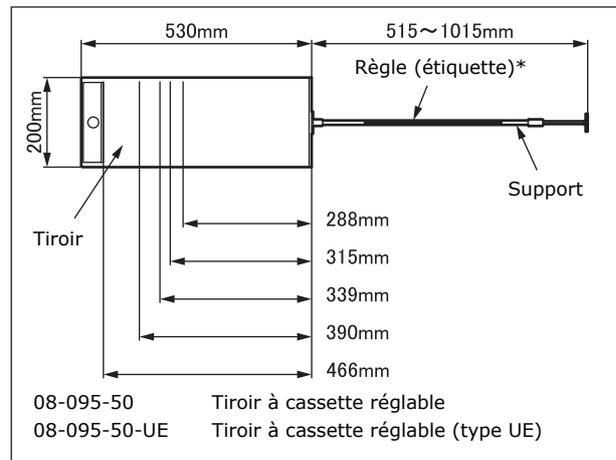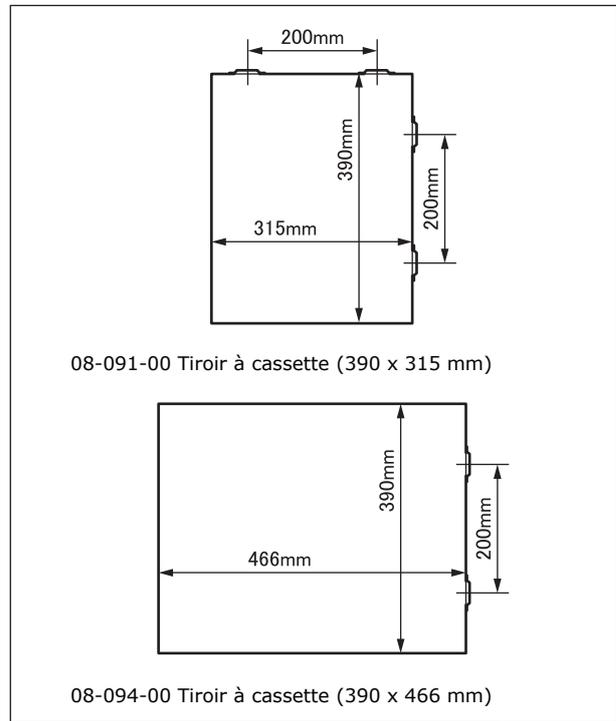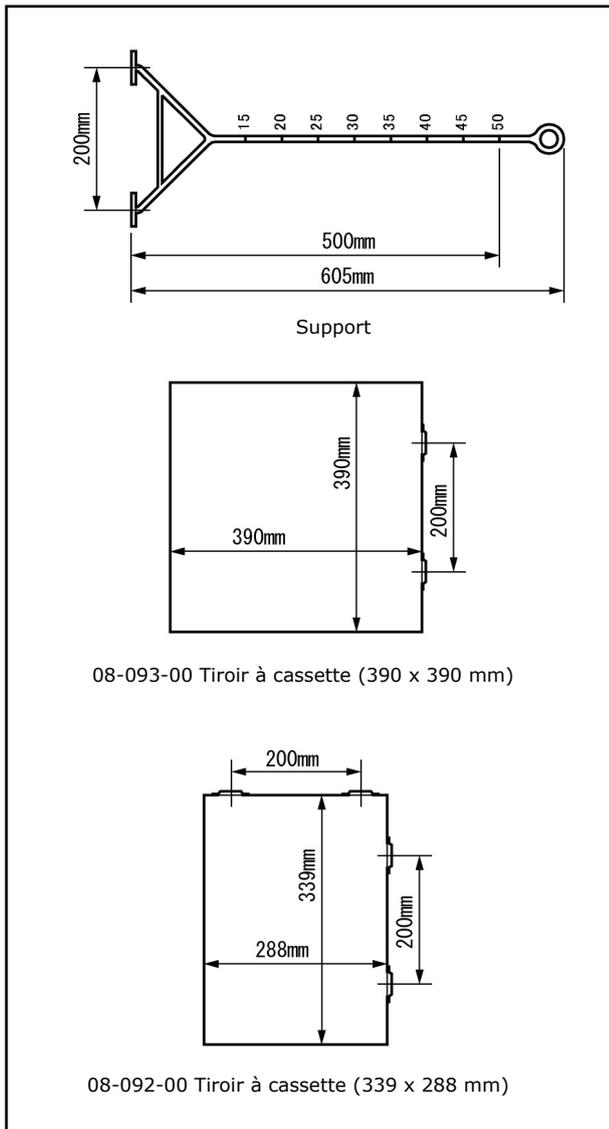

Règle (étiquette)* uniquement applicable à 08-095-50.

2. Poids

- ① Support : 0,3 kg
- ② Tiroir à cassette
 - 08-091-00 : 1,1 kg 08-092-00 : 0,9 kg
 - 08-093-00 : 1,4 kg 08-094-00 : 1,6 kg
- ③ Tiroir à cassette réglable
 - 08-095-50, 08-095-50-UE : 2,0 kg

3. Matériau

Support : Acier inoxydable
Tiroir à cassette : Acier inoxydable
Tiroir du 08-095-50, 08-095-50-UE : Alliage d'aluminium

N° code	Descriptif du produit
08-095-50	Tiroir à Cassette Réglable (Adjustable cassette tray)
08-095-50-UE	Tiroir à Cassette Réglable (UE) (Adjustable cassette tray (UE))
08-091-00	Tiroir à Cassette (390 x 315 mm) (Cassette tray (390 x 315 mm))
08-092-00	Tiroir à Cassette (339 x 288 mm) (Cassette tray (339 x 288 mm))
08-093-00	Tiroir à Cassette (390 x 390 mm) (Cassette tray (390 x 390 mm))
08-094-00	Tiroir à Cassette (390 x 466 mm) (Cassette tray (390 x 466 mm))


Utilisation prévue

Il s'agit d'un accessoire pour une table d'opération. Cet outil est utilisé pour contenir les cassettes radiographiques et les insérer dans le plateau radiographique d'une table d'opération.

Utilisateur prévu

Ce produit est destiné à être utilisé par les professionnels de la santé, y compris, mais sans s'y limiter, les chirurgien(ne)s, les infirmier(ère)s et les technicien(ne)s en génie biomédical.

Notice d'utilisation

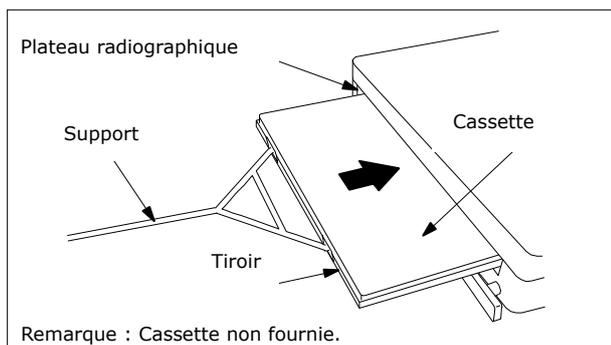

1. Placez une cassette dans le tiroir.
2. Fixez le support aux crochets du tiroir.
3. Insérez le tiroir à cassette sous le plateau radiographique de la table d'opération.

Avertissement/Mise en garde

Précaution importante

Pour des raisons d'hygiène, veillez à utiliser des draps stérilisés sur les parties du produit avec lesquelles le patient est en contact.

Stockage/Durée de vie utile

1. Ne stockez pas le dispositif à des températures élevées ou dans des endroits très humides où la température varie considérablement.
2. Durée de vie de ce produit : 7 ans
(Sous réserve du respect des opérations d'entretien et d'inspection spécifiées et d'un stockage correct.)

Maintenance/Inspection

<Par l'utilisateur>

1. Vérifier avant et après utilisation
Vérifiez que ce produit n'est pas endommagé ou cassé avant et après chaque utilisation.

2. Nettoyage et désinfection

Essuyez le sang, les produits chimiques, les contaminants et autres taches avec de l'eau et nettoyez l'appareil avec de la gaze ou d'autres matériaux imbibés de désinfectants. De plus, utilisez les mêmes désinfectants que les désinfectants autorisés sur la table d'opération de Mizuho décrits dans le manuel d'utilisation de la table d'opération.

3. En cas de dysfonctionnement

Si ce produit est cassé, indiquez clairement que le dispositif est « Cassé », « Ne pas utiliser », ou « Doit être réparé », etc., et contactez votre revendeur local ou Mizuho.

<Par les agents>

Les opérations de maintenance et d'inspection ne peuvent être effectuées que par des agents agréés de Mizuho.

Conditionnement

Support : 1 pièce par colis

Tiroir : 1 pièce par colis

Tiroir à cassette réglable : 1 pièce par colis

(tiroir à cassette avec support)

Garantie

MIZUHO Corporation réparera les pièces défectueuses de ce produit sans frais pendant un an à partir de la date de livraison ou de la tranche de livraison sauf dans les cas de dommages causés par la réparation de la part de tiers, d'un acte de la nature, d'une mauvaise utilisation ou d'un endommagement volontaire. Toutes les autres conditions générales de garantie sont soumises aux règlements de MIZUHO Corporation.

Élimination

Ce dispositif doit être éliminé conformément aux exigences locales. Pour plus d'informations sur l'élimination, consulter le distributeur local.

Avertissement

Tout incident grave, survenu en lien avec le dispositif, doit être signalé au fabricant et à l'autorité compétente du lieu dans lequel l'utilisateur et/ou le patient est établi.



MIZUHO Corporation
3-30-13 Hongo, Bunkyo-ku, Tokyo 113-0033, Japan
<https://www.mizuho.co.jp>



EMERGO EUROPE
Westervoortsedijk 60
6827 AT Arnhem, The Netherlands