

取扱説明書

下肢牽引用カート


【禁忌・禁止】

＜使用方法＞

他社製手術台では使用しないこと。[他社製手術台での使用可能は確認していません。]

【形状・構造及び原理等】

1. 外観図

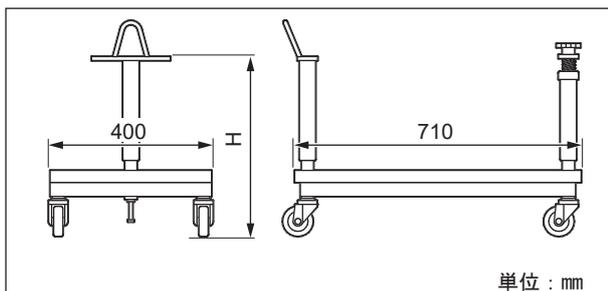

| 商品コード | 商品名 | H |
|-----------|-----------|-----|
| 08-115-21 | 下肢牽引用カート | 668 |
| 08-115-39 | 下肢牽引用カートⅡ | 297 |
| 08-115-40 | 下肢牽引用カートⅢ | 342 |
| 08-115-41 | 下肢牽引用カートⅣ | 460 |
| 08-115-42 | 下肢牽引用カートⅤ | 490 |
| 08-115-55 | 下肢牽引用カートⅥ | 458 |

2. 質量

11 kg (08-115-21 : 12 kg)

3. 原材料

本体 : 圧延鋼

キャスター : 合成樹脂


【使用目的】

下肢牽引装置のアームを手術台装着時に支持するための機器。収納及び運搬にも使用。

【使用方法等】

1. 使用方法


1-1 アームを下肢牽引用カートに取り付け、ハンドルを回して固定します。

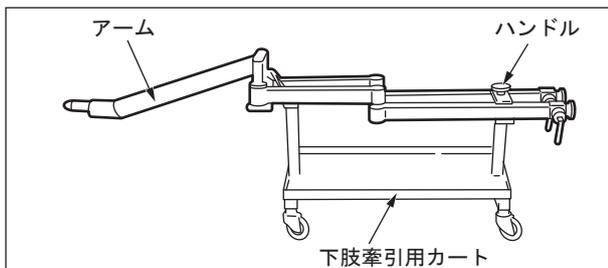

1-2 アームの装着位置(手術台又は下肢牽引用Vアタッチメント)が正しいことを確認します。

1-3 下肢牽引用カートのハンドルをゆるめて、アームが離れる状態にします。

1-4 手術台の操作ボックスで上昇を操作します。下肢牽引用カートからアームが離れたら、下肢牽引用カートを移動します。

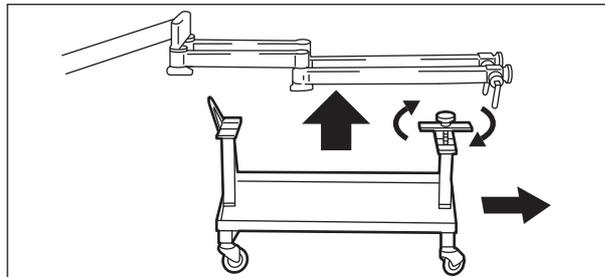

2. 使用可能な手術台アクセサリ

弊社製手術台アクセサリ

【使用上の注意】

1. 警告

- (1) 締結部の固定は必ず確認してください。ゆるんだ状態では機器が動いたり、外れたりして患者に障害がおきのおそれがあります。
- (2) アームを移動するときは必ず2人以上で行ってください。落下してけが又は破損するおそれがあります。

2. 重要な基本的注意

- (1) 下肢牽引用カートからアームが離れたら、直ぐに下肢牽引用カートを移動してください。手術やエックス線撮影の支障になります。
- (2) アーム以外のアクセサリ等を載せないでください。アーム装着・支持以外の使用は想定していません。

【保管方法及び有効期間等】

1. 保管方法

高温・高湿を避け温度や湿度が極端に変化しない場所及び水のかからない場所に保管してください。

2. 耐用期間

適切な保守点検及び適切な保管をした場合 : 7年 (注)

[自己認証 (弊社データ) による]

注 : 耐用期間内であっても、使用状況又は使用頻度により、突発的な故障、部品の著しい消耗・劣化・破損等を生じた場合は該当部品の交換が必要です。

【保守・点検に係る事項】

＜使用者による保守点検事項＞

1. 使用前・使用後の点検

使用前・使用後に「破損箇所がないこと」を確認してください。

2. 清掃・消毒

血液・薬剤・汚染等の汚れを水で拭き取り、消毒液等を浸したガーゼ等で清拭してください。なお、消毒液等は弊社製手術台にて確認済みの消毒液等と同一のものを使用してください。確認済みの消毒液等については手術台の取扱説明書を参照してください。

3. 故障時のお願い

本品が故障したと思われるときは、本品に「故障」・「使用禁止」・「修理必要」等の適切な表示をし、ご購入店又は弊社に連絡してください。

<業者による保守点検事項>

弊社及び弊社が認めた業者のみが実施可能です。それ以外の業者による保守・点検は、有害事象の発生、性能・機能低下の事態を招くおそれがあります。

【販売元】

ミズホ株式会社
TEL : 03(3815)3097

保証期間に係る事項

本品は納品／設置してから1年間を保証期間として無償修理いたします。但し第三者が修理した場合、天災による破損、不適切な使用、あるいは故意による破損は除きます。その他保証条件は弊社規定に依ります。