




Mesa de operaciones MOT-VE100

Modo invertido: información complementaria

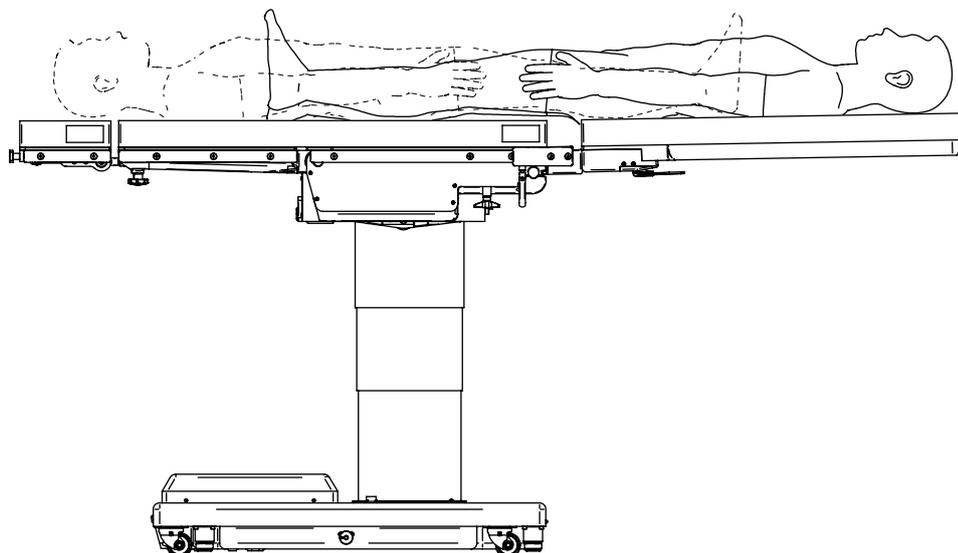

Índice

1. Cómo preparar y comprobar el modo invertido · · Suplemento-1
2. Inclinación lateral · · · · · Suplemento-2
3. Trendelenburg · · · · · Suplemento-3
4. La placa de la espalda · · · · · Suplemento-4

1. Cómo preparar y comprobar el modo invertido



ADVERTENCIA

- La inclinación lateral, la posición de Trendelenburg y el deslizamiento funcionan en direcciones opuestas a los interruptores de la unidad de control. Los operarios deben asegurarse de verificar cada uno de los interruptores y sus direcciones de funcionamiento antes de las cirugías. Si se accionan sin haberlos revisado, los pacientes pueden resultar lesionados debido a su funcionamiento inesperado.
- No realizar las posiciones de bajada ni de subida. Como las posiciones inclinadas son diferentes de las posiciones normales, los pacientes pueden soportar inesperadamente más carga y, por lo tanto, lesionarse.
- El peso permitido del paciente cuando está en modo invertido es de 135 kg. Si se colocan sobre la mesa de operaciones pacientes cuyo peso exceda los 135 kg, esta puede volcarse y los pacientes pueden resultar lesionados.


■ Preparación del modo invertido

Para la MOT-VE100, desmonte la placa de la cabeza y fíjela a los extremos de la placa de las piernas.

■ Verifica della modalità inversa

Para verificar que el paciente está en el modo invertido, compruebe que la etiqueta de identificación del modo invertido esté alineada con la cabeza del paciente como se muestra en la siguiente ilustración.

La ilustración muestra el adaptador de inversión del lado de las piernas y la extensión de fibra de carbono de 100 cm tras extraer la placa de las piernas de MOT-VE100.

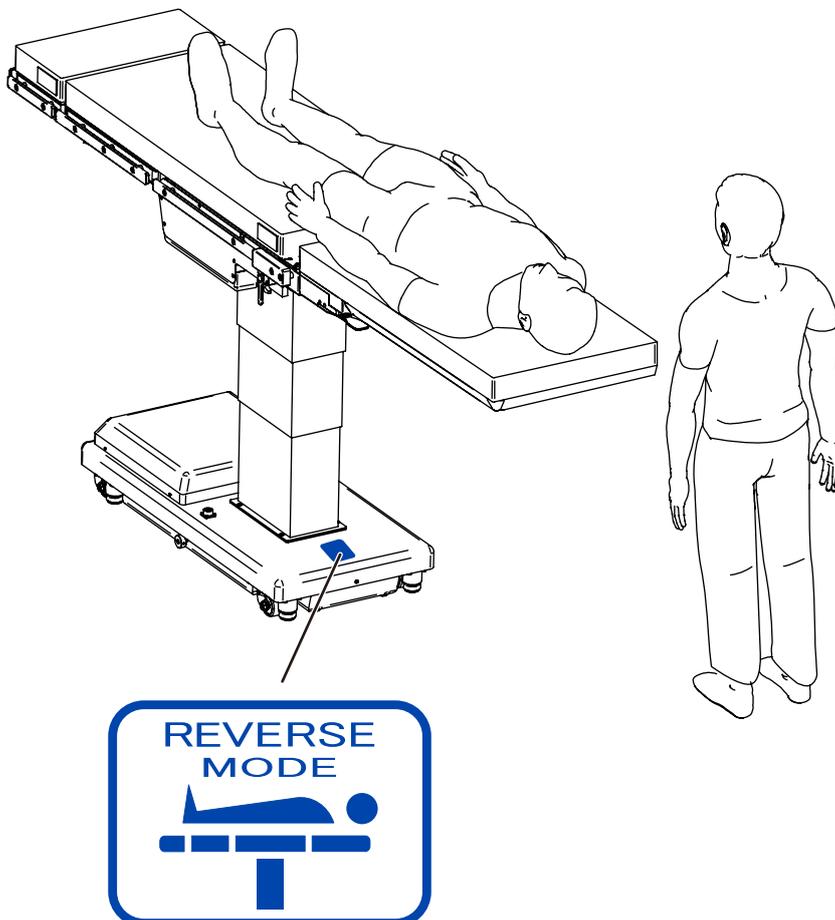


Etiqueta de identificación del modo invertido

■ Inclinación hacia la izquierda

1. Mantenga pulsado  y después pulse .


El tablero se inclina hacia la izquierda si se mira desde el lado de  Etiqueta de identificación del modo invertido.

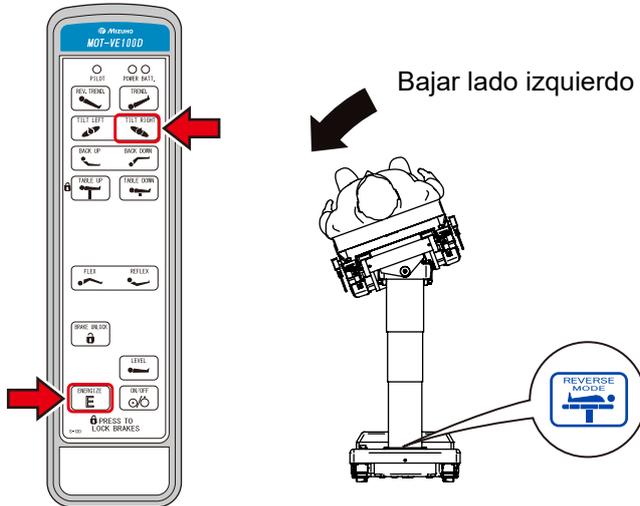

■ Inclinación hacia la derecha

1. Mantenga pulsado  y después pulse .


El tablero se inclina hacia la derecha si se mira desde el lado de  Etiqueta de identificación del modo invertido.

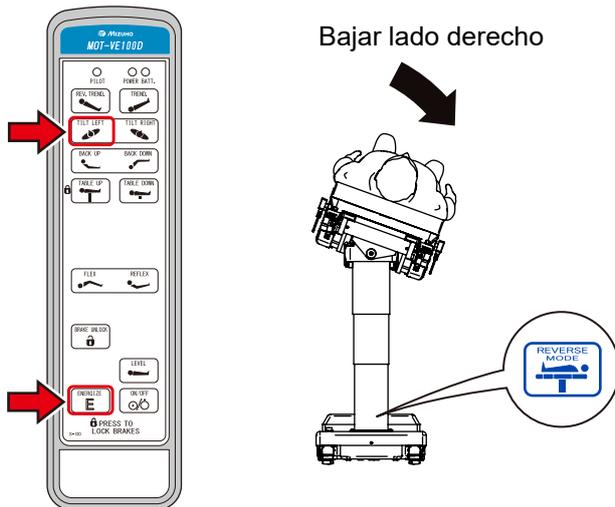

■ Trendelenburg (cabeza abajo)

1. Mantenga pulsado  y después pulse .


El lado de Etiqueta de identificación del modo invertido del tablero se mueve hacia abajo.

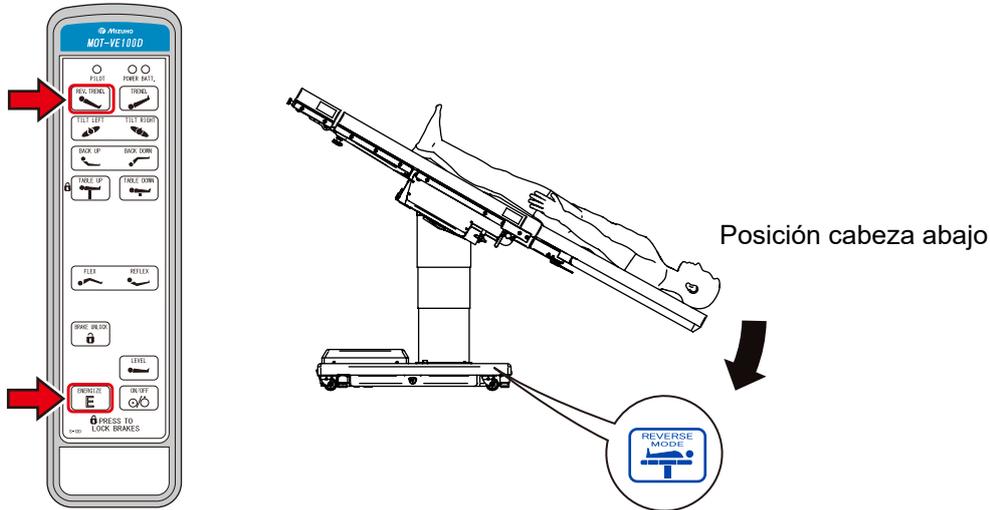

■ Trendelenburg invertida (cabeza arriba)

1. Mantenga pulsado  y después pulse .


El lado de Etiqueta de identificación del modo invertido del tablero se mueve hacia arriba.

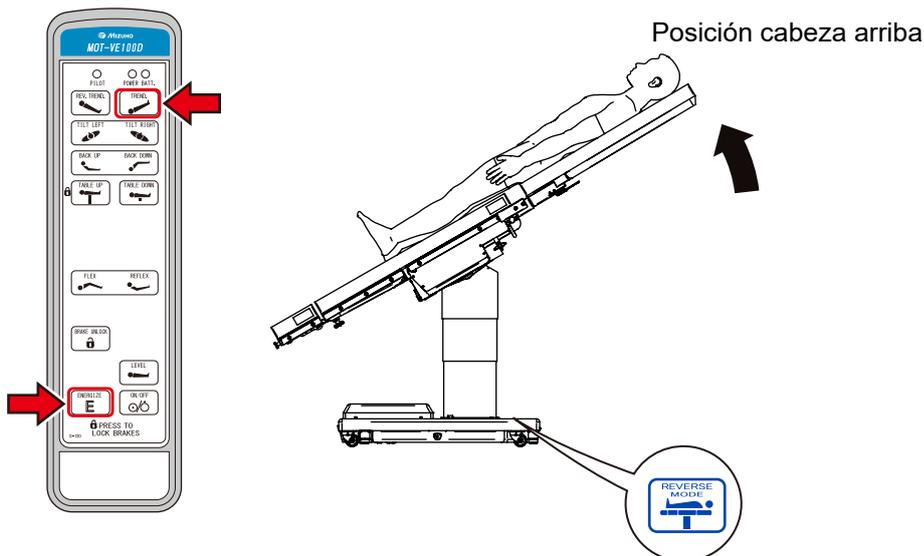

■ Incline la pierna del paciente hacia arriba

1. Mantenga pulsado  y después pulse .


La placa de la espalda se mueve hacia arriba (la placa de la parte de las piernas del paciente se mueve hacia arriba).

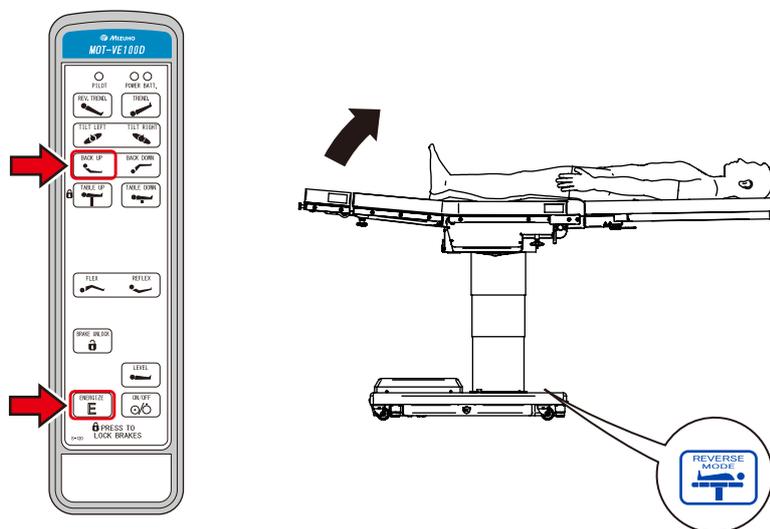

■ Incline la pierna del paciente hacia abajo

1. Mantenga pulsado  y después pulse .

La placa de la espalda se mueve hacia abajo (la placa de la parte de las piernas del paciente se mueve hacia abajo).

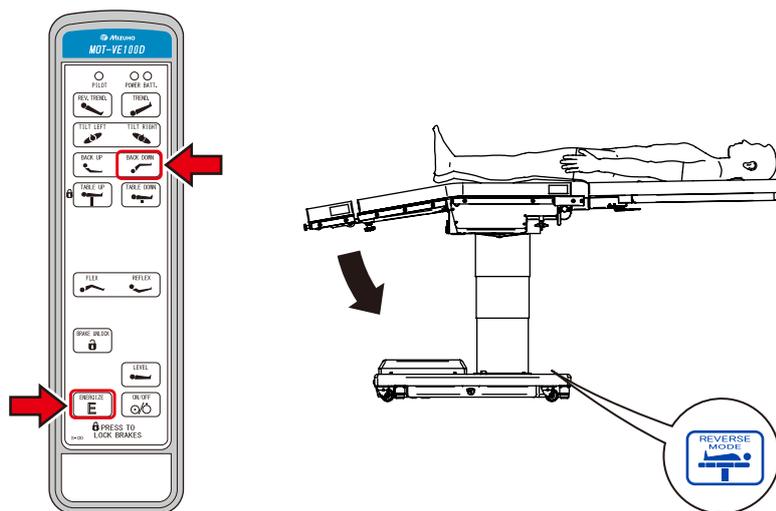



Comercial



EMERGO EUROPE
Westervoortsedijk 60
6827 AT Arnhem, The Netherlands



MIZUHO Corporation
3-30-13 Hongo, Bunkyo-ku
Tokyo 113-0033, Japan
<https://www.mizuho.co.jp>