

駒井式CT定位脳手術装置

OPTION

● 基準線

プローブ各種はディスポーザブル(未滅菌)品です。

※SUD: Single Use Device

SUDプローブ φ3/φ4

SUDバイオブシープローブ 側孔タイプ φ2.3/φ3

二重管方式で陰圧回転による組織生検採集用のため、同軸線上的の内套管の接続部はロック元となっています。

SUDイリゲーション用吸引管 側孔タイプ φ3

二重管方式の血腫腔洗浄用の吸引管です。同軸線上的のロック元より生理食塩水を注入し側壁より吸引排液します。

SUDバックランド型血腫吸引管 φ3/φ4



固い凝血を砕いて吸引する際に使用します。マンドリンの先端一部分がスパイラル状になっており、マンドリンを回転させることにより排出をバックアップします。

バイオブシー鉗子 3mm


標準付属品のプローブ把持器に直接挿入して組織生検用に使用します。

バイオブシー鉗子 2.3mm

プローブをそのまま利用して外套管内部に挿入し採集精度の高い組織生検用に使用します。

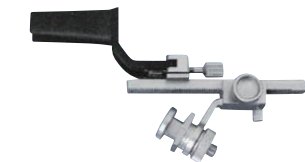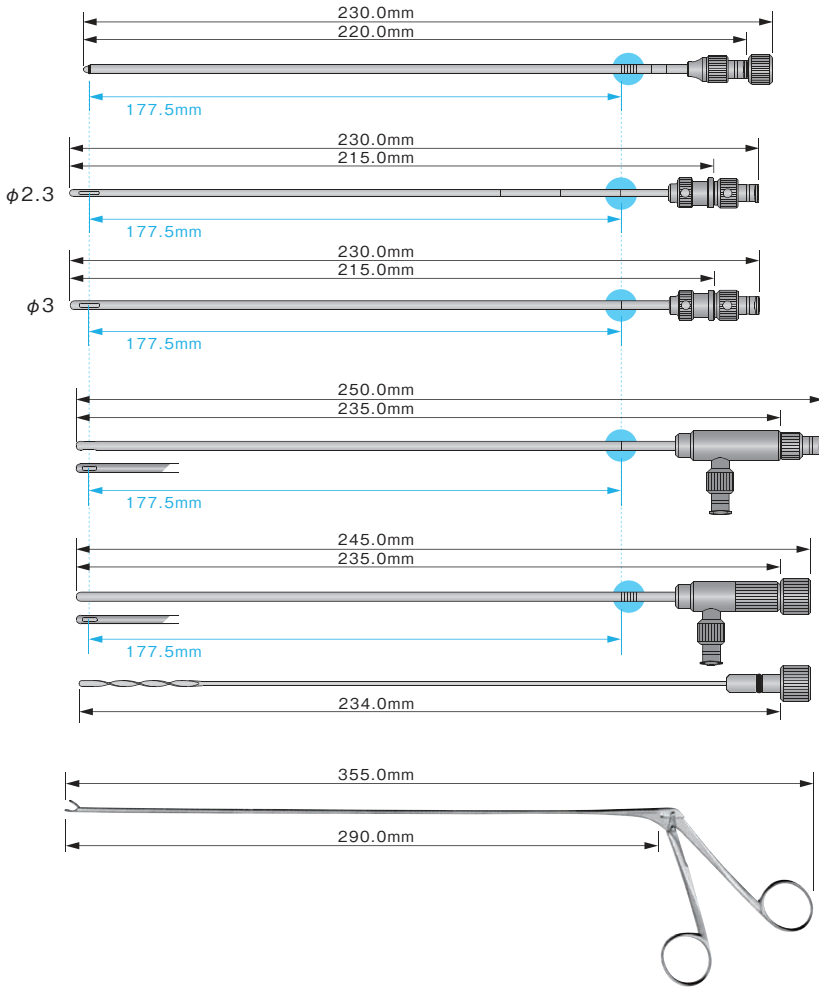

深部用開創器

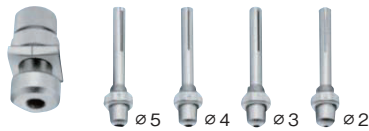

アダプター交換式プローブ把持器

アダプターなしで最大径φ7までのプローブを把持します。(標準アダプター4種類付φ2、φ3、φ4、φ5)



共用型駒井式ヘッドリングホルダー

ヘッドアームベースに取付けできるアダプターです。

商品コード	JANコード	商品名	クラス分類	製造販売届出/承認番号
17-973-21	4946329354737	駒井式CT定位脳手術装置 SUDプローブ φ3	II	23100BZX00091000
17-973-22	4946329354744	駒井式CT定位脳手術装置 SUDプローブ φ4		
17-973-33	4946329354775	駒井式CT定位脳手術装置 SUDバイオブシープローブ 側孔 φ2.3		
17-973-31	4946329354751	駒井式CT定位脳手術装置 SUDバイオブシープローブ 側孔タイプ φ3		
17-973-32	4946329354768	駒井式CT定位脳手術装置 SUDイリゲーション用吸引管 側孔タイプ φ3		
17-973-40	4946329354782	駒井式CT定位脳手術装置 SUDバックランド型血腫吸引管 φ3		
17-973-41	4946329354799	駒井式CT定位脳手術装置 SUDバックランド型血腫吸引管 φ4		
07-973-41	4946329063721	駒井式CT定位脳手術装置 バイオブシー鉗子 3mm	I	13B1X00306G00421
07-973-42	4946329063738	駒井式CT定位脳手術装置 バイオブシー鉗子 2.3mm		
07-973-26	4946329063639	駒井式定位脳手術装置 ストッパーリング φ4	II	23000BZX00351000
07-973-28	4946329063653	駒井式CT定位脳手術装置 プローブ把持器 φ4	II	23000BZX00351000
07-973-53	4946329063783	駒井式CT定位脳手術装置 ヘッドピン短	II	23000BZX00351000
07-973-59	4946329129182	駒井式CT定位脳手術装置 共用型ヘッドリングホルダー	I	13B1X00306H10027
07-973-71	4946329063899	駒井式CT定位脳手術装置 アダプター交換式プローブ把持器 本体	II	23000BZX00351000
07-973-72	4946329063905	駒井式CT定位脳手術装置 プローブ把持器アダプター φ2	II	23000BZX00351000
07-973-73	4946329063912	駒井式CT定位脳手術装置 プローブ把持器アダプター φ3	II	23000BZX00351000
07-973-74	4946329063929	駒井式CT定位脳手術装置 プローブ把持器アダプター φ4	II	23000BZX00351000
07-973-75	4946329063936	駒井式CT定位脳手術装置 プローブ把持器アダプター φ5	II	23000BZX00351000
07-973-06	4946329063523	駒井式CT定位脳手術装置 深部用開創器	I	13B1X00306G00017
07-973-02	4946329063486	駒井式CT定位脳手術装置 深部用開創器用交換用ブレード 長	I	13B1X00306G00017
07-973-03	4946329063493	駒井式CT定位脳手術装置 深部用開創器用交換用ブレード 短	I	13B1X00306G00017
07-973-04	4946329063509	駒井式CT定位脳手術装置 深部用開創器用ドライバー機構	I	13B1X00306G00017

□07-973-06構成品