

Animal Hospital for medical equipment catalog

Vol. 14



日本の「瑞穂」から、世界

ごあいさつ

私たちミズホは、社員一同「誠実・奉仕・団結」の想いを胸に、安全かつ信頼性の高い機器の開発製造を通じて医療の向上に寄与すべく、これまで歩んでまいりました。創業以来ほぼ一世紀という長きに亘り医療産業の一端を担ってこられましたことは、偏に皆様方の温かいご指導、ご支援の賜物であり、心より厚く御礼申し上げます。

急速なグローバル化の進展により、医療業界はもちろんあらゆる面で「世界はひとつ」の感が強まっている今日、私たちもグローバル企業により相応しい社名へと変更。千葉工場及び第二本社ビルの建設など、企業力の一層の強化に努めてまいりました。加えて、ミズホを中心にグループ各社の力を結集し、グループ一丸となって、特にアジア・ヨーロッパ市場への本格的な進出を図ると共に、手術室ユニットのシステム化を中心とした新分野の開拓も積極的に推進。杉田クリップをはじめとする固有技術に磨きをかけつつ、広く国内外の先端技術を積極的に導入し、皆様のニーズに合う魅力あふれる新製品づくりで、“世界に冠たる医療機械メーカー”としての地位の確立を目指してまいります。


激変する時代の変化やあらゆるニーズに即応できる真の世界企業となるために——。これからのミズホの飛躍に、どうぞご期待ください。



本社（東京都文京区）



五泉工場（新潟県五泉市）

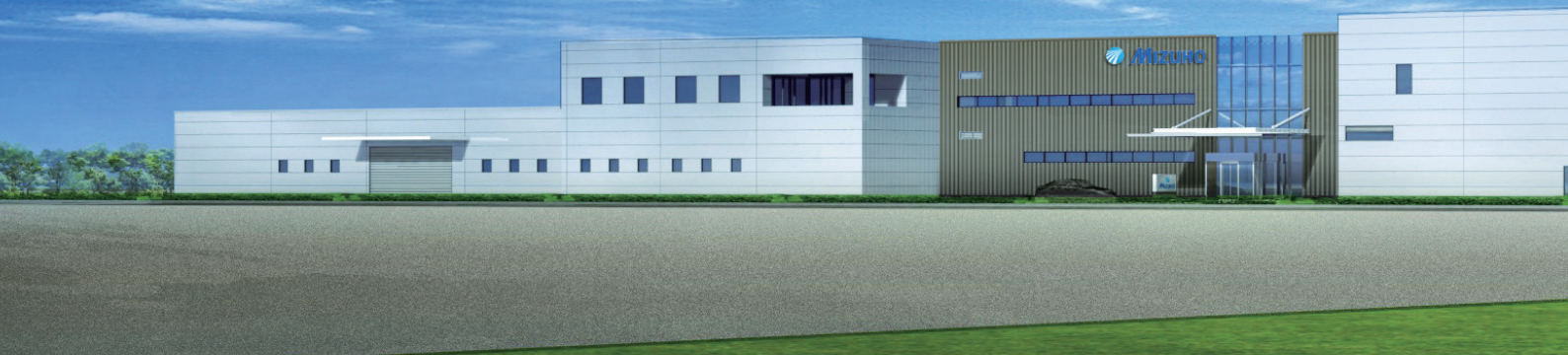

の「ミズホ」へ。

開発・技術

最先端技術に
開発員の創意工夫と熱意をプラス。
そこから、現場のニーズに応える製品が生まれます。



品質

患者のQOL向上と、
術者の快適な施術のために。
それが、品質管理にける私たちの想いです。



サポート

「お客様の、医療の発展のお役に立ちたい」
この切なる想いが、
社員一人ひとりの原動力です。



CONTENTS

手術室／院内機器

手術台	04
手術台周辺機器	10
無影灯	12
処置灯	14
吸引器・吸引管	15
電気手術器	16
院内備品	19

整形外科用手術器具

トイ・カッタープレートシステム	24
SA 骨接合用内固定システム	28
小動物用スクリュー	38
小動物用プレート	44
プレート用手術器具	52
鋼線・ワイヤー手術器具	56
骨鉗子・整復器	63
剥離子・起子	69
鋭匙	70
骨のみ・ハンマー	71
リーマー	73
ロンジュール	74
鉤	80
インターロッキングネイル	81
電動ドリル	85

一般外科用手術器具


外科手術器具セット	96
剪刀	97
持針器	100
鉗子	102
タオル鉗子	108
鑷子	109
マイクロ手術用器具	111
ゲルピー開創器	114
鉤	115
開創器・開胸器	117
結紮クリップ	120
縫合針	121
ボーンワックス	123

さくいん・商品名一覧	129
------------	-----



手術室／院内機器

Table & Fixtures

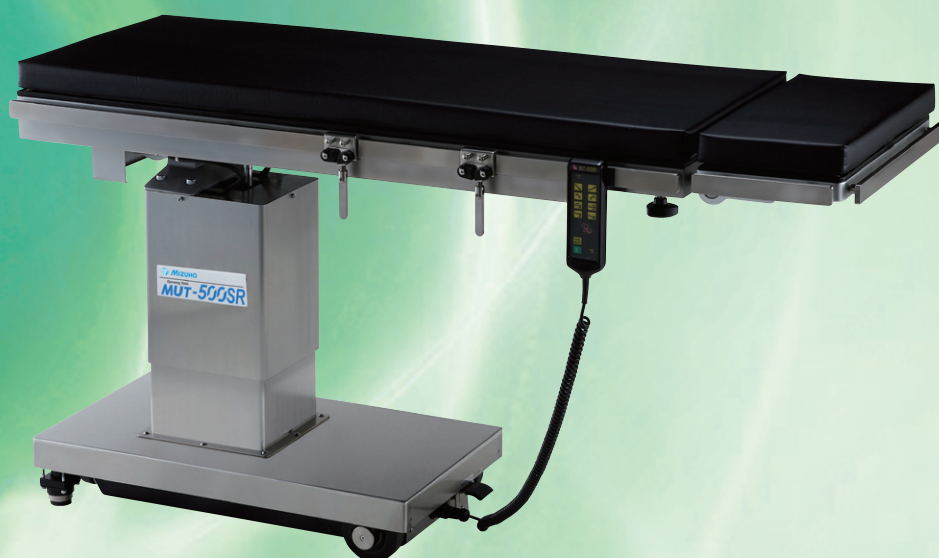

手術台

手術台周辺機器

無影灯

処置灯

吸引器・吸引管

電気手術器

院内備品

手術台

電動油圧手術台

MUT-500SR型


テーブルトップの
スライド機能を搭載し
スムーズな透視操作を実現




スライド機能を使用。

■特長


- 頭方向に200mm、脚方向に100mmのスライドが可能です。
- スライド機能によりテーブル下の空間を最大1,200mmまで確保できます。
- テーブルトップはX線透過板を採用。Cアームによる術中のX線透視が可能です。
- リモコンスイッチもしくはフットスイッチでスライド・昇降・縦転・横転・ブレーキの作動が行えます。
- 電動油圧によるスムーズな動作は術中のポジション変換が容易で、内視鏡手術も最適に行えます。
- 昇降範囲が広く、術者に合わせて自在に高さ調節が可能です。

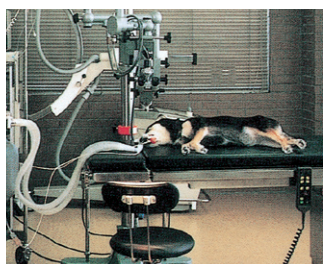


マイクロ手術

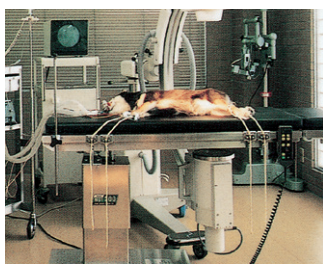

CアームX線透視

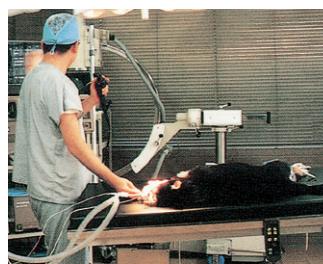


内視鏡検査

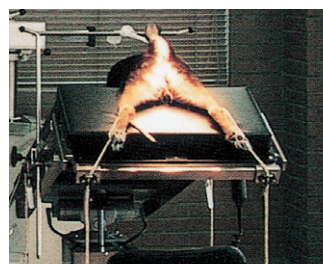


肛門アプローチ

■可動域

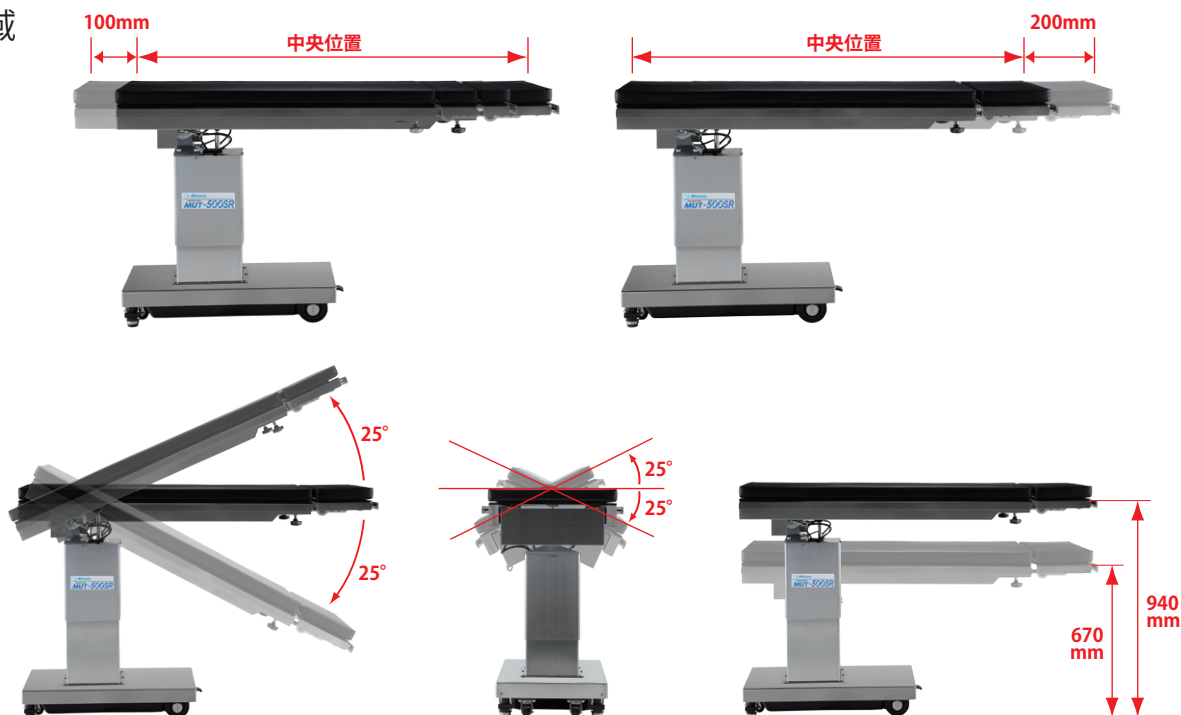

電動油圧手術台 MUT-500SR

動物用

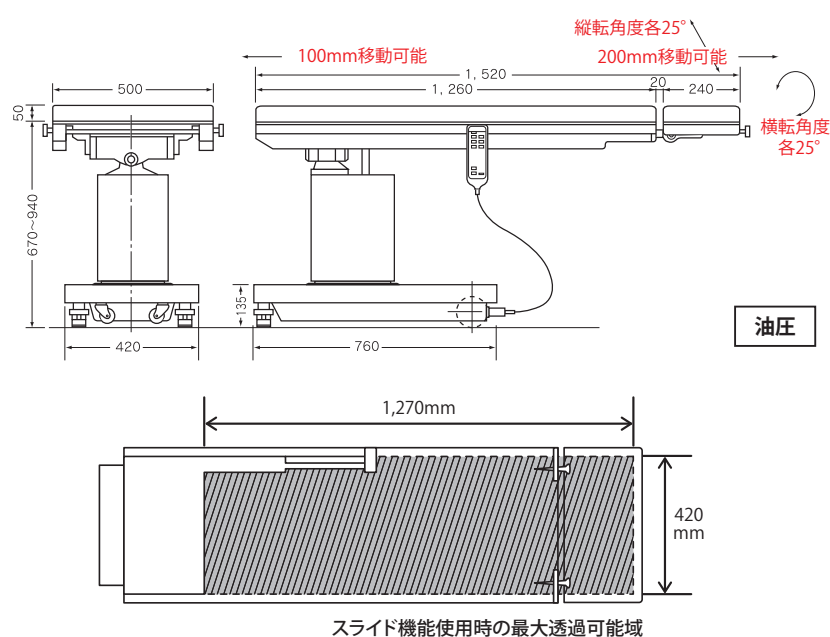

商品コード	価格
58-011-00	¥2,400,000


手術台標準付属品

丸型スクリーン掛	1ヶ
保定レール金具	4ヶ
操作ボックス	1ヶ
マットレス	1式

仕様

テーブルトップの寸法	500×1,520mm
昇降範囲	670～940mm
横転角度	各25°
縦転角度	各25°
天板スライド範囲	頭方向200mm 脚方向100mm
補助板屈折角度	上り60° 下り90°
定格電圧	AC100V
周波数	50/60Hz
電源入力	450VA
操作ボックス	シートスイッチ方式
本体質量	190kg

MUT-500SR型用フットスイッチ

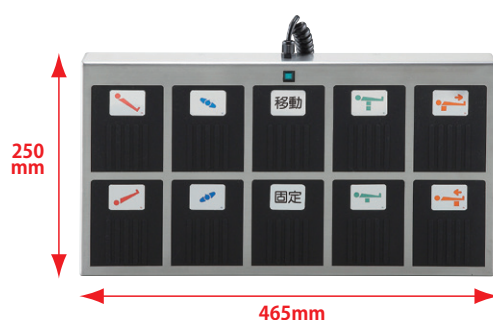

商品コード	価格
58-011-20	¥270,000

- 内視鏡手術にも対応できるフットスイッチです。スコープで術野を見ながらスライド・昇降・縦横転をかけることができます。

手術台

手術台
周辺機器

无影灯

処置灯

吸引器・吸引管

電気手術器



院内備品

電動油圧手術台 MUT-500型

優れた安全性を備え
術者が最善の力を発揮できる
手術環境作りに貢献



誤動作を防ぐため操作ボックスにEボタン+動作ボタンのW操作構造を採用。術者が偶然操作ボックスのスイッチに接触しても誤動作を起こしません。
※MUT-500型、500SR型に採用

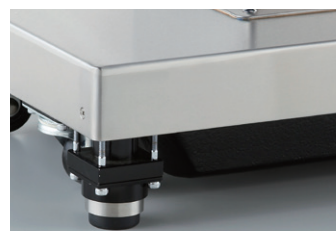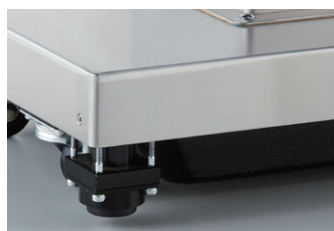


各動作前には必ず電動式油圧ブレーキがかかる構造になっており術中の誤移動、転倒を防止します。
※MUT-500型、500SR型に採用


■特長

- テーブル支柱が偏位させてあり、術者が座って手術を行う際にテーブル下の空間が大きく、障害物がありません。
- テーブルトップはX線透過板を採用。Cアームによる術中のX線透視や撮影が可能です。
- リモコンスイッチもしくはフットスイッチで昇降・縦転・横転・ブレーキの作動が行えます。
- 電動油圧によるスムーズな動作は術中のポジション変換が容易で、内視鏡手術も最適に行えます。
- 肛門アプローチに最適なジャックナイフ位がスムーズにとれます。
- 昇降範囲が広く、術者に合わせて自在に高さ調節が可能です。
- 手術台にはキャスターが取付けてあり、スムーズに移動できます。
- 小動物の保定がワンタッチで行える、専用の保定レール金具が装備されています。
- ステンレス製のボディは耐腐蝕・防汚構造で、メンテナンスが容易です。

可動域

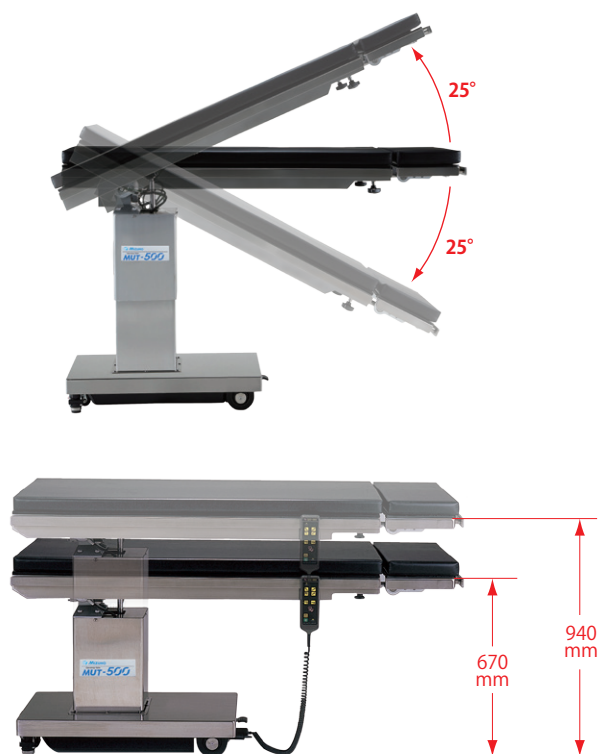


最大25°の横転角

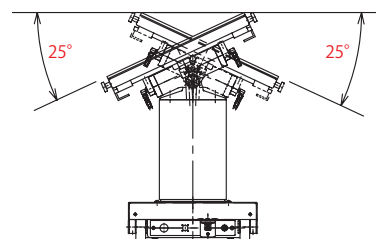

電動油圧手術台 MUT-500

動物用

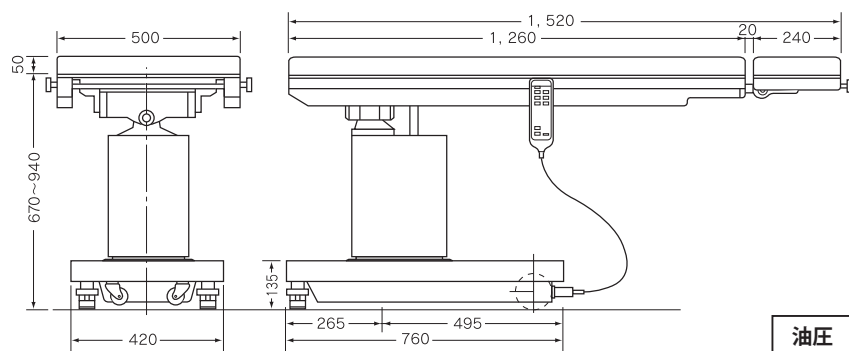

油圧

商品コード	価格
58-010-01	¥1,980,000

手術台標準附属品	
丸型スクリーン掛	1ヶ
保定レール金具	4ヶ
操作ボックス	1ヶ
マットレス	1式

仕様	
テーブルトップの寸法	500×1,520mm
昇降範囲	670～940mm
横転角度	各25°
縦転角度	各25°
補助板屈折角度	上り60° 下り90°
定格電圧	AC100V
周波数	50/60Hz
電源入力	450VA
操作ボックス	シートスイッチ方式
本体質量	189kg

MUT-500SR型・500型用X線力セッテ格納枠



商品コード	仕様	価格
58-010-11	主板用	¥88,000
58-010-12	補助板用	¥32,000

- 手術ポジショニングの状態でもX線撮影が可能となります。
- MUT-500及び500SR兼用。

MUT-500用フットスイッチ



商品コード	価格
58-010-20	¥250,000

- 内視鏡手術にも対応できるフットスイッチです。スコープで術野を見ながら昇降・縦横転をかけることができます。

手術台

手術台
周辺機器

无影灯

処置灯

吸引器・吸引管

電気手術器

院内備品

電動手術台 MUT-300型

ミズホの技術を結集し優れた
コストパフォーマンスを実現




▲ジャックナイフ位
(および縦転位)

特長

- テーブル支柱が偏位させてあるので、Cアームの操作も行えます。
- テーブルトップはX線透過板を採用。Cアームによる術中のX線透視や撮影が可能です。
- 電動操作で術前・術中のポジション変換が容易に行えます。
- 肛門アプローチに最適なジャックナイフ位がスムーズにとれます。
- フットスイッチでの操作が可能で、内視鏡手術にも対応できます。
- ステンレス製のボディは耐腐食・防汚構造で、メンテナンスが容易です。
- テーブルの両サイドのレールには様々な附属器具の取り付けが可能です。

電動手術台 MUT-300型

動物用



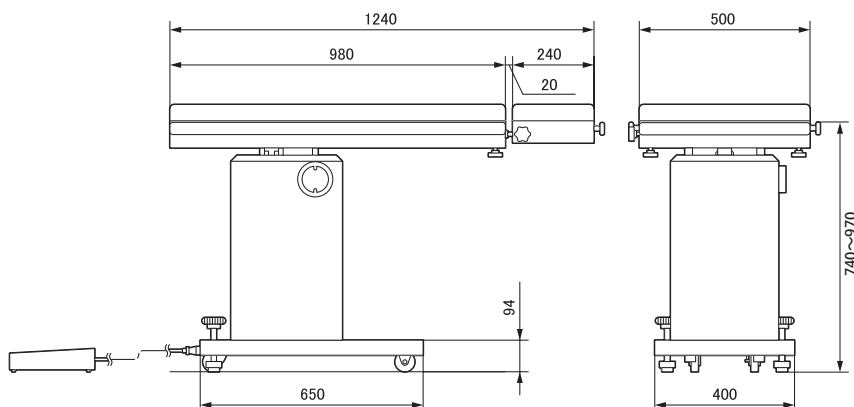


商品コード	価格
58-009-00	¥1,250,000

手術台標準附属品	
保定レール金具	4ヶ
フットスイッチ	1ヶ
マットレス	1式

仕様	
テーブルトップの寸法	500×1,240mm
昇降範囲	740~970mm
横転角度	各15°
縦転角度	傾斜25°
補助板屈折角度	下り90°
定格電圧	AC100V
周波数	50/60Hz
電源入力	130VA
本体質量	127kg

■可動域

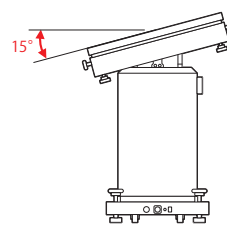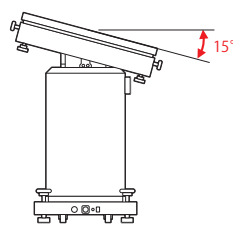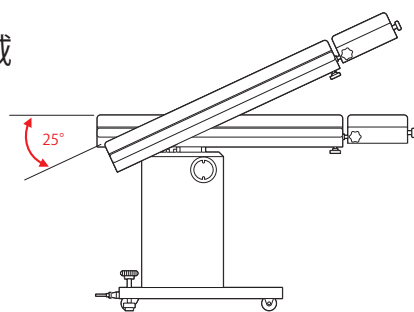

300型X線カセット格納枠

商品コード	仕様	価格
58-010-14	主板用	¥44,000
58-010-15	補助板用	¥32,000

■手術台アクセサリ

手術台用V型マットレス

商品コード	仕様	高さ	価格
58-010-03	1,520×500mm	140mm	¥73,000
58-010-10	1,240×500mm	140mm	¥73,000

●あらゆるポジショニングが容易になります。
※標準附属のマットレスではありません。




保定レール金具

動物用

商品コード	仕様	価格
58-010-02	1個	¥25,000



カセット挿入ホルダー

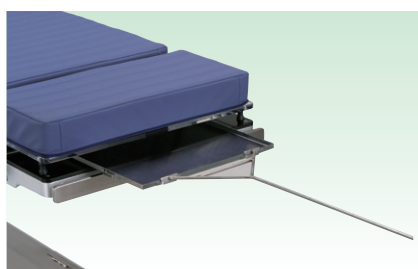


商品コード	仕様	価格
08-091-00	大陸用 390×315mm	¥35,000
08-092-00	四切用 288×339mm	¥35,000
08-093-00	大角用 390×390mm	¥35,000
08-094-00	半切用 390×466mm	¥40,000

丸型スクリーン掛(固定金具付)

動物用

商品コード	価格
58-010-08	¥40,000

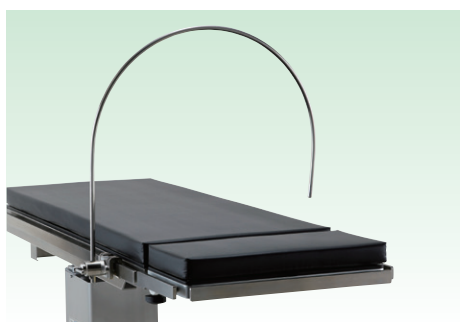

L型スクリーン掛(固定金具付)

商品コード	仕様	価格
08-062-05	φ12 650mm	¥60,000



手術台

手術台
周辺機器

无影灯

処置灯

吸引器・吸引管

電気手術器

院内備品

手術台周辺機器

オーバーヘッド器械台


ステンレス製



●テーブルサイドのハンドルを回して高さを調節できます。手術台に跨がせて使用できます。

商品コード	テーブル寸法	昇降範囲	価格
08-334-01	W100×D45cm	100～140cm	¥450,000

消毒盤台 固定金具付

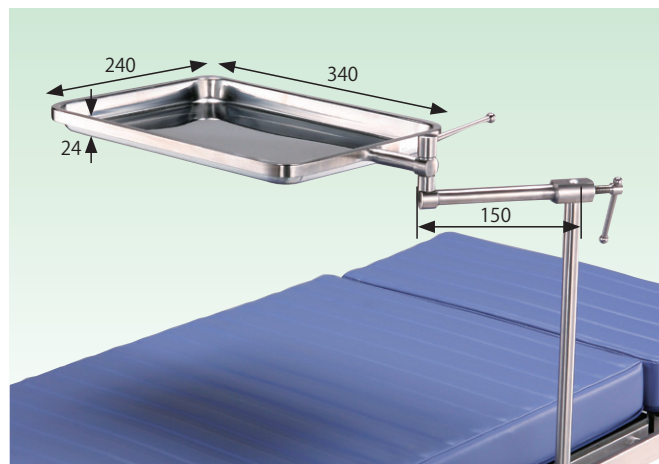

バット寸法:240×340×深さ24mm

商品コード	全長	仕様	価格
08-097-03	720mm	W340×D240mm	¥120,000

手術台取付用カメラアーム




重量500g以下のカメラが取付可能



商品コード	仕様	価格
58-999-99	軸径φ16mm	¥312,500
08-110-01	レール固定金具Ver.2	¥35,000

手術台の動きと連動したカメラアングル

手術台に直接取付けるので、術中の体位変換の度にカメラの角度を調節する必要がなく、手術を妨げることなく撮影が行えます。

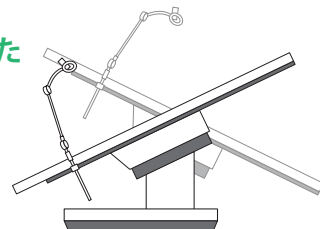

自由な角度が安定して決まるカメラアタッチメント

カメラを固定するアタッチメントは自由な角度に調節することが可能です。高い安定性を誇っているため長時間におよぶ手術でもカメラアングルをキープでき、またカメラヘッド本体も360°回転することができます。

油圧昇降手術椅子



- フットペダル操作により、500～700mmまで昇降します。
- リング状の足掛けは、座面の大腿部への圧迫を軽減し、術者の姿勢をサポートします。

商品コード	仕様	価格
08-365-00	丸型 背もたれ無し	¥200,000
08-366-00	丸型 背もたれ有	¥200,000
08-367-00	鞍型 背もたれ有	¥200,000

丸型背もたれ無し

丸型背もたれ有

鞍型背もたれ有

体圧分散・温風マット




■3分割タイプ

●体圧分散マット

主素材がPTB(特殊なポリエステル)の立体構造織物です。マットは、糸のアーチが縦横何層にも重なった構造で、体積の96%が空気なので優れた通気性と体圧分散性を有します。

●4層 30mm厚 中芯

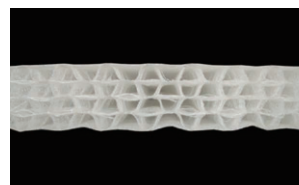

商品コード	仕様	サイズ	価格
58-088-01	レギュラー	460×850mm	¥38,100
58-088-02	ラージ	560×1100mm	¥47,600
58-088-03	レギュラー＆ラージセット	各1枚	¥76,200

永平寺サイジング株式会社製

洗濯OK!!




柴犬、ウェルシュコーギー 等

ゴールデンレトリバー、
ラブラドルレトリバー 等

- 1 手術時の体温を効果的に保持・復温を実現
- 2 洗濯ができ、繰り返し使用可能
- 3 体圧分散マットの併用で低温火傷のリスクを回避
- 4 微風温風で充分だから静かな手術環境を実現


※ご使用に際しては、別途温風送風機が必要です。

■温風マットの構造

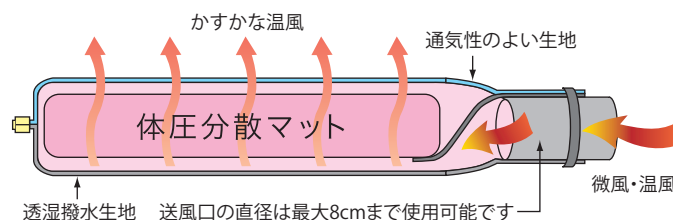

■薄型4分割タイプ

●3層 20mm厚 中芯

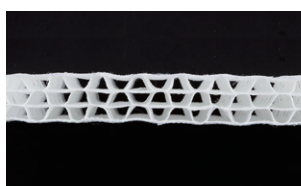

- 表面素材の通気度を1/2にしたことで、少ない送風量でも保温を可能にすると同時に、手術室内の温度上昇を軽減します。
- 厚さ20mmの薄型でしっかりとした硬さの中芯は、小型犬の安定した保定ができます。
- 中央部でV字に折れ曲がる4分割の設計です。

商品コード	仕様	サイズ	価格
58-088-11	レギュラー	460×850mm	¥38,100
58-088-12	ラージ	560×1100mm	¥47,600
58-088-13	レギュラー＆ラージセット	各1枚	¥76,200

永平寺サイジング株式会社製

洗濯OK!!



ネコ

チワワ、
ヨークシャテリア 等ミニチュアダックスフンド、
トイプードル 等

注意

- 送風機の吹き出し口の温風は40度以上にはならないように設定ください。
- 使用時は外袋から中芯を取り出さないでください。
- 万一マット内の温度が安全範囲を超えたときは底のファスナーを開けて、温風を止めてください。
- 洗濯時は外袋と中芯を別々にして洗濯して下さい。中芯は80度以上の洗濯は避けてください。
- 送風口は温風が漏れないように所定のバンドで閉めてください。送風口の直径は最大8cmまでです。



お買上金額にかかわらず、配送費をご負担いただきます。124ページの体圧分散・温風マット配送料金表をご参照ください。

手術台

手術台
周辺機器

无影灯

処置灯

吸引器・吸引管

電気手術器

院内備品


処置灯

LED Light HOSPILITE L1-S

操作性を重視した処置灯です。
使用環境により、用途に応じた
スタイルに対応します。



■ 外観図

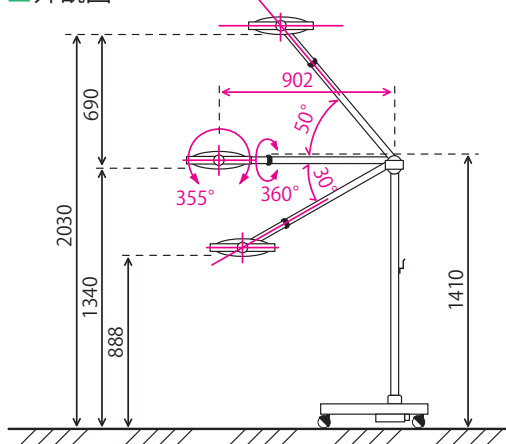

● 薄型・コンパクトなので、操作をスムーズに行うことができます。灯体は密閉型でフラットになっており、塵やホコリの侵入を防ぎます、また清掃も容易に行えます。

商品コード	価格
08-370-79	¥350,000


組立
商品

LED Light HOSPILITE L1-S<資料>


仕様	
最高照度	50,000Lux
色温度	4,500K
演色指数	Ra95
LED 数	7個
パターンサイズ	φ 160mm
灯径	336mm×260mm×79mm
重量	21kg
入力	AC100V-240V
消費電力	34W
交換目安	20,000時間

製造販売元：第一照明株式会社

LED診察／処置用照明灯 Triango (トライアング) スタンド式 TR-30XLF

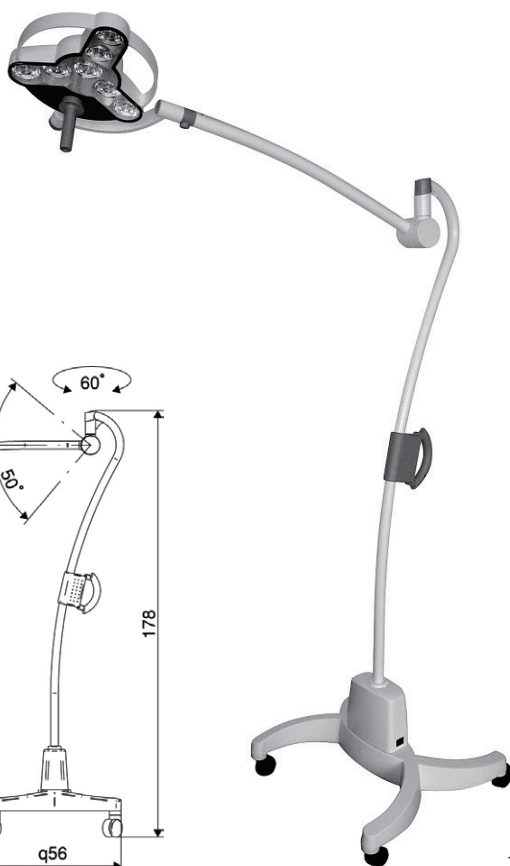

■ 外観図

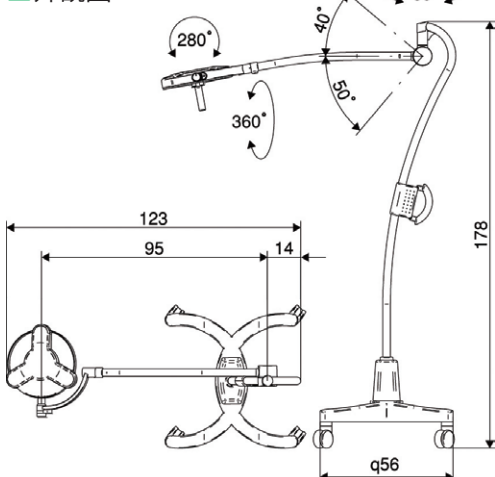

照度を10～100%調節



商品コード	価格
88-050-00	¥420,000

組立
商品

LED診察／処置用照明灯 Triangoスタンド式 TR-30XLF<資料>

仕様	
中心照度	100,000Lux (距離 80cm) 64,000Lux (距離 100cm)
色温度	4500K
LED 数	7 個
光野寸法	φ 16cm/100cm、φ 13cm/80cm
灯体径	約 280mm
質量	20kg
入力定格電圧	AC100/50-60Hz
消費電力	30W
LED 寿命	約 40,000 時間

製造販売元：小川医機器株式会社

一般医療機器 診療用照明器 届出番号 26B3X00026TR0001

吸引器・吸引管

吸引器アスピレーター



商品コード	仕様	サイズ	価格
41-201-00	SP20 500mlボトル付	390×175×280mm	¥58,000
41-202-00	SP30 1,000mlボトル付	390×175×280mm	¥68,000
41-203-00	SP40 4,000mlボトル付	500×175×280mm	¥98,000

製造販売元：株式会社東京エム・アイ商会

仕様			
型式	SP20	SP30	SP40
最大吸引圧 (kpa)	-80	-84	-90
流量 (L/m)	15	25	35
寸法 (mm)	390×175×280		500×175×280
重量 (kg)	3.5	4	7.5
電源	100V 50/60Hz		
電流 (A)	2.1	1.0	1.1
消費電力 (W)	84	76	101
BF 型機器			

●無注油ピストンポンプ方式なので従来の方式より強力な吸引力を得ることができ、保守点検や弁の交換は必要ありません。吸引ボトルはプラスチック製で軽く丈夫で120℃オートクレーブができます。セーフティバルブによりオーバーフローを防止する事ができます。

ウォルトン外科吸引管-M

ステンレス鋼・真鍮製



商品コード	径	全長	価格
08-226-20	12mm	271mm	¥25,000
08-226-21	10mm	271mm	¥25,000
08-226-22	8mm	271mm	¥25,000

●内・外管にステンレス鋼を使用することで、度重なる滅菌においても優れた耐久性を発揮。コントロールレバーに新設計を施し、より高い安全性を実現しました。レバーは着脱ができるため、洗浄が確実に行えます。また手術時の操作性に優れ、親指一本でスムーズに吸引量を調節することができます。

フレイジャー吸引管



商品コード	径	全長	価格
07-112-01	1.0mm	22cm	¥5,000
07-112-02	1.5mm	22cm	¥5,000
07-112-03	2.0mm	22cm	¥5,000
07-112-04	2.5mm	22cm	¥5,000
07-112-05	3.0mm	22cm	¥5,000
07-112-06	3.5mm	22cm	¥5,000
07-112-07	4.0mm	22cm	¥5,000
07-112-08	5.0mm	22cm	¥5,000

●吸引嘴管には側孔があり、この孔を拇指で適当に押えて吸引力を調整することができます。また可撓性のため、好みの角度に曲げて使用できます。

手術台

手術台
周辺機器

无影灯

処置灯

吸引器・吸引管

電気手術器

院内備品

電気手術器

ミズホ電気手術器

MESS-2000

さまざまな手術に対応できる機能と
術者・スタッフの使いやすさに
こだわりました。



表示パネル(術者側)

操作パネル(本体上部:スタッフ側)



出力モード

モノポーラ

切 開	切開	よりシャープな切れ味を求めた出力モードです。
	混合-1	切開に止血効果を混ぜた出力モードです。
	混合-2	弱い止血効果(混合-1)のある切開から、より強い止血効果(混合-3)のある切開の3段階から選択できます。
	混合-3	
	混合-E	混合-3よりさらに止血効果を高めた出力です。 内視鏡(Endoscopic)切開用としてスネアによる組織切開などで効果を発揮します。
凝 固	凝固	標準的な組織凝固モードです。放電により素早い凝固に適しています。
	スプレー凝固	空中放電による凝固出力でより広い範囲を凝固する際に適しています。
	マイルド凝固	電圧を下げてより組織の炭化を抑えた凝固出力です。

バイポーラ

マクロ	組織凝固を強めた出力です。
マイクロ	より微細な範囲を組織凝固する際の出力です。(最大50W) マイクロ手術の際に適したモードです。
IC (インピーダンス・コントロール)	出力をコントロールして組織を熱的に融合させることを目的にしたモードです。“オートストップ”機能と併用することで、あるインピーダンスの数値になったら自動的に出力を停止することができます。

モノポーラ

スプレー凝固・マイルド凝固モードを搭載

用途に合わせた凝固モードが選択できます。

MESS-2000には、通常使われる“凝固”モードの他にも、放電力を高め広い範囲を非接触で止血ができる“スプレー凝固”モード、低電圧で高熱にならずに組織を凝固できる“マイルド凝固”モードの3種類のモードを搭載しました。

“マイルド凝固”モードは組織の炭化や周辺組織への熱影響をより軽減でき、かつ高い止血効果も得られ、肝臓や肺など出血が多く柔らかい組織の切開後の止血に適しています。

■基本仕様




バイポーラ

IC（インピーダンス・コントロール）モードの搭載

インピーダンス・コントロールとは、組織を炭化することなく凝固融合（シーリング）させる機能です。


バイポーラには、“マクロ”モード、“マイクロ”モード、および組織を凝固融合する“IC”モードの3種類のモードを搭載しました。

“IC”モードは、ある条件に制御した低電圧・高電流の電気出力を組織に与えると、凝固部位から水分の蒸発・蒸散が起こり、通電性が低下（抵抗値が上昇）します。この抵抗値の変動をモニタリングすることで、ジェネレーターの出力を最適に調整し、凝固が完了すると自動的に出力を停止します（オートストップ設定時）。また低電圧のため、高熱にならずに凝固融合でき、周辺組織への熱影響をより小さくすることができます。さらに、結紮作業や止血操作の低減も可能です。

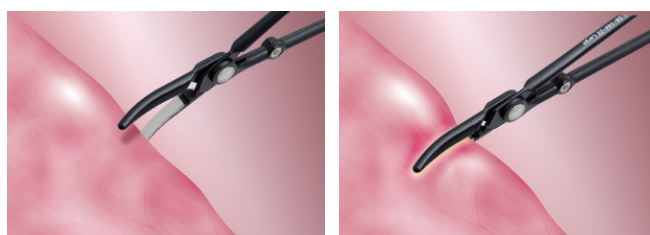

組織の凝固融合・切離のイメージ

※ICモードをご使用の際は、本器専用のデバイスをご利用ください。

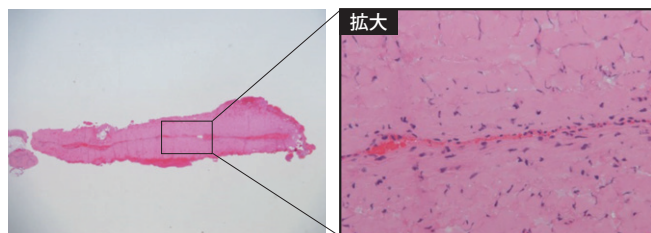

ミニ豚による腹部大動脈（横断）HE染色

商品コード	商品名	価格
08-144-00	①ミズホ電気手術器 MESS-2000	¥3,100,000
08-144-21	②IC専用鉗子カーブSmall	¥210,000
08-144-22	③IC専用鉗子カーブLarge	¥210,000
08-144-23	④IC専用鉗子コード3m	¥38,000
07-785-10	⑤オートクレーブ対応バイポーラコード	¥35,000
08-191-00	⑥バイポーラフットスイッチ	¥32,000
08-144-11	⑦MESS-2000用カート	¥150,000

寸法	D406mm×W384×H177mm
質量	約10kg

電氣的定格	
定格電源電圧	AC100V
定格電源周波数	50-60Hz
電源入力	1000VA
作動モード	非連続作動 (作動時間10秒、休止時間30秒の デューティサイクル25%)

機器の分類 (JIS T 0601-1:2012)	
電撃に対する保護の形式による分類	クラス I 機器
電撃に対する保護の程度による装着部の分類	耐除細動形 CF形装着部

本製品はEMC規格 IEC 60601-2-2：2006に適合

手術台

手術台
周辺機器

無影灯

処置灯

吸引器・吸引管

電気手術器

院内備品

白金双極性止血鑷子

ステンレス鋼・
フッ素樹脂

マイクロサージェリーにさらに適した
バックコーティング付タイプも
全サイズラインナップ。
あらゆる症例において、
ドクターのニーズに的確に対応します。




■バックコーティング付

商品コード	全長	先端巾 W×L	価格
07-781-41	15.0cm	0.5×3.0mm	¥36,000
07-781-42	15.0cm	0.8×3.0mm	¥36,000
07-781-50	17.0cm	0.2×3.0mm	¥36,000
07-781-51	17.0cm	0.5×3.0mm	¥36,000
07-781-52	17.0cm	0.8×3.0mm	¥36,000
07-781-53	17.0cm	2.0×3.0mm	¥36,000
07-781-60	20.0cm	0.2×3.0mm	¥36,000
07-781-61	20.0cm	0.5×3.0mm	¥36,000
07-781-62	20.0cm	0.8×3.0mm	¥36,000
07-781-71	22.5cm	0.5×3.0mm	¥36,000
07-781-72	22.5cm	0.8×3.0mm	¥36,000
07-781-81	12.0cm アドソン型	0.5×3.0mm	¥36,000
07-781-82	12.0cm アドソン型	0.8×3.0mm	¥36,000

■バックコーティング無

商品コード	全長	先端巾 W×L	価格
07-782-41	15.0cm	0.5×5.0mm	¥36,000
07-782-42	15.0cm	0.8×5.0mm	¥36,000
07-782-50	17.0cm	0.2×3.0mm	¥36,000
07-782-51	17.0cm	0.5×5.0mm	¥36,000
07-782-52	17.0cm	0.8×5.0mm	¥36,000
07-782-53	17.0cm	2.0×5.0mm	¥36,000
07-782-60	20.0cm	0.2×3.0mm	¥36,000
07-782-61	20.0cm	0.5×5.0mm	¥36,000
07-782-62	20.0cm	0.8×5.0mm	¥36,000
07-782-71	22.5cm	0.5×5.0mm	¥36,000
07-782-72	22.5cm	0.8×5.0mm	¥36,000
07-782-81	12.0cm アドソン型	0.5×5.0mm	¥36,000
07-782-82	12.0cm アドソン型	0.8×5.0mm	¥36,000

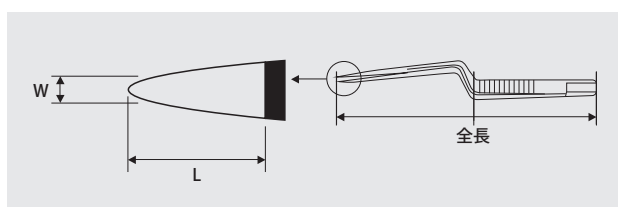


■先端処理の違いによる卵白の凝固実験

■バックコーティング付




■バックコーティング無

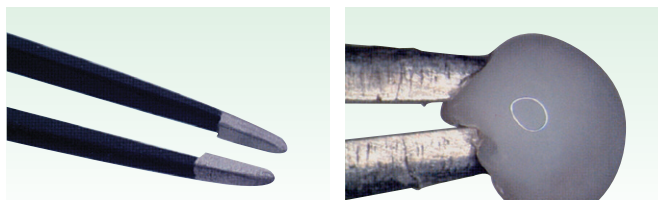

バイポーラ用ピンセットコード

商品コード	仕様	価格
07-785-10	オートクレーブ対応バイポーラコード	¥35,000
07-785-03	バイポーラ用ディスプレイابل ピンセットコード (3m) 5本入	¥20,000

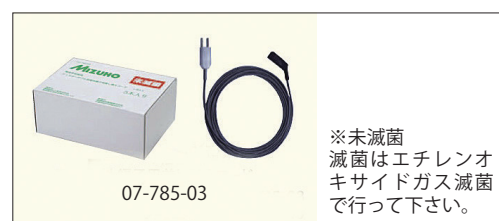

院内備品

ミルクテックス



手術器具のシミ・変色・錆・カジリを防ぎ、耐用年数を延ばします。

商品コード	仕様	価格
08-395-00	4,000cc入	¥6,500

■本質・性状

ミルクテックスSは、精製した軽質流動パラフィン界面活性剤で独特な精製技術により可溶・乳化したものです。


そのため、ミルクテックスS粒子は極めて微粒子状態で水中に可溶・分散されています。

■性能・特長

ミルクテックスSは親水性被膜を形成する軽質流動パラフィンの微粒子を含むので、器具を浸漬処理するとき器具表面に直ちに吸着されると共に、ボックス・ロックや関節部に液が深く浸透します。そのまま高圧蒸気滅菌することにより湿熱が十分浸透しますので、滅菌効果上がり、また滅菌器内で乾燥工程中に乾燥して、器具表面はミルクテックスS薄膜層（その厚さは0.1 μ 程度）で均一被覆されます。

■使用方法

- ①ミルクテックスS「濃厚液」を水（精製水）で10倍希釈します。
- ②十分に洗浄した器具をミルクテックスS希釈液に浸漬します。関節部（可動部）がある器具は、開いた状態で浸漬します。
- ③器具を引上げ十分に液切りをします。器具を水洗いしたり、特別に拭き取る必要はありません。
- ④滅菌工程（高圧蒸気滅菌）または保管します。

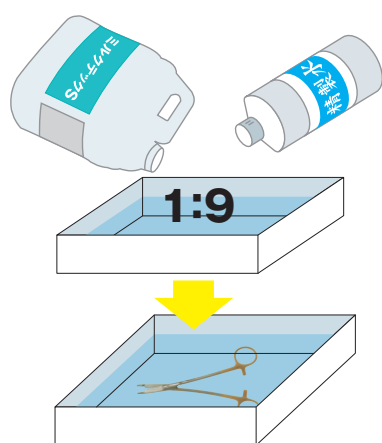

■効果

試験

ミルクテックスS等による潤滑処理が、どの程度の効果があるのかを検証する為に、剪刀と写真のような計測器を使用して、剪刀を閉じる時にかかる力、即ち、金属摩擦値を測定しました。


結果

ミルクテックスSを使用していない剪刀の金属摩擦値はミルクテックスSを使用した剪刀の約3倍。ミルクテックスS等による潤滑処理をしなければ重度の金属摩擦が発生し、器械の機能に悪影響を及ぼすと言えます。



■潤滑効果の検証（剪刀 10本）

ミルクテックスSなし品の
金属摩擦値は、
ミルクテックスS浸漬品の
約3倍！

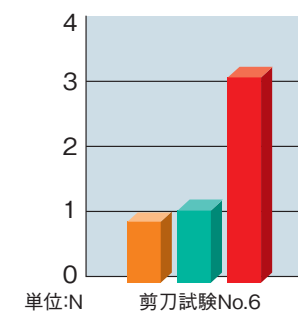

- ミルクテックスS浸漬品
- WD (ミルク噴霧) 品
- ミルクテックスSなし品



ミルクテックスSご使用の際の注意事項

- ご使用前に事前に取扱説明書などをよく読みいただき、内容を正しくご理解された上でご使用下さい。
- ミルクテックスSは目に入ると僅かに刺激があるので、そのような場合はすぐに目を水洗いしてください。
- ミルクテックスSを誤って飲用しないでください。
- ミルクテックスSは、洗剤、殺菌剤ではありません。
- ミルクテックスSは凍結すると融解時、分離を起こすので、冬季あるいは寒冷時は保存にご注意ください（禁凍結）。
- 処理前の洗浄が不十分な場合、斑点として残る事がありますのでご注意ください。

手術台

手術台
周辺機器

无影灯

処置灯

吸引器・吸引管

電気手術器

院内備品

対応滅菌

重力式蒸気滅菌

真空式蒸気滅菌

EOG滅菌

ミニサイズコンテナー（底穴あり）

CD-B シリーズ



商品コード	型番	仕様	価格
08-631-01	CD0-3B	W267×D190×H76mm	¥92,000



■ミニサイズバスケット

商品コード	型番	仕様	価格
08-635-01	BP0-1A	W229×D127×H44mm	¥21,000

クォーターサイズコンテナー（底穴あり）

CD-B シリーズ



商品コード	型番	仕様	価格
08-631-02	CD0-4B	W305×D203×H100mm	¥94,000



■クォーターサイズバスケット

商品コード	型番	仕様	価格
08-636-01	BP0-2V	W279×D178×H50mm	¥24,000

ハーフサイズコンテナー（底穴あり）

CD-B シリーズ



商品コード	型番	仕様	価格
08-631-03	CD1-4B	W305×D279×H100mm	¥95,000
08-631-04	CD1-5B	W305×D279×H127mm	¥97,000
08-631-05	CD1-6B	W305×D279×H152mm	¥100,000



■ハーフサイズバスケット

商品コード	型番	仕様	価格
08-636-02	BP1-2V	W267×D234×H50mm	¥25,000
08-636-03	BP1-3V	W267×D234×H76mm	¥28,000
08-636-04	BP1-4V	W267×D234×H100mm	¥30,000

●バスケットとコンテナーの高さの差は、少なくとも5cmが必要です。

インジケータアロー 蒸気滅菌専用



商品コード	型番	仕様	価格
08-639-03	AS2-2	蒸気用(白) 500本入り	¥15,000
08-639-04	AS2-3	蒸気用(白) 1,000本入り	¥24,000

※湿気がなく涼しい場所に保管してください(湿度50%以下、室温22℃)。

※CD-B・C／CRシリーズ用


フィルターペーパー



商品コード	型番	仕様	入数	価格
08-640-17	DST-1	ミニサイズ用	500枚	¥12,000
08-640-18	DST-2	クォーター／エンドサイズ用	500枚	¥20,000
08-640-19	DST-3	ハーフ／ミッド／フル／レトラクターサイズ用	1000枚	¥25,000

※蒸気・ガス・過酸化水素プラズマ滅菌用


データーカード

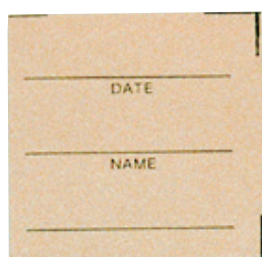

商品コード	型番	仕様	価格
08-641-01	MD1-1	データーカード(500枚入)	¥13,000

※CD-B・C／CRシリーズ用

シリコンパッド

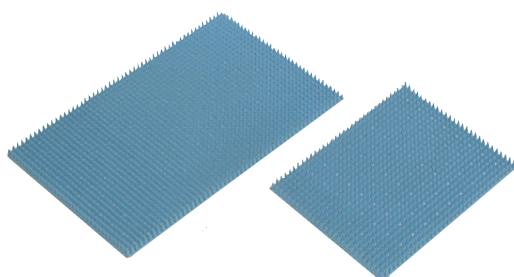

商品コード	型番	仕様	価格
08-644-04	SX2-5	クォーター用 152×254mm	¥12,000
08-644-02	SX2-1	ハーフ用 203×254mm	¥15,000

手術台

手術台
周辺機器

无影灯

処置灯

吸引器・吸引管

電気手術器

院内備品

ホームナース Pet

床ズレを防止し、
リラックス効果のある
ペット用マットです。

丸洗い
OKリサイクル
OK

商品コード	サイズ	仕様	価格
58-089-01	SS	45×45cm	¥5,500
58-089-02	S	60×63cm	¥10,400
58-089-03	M	68×78cm	¥12,800
58-089-04	L	68×100cm	¥15,200
58-089-05	LL	85×120cm	¥20,000

永平寺サイジング株式会社製

×直 お買上金額にかかわらず、配送費をご負担いただきます。
124ページのホームナースペット配送料金表をご参照ください。



ネコ


チワワ、
ヨークシャテリア 等ミニチュアダックスフンド、
トイプードル 等

柴犬、ウェルシュコーギー 等

ゴールデンレトリバー、
ラブラドルレトリバー 等


1 疲れない、ムレにくい、体圧分散型マット

主素材がPTBの立体構造繊維です。マットは、糸のアーチが縦横何層にも重なった構造で、アーチの中は空洞のため、マットの体積のほとんどが空気。だから、サラサラ状態を保ちます。

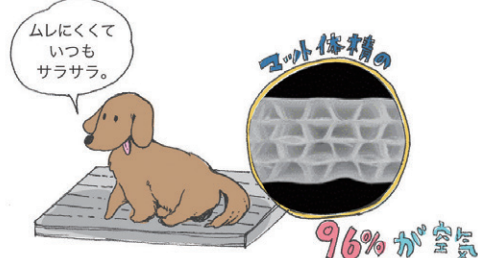


2 夏も冬も、年中使える高機能性マット。

たくさん空気を通るので体温を逃がします。
また、体温で温まった空気を毛布やフリースでくむことで保温性も発揮します。

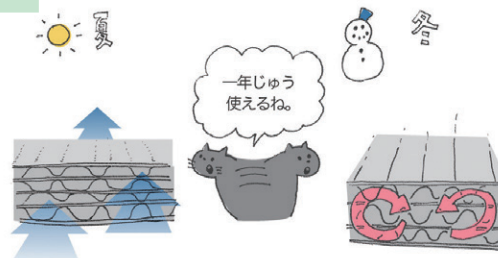

3 耐久性に優れ、マットの効果も長持ち。

ヘタりにくい素材を使用しているので、長時間の使用や洗濯にも強く、毛羽立ってきても効果に変わりはありません。カバー(シーツ、タオル等)をかけてのご使用をおすすめします。カバーはワンちゃんの爪磨き防止にもなり、マットをより長持ちさせます。

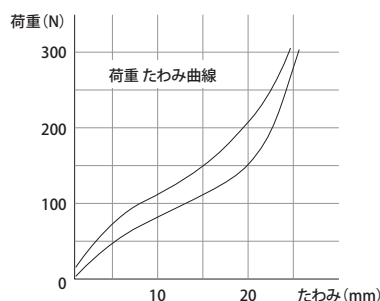

初期厚み 34.6mm
最大荷重 31.9kgf

10万回圧縮

圧縮後
初期厚み 33.2mm
最大荷重 32.2kgf

10万回圧縮しても、
ヘタリ(厚みの変化)は4.1%
クッション性もほとんど変わりません。

4 洗濯ができ、繰り返し使用できます。

汚れが落ちやすく、乾きが速いマットです。
ネットを使えば洗濯機でも洗えます。
お手入れが簡単で繰り返し使用できます。

洗濯機とマットのサイズにより、洗濯槽に入らない場合があります。特にLLサイズは大きいため、手洗いをお勧めします。



5 床ズレを防ぎ、快適な睡眠ができます。

足腰の弱いワンちゃんネコちゃんにとって、硬い床に寝る事は体への負担です。床ズレの恐れもあり、大変危険です。ホームナース petは、体への負担を軽減し、床ズレを防ぎます。



硬い床に長時間寝ることは
床ズレの原因に...



ホームナース pet 使えば、
床ズレの心配がありません！



整形外科用手術器具

Orthopedic Instruments & Implants



トイ・カッタープレートシステム

SA骨接合用内固定システム

小動物用スクリュー

小動物用プレート

プレート用手術器具

鋼線・ワイヤー手術器具

骨鉗子・整復器

剥離子・起子

鋭匙

骨のみ・ハンマー

リーマー

ロンジュール

鉤

インターロッキングネイル

電動ドリル

トイ・カッタブルプレートシステム


Toy Cuttable Plate System

超小型犬の橈骨など骨幅の狭い箇所での骨折において、必要な長さにカットして使用できるカッタブルプレートとスクリューをセットにした超小型インプラントシステムが誕生。




開発協力
動物整形外科病院
樋口雅仁先生




二次診療施設の動物整形外科病院において、骨折依頼症例中、骨折箇所の割合は橈尺骨骨折が最も多く、全体の20.9%を占める(右図)。その橈尺骨骨折は1歳齢前後の若齢犬で特に多く見られた。それらの骨幅は4mmに満たないものが多く、軸径1.5mm未満のスクリュー設置が可能なインプラントシステムの開発が求められた。その要求に応えるシステムがトイ・カッタブルプレートシステムである。

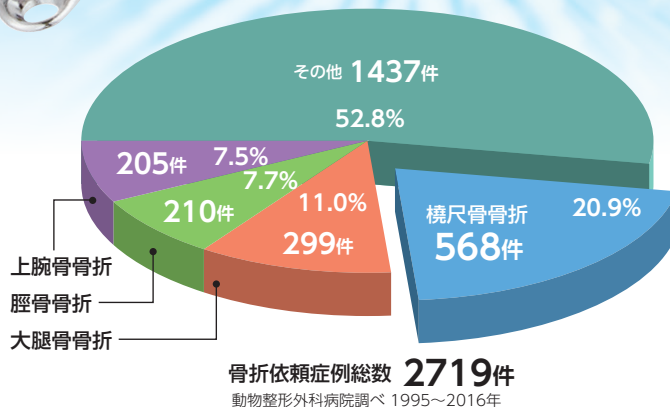

術前

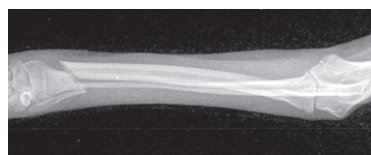


術後

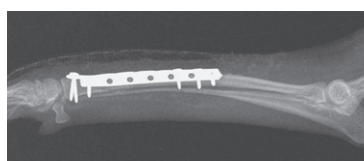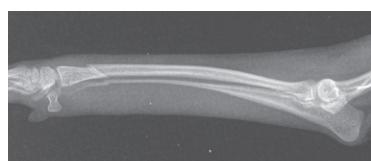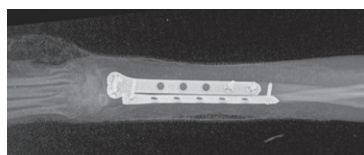

トイプードル2歳1ヶ月♀

カッタブルプレートシステム


ステンレス製

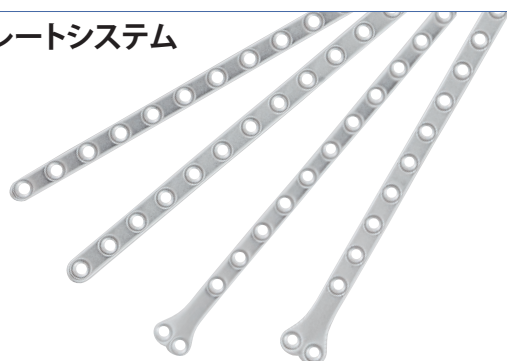

トイ・カッタブルプレートM1.1用、1.3用




T型カッタブルプレートM1.1用、1.3用

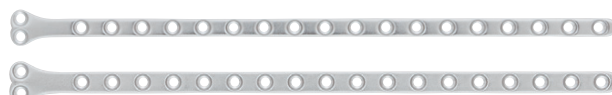

3種の超小型スクリーをラインナップ

M1.1とM1.3の十字ヘッドスクリーとM1.3の六角ヘッドスクリーを新たにラインナップ。超小型ながらも先端部には「セルフタップ機構」を採用しており、容易な操作性を実現します。さらに、十字ヘッドスクリーのヘッド厚を薄くすることで、プレート面との段差を解消。軟部組織への負担も軽減します。

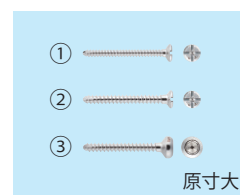

写真上から、
①M1.1十字ヘッドスクリー
②M1.3十字ヘッドスクリー
③M1.3六角ヘッドスクリー


六角スクリーのヘッドサイズを共通化

「M1.3六角ヘッドスクリー」には、従来のM1.5と同規格のヘッド径(3.0mm)を採用。ヘッド規格を共通化することにより、従来の「M1.5スクリー用プレート」を適用した際に、骨幅4.5mm以下になる細い部位に対して「M1.3六角ヘッドスクリー」が併用できます。

注意 ※M1.3六角ヘッドスクリーは、「トイカッタブルプレート」「T型カッタブルプレート」には対応していません。

※M1.3六角ヘッドスクリー対応のプレートは下記の通りです。

- トイラディアルプレート
- ミニラディアルプレート75°曲
- ミニラディアルプレート
- ミニストレートプレート(幅4.5mm、厚さ1.2mm)

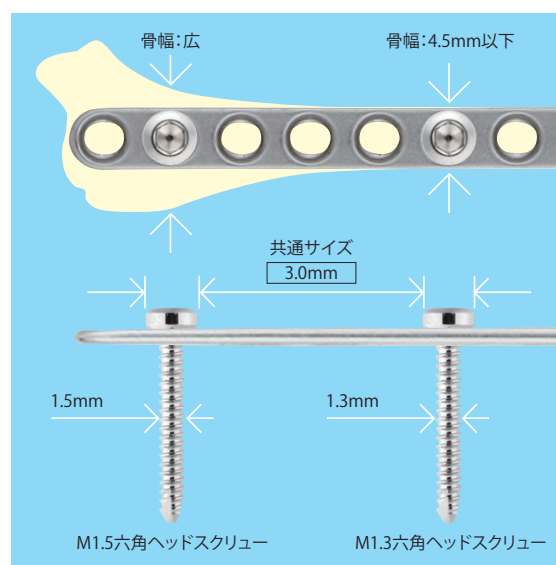

デプスゲージ

「十字ヘッドスクリー」「六角ヘッドスクリー」ではヘッド厚が異なるため、より正確な計測が行えるよう、それぞれ専用のデプスゲージを用意しました。

注意 ※「M1.3六角ヘッドスクリー用デプスゲージ」はセットには含まれておりません。

デプスゲージM1.1、M1.3十字用



デプスゲージM1.3六角、M1.5、M2.0、M2.4用


骨ネジドライバー

外スリーブ

内スリーブ



超小型のスクリーをしっかりとホールドして落下を防ぐために、2段階スリーブを採用。また、後端部にはスクリーの挿入をサポートする回転機構を設けており、3本指(親指、人差し指、中指)での操作性の向上はもちろん、挿入時の軸ブレも軽減します。

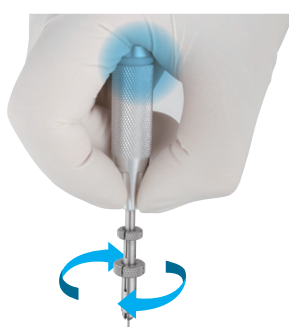

トイカッタブル
プレキシテム

S A骨接合台用
内固定システム

小動物用
スクリー

小動物用
プレート

プレート用
手術器具

鋼線・ワイヤー
手術器具

骨鉗子・
整復器

剥離子・
起子

鋭匙

骨のみ・
ハンマー

リーマー

ロソジュー
ル

鉤

イン
ター
ロ
キ
ン
グ
ネ
イ
ル

電動ドリル

トイ・カッタブルプレートシステムセット

動物用



(M1.1、M1.3十字用)



(M1.3十字用)

トイ・カッタブルプレート



(M1.1、M1.3十字用)




(M1.3十字用)


T型カッタブルプレート




M1.1/M1.3スクリュー用滅菌トレー
※写真は滅菌ケースを使用した場合の収納例です

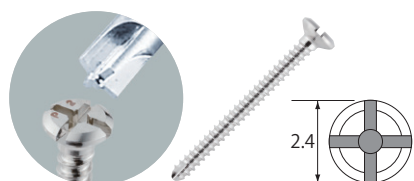

M1.1皮質骨スクリュー
(ヘッド形状:十字・セルフタップ)

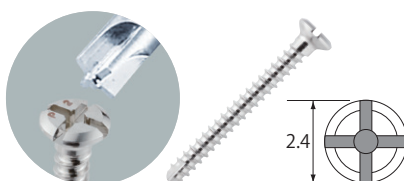

M1.3皮質骨スクリュー
(ヘッド形状:十字・セルフタップ)

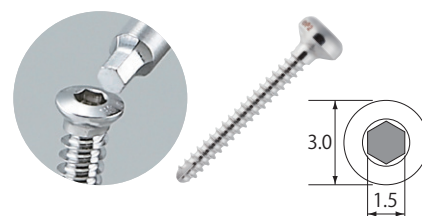

M1.3皮質骨スクリュー
(ヘッド形状:六角・セルフタップ)

価格


¥786,800

■セット明細

商品コード	仕様	セット数	掲載頁
トイ・カッタブルプレート			
51-216-01	1.1用 75×3.0×0.9mm	各2	46頁
51-216-02	1.3用 75×3.5×1.0mm		
T型カッタブルプレート			
51-217-01	1.1用 100×3.0×0.9mm	各2	46頁
51-217-02	1.3用 100×3.5×1.0mm		
皮質骨スクリュー-M1.1 (十字)			
51-111-04	4mm	6	38頁
51-111-05	5mm	各8	
51-111-06	6mm		
51-111-07	7mm		
51-111-08	8mm		
51-111-09	9mm	各6	
51-111-10	10mm		
51-111-11	11mm		
51-111-12	12mm		

商品コード	仕様	セット数	掲載頁
皮質骨スクリューM1.3(十字)			
51-112-04	4mm	6	38頁
51-112-05	5mm	各8	
51-112-06	6mm		
51-112-07	7mm		
51-112-08	8mm		
51-112-09	9mm		
51-112-10	10mm		
51-112-11	11mm	各6	
51-112-12	12mm		
皮質骨スクリューM1.3(六角)			
51-115-05	5mm	各4	38頁
51-115-06	6mm		
51-115-07	7mm		
51-115-08	8mm		
51-115-09	9mm		
51-115-10	10mm		
51-115-11	11mm		
51-115-12	12mm		

商品コード	仕様	セット数	掲載頁
下孔ドリル			
51-300-27	φ 0.8×65mm	各2	53頁
51-300-28	φ 0.9×65mm		
51-300-29	φ 1.0×65mm		
ドリルガイド			
51-300-54	φ 0.8、φ 0.9	各1	54頁
51-300-53	φ 1.0、φ 1.1		
骨ネジドライバー			
51-300-64	M1.1、M1.3十字用	1	55頁
デプスゲージ			
51-300-19	M1.1、M1.3十字用	1	54頁
骨ネジピンセット			
51-300-63	M1.1、M1.3、1.5用	1	54頁
スクリュートレイ			
51-590-95	M1.1、M1.3用 スクリュートレイ	1	37頁

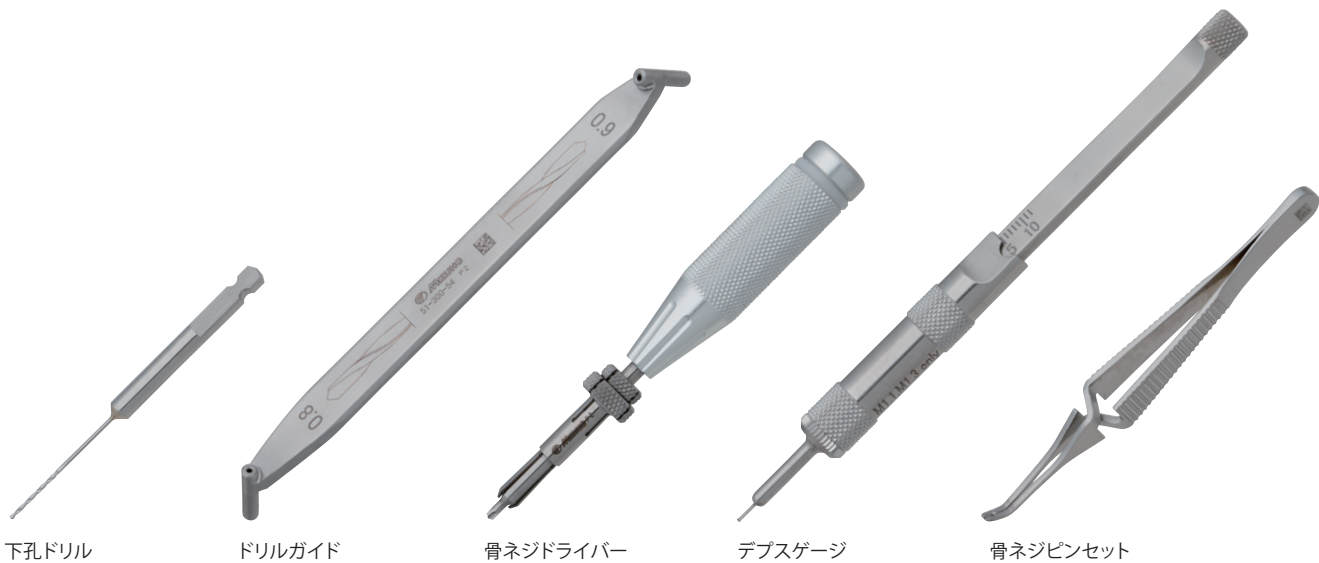

下孔ドリル

ドリルガイド

骨ネジドライバー


デプスゲージ

骨ネジピンセット

■オプション

骨ネジドライバー

動物用

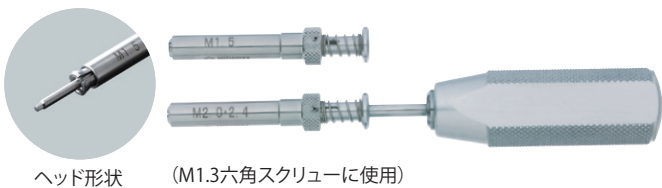

ヘッド形状 (M1.3六角スクリューに使用)

商品コード	仕様	対応スクリュー	価格
51-300-66	M1.5、M2.0、M2.4用 皮質骨スクリュー用	六角専用	¥77,000

デプスゲージ

動物用



(M1.3六角スクリューに使用)

商品コード	仕様	対応スクリュー	価格
51-300-17	M1.3六角、M1.5、M2.0、 M2.4用皮質骨スクリュー用	六角専用	¥48,000

骨ネジドライバー (M1.1、M1.3十字用) の使用方法

- 1 内・外スリーブを引上げた状態で、ドライバー先端をスクリューヘッドに差し込みます。
- 2 内スリーブをトレイの表面に当たるまでしっかりとスライドさせます。※外スリーブも一緒にスライドします
- 3 次に、外スリーブのみスライドさせることで、内スリーブの先端がスクリューヘッドをしっかりとは保持し固定されます。
- 4 ドライバーとともにスクリューをトレイから引き抜きます。





トイカツフル
プレートシステム
S A 骨接合用
内固定システム
小動物用
スクリュー
小動物用
プレート
プレート用
手術器具
鋼線・ワイヤー
手術器具
骨鉗子・
整復器
剥離子・起子
鋭匙
骨のみ・
ハンマー
リーマー
ロンジュール
鉤
インター
ロッキングネール
電動ドリル

TOTAL PLATING SYSTEM

SA骨接合用内固定システム

小動物用スクリースタANDARDセット

動物用

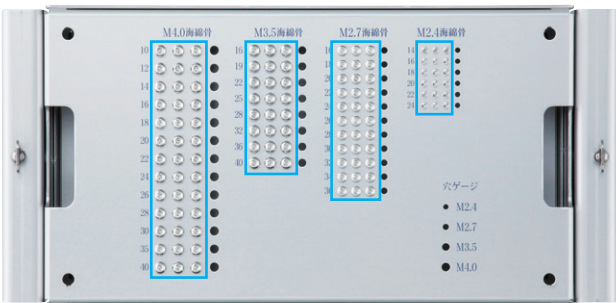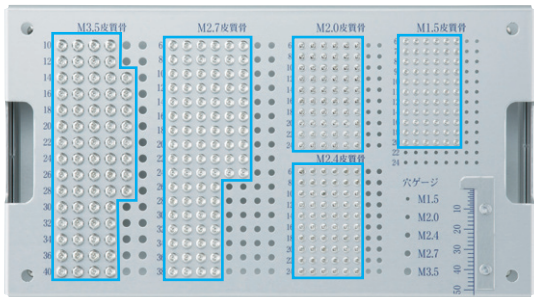

※写真は滅菌ケースを使用した場合の収納例です。

■スクリー用滅菌ケース



価格

¥871,700

■セット明細

商品コード	全長	セット数	掲載頁
皮質骨スクリューM3.5 (六角)			
51-101-10	10mm	各4	39頁
51-101-12	12mm		
51-101-14	14mm		
51-101-16	16mm	各5	
51-101-18	18mm		
51-101-20	20mm		
51-101-22	22mm		
51-101-24	24mm		
51-101-26	26mm		
51-101-28	28mm		
51-101-30	30mm	各4	
51-101-32	32mm		
51-101-34	34mm		
51-101-36	36mm		
51-101-40	40mm		
皮質骨スクリューM2.7 (六角)			
51-102-06	6mm	各6	39頁
51-102-08	8mm		
51-102-10	10mm		
51-102-12	12mm		
51-102-14	14mm		
51-102-16	16mm		
51-102-18	18mm		
51-102-20	20mm		
51-102-22	22mm		
51-102-24	24mm		
51-102-26	26mm	各4	
51-102-28	28mm		


商品コード	全長	セット数	掲載頁
皮質骨スクリューM2.7(六角)			
51-102-30	30mm	各4	39頁
51-102-32	32mm		
51-102-34	34mm		
51-102-36	36mm		
51-102-38	38mm		
皮質骨スクリューM2.4(六角)			
51-113-06	6mm	各6	39頁
51-113-08	8mm		
51-113-10	10mm		
51-113-12	12mm		
51-113-14	14mm		
51-113-16	16mm		
51-113-18	18mm		
51-113-20	20mm		
51-113-22	22mm		
51-113-24	24mm		
皮質骨スクリューM2.0(六角)			
51-114-06	6mm	各6	38頁
51-114-08	8mm		
51-114-10	10mm		
51-114-12	12mm		
51-114-14	14mm		
51-114-16	16mm		
51-114-18	18mm		
51-114-20	20mm		
51-114-22	22mm		
51-114-24	24mm		

商品コード	全長	セット数	掲載頁
皮質骨スクリューM1.5(六角)			
51-110-06	6mm	各6	38頁
51-110-07	7mm		
51-110-08	8mm		
51-110-09	9mm		
51-110-10	10mm		
51-110-11	11mm		
51-110-12	12mm		
51-110-14	14mm		
51-110-16	16mm		
51-110-18	18mm		
51-110-20	20mm		
海綿骨スクリューM4.0(六角・全ネジ)			
51-105-10	10mm	各3	41頁
51-105-12	12mm		
51-105-14	14mm		
51-105-16	16mm		
51-105-18	18mm		
51-105-20	20mm		
51-105-22	22mm		
51-105-24	24mm		
51-105-26	26mm		
51-105-28	28mm		
51-105-30	30mm		
51-105-35	35mm		
51-105-40	40mm		
海綿骨スクリューM3.5(六角・全ネジ)			
51-116-16	16mm	各3	41頁
51-116-19	19mm		
51-116-22	22mm		

商品コード	全長	セット数	掲載頁
海綿骨スクリューM3.5(六角・全ネジ)			
51-116-25	25mm	各3	41頁
51-116-28	28mm		
51-116-32	32mm		
51-116-36	36mm		
51-116-40	40mm		
海綿骨スクリューM2.7(六角・全ネジ)			
51-117-16	16mm	各3	41頁
51-117-18	18mm		
51-117-20	20mm		
51-117-22	22mm		
51-117-24	24mm		
51-117-26	26mm		
51-117-28	28mm		
51-117-30	30mm		
51-117-32	32mm		
51-117-34	34mm		
51-117-36	36mm		
海綿骨スクリューM2.4(六角・全ネジ)			
51-118-14	14mm	各3	41頁
51-118-16	16mm		
51-118-18	18mm		
51-118-20	20mm		
51-118-22	22mm		
51-118-24	24mm		
スクリー用滅菌ケース			
51-590-60	-	1	37頁


小動物用プレートスタンダードセット

動物用

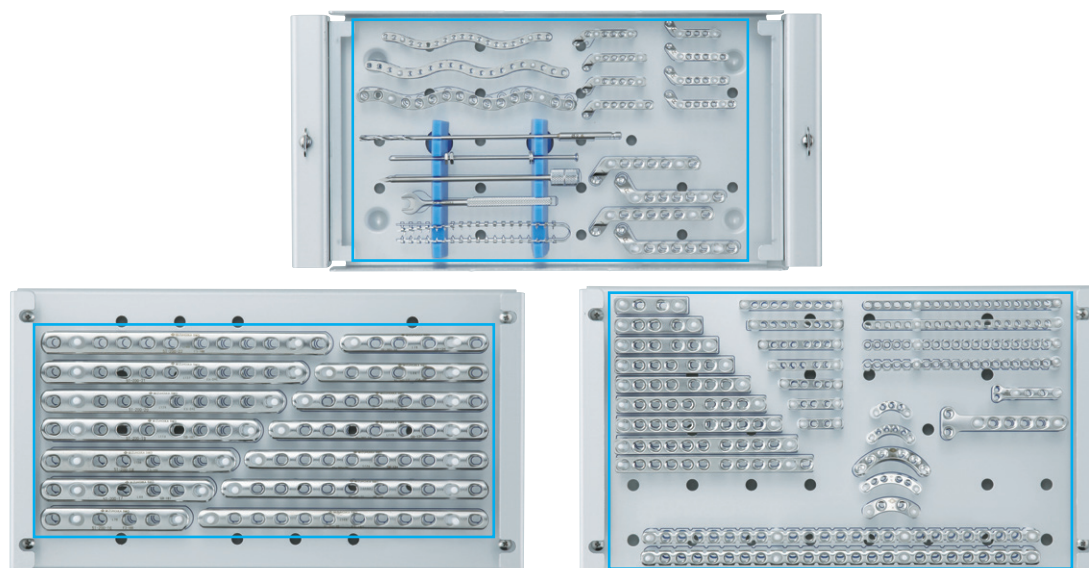

※写真は滅菌ケースを使用した場合の収納例です。

■プレート用滅菌ケース

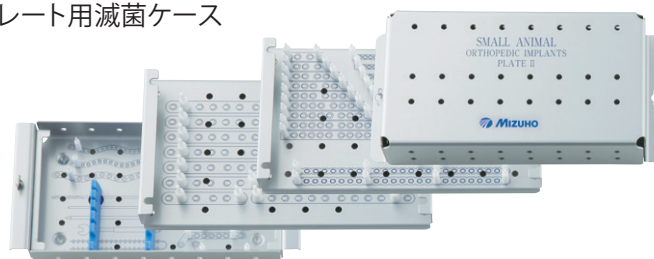

価格

¥706,200

■セット明細

商品コード	仕様	セット数	掲載頁
ブロードプレートⅡ			
51-200-16	6穴	各1	49頁
51-200-17	7穴		
51-200-18	8穴		
51-200-19	9穴		
51-200-20	10穴		
51-200-21	11穴		
51-200-22	12穴		
ナロープレートⅡ			
51-201-16	6穴	各1	49頁
51-201-17	7穴		
51-201-18	8穴		
51-201-19	9穴		
51-201-20	10穴		
51-201-21	11穴		
51-201-22	12穴		
スモールプレートⅡ			
51-202-14	4穴	各1	49頁
51-202-15	5穴		
51-202-16	6穴		
51-202-17	7穴		
51-202-18	8穴		
51-202-19	9穴		
51-202-20	10穴		
51-202-21	11穴		
51-202-22	12穴		
ミニプレートⅡ			
51-203-24	4穴	各1	48頁
51-203-25	5穴		

商品コード	仕様	セット数	掲載頁
ミニプレートⅡ			
51-203-26	6穴	各1	48頁
51-203-27	7穴		
51-203-28	8穴		
51-203-29	9穴		
51-203-30	10穴		
リコンストラクションプレート			
51-204-01	200×6.0×2.0mm	各1	47頁
51-204-02	200×8.0×2.7mm		
リコンストラクションプレートミニ			
51-204-03	100×5.0×1.5mm	各1	47頁
51-204-04	100×5.0×2.5mm		
ミニストレートプレート			
51-205-01	100×5.0×1.5mm	各1	46頁
51-205-02	100×4.5×1.2mm		
スモールT型プレート			
51-206-12	63×8.0×2.0mm	1	47頁
ミニT型プレート			
51-206-01	35×5.0×1.5mm	1	47頁
白蓋プレート			
51-207-01	20×4.5×1.5mm	各1	50頁
51-207-02	24×5.0×1.5mm		
51-207-03	39×7.0×2.0mm		
51-207-04	29×7.0×2.0mm		
51-207-05	フラット6穴		
スモールスネークプレート			
51-209-01	130×7.0×2.0mm	1	50頁
ミニスネークプレート			
51-210-01	120×6.0×1.5mm	1	50頁

商品コード	仕様	セット数	掲載頁
ミニスネークプレート			
51-210-02	100×5.0×1.5	1	50頁
スモールラディアルプレート			
51-211-08	左 66×7.0×2.0mm	各1	44頁
51-211-09	左 74×7.0×2.0mm		
51-211-18	右 66×7.0×2.0mm	各1	45頁
51-211-19	右 74×7.0×2.0mm		
ミニラディアルプレート			
51-212-07	左 38×5.0×1.5mm	各1	44頁
51-212-08	左 43×5.0×1.5mm		
51-212-17	右 38×5.0×1.5mm	各1	45頁
51-212-18	右 43×5.0×1.5mm		
51-213-06	左 33×4.5×1.2mm	各1	44頁
51-213-07	左 38×4.5×1.2mm		
51-213-16	右 33×4.5×1.2mm	各1	45頁
51-213-17	右 38×4.5×1.2mm		
ロングボルト			
51-140-01	φ2.6×112mm	1	51頁
ロングボルト用ガイド			
41-140-31	114mm	1	51頁
ロングボルト用スパナ			
51-140-32	90mm	1	51頁
ロングボルト用ドリル			
51-140-33	φ2.6×155mm	1	51頁
アリゲータープレート			
51-208-01	10cm	1	50頁
プレート用滅菌ケース			
51-590-70	W309×D152×H100mm	1	37頁

トイ・カットフル
プレートシステム
内固定システム

小動物用
スクリュー

小動物用
プレート

プレート用
手術器具

鋼線・ワイヤー
手術器具

骨癒子・
整復器

剥離子・起子

鋭匙

骨のみ・
ハンマー

リーマー


ロングジュール

鉤

ロッキングネール
インター


電動ドリル

インストゥルメントスタンダードセット

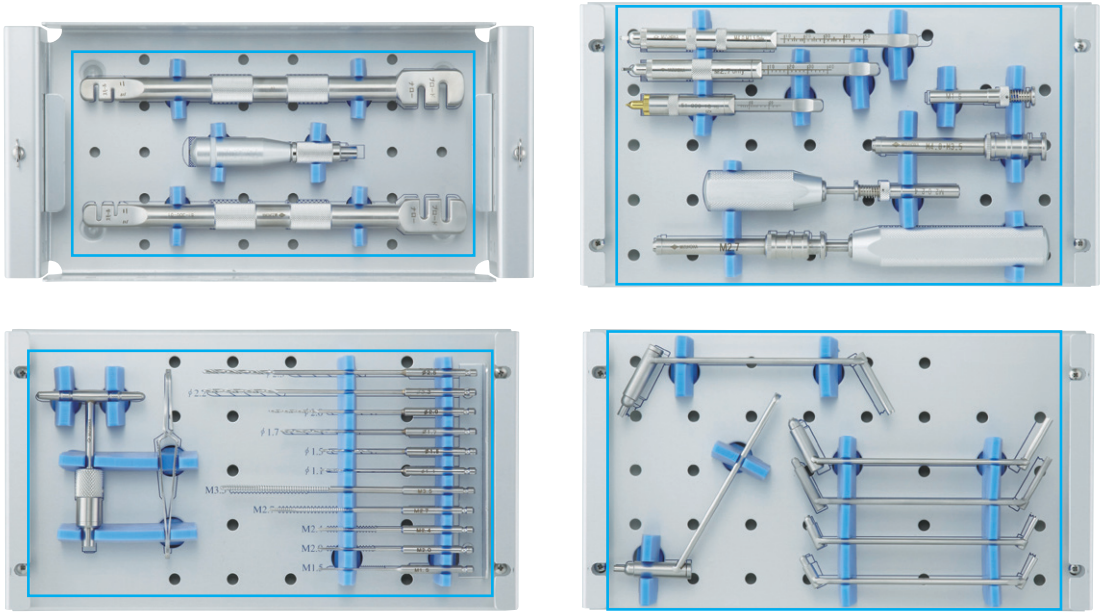

※写真は滅菌ケースを使用した場合の収納例です。

■インストゥルメント用滅菌ケース

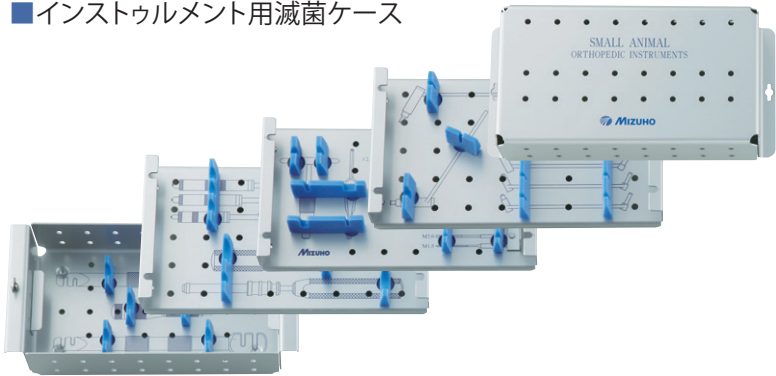

価格

¥861,800

■セット明細

商品コード	仕様	セット数	掲載頁
プレートベンダー			
51-300-01	23cm	2	52頁
下孔ドリル			
51-300-33	φ 1.1× 80mm	各1	53頁
51-300-30	φ 1.5× 80mm		
51-300-05	φ 1.7×100mm		
01-983-21	φ 2.0×110mm		
51-300-07	φ 2.2×140mm		
01-983-26	φ 2.5×140mm		
骨ネジタップ			
51-300-38	M1.5用	各1	53頁
51-300-36	M2.0用		
51-300-24	M2.4用		
51-300-37	M2.7用		
01-982-35	M3.5用		

商品コード	仕様	セット数	掲載頁
ドリルガイド			
51-300-52	タップM1.5・ドリルφ1.1	各1	54頁
51-300-50	タップM2.0・ドリルφ1.5		
51-300-12	タップM2.4・ドリルφ1.7		
51-300-51	タップM2.7・ドリルφ2.0		
51-300-14	ドリルφ2.2		
01-983-05	タップM3.5・ドリルφ2.5		
デプスゲージ			
51-300-17	M1.3六角、1.5、2.0、2.4用	各1	54頁
51-300-60	M2.7用		
51-300-20	M3.5、4.0用		
マルチハンドル			
51-300-04	10cm	1	53頁

商品コード	仕様	セット数	掲載頁
ワンタッチハンドル			
01-981-04	8cm	1	53頁
骨ネジ用ピンセット			
01-983-40	9.7cm	1	54頁
骨ネジドライバー			
51-300-66	M1.5、2.0、2.4用スリーブ付	各1	55頁
01-981-02	M2.7、3.5、4.0用スリーブ付		
インストゥルメント用滅菌ケース			
51-590-80	W309×D152×H135mm	1	37頁

小動物用スクリューベーシックセット

動物用



※写真は滅菌ケースを使用した場合の収納例です。

■スクリュー用滅菌ケース



価格

¥494,000

■セット明細

商品コード	全長	セット数	掲載頁
皮質骨スクリューM2.7(六角)			
51-102-06	6mm	各6	39頁
51-102-08	8mm		
51-102-10	10mm		
51-102-12	12mm		
51-102-14	14mm		
51-102-16	16mm		
51-102-18	18mm		
51-102-20	20mm		
51-102-22	22mm		
51-102-24	24mm		
皮質骨スクリューM2.4(六角)			
51-113-06	6mm	各6	39頁
51-113-08	8mm		
51-113-10	10mm		
51-113-12	12mm		

商品コード	全長	セット数	掲載頁
皮質骨スクリューM2.4(六角)			
51-113-14	14mm	各6	39頁
51-113-16	16mm		
51-113-18	18mm		
51-113-20	20mm		
皮質骨スクリューM2.0(六角)			
51-114-06	6mm	各6	38頁
51-114-08	8mm		
51-114-10	10mm		
51-114-12	12mm		
51-114-14	14mm		
51-114-16	16mm		
51-114-18	18mm		
51-114-20	20mm		




商品コード	全長	セット数	掲載頁
皮質骨スクリューM1.5(六角)			
51-110-06	6mm	各5	38頁
51-110-07	7mm		
51-110-08	8mm		
51-110-09	9mm		
51-110-10	10mm		
51-110-11	11mm	各4	
51-110-12	12mm		
51-110-14	14mm		
51-110-16	16mm		
51-110-18	18mm		
51-110-20	20mm		
海綿骨スクリューM2.7(六角・全ネジ)			
51-117-16	16mm	各2	41頁
51-117-18	18mm		
51-117-20	20mm		
51-117-22	22mm		
51-117-24	24mm		
51-117-26	26mm		
51-117-28	28mm		

商品コード	全長	セット数	掲載頁
海綿骨スクリューM2.7(六角・全ネジ)			
51-117-30	30mm	各2	41頁
51-117-32	32mm		
51-117-34	34mm		
51-117-36	36mm		
海綿骨スクリューM2.4(六角・全ネジ)			
51-118-14	14mm	各2	41頁
51-118-16	16mm		
51-118-18	18mm		
51-118-20	20mm		
51-118-22	22mm		
51-118-24	24mm		
スクリュー用滅菌ケース			
51-590-60	——	1	37頁

トイカツフル
プレートシステム
内固定システム
小動物用
プレート
手術器具
鋼線・ワイヤー
手術器具
骨
整復器
剥離子・起子
鋭匙
骨のみ・
ハンマー
リーマー
ロソジュール
鉤
ロッキング
イン
グネイル
電動ドリル


小動物用プレートベーシックセット

動物用

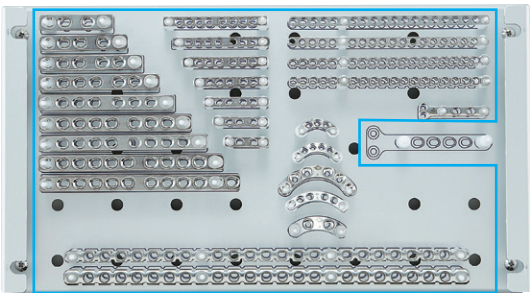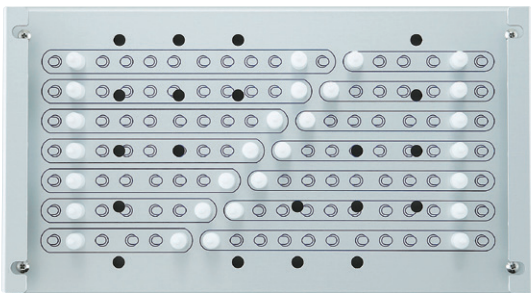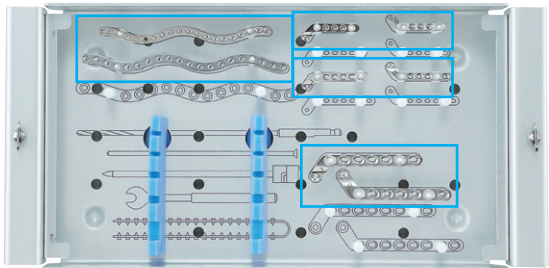

※写真は滅菌ケースを使用した場合の収納例です。

■プレート用滅菌ケース

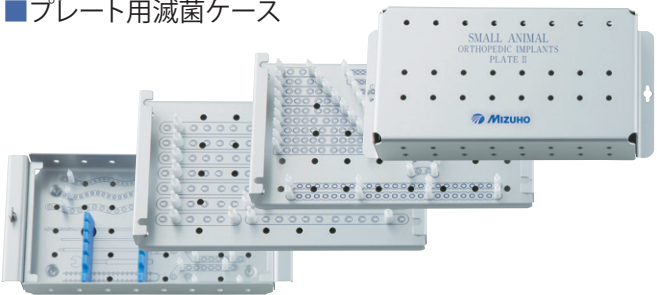

価格

¥413,300


■セット明細

商品コード	仕様	セット数	掲載頁
スモールプレート II			
51-202-14	4穴	各1	49頁
51-202-15	5穴		
51-202-16	6穴		
51-202-17	7穴		
51-202-18	8穴		
51-202-19	9穴		
51-202-20	10穴		
51-202-21	11穴		
51-202-22	12穴		
ミニプレート II			
51-203-24	4穴	各1	48頁
51-203-25	5穴		
51-203-26	6穴		
51-203-27	7穴		
51-203-28	8穴		
51-203-29	9穴		
51-203-30	10穴		

商品コード	仕様	セット数	掲載頁
リコンストラクションプレート			
51-204-01	200×6.0×2.0mm	各1	47頁
51-204-02	200×8.0×2.7mm		
リコンストラクションプレートミニ			
51-204-03	100×5.0×1.5mm	各1	47頁
51-204-04	100×5.0×2.5mm		
ミニストレートプレート			
51-205-01	100×5.0×1.5mm	各1	46頁
51-205-02	100×4.5×1.2mm		
ミニT型プレート			
51-206-01	35×5.0×1.5mm	1	47頁
白蓋プレート			
51-207-01	20×4.5×1.5mm	各1	50頁
51-207-02	24×5.0×1.5mm		
51-207-03	39×7.0×2.0mm		
51-207-04	29×7.0×2.0mm		
51-207-05	フラット6穴		


商品コード	仕様	セット数	掲載頁
ミニスネークプレート			
51-210-01	120×6.0×1.5mm	各1	50頁
51-210-02	100×5.0×1.5mm		
スモールラディアルプレート			
51-211-08	左 66×7.0×2.0mm	1	44頁
51-211-18	右 66×7.0×2.0mm	1	45頁
ミニラディアルプレート			
51-212-07	左 38×5.0×1.5mm	1	44頁
51-212-17	右 38×5.0×1.5mm	1	45頁
51-213-06	左 33×4.5×1.2mm	1	44頁
51-213-16	右 33×4.5×1.2mm	1	45頁
プレート用滅菌ケース			
51-590-70	W309×D152×H100mm	1	37頁

インストゥルメントベーシックセット

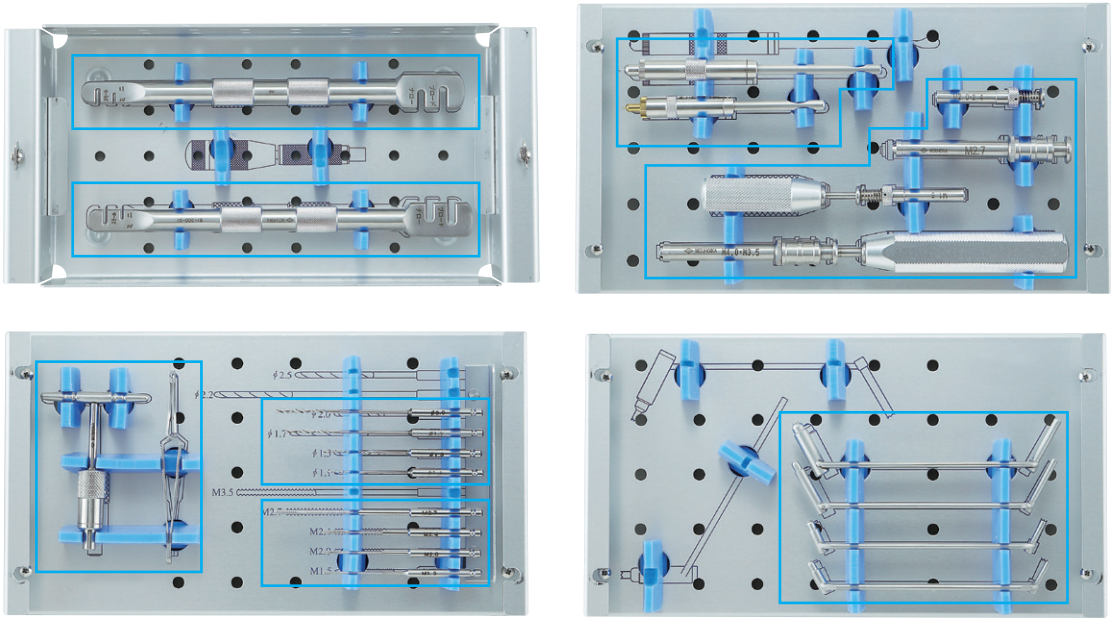

※写真は滅菌ケースを使用した場合の収納例です。

■インストゥルメント用滅菌ケース

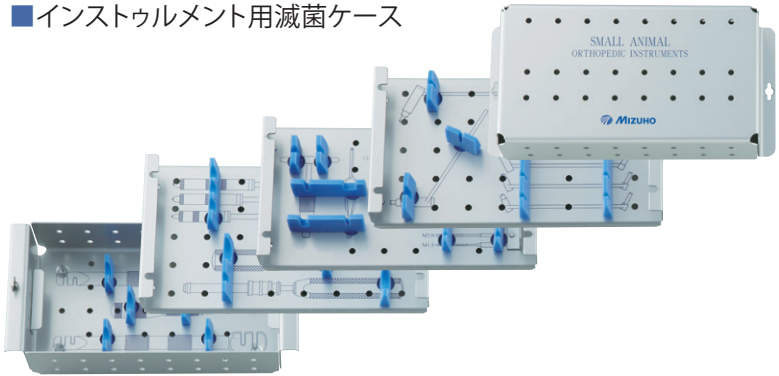

価格

¥686,300

■セット明細

商品コード	仕様	セット数	掲載頁
プレートベンダー			
51-300-01	23cm	2	52頁
下孔ドリル			
51-300-33	φ 1.1× 80mm	各1	53頁
51-300-30	φ 1.5× 80mm		
51-300-05	φ 1.7×100mm		
01-983-21	φ 2.0×110mm		
骨ネジタップ			
51-300-38	M1.5用	各1	53頁
51-300-36	M2.0用		
51-300-24	M2.4用		
51-300-37	M2.7用		

商品コード	仕様	セット数	掲載頁
ドリルガイド			
51-300-52	タップM1.5・ドリルφ1.1	各1	54頁
51-300-50	タップM2.0・ドリルφ1.5		
51-300-12	タップM2.4・ドリルφ1.7		
51-300-51	タップM2.7・ドリルφ2.0		
デブスゲージ			
51-300-17	M1.3六角、1.5、2.0、2.4用	各1	54頁
51-300-60	M2.7用		
ワンタッチハンドル			
01-981-04	8cm	1	53頁
骨ネジ用ピンセット			
01-983-40	9.7cm	1	54頁

商品コード	仕様	セット数	掲載頁
骨ネジドライバー			
51-300-66	M1.5、2.0、2.4用スリーブ付	各1	55頁
01-981-02	M2.7、3.5、4.0用スリーブ付		
インストゥルメント用滅菌ケース			
51-590-80	W309×D152×H135mm	1	37頁

トイ・カッター
プレートシステム
S A骨接合器具
内固定システム

小動物用
スクリュー

小動物用
プレート

プレート用
手術器具

鋼線・ワイヤー
手術器具

骨鉗子・
整復器

剥離子・起子

鋭匙

骨のみ・
ハンマー

リーマー

ロソジュー
ール



鉤

イン
ター
キ
ン
グ
ネ
イ
ル

電動ドリル

小動物用スクリューミニセット

動物用

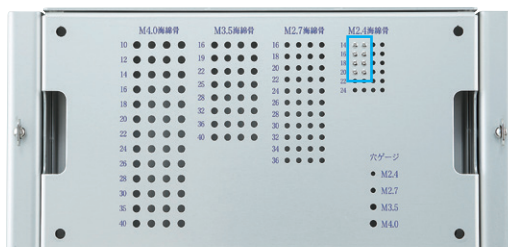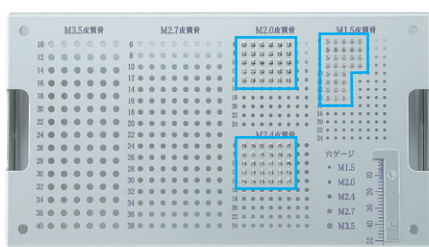

※写真は滅菌ケースを使用した場合の収納例です。

■スクリュー用滅菌ケース



価格




¥251,500

■セット明細

商品コード	全長	セット数	掲載頁	商品コード	全長	セット数	掲載頁	商品コード	全長	セット数	掲載頁	商品コード	全長	セット数	掲載頁
皮質骨スクリューM2.4(六角)				皮質骨スクリューM2.0(六角)				皮質骨スクリューM1.5(六角)				海綿骨スクリューM2.4(六角・全ネジ)			
51-113-06	6mm	各6	39頁	51-114-06	6mm	各6	38頁	51-110-06	6mm	各5	38頁	51-118-14	14mm	各2	41頁
51-113-08	8mm			51-114-08	8mm			51-110-07	7mm			51-118-16	16mm		
51-113-10	10mm			51-114-10	10mm			51-110-08	8mm			51-118-18	18mm		
51-113-12	12mm			51-114-12	12mm			51-110-09	9mm			51-118-20	20mm		
51-113-14	14mm			51-114-14	14mm			51-110-10	10mm	各3		スクリュー用滅菌ケース			
				51-110-11	11mm	51-590-60	――	1	37頁						
				51-110-12	12mm										
								51-110-14	14mm						

小動物用プレートミニセット

動物用

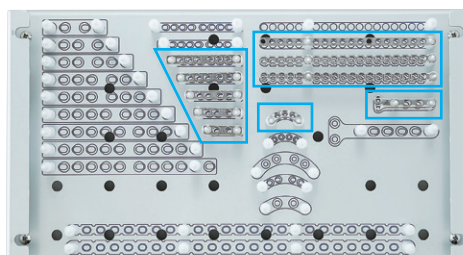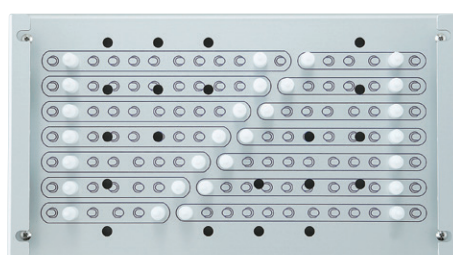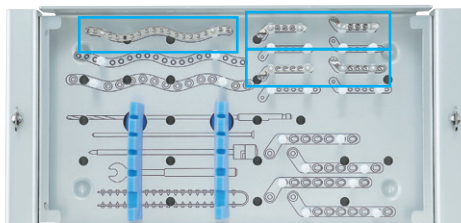

※写真は滅菌ケースを使用した場合の収納例です。

■プレート用滅菌ケース




価格

¥251,600


■セット明細

商品コード	仕様	セット数	掲載頁	商品コード	仕様	セット数	掲載頁	商品コード	仕様	セット数	掲載頁
ミニプレート II				ミニストレートプレート				ミニラディアルプレート			
51-203-24	4穴	各1	48頁	51-205-02	100×4.5×1.2mm	1	46頁	51-212-07	左 38×5.0×1.5mm	1	44頁
51-203-25	5穴			ミニT型プレート				51-212-17	右 38×5.0×1.5mm	1	45頁
51-203-26	6穴			51-206-01	35×5.0×1.5mm	1	47頁	51-213-06	左 33×4.5×1.2mm	1	44頁
51-203-27	7穴			白蓋プレート				51-213-16	右 33×4.5×1.2mm	1	45頁
51-203-28	8穴			51-207-01	20×4.5×1.5mm	1	50頁	プレート用滅菌ケース			
リコンストラクションプレートミニ				ミニスネークプレート				51-590-70	W309×D152×H100mm	1	37頁
51-204-03	100×5.0×1.5mm	各1	47頁	51-210-02	100×5.0×1.5mm	1	50頁				
51-204-04	100×5.0×2.5mm										

インストゥルメントミニセット

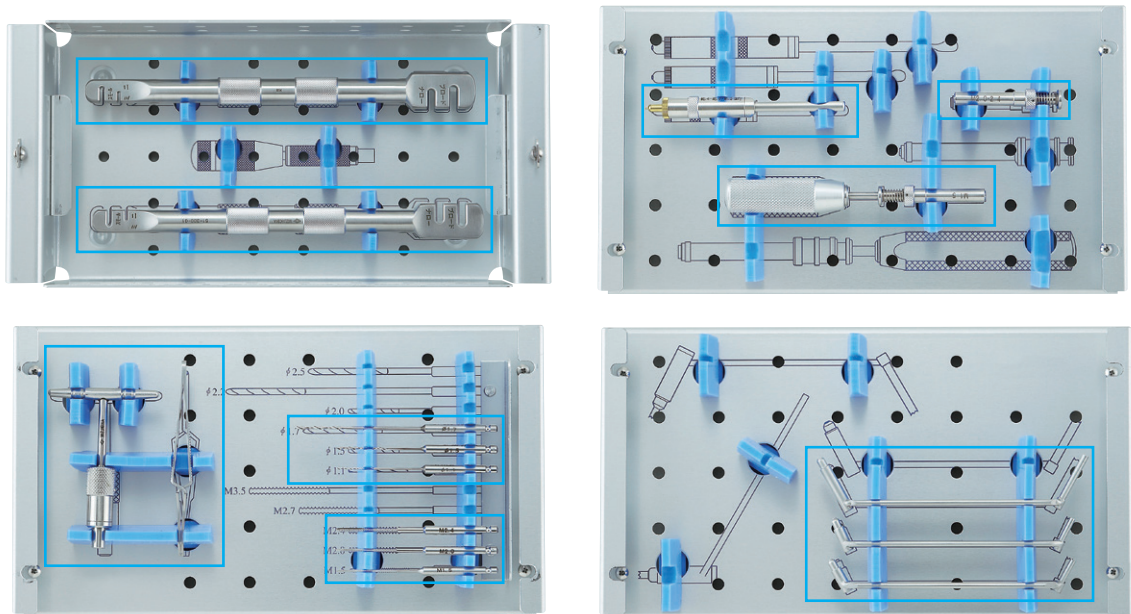

■インストゥルメント用滅菌ケース

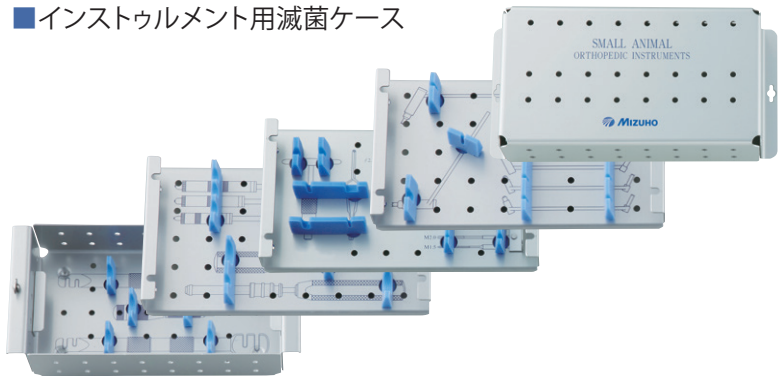

価格

¥514,000

※写真は滅菌ケースを使用した場合の収納例です。

■セット明細

商品コード	仕様	セット数	掲載頁
プレートベンダー			
51-300-01	23cm	2	52頁
下孔ドリル			
51-300-33	φ 1.1× 80mm	各1	53頁
51-300-30	φ 1.5× 80mm		
51-300-05	φ 1.7×100mm		
骨ネジタップ			
51-300-38	M1.5用	各1	53頁
51-300-36	M2.0用		
51-300-24	M2.4用		

商品コード	仕様	セット数	掲載頁
ドリルガイド			
51-300-52	タップM1.5・ドリルφ1.1	各1	54頁
51-300-50	タップM2.0・ドリルφ1.5		
51-300-12	タップM2.4・ドリルφ1.7		
デプスゲージ			
51-300-17	M1.3六角1.5、2.0、2.4用	1	54頁
ワンタッチハンドル			
01-981-04	8cm	1	53頁
骨ネジ用ピンセット			
01-983-40	9.7cm	1	54頁

商品コード	仕様	セット数	掲載頁
骨ネジドライバ			
51-300-66	M1.5、2.0、2.4用スリーブ付	1	55頁
インストゥルメント用滅菌ケース			
51-590-80	W309×D152×H135mm	1	37頁

トイ・カッター
プレートシステム
S A骨接合器用
内固定システム

小動物用
スクリュー

小動物用
プレート

プレート用
手術器具

鋼線・ワイヤー
手術器具

骨鉗子・
整復器

剥離子・起子

鋭匙

骨のみ・
ハンマー

リーマー

ロソジュール


鉤

インター
ロッキング
ネイル

電動ドリル

小動物用M1.5スクリューセット

動物用

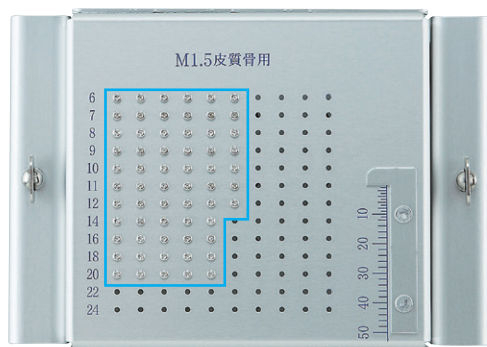

M1.5スクリュー用滅菌ケース



価格

¥142,900

セット明細

商品コード	全長	セット数	掲載頁
皮質スクリューM1.5(六角)			
51-110-06	6mm	各6	38頁
51-110-07	7mm		
51-110-08	8mm		
51-110-09	9mm		
51-110-10	10mm		
51-110-11	11mm		
51-110-12	12mm	各5	
51-110-14	14mm		
51-110-16	16mm		
51-110-18	18mm		
51-110-20	20mm		
M1.5スクリュー用滅菌ケース			
51-590-90	W170×D120×H67mm	1	37頁

M1.5用インストゥルメントセット

動物用



価格

¥120,700

セット明細

商品コード	仕様	セット数	掲載頁
下孔ドリル			
51-300-33	φ1.1×80mm	1	53頁
骨ネジタップ			
51-300-38	M1.5用	1	53頁
ドリルガイド			
51-300-52	タップM1.5・ドリルφ1.1	1	54頁
骨ネジドライバー			
51-300-66	M1.5, 2.0, 2.4用スリーブ付	1	55頁

スクリュー用滅菌ケース



商品コード	仕様	価格
51-590-60	W309×D152×H120mm	¥80,000
収納スクリュー	M1.5皮質骨スクリュー M2.4海綿骨スクリュー M2.0皮質骨スクリュー M2.7海綿骨スクリュー M2.4皮質骨スクリュー M3.5海綿骨スクリュー M2.7皮質骨スクリュー M4.0海綿骨スクリュー M3.5皮質骨スクリュー	


プレート用滅菌ケース



商品コード	仕様	価格
51-590-70	W309×D152×H100mm	¥140,000

※P.29掲載の小動物プレートスタンダードセット内のプレートが収納できます。
※トイラディアルプレート、トイ・カッタブルプレートシステムの収納には対応していません

インストゥルメント用滅菌ケース

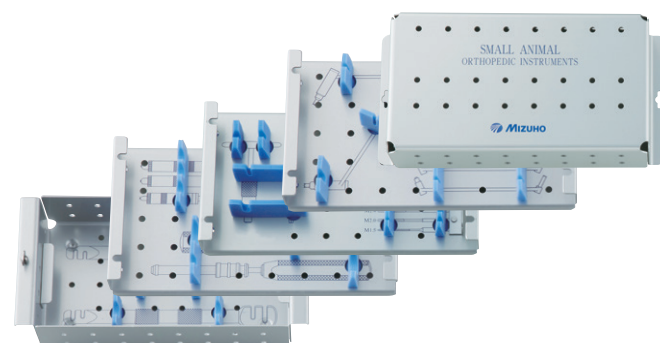

商品コード	仕様	価格
51-590-80	W309×D152×H135mm	¥132,000

※トイ・カッタブルプレートシステムの収納には対応していません

M1.5スクリュー用滅菌ケース



商品コード	仕様	価格
51-590-90	W170×D120×H67mm	¥35,000
収納スクリュー	M1.5皮質骨スクリュー	

M1.1・1.3用スクリュートレイ



※写真はスクリューをセットした場合です。

商品コード	仕様	価格
51-590-95	W137×D75×H38mm	¥60,000
収納スクリュー	M1.1皮質骨スクリュー M1.3皮質骨スクリュー 十字 M1.3皮質骨スクリュー 六角	

トイ・カッタブル
プレートシステム

S/A骨接合台用
内固定システム

小動物用
プレート

小動物用
手術器具

鋼線・ワイヤー
手術器具

骨鉗子・
整復器

剥離子・起子

鋭匙

骨のみ・
ハンマー

リーマー

ロングジュール

鉤

インター
ロッキングネール

電動ドリル


小動物用スクリュー

皮質骨スクリュー (全ネジタイプ・セルフタップ)

動物用

ステンレス鋼製


M1.1 皮質骨スクリュー

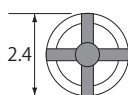

商品コード	全長 (L)	価格
51-111-04	4mm	¥2,400
51-111-05	5mm	¥2,400
51-111-06	6mm	¥2,400
51-111-07	7mm	¥2,400
51-111-08	8mm	¥2,400

商品コード	全長 (L)	価格
51-111-09	9mm	¥2,500
51-111-10	10mm	¥2,500
51-111-11	11mm	¥2,500
51-111-12	12mm	¥2,500


M1.3 皮質骨スクリュー

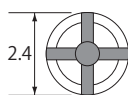

商品コード	全長 (L)	価格
51-112-04	4mm	¥2,400
51-112-05	5mm	¥2,400
51-112-06	6mm	¥2,400
51-112-07	7mm	¥2,400
51-112-08	8mm	¥2,400

商品コード	全長 (L)	価格
51-112-09	9mm	¥2,500
51-112-10	10mm	¥2,500
51-112-11	11mm	¥2,500
51-112-12	12mm	¥2,500


M1.3 皮質骨スクリュー

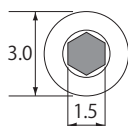

商品コード	全長 (L)	価格
51-115-05	5mm	¥2,400
51-115-06	6mm	¥2,400
51-115-07	7mm	¥2,400
51-115-08	8mm	¥2,400

商品コード	全長 (L)	価格
51-115-09	9mm	¥2,500
51-115-10	10mm	¥2,500
51-115-11	11mm	¥2,500
51-115-12	12mm	¥2,500


M1.5 皮質骨スクリュー

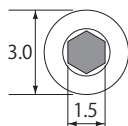

商品コード	全長 (L)	価格
51-110-06	6mm	¥1,700
51-110-07	7mm	¥1,700
51-110-08	8mm	¥1,700
51-110-09	9mm	¥1,700
51-110-10	10mm	¥1,700
51-110-11	11mm	¥1,700
51-110-12	12mm	¥1,700

商品コード	全長 (L)	価格
51-110-14	14mm	¥1,800
51-110-16	16mm	¥1,800
51-110-18	18mm	¥1,800
51-110-20	20mm	¥1,900
51-110-22	22mm	¥1,900
51-110-24	24mm	¥1,900

M2.0 皮質骨スクリュー

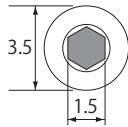

商品コード	全長 (L)	価格
51-114-06	6mm	¥1,700
51-114-08	8mm	¥1,700
51-114-10	10mm	¥1,700
51-114-12	12mm	¥1,700
51-114-14	14mm	¥1,800

商品コード	全長 (L)	価格
51-114-16	16mm	¥1,800
51-114-18	18mm	¥1,800
51-114-20	20mm	¥1,900
51-114-22	22mm	¥1,900
51-114-24	24mm	¥1,900

■M2.0 皮質骨スクリュー



商品コード	全長 (L)	価格
51-104-06	6mm	¥1,600
51-104-08	8mm	¥1,600
51-104-10	10mm	¥1,600
51-104-12	12mm	¥1,600
51-104-14	14mm	¥1,700

商品コード	全長 (L)	価格
51-104-16	16mm	¥1,700
51-104-18	18mm	¥1,700
51-104-20	20mm	¥1,700
51-104-22	22mm	¥1,700
51-104-24	24mm	¥1,700

■M2.4 皮質骨スクリュー



商品コード	全長 (L)	価格
51-113-06	6mm	¥1,700
51-113-08	8mm	¥1,700
51-113-10	10mm	¥1,700
51-113-12	12mm	¥1,700
51-113-14	14mm	¥1,800

商品コード	全長 (L)	価格
51-113-16	16mm	¥1,800
51-113-18	18mm	¥1,800
51-113-20	20mm	¥1,900
51-113-22	22mm	¥1,900
51-113-24	24mm	¥1,900


■M2.4 皮質骨スクリュー



商品コード	全長 (L)	価格
51-103-06	6mm	¥1,700
51-103-08	8mm	¥1,700
51-103-10	10mm	¥1,700
51-103-12	12mm	¥1,700
51-103-14	14mm	¥1,800

商品コード	全長 (L)	価格
51-103-16	16mm	¥1,800
51-103-18	18mm	¥1,800
51-103-20	20mm	¥1,900
51-103-22	22mm	¥1,900
51-103-24	24mm	¥1,900


■M2.7 皮質骨スクリュー

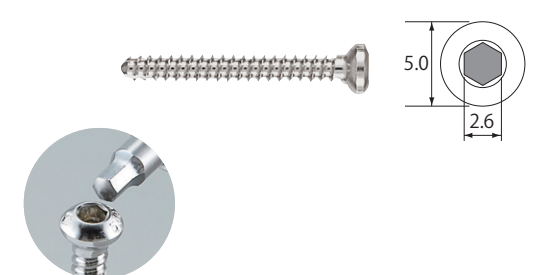

商品コード	全長 (L)	価格
51-102-06	6mm	¥1,600
51-102-08	8mm	¥1,600
51-102-10	10mm	¥1,600
51-102-12	12mm	¥1,600
51-102-14	14mm	¥1,600
51-102-16	16mm	¥1,700
51-102-18	18mm	¥1,700
51-102-20	20mm	¥1,700
51-102-22	22mm	¥1,700

商品コード	全長 (L)	価格
51-102-24	24mm	¥1,700
51-102-26	26mm	¥1,700
51-102-28	28mm	¥1,700
51-102-30	30mm	¥1,800
51-102-32	32mm	¥1,800
51-102-34	34mm	¥1,800
51-102-36	36mm	¥1,800
51-102-38	38mm	¥1,800

■M3.5 皮質骨スクリュー

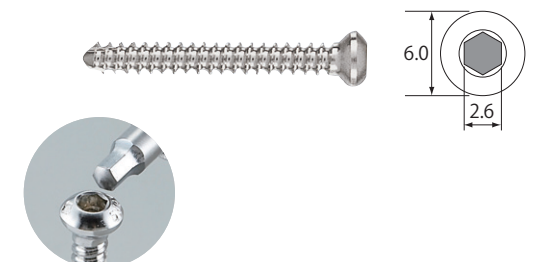

商品コード	全長 (L)	価格
51-101-10	10mm	¥1,600
51-101-12	12mm	¥1,600
51-101-14	14mm	¥1,600
51-101-16	16mm	¥1,700
51-101-18	18mm	¥1,700
51-101-20	20mm	¥1,700
51-101-22	22mm	¥1,700
51-101-24	24mm	¥1,700

商品コード	全長 (L)	価格
51-101-26	26mm	¥1,700
51-101-28	28mm	¥1,700
51-101-30	30mm	¥1,800
51-101-32	32mm	¥1,800
51-101-34	34mm	¥1,800
51-101-36	36mm	¥1,800
51-101-40	40mm	¥1,800

トイカツプル
プレートシステム
内固定システム

小動物用
スクリュー

小動物用
プレート

プレート用
手術器具

鋼線・ワイヤー
手術器具

骨鉗子・
整復器

剥離子・起子

鋭匙

骨のみ・
ハンマー

リーマー

ロングジュール

鉤

インター
ロッキングネール

電動ドリル

■皮質骨用スクリュー寸法図、ドリル、タップ対応表


径	寸法図	ヘッド部形状	使用ドリル	使用タップ	使用ツール ※別途ハンドル類が必要です。
M1.1		十字	φ0.8 L 65mm:51-300-27 φ0.9 L 65mm:51-300-28	—	51-300-64 ドライバーM1.1・1.3用 51-300-54 ドリルガイド 51-300-19 デプスゲージ
M1.3		十字	φ1.0 L 65mm:51-300-29	—	51-300-64 ドライバーM1.1・1.3用 51-300-53 ドリルガイド 51-300-19 デプスゲージ
M1.3		六角	φ1.0 L 65mm:51-300-29	—	51-300-66 ドライバーM1.5・2.0・2.4用 51-300-53 ドリルガイド 51-300-17 デプスゲージ
M1.5		六角	φ1.1 L 80mm:51-300-33	M1.5 用 51-300-38	51-300-66 ドライバーM1.5・2.0・2.4用 51-300-52または51-300-53 ドリルガイド 51-300-18または51-300-17 デプスゲージ
M2.0		六角	φ1.5 L 80mm:51-300-30 L100mm:51-300-31	M2.0 用 51-300-36	51-300-66 ドライバーM1.5・2.0・2.4用 51-300-50 ドリルガイド 51-300-18または51-300-17 デプスゲージ
M2.0		十字	φ1.5 L 80mm:51-300-30 L100mm:51-300-31	M2.0 用 51-300-36	51-300-02 ドライバーM2.0・2.4(十字) 51-300-50 ドリルガイド 51-300-18または51-300-17 デプスゲージ
M2.4		六角	φ1.7 L100mm:51-300-05	M2.4 用 51-300-24	51-300-66 ドライバーM1.5・2.0・2.4用 51-300-12 ドリルガイド 51-300-18または51-300-17 デプスゲージ
M2.4		十字	φ1.7 L100mm:51-300-05	M2.4 用 51-300-24	51-300-02 ドライバーM2.0・2.4(十字) 51-300-12 ドリルガイド 51-300-18または51-300-17 デプスゲージ
M2.7		六角	φ2.0 L110mm:01-983-21	M2.7 用 51-300-37	01-981-02 ドライバーM2.7・3.5・4.0用 51-300-51 ドリルガイド 51-300-60 デプスゲージ
M3.5		六角	φ2.5 L140mm:01-983-26	M3.5 用 01-982-35	01-981-02 ドライバーM2.7・3.5・4.0用 01-953-05 ドリルガイド 51-300-20 デプスゲージ

海綿骨スクリュー (全ネジタイプ・セルフタップ)

動物用

ステンレス鋼製


M2.4 海綿骨スクリュー

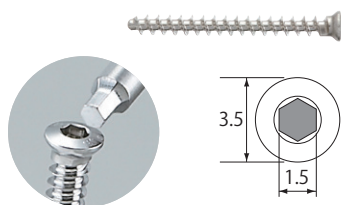

商品コード	全長 (L)	価格
51-118-14	14mm	¥1,700
51-118-16	16mm	¥1,700
51-118-18	18mm	¥1,700

商品コード	全長 (L)	価格
51-118-20	20mm	¥1,700
51-118-22	22mm	¥1,700
51-118-24	24mm	¥1,700


M2.7 海綿骨スクリュー

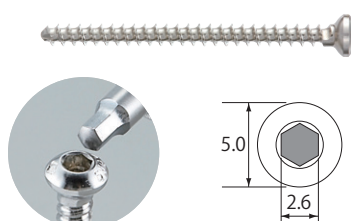

商品コード	全長 (L)	価格
51-117-16	16mm	¥1,700
51-117-18	18mm	¥1,700
51-117-20	20mm	¥1,700
51-117-22	22mm	¥1,700
51-117-24	24mm	¥1,700
51-117-26	26mm	¥1,700

商品コード	全長 (L)	価格
51-117-28	28mm	¥1,800
51-117-30	30mm	¥1,800
51-117-32	32mm	¥1,800
51-117-34	34mm	¥1,800
51-117-36	36mm	¥1,800


M3.5 海綿骨スクリュー

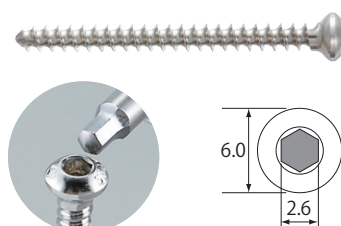

商品コード	全長 (L)	価格
51-116-16	16mm	¥1,700
51-116-19	19mm	¥1,700
51-116-22	22mm	¥1,700
51-116-25	25mm	¥1,700

商品コード	全長 (L)	価格
51-116-28	28mm	¥1,800
51-116-32	32mm	¥1,800
51-116-36	36mm	¥1,800
51-116-40	40mm	¥1,800

M4.0 海綿骨スクリュー

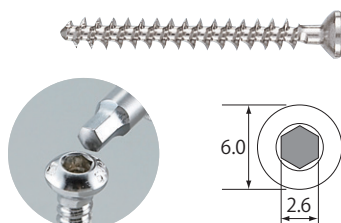


商品コード	全長 (L)	価格
51-105-10	10mm	¥1,600
51-105-12	12mm	¥1,600
51-105-14	14mm	¥1,600
51-105-16	16mm	¥1,700
51-105-18	18mm	¥1,700
51-105-20	20mm	¥1,700
51-105-22	22mm	¥1,700

商品コード	全長 (L)	価格
51-105-24	24mm	¥1,700
51-105-26	26mm	¥1,700
51-105-28	28mm	¥1,800
51-105-30	30mm	¥1,800
51-105-35	35mm	¥1,800
51-105-40	40mm	¥1,800

骨ネジワッシャー

動物用

ステンレス鋼製

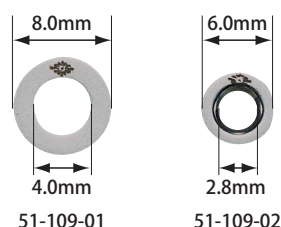

商品コード	仕様	価格
51-109-01	ラージ	¥1,200
51-109-02	スモール	¥1,200

対応スクリュー径	
●ラージ	M2.7、M3.5、M4.0
●スモール	M2.0、M2.4

トイ・カットプル
プレートシステム
内固定システム

小動物用
スクリュー

小動物用
プレート

プレート用
手術器具

鋼線・ワイヤー
手術器具

骨鉗子・
整復器

剥離子・起子

鋭匙

骨のみ・
ハンマー

リーマー

ロングジュール

鉤

インター
ロッキングネール


電動ドリル

海綿骨スクリュー (シャフトタイプ・セルフタップ)

動物用

ステンレス鋼製


M2.4 海綿骨スクリュー

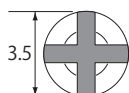

商品コード	全長 (L)	ネジ長 (l)	価格
51-108-14	14mm	4mm	¥1,700
51-108-16	16mm	8mm	¥1,700
51-108-18	18mm	8mm	¥1,700

商品コード	全長 (L)	ネジ長 (l)	価格
51-108-20	20mm	8mm	¥1,700
51-108-22	22mm	12mm	¥1,700
51-108-24	24mm	12mm	¥1,700


M2.7 海綿骨スクリュー

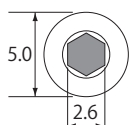

商品コード	全長 (L)	ネジ長 (l)	価格
51-107-16	16mm	8mm	¥1,700
51-107-18	18mm	8mm	¥1,700
51-107-20	20mm	8mm	¥1,700
51-107-22	22mm	12mm	¥1,700
51-107-24	24mm	12mm	¥1,700
51-107-26	26mm	13mm	¥1,700

商品コード	全長 (L)	ネジ長 (l)	価格
51-107-28	28mm	13mm	¥1,800
51-107-30	30mm	13mm	¥1,800
51-107-32	32mm	13mm	¥1,800
51-107-34	34mm	13mm	¥1,800
51-107-36	36mm	13mm	¥1,800

M3.5 海綿骨スクリュー

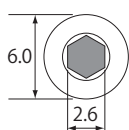

商品コード	全長 (L)	ネジ長 (l)	価格
51-106-16	16mm	6mm	¥1,700
51-106-19	19mm	6mm	¥1,700
51-106-22	22mm	12mm	¥1,700
51-106-25	25mm	12mm	¥1,700

商品コード	全長 (L)	ネジ長 (l)	価格
51-106-28	28mm	13mm	¥1,800
51-106-32	32mm	13mm	¥1,800
51-106-36	36mm	13mm	¥1,800
51-106-40	40mm	13mm	¥1,800

■ 海綿骨用スクリュー寸法図、ドリル対応表

径	寸法図	タイプ	ヘッド部形状	使用ドリル	使用ツール ※別途ハンドル類が必要です。
M2.4		全ネジ	六角	φ1.5 L 80mm:51-300-30 L100mm:51-300-31	51-300-66 ドライバーM1.5・2.0・2.4用 51-300-50 ドリルガイド 51-300-18または51-300-17デブスゲージ
M2.7		全ネジ	六角	φ1.7 L100mm:51-300-05	01-981-02 ドライバーM2.7・3.5・4.0用 51-300-12 ドリルガイド 51-300-60 デブスゲージ
M3.5		全ネジ	六角	φ2.2 L140mm:51-300-07	01-981-02 ドライバーM2.7・3.5・4.0用 51-300-14 ドリルガイド 51-300-20 デブスゲージ
M4.0		全ネジ	六角	φ2.0 L 80mm:51-300-32 L110mm:01-983-21	01-981-02 ドライバーM2.7・3.5・4.0用 51-300-51 ドリルガイド 51-300-20 デブスゲージ
M2.4		シャフト	十字	φ1.5(下孔) L 80mm:51-300-30 L100mm:51-300-31 φ2.4(滑孔) L100mm:51-300-08	51-300-02 ドライバーM2.0・2.4(十字) 51-300-50 ドリルガイド 51-300-12 ドリルガイド 51-300-18または51-300-17デブスゲージ
M2.7		シャフト	六角	φ1.7(下孔) L100mm:51-300-05 φ2.7(滑孔) L110mm:51-300-09	01-981-02 ドライバーM2.7・3.5・4.0用 51-300-12 ドリルガイド 51-300-51 ドリルガイド 51-300-60 デブスゲージ
M3.5		シャフト	六角	φ2.2(下孔) L140mm:51-300-07 φ3.5(滑孔) L140mm:51-300-10	01-981-02 ドライバーM2.7・3.5・4.0用 51-300-14 ドリルガイド 01-983-05 ドリルガイド 51-300-20 デブスゲージ

トイ
カット
フル
プレ
ット
シス
テム
S
A
骨
接
合
用
内
固
定
シ
ス
テム

小
動
物
用
ス
ク
リ
ュー

小
動
物
用
プ
レ
ー
ト

プ
レ
ー
ト
用
手
術
器
具

鋼
線
・
ワイ
ヤー
手
術
器
具

骨
鉗
子
・
整
復
器

剥
離
子
・
起
子

鋭
匙

骨
の
み
・
ハ
ン
マ
ー

リ
ー
マ
ー

ロ
ン
ジ
ュ
ー
ル

鉤

イ
ン
タ
ー
ロ
キ
ン
グ
ネ
ー
ル

電
動
ド
リ
ル

小動物用プレート



左カーブプレートは
橈骨遠位端骨折**右前
肢**への適用です。



トイラディアルプレート 左カーブ (DCPタイプ)


動物用

ステンレス鋼製

(単位mm)

商品コード	穴数	全長	穴間P	幅	厚さ	角度	価格
51-215-06	6	26.5	4	3.6	1.2	75°	¥9,500
51-215-07	7	30.5	4	3.6	1.2	75°	¥9,500
51-215-08	8	34.5	4	3.6	1.2	75°	¥9,500

●トイ犬種の橈骨遠位端骨折に有効(右前肢)

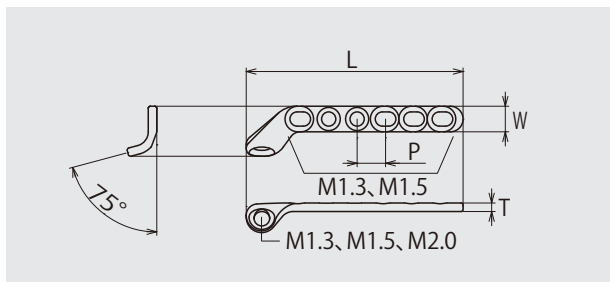

使用スクリュー

●骨端部孔 M1.3六角、M1.5、M2.0
●ストレート孔、コンプレッション孔 M1.3六角、M1.5


ミニラディアルプレート75°曲 左カーブ (DCPタイプ)

動物用

ステンレス鋼製

(単位mm)

商品コード	穴数	全長	穴間P	幅	厚さ	角度	価格
51-214-06	6	33	5	4.5	1.2	75°	¥9,500
51-214-07	7	38	5	4.5	1.2	75°	¥9,500
51-214-08	8	43	5	4.5	1.2	75°	¥9,500

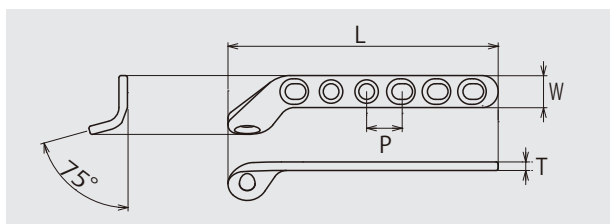

使用スクリュー

●M1.3六角 ●M1.5 ●M2.0


ミニラディアルプレート 左カーブ (DCPタイプ)

動物用

ステンレス鋼製

(単位mm)

商品コード	穴数	全長	穴間P	幅	厚さ	角度	価格
51-213-06	6	33	5	4.5	1.2	40°	¥8,500
51-213-07	7	38	5	4.5	1.2	40°	¥8,500
51-212-07	7	38	5	5	1.5	40°	¥8,500
51-212-08	8	43	5	5	1.5	40°	¥8,500

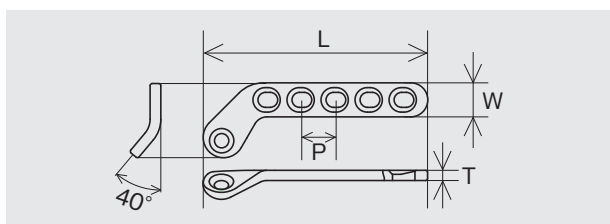
使用
スクリュー

51-213-06/07 ●M1.3六角 ●M1.5
51-212-07/08 ●M1.3六角 ●M1.5
●M2.0

スモールラディアルプレート 左カーブ (DCPタイプ)


動物用

ステンレス鋼製

(単位mm)

商品コード	穴数	全長	穴間P	幅	厚さ	角度	価格
51-211-08	8	66	8	7	2	40°	¥9,500
51-211-09	9	74	8	7	2	40°	¥9,500

●プレート先端部のホールに挿入したスクリューとそれ以外のスクリュー方向が交差するため、骨折骨片の回旋を防ぎ、遠位骨片をより強固に固定します。

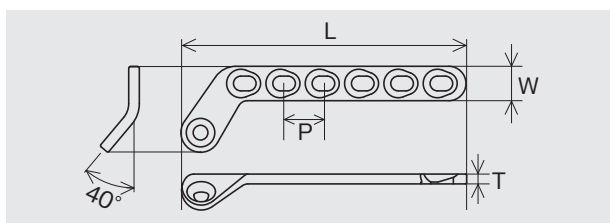

使用スクリュー

●M2.7



右カーブプレートは
橈骨遠位端骨折**左前
肢**への適用です。

トイラディアルプレート 右カーブ (DCPタイプ)


動物用

ステンレス鋼製

(単位mm)

商品コード	穴数	全長	穴間P	幅	厚さ	角度	価格
51-215-16	6	26.5	4	3.6	1.2	75°	¥9,500
51-215-17	7	30.5	4	3.6	1.2	75°	¥9,500
51-215-18	8	34.5	4	3.6	1.2	75°	¥9,500

●トイ犬種の橈骨遠位端骨折に有効(左前肢)

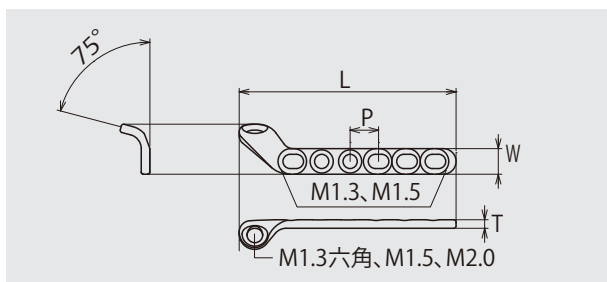

使用スクリュー ●骨端部孔 M1.3六角、M1.5、M2.0
●ストレート孔、コンプレッション孔 M1.3六角、M1.5


ミナラディアルプレート75°曲 右カーブ (DCPタイプ)

動物用

ステンレス鋼製

(単位mm)

商品コード	穴数	全長	穴間P	幅	厚さ	角度	価格
51-214-16	6	33	5	4.5	1.2	75°	¥9,500
51-214-17	7	38	5	4.5	1.2	75°	¥9,500
51-214-18	8	43	5	4.5	1.2	75°	¥9,500

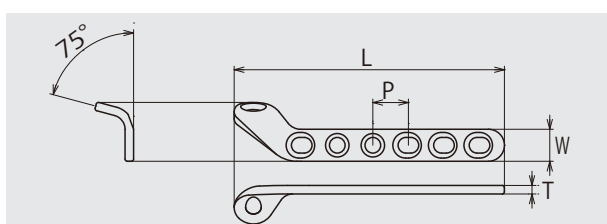

使用スクリュー ●M1.3六角 ●M1.5 ●M2.0


ミナラディアルプレート 右カーブ (DCPタイプ)

動物用

ステンレス鋼製

(単位mm)

商品コード	穴数	全長	穴間P	幅	厚さ	角度	価格
51-213-16	6	33	5	4.5	1.2	40°	¥8,500
51-213-17	7	38	5	4.5	1.2	40°	¥8,500
51-212-17	7	38	5	5	1.5	40°	¥8,500
51-212-18	8	43	5	5	1.5	40°	¥8,500

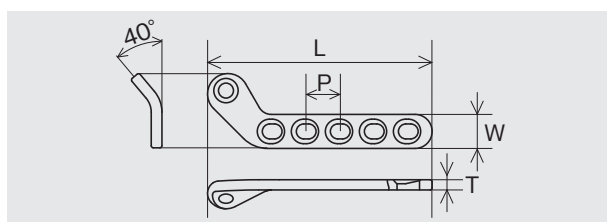

使用
スクリュー 51-213-16/17 ●M1.3六角 ●M1.5
51-212-17/18 ●M1.3六角 ●M1.5
●M2.0

スモールラディアルプレート 右カーブ (DCPタイプ)


動物用

ステンレス鋼製

(単位mm)

商品コード	穴数	全長	穴間P	幅	厚さ	角度	価格
51-211-18	8	66	8	7	2	40°	¥9,500
51-211-19	9	74	8	7	2	40°	¥9,500

●プレート先端部のホールに挿入したスクリューとそれ以外のスクリュー方向が交差するため、骨折骨片の回旋を防ぎ、遠位骨片をより強固に固定します。

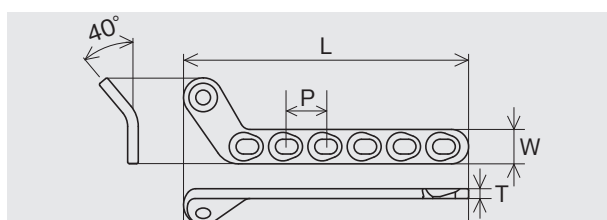

使用スクリュー ●M2.7

トイ・カットフル
プレートシステム
S A 骨接合台用
内固定システム

小動物用
スクリュー

小動物用
プレート

プレート用
手術器具

鋼線・ワイヤー
手術器具

骨鉗子・
整復器

剥離子・起子

鋭匙

骨のみ・
ハンマー

リーマー

ロングジョール

鉤

インター
ロッキングネール

電動ドリル


トイ・カッタープレート

動物用

ステンレス鋼製

(単位mm)

商品コード	穴数	全長	穴間P	幅	厚さ	価格
51-216-01	15	75	5	3.0	0.9	¥12,000
51-216-02	15	75	5	3.5	1.0	¥12,000

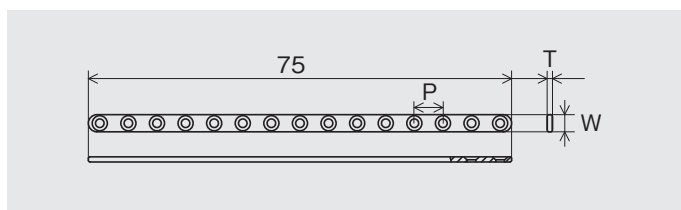

使用スクリュー	51-216-01	●M1.1	●M1.3十字
	51-216-02	●M1.3十字	


T型カッタープレート

動物用

ステンレス鋼製

(単位mm)

商品コード	穴数	全長	穴間P	幅	厚さ	頭部幅	頭部穴間P	価格
51-217-01	20	100	5	3.0	0.9	6.0	3.0	¥14,000
51-217-02	20	100	5	3.5	1.0	7.0	3.5	¥14,000

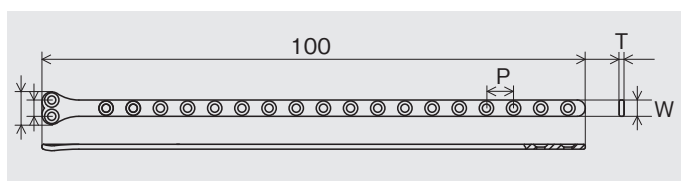

使用スクリュー	51-217-01	●M1.1	●M1.3十字
	51-217-02	●M1.3十字	


ミニストレートプレート

動物用

ステンレス鋼製

(単位mm)

商品コード	穴数	全長	穴間P	幅	厚さ	価格
51-205-01	20	100	5	5.0	1.5	¥5,000
51-205-02	20	100	5	4.5	1.2	¥5,000

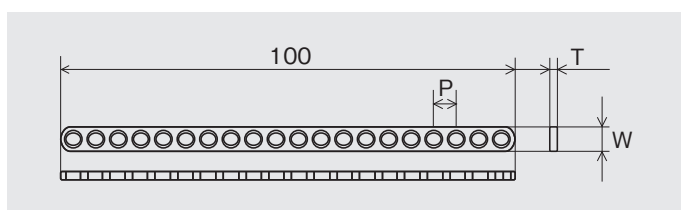

使用スクリュー	51-205-01	●M2.0	●M2.4
	51-205-02	●M1.3六角	●M1.5 ●M2.0

リコンストラクションプレートミニ

動物用

ステンレス鋼製



51-204-04

(単位mm)

商品コード	穴数	全長	穴間P	幅	厚さ	価格
51-204-03	20	100	5	5	1.5	¥11,000
51-204-04	20	100	5	5	2.5	¥11,000

●骨折部位の形状により、切断、曲げが可能です。
非荷重部位の固定に有効です。

使用スクリュー ●M2.0 ●M2.4

リコンストラクションプレート

動物用

ステンレス鋼製



(単位mm)

商品コード	穴数	全長	穴間P	幅	厚さ	価格
51-204-01	25	200	8	6	2	¥14,000
51-204-02	25	200	8	8	2.7	¥14,000

●骨折部位の形状により、切断、曲げが可能です。

使用スクリュー ●M2.7

ミニT型プレート (DCPタイプ)

動物用


ステンレス鋼製



(単位mm)

商品コード	穴数	全長	穴間P	幅	厚さ	頭部幅	価格
51-206-01	6	35	7	5	1.5	9.2	¥6,000

●骨端部の骨折に使用します。

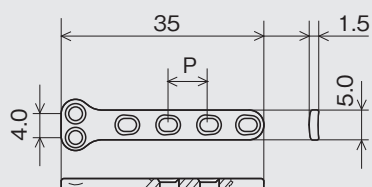

使用スクリュー ●M2.0 ●M2.4

スモールT型プレート (DCPタイプ)


動物用

ステンレス鋼製



(単位mm)

商品コード	穴数	全長	穴間P	幅	厚さ	頭部幅	価格
51-206-12	8	63	8	8	2	17.2	¥9,000

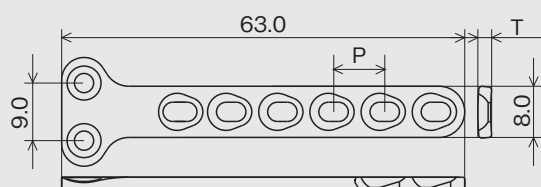

使用スクリュー ●M2.7

トイカツフル
プレートシステム

S A 骨接合用
内固定システム

小動物用
スクリュー

小動物用
プレート

プレート用
手術器具

鋼線・ワイヤー
手術器具

骨鉗子・
整復器

剥離子・起子

鋭匙

骨のみ・
ハンマー

リーマー

ロソジュール

鉤

インター
ロッキングネイル

電動ドリル

ミニプレートⅡ (DCPタイプ)


動物用

ステンレス鋼製

(単位mm)

商品コード	穴数	全長	穴間P	幅	厚さ	価格
51-203-24	4	22	5	5	1.5	¥5,200
51-203-25	5	27	5	5	1.5	¥5,200
51-203-26	6	32	5	5	1.5	¥5,200
51-203-27	7	37	5	5	1.5	¥5,500
51-203-28	8	42	5	5	1.5	¥5,500
51-203-29	9	49	5	5	1.5	¥5,500
51-203-30	10	52	5	5	1.5	¥5,500

使用スクリュー ●M2.0 ●M2.4

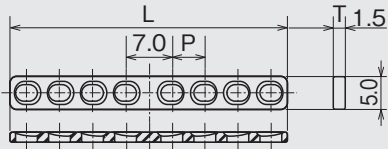

ミニプレート (DCPタイプ)


動物用

ステンレス鋼製

(単位mm)

商品コード	穴数	全長	穴間P	幅	厚さ	価格
51-203-04	4	20	5	5	1.5	¥4,200
51-203-05	5	25	5	5	1.5	¥4,200
51-203-06	6	30	5	5	1.5	¥4,200
51-203-07	7	35	5	5	1.5	¥4,200
51-203-08	8	40	5	5	1.5	¥5,000
51-203-09	9	45	5	5	1.5	¥5,000
51-203-10	10	50	5	5	1.5	¥5,000

使用スクリュー ●M2.0 ●M2.4

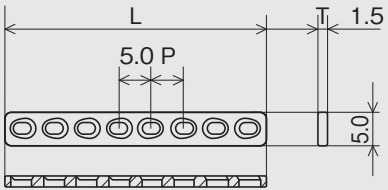

ミニプレートプラス (DCPタイプ)


動物用

ステンレス鋼製

(単位mm)

商品コード	穴数	全長	穴間P	幅	厚さ	価格
51-203-14	4	25	5	6	1.5	¥6,200
51-203-15	5	30	5	6	1.5	¥6,200
51-203-16	6	35	5	6	1.5	¥6,200
51-203-17	7	40	5	6	1.5	¥6,500
51-203-18	8	45	5	6	1.5	¥6,500
51-203-19	9	50	5	6	1.5	¥6,500

使用スクリュー ●M2.0 ●M2.4

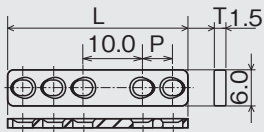

トイカツプル
プレートシステム

S A 骨接合用
内固定システム

小動物用
スクリュー

小動物用
プレート

プレート用
手術器具

鋼線・ワイヤー
手術器具

骨鉗子・
整復器

剥離子・起子

鋭匙

骨のみ・
ハンマー

リーマー

ロングユール

鉤

インター
ロッキングネイル


電動ドリル

スモールプレートⅡ (DCPタイプ)

動物用

ステンレス鋼製

(単位mm)

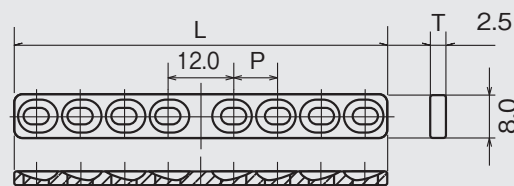

商品コード	穴数	全長	穴間P	幅	厚さ	価格
51-202-14	4	37	8	8	2.5	¥5,800
51-202-15	5	44	8	8	2.5	¥5,800
51-202-16	6	52	8	8	2.5	¥5,800
51-202-17	7	60	8	8	2.5	¥5,800
51-202-18	8	68	8	8	2.5	¥6,500
51-202-19	9	76	8	8	2.5	¥6,500
51-202-20	10	84	8	8	2.5	¥6,500
51-202-21	11	93	8	8	2.5	¥6,500
51-202-22	12	100	8	8	2.5	¥6,500


使用スクリュー ●M2.7

スモールプレート (DCPタイプ)

動物用

ステンレス鋼製

(単位mm)

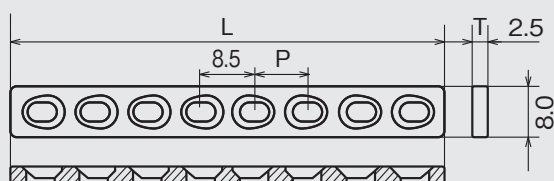

商品コード	穴数	全長	穴間P	幅	厚さ	価格
51-202-04	4	35	8.5	8	2.5	¥4,800
51-202-05	5	43.5	8.5	8	2.5	¥4,800
51-202-06	6	52	8.5	8	2.5	¥4,800
51-202-07	7	60.5	8.5	8	2.5	¥4,800
51-202-08	8	69	8.5	8	2.5	¥5,800
51-202-09	9	77.5	8.5	8	2.5	¥5,800
51-202-10	10	86	8.5	8	2.5	¥5,800
51-202-11	11	94.5	8.5	8	2.5	¥5,800
51-202-12	12	103	8.5	8	2.5	¥5,800


使用スクリュー ●M2.7

ナロープレートⅡ (DCPタイプ)

動物用

ステンレス鋼製

(単位mm)

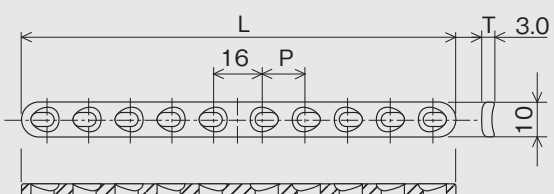

商品コード	穴数	全長	穴間P	幅	厚さ	価格
51-201-16	6	76	12	10	3	¥9,500
51-201-17	7	89	12	10	3	¥9,500
51-201-18	8	100	12	10	3	¥9,500
51-201-19	9	113	12	10	3	¥10,000
51-201-20	10	125	12	10	3	¥10,000
51-201-21	11	137	12	10	3	¥10,000
51-201-22	12	148	12	10	3	¥10,000


使用スクリュー ●M3.5 ●M4.0

ブロードプレートⅡ (DCPタイプ)

動物用

ステンレス鋼製

(単位mm)

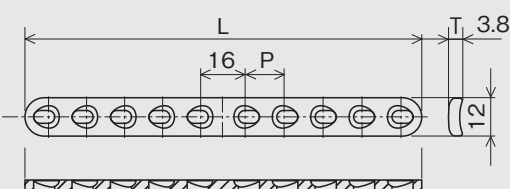

商品コード	穴数	全長	穴間P	幅	厚さ	価格
51-200-16	6	76	12	12	3.8	¥11,000
51-200-17	7	89	12	12	3.8	¥11,000
51-200-18	8	100	12	12	3.8	¥11,000
51-200-19	9	113	12	12	3.8	¥12,000
51-200-20	10	125	12	12	3.8	¥12,000
51-200-21	11	137	12	12	3.8	¥12,000
51-200-22	12	148	12	12	3.8	¥13,000
51-200-24	14	174	12	12	3.8	¥13,000

使用スクリュー ●M3.5 ●M4.0

トイ・カットフル
プレートシステム
内固定システム

小動物用
スクリュー

小動物用
プレート

プレート用
手術器具

鋼線・ワイヤー
手術器具

骨鉗子・
整復器

剥離子・起子

鋭匙

骨のみ・
ハンマー

リーマー

ロングジュール

鉤

インター
ロッキングネール

電動ドリル

トイカツプル
プレートシステム
S A 骨接合用
内固定システム
小動物用
スクリュー
小動物用
プレート
手術器具
鋼線・ワイヤー
手術器具
骨鉗子・
整復器
剥離子・起子
鋭匙
骨のみ・
ハンマー
リーマー
ロングジュール
鉤
インター
ロッキングネール
電動ドリル

ミニスネークプレート

動物用 ステンレス鋼製

(単位mm)

商品コード	穴数	全長	穴間P	幅	厚さ	価格
51-210-01	20	120	6	6	1.5	¥10,000
51-210-02	20	100	5	5	1.5	¥10,000

●曲面の多い骨折部位の整復に有効なカットプルプレフォームプレート。
【適応症例】
骨盤骨折・上腕骨骨折・腓骨骨折・大腿骨遠位骨折

使用スクリュー	51-210-01	●M2.0	●M2.4
	51-210-02	●M1.5	●M2.0

スモールスネークプレート

動物用 ステンレス鋼製

(単位mm)

商品コード	穴数	全長	穴間P	幅	厚さ	価格
51-209-01	16	130	8	7	2	¥12,000

使用スクリュー	●M2.7
---------	-------

白蓋プレート

動物用 ステンレス鋼製

(単位mm)

商品コード	穴数	全長	幅	厚さ	価格
51-207-01	5	20	4.5	1.5	¥8,000
51-207-02	6	24	5	1.5	¥8,000
51-207-03	6	39	7	2	¥8,000
51-207-04	4	29	7	2	¥8,000
51-207-05	6	31	5	1.5	¥9,000

●51-207-01～03：寛骨臼の骨折、脱臼による補強に使用します。
●51-207-04：白蓋形成不全のサポートに有効です。
●51-207-05：フラットで白蓋以外の部位にも使用可能です。

使用スクリュー	51-207-01／02／05	●M2.0	●M2.4
	51-207-03／04	●M2.7	

脊椎プレート

※詳しい資料をご用意しております。弊社までご請求ください。


脊椎プレート (アリゲータープレート)

動物用 ステンレス鋼製

(単位mm)

商品コード	全長	幅	厚さ	価格
51-208-01	100	5.3	1	¥28,000
51-208-02	141.5	5.3	1	¥38,000

●プレートによる固定なのでワイヤリング固定と異なり伸展・屈曲の両方向の運動を制限し、固定できます。
●プレートの鋸刃状の突起で棘突起基部に両側から噛み込ませる方式であるため棘突起基部の両面にピッタリとフィットし確実な固定ができます。また棘突起基部を把持するので、棘突起が小さくてワイヤリング固定が難しい症例にも対処できます。
●プレートに刻まれてある等間隔の溝は締結ワイヤーのズレを防止します。
●一本のプレートを折り曲げて棘突起を両側から挟み込む方式であり、簡単に固定操作ができます。
●プレートの装着には特別な専用設置器具を必要とせず、プライヤー、ピンカッター、Z式鋼線締結器があれば手術が実施できます。

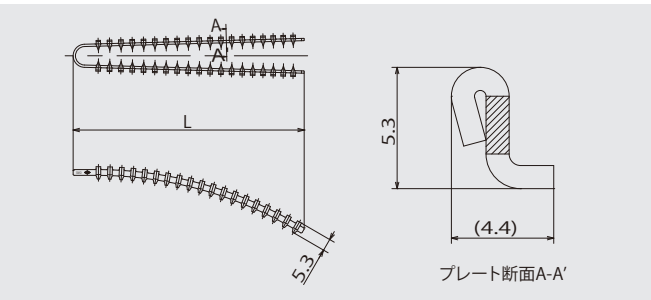

ロングボルト

※詳しい資料をご用意しております。弊社までご請求ください。

ロングボルト

動物用

ステンレス鋼製



商品コード	全長	径	価格
51-140-01	112mm	2.6mm	¥8,000

ロングボルトガイド

真鍮製



商品コード	全長	価格
41-140-31	114mm	¥8,000

●ロングボルトガイドの挿入にはφ3.5ドリル(51-300-10)が必要です。

ロングボルト用スパナ

動物用

ステンレス鋼製



商品コード	全長	価格
51-140-32	90mm	¥16,000

●ロングボルトのナットの締付けに必要なスパナです。

ロングボルト用ドリル

動物用


ステンレス鋼製



商品コード	全長	径	価格
51-140-33	155mm	2.6mm	¥8,400

骨ネジドライバー

動物用

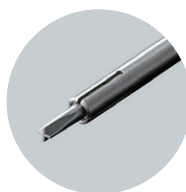ステンレス鋼・
アルミ合金製


商品コード	全長	仕様	価格
51-300-02	155mm	M2.0、2.4用(十字)	¥30,000

●ロングボルトの挿入に必要なドライバーです。

下孔ドリル(グライディングホール用)

動物用

ステンレス鋼製




商品コード	全長	径	価格
51-300-10	140mm	3.5mm	¥6,200

●ロングボルトガイドの挿入に必要なドリルです。




症例写真① -1

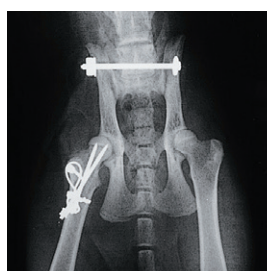

症例写真① -2



症例写真② -1

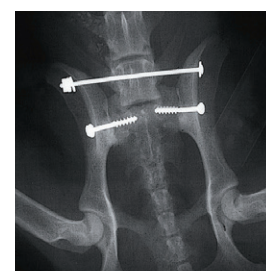

症例写真② -2

トイ・カタフル
プレートシステム
S A骨接合用
内固定システム

小動物用
スクリュー

小動物用
プレート

プレート用
手術器具

鋼線・ワイヤー
手術器具

骨鉗子・
整復器

剥離子・起子

鋭匙

骨のみ・
ハンマー

リーマー

ロングジョール

鉤

インター
ロッキングネール

電動ドリル

プレート用手術器具

スティック型プレートベンダー

動物用

ステンレス鋼製




商品コード	全長	入数	価格
51-531-00	16cm	1	¥18,000

- 先端部をプレートのホール部に深く差し込んでベンディングを行います。
- プレートのホール部を変形させる恐れを軽減できます。
- 厚さ1.5mm以下のミズホプレートの曲げ・ひねりが可能です。

交換用先端


商品コード	入数	価格
51-531-01	1	¥3,000

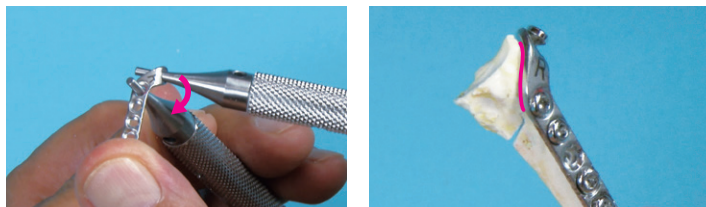

ハンドベンディングプライヤー

動物用

ステンレス鋼製

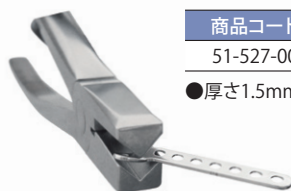

【使用例】

商品コード	全長	入数	価格
51-527-00	21.5cm	1	¥75,000

- 厚さ1.5mm以下のミズホプレートの曲げが可能です。

プレートベンダー

動物用

ステンレス鋼製




商品コード	全長	入数	価格
51-300-01	23cm	1	¥40,000

- プレートの曲げ・ひねりを行えます。

プレス型プレート曲器

動物用

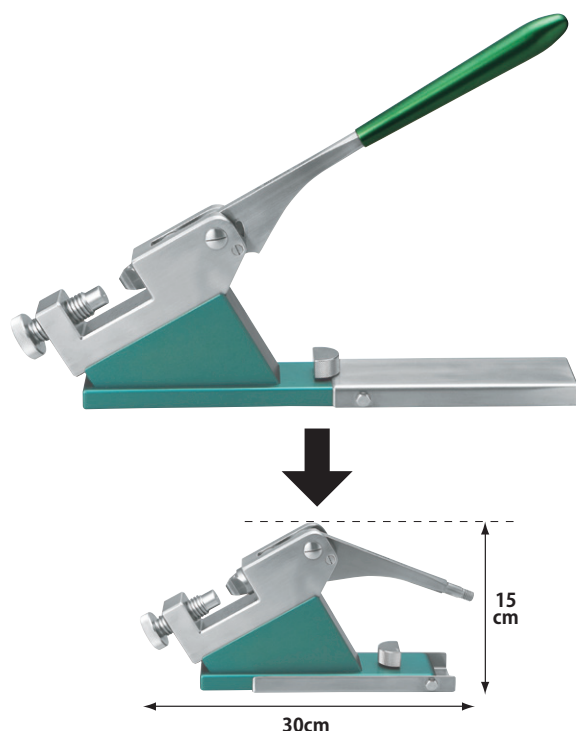


商品コード	仕様	価格
51-518-01	アンビル付	¥380,000

- 強い圧力が得られる梃子応用の多用途プレス型曲器です。アンビル（アタッチメント）の交換により、プレートの曲げ・ひねり・切断に使用できます。本器は、折畳式の構造ですので折畳めば小型の卓上オートクレーブによって滅菌可能です。

アンビル種類

縦曲げ

リコンストラクションプレートの3次元的な曲げ加工に使用します。

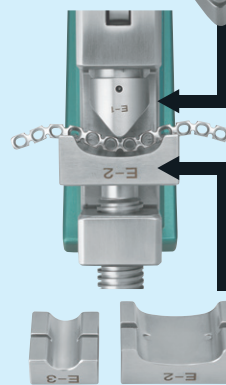

横曲げ

小動物用プレートを骨形状に合わせて、カーブの形成のための曲げに使用します。

万力

小動物用プレートの曲げ及びねりを行う際のプレートの固定に使用します。

切断

小動物用スモール・ミニ・リコンストラクションプレート及び3mm迄のキルシュナー鋼線の切断に使用します。

切断


小動物用スモール・ミニ・リコンストラクションプレート及び3mm迄のキルシュナー鋼線の切断に使用します。

切断

小動物用スモール・ミニ・リコンストラクションプレート及び3mm迄のキルシュナー鋼線の切断に使用します。

下孔ドリル

ステンレス鋼製

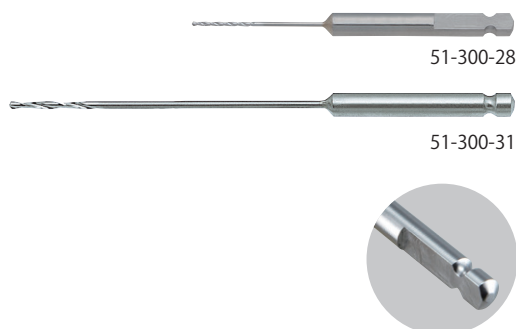

	商品コード	径 (mm)	全長 (mm)	仕様	価格
動物用	51-300-27	φ0.8	65	M1.1皮質骨用	¥6,500
動物用	51-300-28	φ0.9	65	M1.1皮質骨用	¥6,500
動物用	51-300-29	φ1.0	65	M1.3皮質骨用	¥6,500
動物用	51-300-33	φ1.1	80	M1.5皮質骨用	¥5,500
動物用	51-300-30	φ1.5	80	M2.0皮質骨 M2.4海綿骨用	¥5,500
動物用	51-300-31	φ1.5	100	M2.0皮質骨 M2.4海綿骨用	¥5,500
動物用	51-300-05	φ1.7	100	M2.4皮質骨 M2.7海綿骨用	¥5,500
	01-983-21	φ2.0	110	M2.7皮質骨 M4.0海綿骨用	¥9,000
動物用	51-300-07	φ2.2	140	M3.5海綿骨用	¥5,500
	01-983-26	φ2.5	140	M3.5皮質骨用	¥9,000

●M1.1スクリー用としてφ0.8mm、φ0.9mmの2種類をラインナップ。
骨の状態に合わせて使い分けが可能です。

下孔ドリル (グライディングホール用)

動物用

ステンレス鋼製



商品コード	径 (mm)	全長 (mm)	価格
51-300-08	φ2.4	100	¥6,200
51-300-09	φ2.7	110	¥6,200
51-300-10	φ3.5	140	¥6,200

骨ネジタップ

ステンレス鋼製



	商品コード	仕様	全長 (mm)	価格
動物用	51-300-38	M1.5皮質骨用	80	¥13,200
動物用	51-300-36	M2.0皮質骨用	80	¥13,200
動物用	51-300-24	M2.4皮質骨用	80	¥13,200
動物用	51-300-37	M2.7皮質骨用	105	¥13,200
	01-982-35	M3.5皮質骨用	130	¥12,000

マルチハンドル

動物用

ステンレス鋼・
アルミ合金・樹脂製


商品コード	全長	価格
51-300-04	10cm	¥48,000

●クイックカップリングのドリル及びタップがワンタッチで着脱可能です。
●後端部が独立して回転する機構になっており、掌で器具を包み込むように
指先で回転操作を行え、軸ぶれの少ない穿孔が可能です。

ワンタッチハンドル

ステンレス鋼製



商品コード	全長	価格
01-981-04	8cm	¥28,000

●クイックカップリングのドリル及びタップがワンタッチで着脱可能です。
●T字型のハンドルは、大きな力をかける穿孔に適しています。

トイ・カット
プレットシステム

S A 骨接合用
内固定システム

小動物用
スクリー

小動物用
プレット

プレート用
手術器具

鋼線・ワイヤー
手術器具

骨鉗子・
整復器

剥離子・起子

鋭匙

骨のみ・
ハンマー

リーマー


ロシジュール

鉤

インター
ロッキングネール

電動ドリル

ドリルアダプター

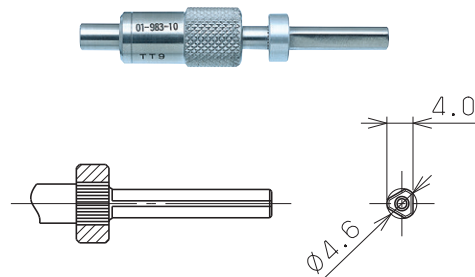
ステンレス鋼製・
アルミ合金製


商品コード	全長	価格
01-983-10	7.5cm	¥22,000

●ヤコブスチャックの先に取り付けることによってクイックカップリングのドリルをワンタッチで着脱できます。



ドリルガイド

ステンレス鋼製

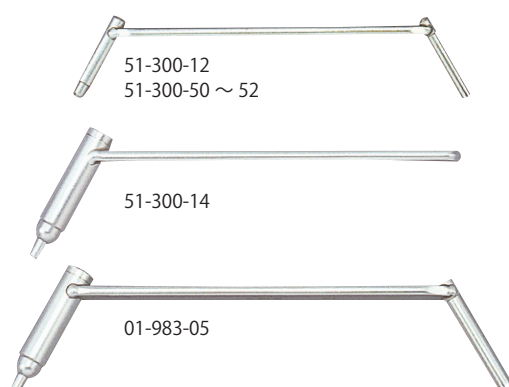

	商品コード	①使用ドリル	②使用ドリル	価格
動物用	51-300-54	φ0.8	φ0.9	¥25,000
動物用	51-300-53	φ1.0	φ1.1	¥25,000


	商品コード	①使用ドリル	②使用タップ	価格
動物用	51-300-52	φ1.1	M1.5	¥25,000
動物用	51-300-50	φ1.5	M2.0	¥25,000
動物用	51-300-12	φ1.7	M2.4	¥25,000
動物用	51-300-51	φ2.0	M2.7	¥25,000
動物用	51-300-14	φ2.2	—	¥25,000
	01-983-05	φ2.5	M3.5	¥28,000

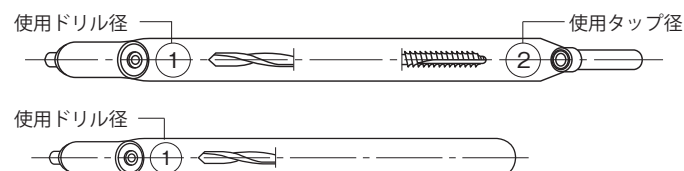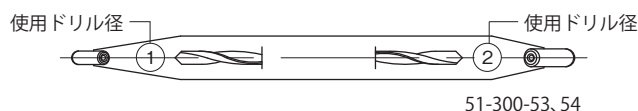

デプスゲージ

動物用

ステンレス鋼製

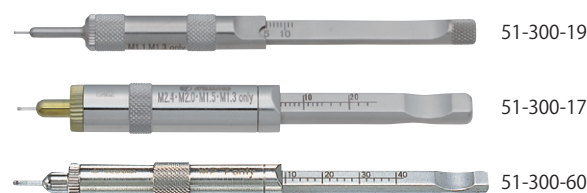

商品コード	仕様	価格
51-300-19	M1.1、1.3十字用	¥48,000
51-300-17	M1.3六角、1.5、2.0、2.4用	¥48,000
51-300-18	M1.5、2.0、2.4用	¥48,000
51-300-60	M2.7用	¥48,000
51-300-20	M3.5、4.0用	¥48,000

※測定値よりもワンサイズ長いスクリューをご使用下さい。

使用説明
51-300-19／計測長3～12mm
51-300-17／計測長5～24mm
51-300-18／計測長6～24mm
51-300-60／計測長6～38mm
51-300-20／計測長8～50mm

骨ネジ用ピンセット

ステンレス鋼製



商品コード	仕様	価格
01-983-40	M2.0、2.4、2.7、3.5用	¥18,000
51-300-63	M1.1、1.3、1.5用	¥30,000

骨ネジドライバー


動物用

ステンレス鋼・
アルミ合金製




51-300-64

商品コード	仕様	形状	価格
51-300-64	M1.1、1.3用	十字	¥55,000

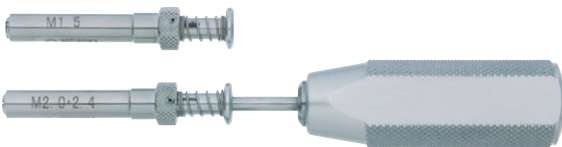


51-300-66

商品コード	仕様	形状	価格
51-300-66	M1.3、1.5、2.0、2.4用	六角	¥77,000

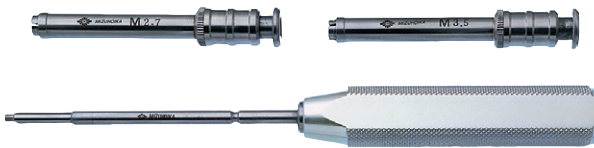

01-981-02

商品コード	仕様	形状	価格
01-981-02	M2.7、3.5、4.0用	六角	¥77,000

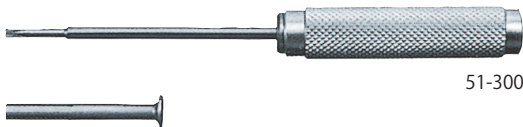

51-300-02

商品コード	仕様	形状	価格
51-300-02	M2.0、2.4用	十字	¥30,000



トイカツフル
プレートシステム
S A骨接合用
内固定システム

小動物用
スクリュー

小動物用
プレート

プレート用
手術器具

鋼線・ワイヤー
手術器具

骨鉗子・
整復器

剥離子・起子

鋭匙

骨のみ・
ハンマー

リーマー

ロングジュール

鉤

インター
ロッキングネール

電動ドリル


鋼線・ワイヤー手術器具

キルシュナー鋼線

ステンレス鋼製

■片尖(10本入)

両端形状

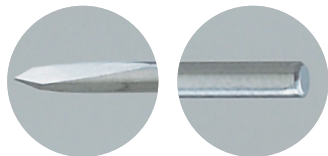

■全長300mm


商品コード	径	全長	価格
01-130-50	0.8mm	300mm	¥4,960
01-063-21	1.0mm	300mm	¥4,960
01-063-22	1.2mm	300mm	¥4,960
01-130-53	1.4mm	300mm	¥4,960
01-063-23	1.5mm	300mm	¥4,960
01-130-55	1.6mm	300mm	¥4,960
01-063-24	1.8mm	300mm	¥4,960
01-063-25	2.0mm	300mm	¥4,960
01-063-26	2.4mm	300mm	¥4,960
01-063-27	3.0mm	300mm	¥4,960
01-130-60	4.0mm	300mm	¥4,960

■全長150mm

商品コード	径	全長	価格
01-130-10	0.8mm	150mm	¥4,960
01-130-11	1.0mm	150mm	¥4,960
01-130-12	1.2mm	150mm	¥4,960
01-130-13	1.4mm	150mm	¥4,960
01-130-14	1.5mm	150mm	¥4,960
01-130-15	1.6mm	150mm	¥4,960
01-130-16	1.8mm	150mm	¥4,960
01-130-17	2.0mm	150mm	¥4,960
01-130-18	2.4mm	150mm	¥4,960

■両尖(10本入)

両端形状

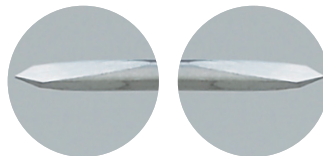

■全長300mm

商品コード	径	全長	価格
01-132-50	0.8mm	300mm	¥4,960
01-065-11	1.0mm	300mm	¥4,960
01-065-12	1.2mm	300mm	¥4,960
01-132-53	1.4mm	300mm	¥4,960
01-065-13	1.5mm	300mm	¥4,960
01-132-55	1.6mm	300mm	¥4,960
01-065-14	1.8mm	300mm	¥4,960
01-065-15	2.0mm	300mm	¥4,960
01-065-16	2.4mm	300mm	¥4,960
01-065-17	3.0mm	300mm	¥4,960
01-132-60	4.0mm	300mm	¥4,960


■全長150mm

商品コード	径	全長	価格
01-132-10	0.8mm	150mm	¥4,960
01-132-11	1.0mm	150mm	¥4,960
01-132-12	1.2mm	150mm	¥4,960
01-132-13	1.4mm	150mm	¥4,960
01-132-14	1.5mm	150mm	¥4,960
01-132-15	1.6mm	150mm	¥4,960
01-132-16	1.8mm	150mm	¥4,960
01-132-17	2.0mm	150mm	¥4,960
01-132-18	2.4mm	150mm	¥4,960

田島式キルシュナー鋼線(10本入)

ステンレス鋼製

両端形状

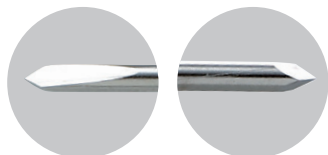


商品コード	径	全長	価格
03-001-81	0.7mm	100mm	¥4,960
03-001-82	1.0mm	120mm	¥4,960
03-001-83	1.2mm	120mm	¥4,960
03-001-85	1.4mm	120mm	¥4,960
03-001-84	1.5mm	120mm	¥4,960
03-001-86	1.6mm	120mm	¥4,960
03-001-87	1.8mm	120mm	¥4,960
03-001-88	2.0mm	120mm	¥4,960

ネジ付鋼線(10本入)

ステンレス鋼製

両端形状

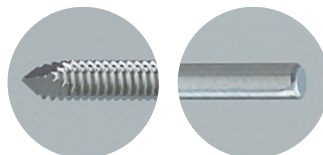


商品コード	径	全長	L寸法	価格
01-063-31	2.0mm	230mm	3cm	¥8,000
01-063-32	2.4mm	230mm	3cm	¥8,000
01-063-33	3.0mm	230mm	3cm	¥8,000
01-063-34	4.0mm	230mm	3cm	¥8,000

●この鋼線を手廻し、または電動ドリルにつけ、骨折の内固定や関節固定術内の固定用に広く応用できます。

- 1) 鋼線の先端3cmの範囲にネジが刻んでありますので固定力が強く、刺入後抜け出したり、深く奥に入り込むことはありません。
- 2) 1cmごとに目盛りがあり、また5cmごとに二重の目盛りがついていますので、鋼線刺入時に深さが読めて安全確実に刺入できます。
- 3) 必要な長さだけ刺入し、刺入後は自由に端を切り落せます。

キルシュナー鋼線用ワンタッチキャップ (5個入)

ステンレス鋼製

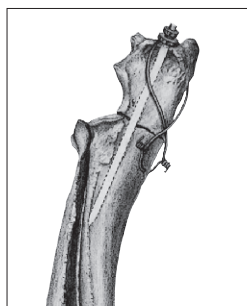

商品コード	仕様	価格
01-138-10	φ0.8用	¥2,000
01-138-11	φ1.0用	¥2,000
01-138-12	φ1.2用	¥2,000
01-138-13	φ1.4用	¥2,000
01-061-01	φ1.5用	¥2,000
01-138-15	φ1.6用	¥2,000
01-138-16	φ1.8用	¥2,000
01-061-02	φ2.0用	¥2,000
01-061-03	φ2.4用	¥2,000
01-061-04	φ3.0用	¥2,000
01-138-20	φ4.0用	¥2,000

●手軽に使用されているキルシュナー鋼線は、その便利さにおいて頻用されていますが、鋼線の切断端の処理に問題があります。

曲げる方法もありますが、骨折部への影響もあり、曲げにくく、不十分になることもあります。皮膚の外に出しておけば感染の危険もあり、処置も要します。そこで、キルシュナー鋼線の切断端部にワンタッチでキャップをする方法が考案されました。


クリンプキルシュナー鋼線カッター

ステンレス鋼製

切断
可能径
2.4mm

商品コード	全長	価格
01-061-20	230mm	¥68,000

●先端の窪みでφ1.0mm以上のキルシュナー鋼線用ワンタッチキャップをかきしめることができ固定が可能です。
(φ0.8mmのキャップの固定はできません)

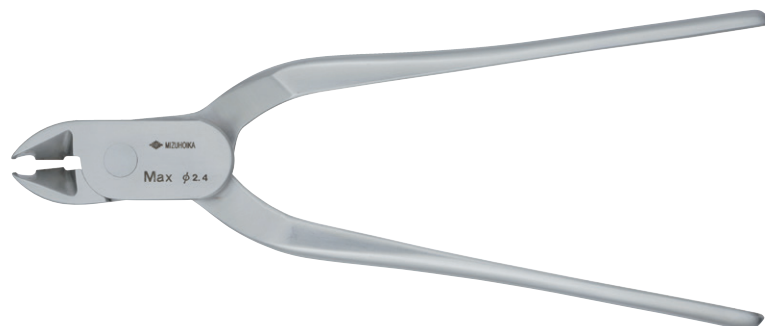

【使用例】



ワンタッチキャップをかきしめ…



キルシュナー鋼線を切断

トイ・カットフル
プレートシステム

S A 骨接合用
内固定システム

小動物用
スクリュー

小動物用
プレート

プレート用
手術器具

鋼線ワイヤー
手術器具

骨鋸子・
整復器

剥離子・起子

鋭匙

骨のみ・
ハンマー

リーマー

ロングジュール

鉤

インター
ロッキングネール

電動ドリル

強力ピンカッター

ステンレス鋼製




商品コード	全長	価格
01-241-10	57cm	¥150,000

●ハンドル着脱式

切断
可能径
6.3mm

ピンカッター

ステンレス鋼製

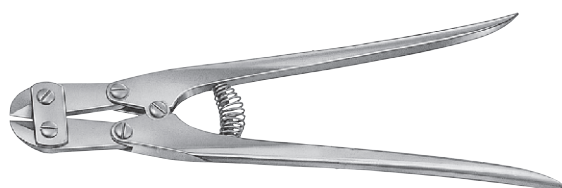

商品コード	全長	価格
01-240-00	31.5cm	¥67,000

●刃部に高速度鋼を使用しており、切断能力が高く、径3mmまでの鋼線は1回の加圧で、径4mmまでの鋼線は2回の加圧で切断できます。

切断
可能径
4.0mm

二連関節ピンカッター

ステンレス鋼製



商品コード	全長	価格
01-237-20	21cm	¥35,000

●2〜3回の加圧で切断してください。

切断
可能径
2.0mm

米式ワイヤーカッター兼プライヤー

ステンレス鋼製



商品コード	全長	価格
01-235-10	17cm	¥67,000

切断
可能径
1.6mm

ワイヤーカッター兼プライヤー超硬刃付

ステンレス鋼製



商品コード	全長	価格
01-238-10	21cm	¥30,000

切断
可能径
1.5mm

田島式 K鋼線カッター

ステンレス鋼製



商品コード	全長	価格
03-001-59	18cm	¥53,000

切断
可能径
1.5mm

M式ワイヤーカッター兼プライヤー 溝入り

ステンレス鋼製



商品コード	全長	仕様	価格
01-236-11	17cm	溝入り	¥15,000

切断
可能径
1.2mm


ワイヤーカッター

ステンレス鋼製



商品コード	全長	価格
01-239-10	15cm	¥15,000

切断
可能径
1.0mm

ワイヤー剪刀

ステンレス鋼製



商品コード	全長	価格
41-003-00	12cm	¥9,800

切断
可能径
0.8mm

硬線

切断
可能径
1.2mm

軟線

田島式 縫合用鋼線鋏

ステンレス鋼製



商品コード	全長	価格
03-001-34	11cm	¥11,000

切断
可能径
0.23mm

軟線

トイ
カット
フル
プレ
ット
シス
テム

S A
骨
接
合
用
内
固
定
シ
ス
テ
ム

小
動
物
用
ス
ク
リ
ユ
ー

小
動
物
用
プ
レ
ー
ト

プ
レ
ー
ト
用
手
術
器
具

鋼
線
・
ワ
イ
ヤ
ー
手
術
器
具

骨
鉗
子
・
整
復
器

剥
離
子
・
起
子

鋭
匙

骨
の
み
・
ハ
ン
マ
ー

リ
ー
マ
ー

ロ
ン
ジ
ュ
ー
ル

鉤

ロ
キ
ン
グ
ネ
ー
ル
・
イ
ン
タ
ー

電
動
ド
リ
ル

ハンドチャック

ステンレス鋼・
アルミ合金製


商品コード	全長	価格
01-521-00	20cm	¥47,000

●把柄のセンターはトンネル穴になっています。ドリルあるいはピン類を差し込んでチャックできます。

把持
可能径
0.7~6.0
mm

微小骨鋼線刺入子(ピンバイス)

ステンレス鋼製




商品コード	全長	価格
03-028-18	13cm	¥25,000

●把柄のセンターはトンネル穴になっています。キルシュナー鋼線刺入に用います。片手で使用することができ、反対の手で固定しようとする部分を保持することができます。

把持
可能径
0.4~1.2
mm

田島式 ピンバイス

ステンレス鋼製

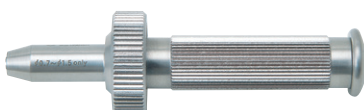

商品コード	全長	価格
03-001-53	10.5cm	¥14,000

●短いキルシュナー鋼線を把持するのに適しています。

把持
可能径
0.7~1.5
mm

ピンバイス

動物用

ステンレス鋼製



商品コード	全長	仕様	価格
51-514-01	12.0cm	大	¥65,000
51-514-02	11.5cm	中	¥65,000
51-514-03	11.0cm	小	¥65,000

把持
可能径
2.0~3.0
mm

大

把持
可能径
1.0~2.0
mm

中

把持
可能径
0.5~1.0
mm

小

■ピンバイス用 スパナ

ステンレス鋼製



商品コード	価格
51-514-04	¥8,000

■ピンバイス用 バー

ステンレス鋼製




商品コード	価格
51-514-05	¥6,000

チップ付ヤング鉗子

動物用

ステンレス鋼製

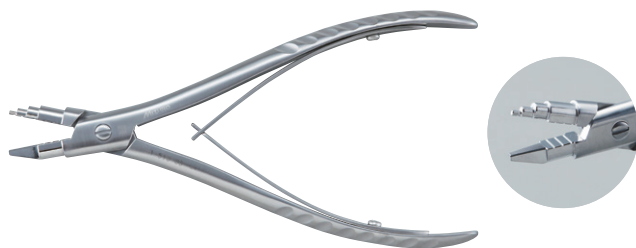

商品コード	全長	価格
51-516-03	18.4cm	¥48,000

- 鋼線を丸く曲げるのに適した器具です。
- 先端にチップを付け把持した鋼線が滑りにくいよう改良しました。

鋼線曲鉗子

ステンレス鋼製



商品コード	全長	価格
41-516-01	17.5cm	¥32,000

- 鋼線を直角に曲げるのに適した器具です。

田島式ペンチ

ステンレス鋼製



商品コード	全長	価格
03-001-58	13cm	¥30,000

- キルシュナー鋼線を適当な形に折り曲げたり、特に抜釘する際によく把持できるように工夫されています。

米式ペンチ

ステンレス鋼製



商品コード	全長	価格
01-176-10	16.5cm	¥55,000

- 鋼線抜取に用いると便利です。先端細型の強い把持力が得られるペンチです。

自由変形創外固定副子

動物用

ポリウレタン樹脂製



商品コード	仕様	入数	価格
51-400-01	250×100×3.7mm	1枚	¥2,800

- 特徴
 - ・ネジやピンの種類が限定されず、その刺入方向や範囲が自由に調整できます。
 - ・特別な器具セットが不要です。
 - ・X線による観察が容易です(レジンにX線透過可)。
 - ・立体的かつ強固に固定できます。
 - ・固定後の修正・補強が簡単です。
 - ・術後の創の管理が容易です。
 - ・治療後のネジやピンの抜去が容易です。
- 適用
 - ・開放性骨折、頸骨骨端部骨折、偽関節、骨切術、脱臼整復等に適用。
- 基本特性
 - 応答温度: 60℃以上
 - 軟化時間: 1～2分(粘土状/80℃のお湯につけた場合)
 - 樹脂化時間: 1分(冷水)、20分(常温)

① 本製品は未滅菌です。EOG滅菌を行って下さい。

トイ・カットプル
プレートシステム

S A骨接合用
内固定システム

小動物用
スクリュー

小動物用
プレート

プレート用
手術器具

鋼線ワイヤー
手術器具

骨鉗子・
整復器

剥離子・起子

鋭匙

骨のみ・
ハンマー

リーマー

ロングジュール

鉤

インター
ロッキングネール

電動ドリル

スーチャーワイヤー

ステンレス鋼製



01-226-20 ~ 26

■骨折用

商品コード	径	仕様	入数	価格
01-226-20	0.91mm	骨折用 #20	5m巻	¥8,000
01-226-21	0.71mm	骨折用 #22	5m巻	¥8,000
01-226-22	0.55mm	骨折用 #24	5m巻	¥8,000

■縫合用

商品コード	径	仕様	入数	価格
01-226-23	0.23mm	縫合用 #34	5m巻	¥8,000
01-226-24	0.19mm	縫合用 #36	5m巻	¥8,000
01-226-25	0.15mm	縫合用 #38	5m巻	¥8,000
01-226-26	0.12mm	縫合用 #40	5m巻	¥8,000


ワイヤーパッサー

動物用

ステンレス鋼製



51-520-00

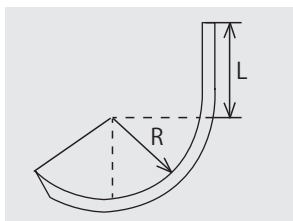

■ワイヤーパッサー (チューブ3種付)

商品コード	全長	仕様	価格
51-520-00	15.5cm	チューブ3種付	¥64,000

■ワイヤーパッサー用チューブ

商品コード	使用ワイヤー径	R	L	価格
51-520-01	(A) $\phi 0.5 \sim 0.8$ mm	13mm	10mm	¥6,000
51-520-02	(B) $\phi 0.8 \sim 1.0$ mm	16mm	10mm	¥6,000
51-520-03	(C) $\phi 0.8 \sim 1.0$ mm	19mm	20mm	¥6,000


デシャンプ動脈瘤針

ステンレス鋼製




商品コード	全長	仕様	価格
09-118-01	21cm	大 右 R14.15mm	¥9,200
09-118-02	21cm	大 左 R14.15mm	¥9,200
09-118-03	21cm	中 右 R11.30mm	¥9,200
09-118-04	21cm	中 左 R11.30mm	¥9,200
09-118-05	18cm	小 右 R 8.50mm	¥9,200
09-118-06	18cm	小 左 R 8.50mm	¥9,200
09-118-07	18cm	極小 右 R6.00mm	¥9,200
09-118-08	18cm	極小 左 R6.00mm	¥9,200

【原寸大】

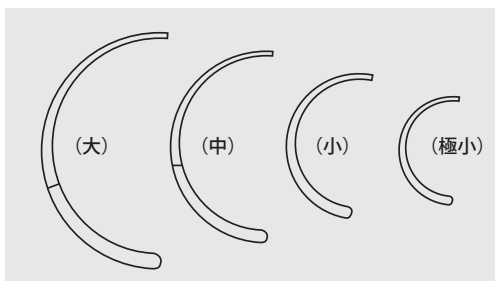

Z式鋼線締結器

ステンレス鋼製

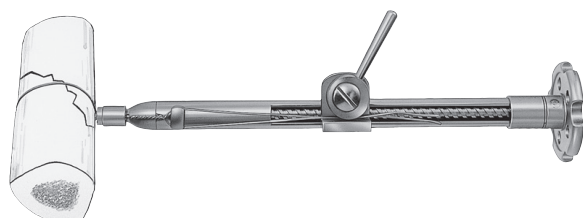

商品コード	全長	価格
01-225-00	21.5cm	¥45,150

●2本のワイヤーを互いに均一に締結することができます。

在庫限りで販売を終了させていただきます。





骨鉗子・整復器

ドリルガイド付骨片把持鉗子

動物用

ステンレス鋼製

商品コード	全長	価格
51-529-01	12cm	¥43,000

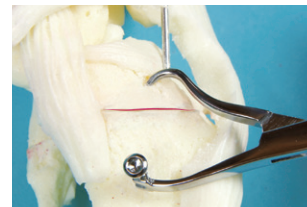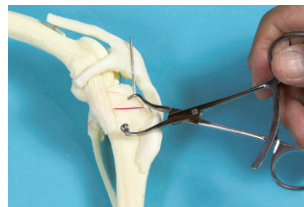


脛骨近位端骨折へのドリルガイド付骨片把持鉗子の使用例

ドリルガイド付骨片把持鉗子(頭部回転式)

動物用

ステンレス鋼製

商品コード	全長	価格
51-529-02	12cm	¥58,000

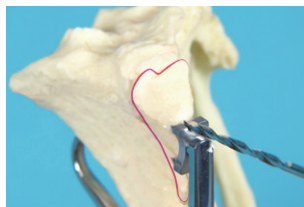

脛骨稜骨折(小骨片)へのドリルガイド付骨片把持鉗子(頭部回転式)の使用例

モスキート改良型プレート骨把持鉗子

動物用

ステンレス鋼製

商品コード	全長	価格
51-533-01	12cm	¥24,000




コッヘル改良型プレート骨把持鉗子

動物用

ステンレス鋼製

商品コード	全長	価格
51-533-02	14.5cm	¥24,000

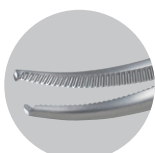

コッヘル改良型プレート骨把持鉗子の使用例



大腿骨頭頸部骨折の整復

腸骨骨折の整復

トイ・カッター
プレートシステム

S A 骨接合用
内固定システム

小動物用
スクリュー

小動物用
プレート

プレート用
手術器具

鋼線・ワイヤー
手術器具

骨鉗子・
整復器

剥離子・起子

鋭匙

骨のみ・
ハンマー

リーマー

ロングジョール

鉤

インター
ロッキングネール



電動ドリル

指骨把持鉗子

ステンレス鋼製



商品コード	全長	仕様	価格
03-028-28	12cm	大	¥25,000
03-028-29	12cm	小	¥25,000

【原寸大】

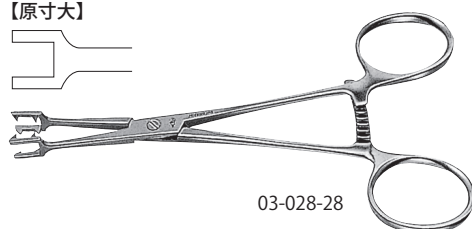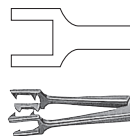

03-028-28

【原寸大】

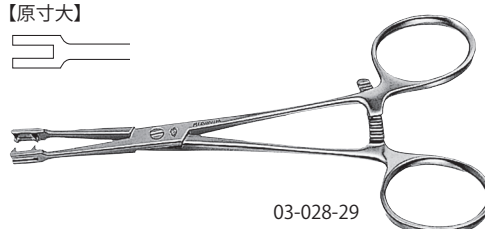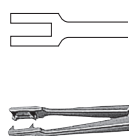

03-028-29

小骨把持鉗子

ステンレス鋼製

商品コード	全長	価格
01-250-00	12.5cm	¥35,000




新大指骨 骨把持鉗子

ステンレス鋼製




A

03-050-27

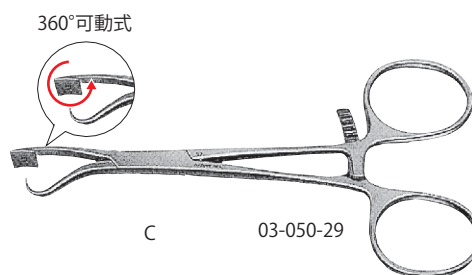


C

03-050-29

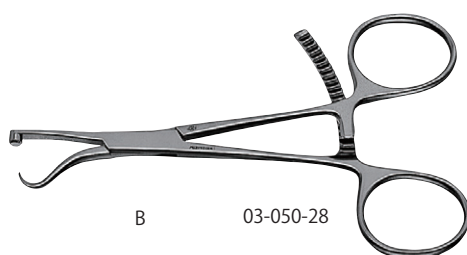

B

03-050-28

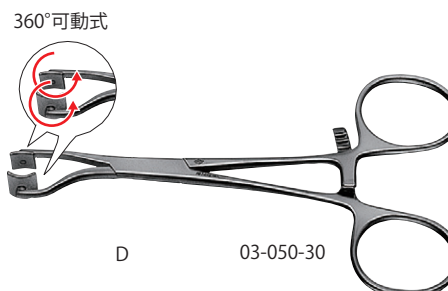

D

03-050-30


商品コード	全長	仕様	価格
03-050-27	10cm	A	¥30,000
03-050-28	12cm	B	¥40,000
03-050-29	12cm	C	¥50,000
03-050-30	12cm	D	¥53,000

03-050-28：プレートと骨を同時に把持することができます。
03-050-29～30：先端プレート部が360°可動するため、骨の形状に合わせた把持が可能です。

ウルリッヒ骨把持鉗子ミニ


動物用

ステンレス鋼製

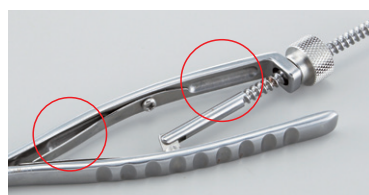

グリップ部は軽量化を図っています。

【原寸大】

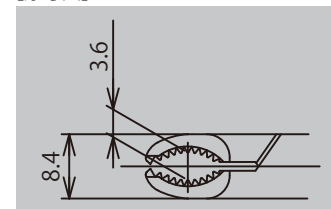


商品コード	全長	価格
51-532-00	16cm	¥95,000

●トイ犬種の橈骨整復に特化した骨把持鉗子。

セルフセンタリング鉗子

ステンレス鋼製

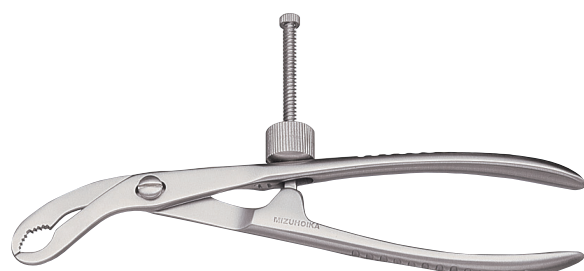

商品コード	全長	価格
41-522-00	15cm	¥48,000

セッター骨把持鉗子

ステンレス鋼製



商品コード	全長	仕様	価格
41-523-00	16cm	小	¥42,000

販売終了

整復用鉗子

ステンレス鋼製



商品コード	全長	価格
41-524-00	14cm	¥30,000

トイ・カットプル
プレートシステム
内固定システム

小動物用
スクリュー

小動物用
プレート

プレート用
手術器具

鋼線・ワイヤー
手術器具

骨鉗子・
整復器

剥離子・起子

鋭匙

骨のみ・
ハンマー

リーマー

ロングジュール

鉤



インター
ロッキングネール

電動ドリル

スクリュー支点型骨整復鉗子

動物用 ステンレス鋼製

腸骨骨折の整復への
スクリュー支点型骨整復鉗子の使用例

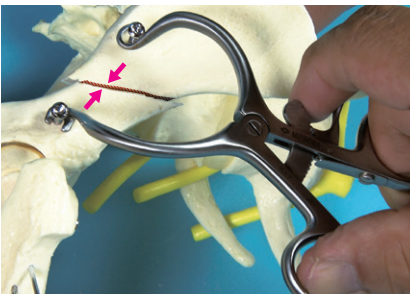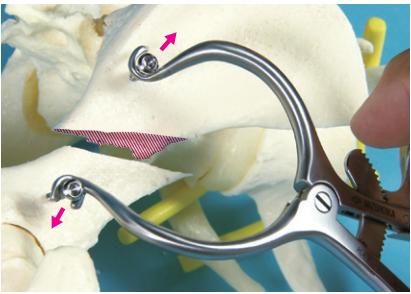

商品コード	仕様	全長	価格
51-500-11	左支点	10.2cm	¥79,000
51-500-12	右支点	10.2cm	¥79,000



51-500-11



左支点



51-500-12




右支点

骨折部整復維持器

動物用 ステンレス鋼製

大腿骨遠位端骨折への
骨折部整復維持器の使用例

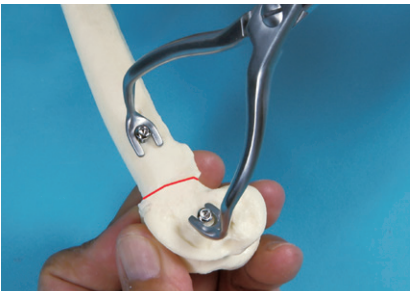

商品コード	全長	価格
51-500-21	19cm	¥75,000



5mm

骨折部整復維持器を用い骨折端を合わせた状態を保持し、大腿骨遠位端内側よりピンを刺入し固定。その後プレート固定を施す。

トイカツプル
プレートシステム
S A 骨接合用
内固定システム
小動物用
プレート
小動物用
プレート
手術器具
鋼線・ワイヤー
手術器具
骨鉗子・
整復器
剥離子・起子
鋭匙
骨のみ・
ハンマー
リーマー
ロングジュール
鉤
インター
ロッキングネイル
電動ドリル


骨折部整復牽引器

動物用

ステンレス鋼製


商品コード	全長	価格
51-500-31	17.4cm	¥89,000

大腿骨遠位端骨折への骨折部整復牽引器の使用例

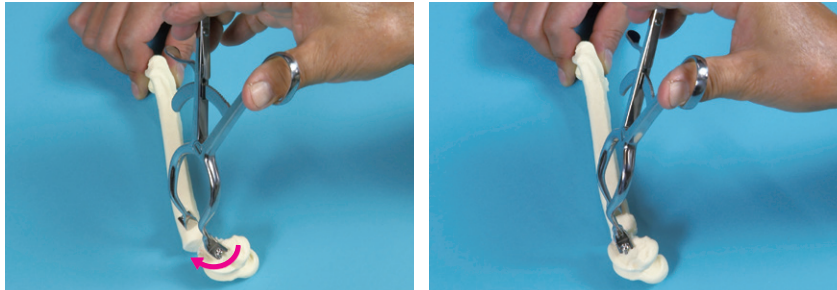


大腿骨遠位端及び骨折端外側に足掛りとなるスクリューを2本留置し、骨折部整復牽引器をスクリューに掛け、回す事により骨折端を合わせる。

肩関節脱臼の整復への使用例

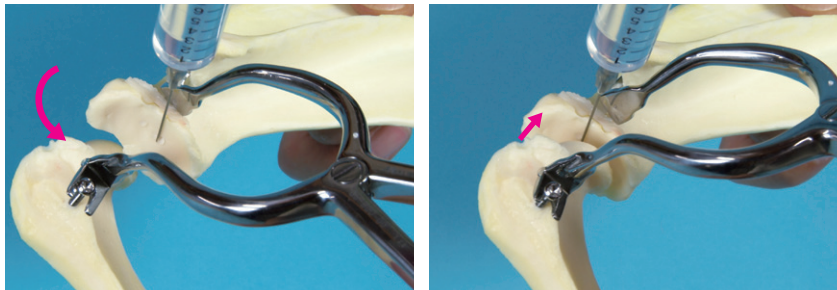

上腕骨に足掛りとなるスクリューを刺入し、骨折部整復牽引器の片方の腕をスクリューに掛け、もう一方を肩峰に掛ける。テコの原理を応用し、上腕骨側を引き上げ関節をはめ込む。

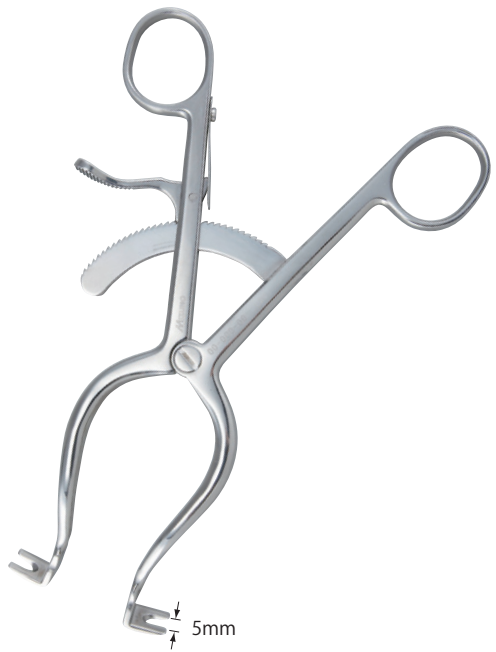

爪交換式骨鉗子


ステンレス鋼製

商品コード	全長	入り数	価格
41-517-03	25cm	先爪9本入り滅菌ケース付	¥90,000

●爪の差し換えにより大小の骨に万能的に使用できます。



先爪 9 本入り滅菌ケース付

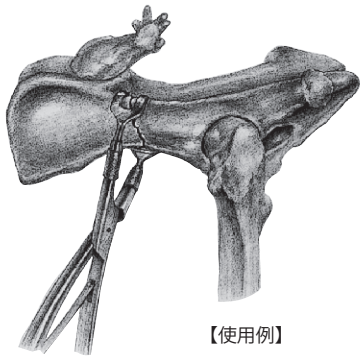


【使用例】

在庫限りで販売を終了させていただきます。

トイ・カタフル
プレートシステム
S A 骨接合用
内固定システム
小動物用
スクリュー
小動物用
プレート
小動物用
プレート用
手術器具
鋼線・ワイヤー
手術器具
骨鉗子・
整復器
剥離子・起子
鋭匙
骨のみ・
ハンマー
リーマー
ロングジュール
鉤
インター
ロッキングネイル
電動ドリル


若杉式骨整復器

ステンレス鋼製

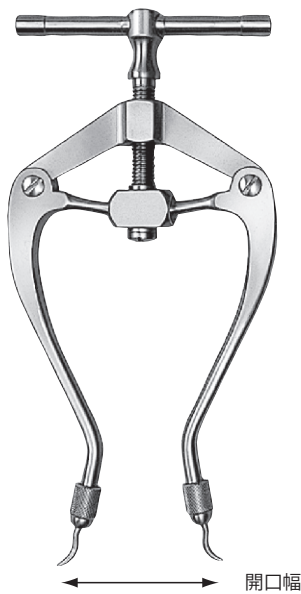

商品コード	全長	幅	仕様	価格
41-500-01	26cm	開口幅 12.5cm	大	¥124,000
41-500-02	20cm	開口幅 11.0cm	中	¥124,000
41-500-03	13cm	開口幅 9.0cm	小	¥124,000

●小動物の骨折整復に威力を発揮する至便な手術器具です。

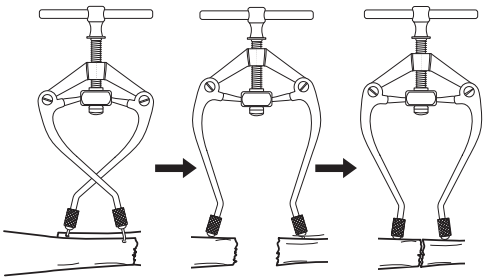

骨折整復把持鉗子

ステンレス鋼製



01-296-01



01-296-02



01-296-03



01-296-04

商品コード	全長	幅	仕様	価格
01-296-01	21.5cm	開口幅 8cm	大	¥70,000
01-296-02	18.5cm	開口幅 6cm	小	¥70,000
01-296-03	21.5cm	開口幅 8cm	ストッパー付 大	¥85,000
01-296-04	18.5cm	開口幅 6cm	ストッパー付 小	¥85,000

●ストッパーのあるタイプの鉗子は骨粗鬆度が強い場合に、またストッパーのないタイプの鉗子は、経皮的な固定の際に向いています。
●サイズは大小2種類があり、関節の大きさや骨片の大きさ・部位により選択できます。



トイカツプル
プレートシステム
S A 骨接合用
内固定システム
小動物用
スクリュー
小動物用
プレート
手術器具
鋼線・ワイヤー
手術器具
骨鉗子・
整復器
剥離子・起子
鋭匙
骨のみ・
ハンマー
リーマー
ロングユール
鉤
インター
ロッキングネイル
電動ドリル

剥離子・起子


剥離子

動物用

ステンレス鋼製



商品コード	全長	価格
51-510-01	14cm	¥20,000

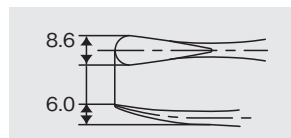


水野氏両頭骨膜起子

ステンレス鋼製



【原寸大】

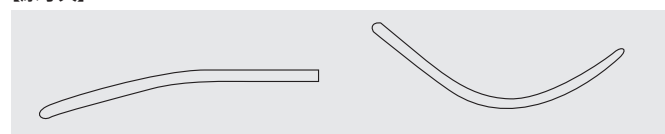

商品コード	全長	価格
02-035-00	20cm	¥10,000


●骨膜を骨から剥離するのに使います。

東氏骨膜剥離子

ステンレス鋼製



【原寸大】

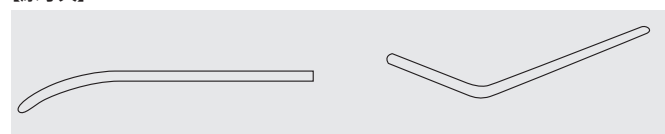

商品コード	全長	価格
02-036-00	21cm	¥10,000

田島式 単鈍鉤・エレバトリウム

ステンレス鋼製



幅4.8mm

商品コード	全長	価格
03-001-52	18cm	¥10,000

●単鈍鉤は、主として特定の腱を引っかけて引くために使います。
鈍端のエレバトリウムは、骨膜起子として使います。

田島式 エレバ・ラスパ

ステンレス鋼製



幅6.0mm

幅4.3mm

商品コード	全長	価格
03-001-60	18cm	¥10,000

エレバ・ラスパトリウム

ステンレス鋼製



商品コード	全長	価格
03-002-12	18cm	¥25,000

トイ・カタフル
プレートシステム

S A 骨接合用
内固定システム

小動物用
スクリュー

小動物用
プレート

ブレード用
手術器具

鋼線・ワイヤー
手術器具

骨鉗子・
整復器

剥離子・起子

鋭匙

骨のみ・
ハンマー

リーマー

ロングジュール

鉤

インター
ロッキングネイル

電動ドリル

エレバトリウム (3mm・5mm)

ステンレス鋼製



幅3mm

幅5mm

商品コード	全長	価格
03-002-13	18cm	¥23,000

本島氏両頭骨膜剥離子

ステンレス鋼製



商品コード	全長	価格
01-361-01	21cm	¥10,000
01-361-02	14cm	¥10,000

●両端に弯曲を持った刃を有していて、棘突起などでの骨面に沿った骨膜剥離をするのに便利です。

ボーンレトラクター

ステンレス鋼製



03-001-67



03-001-68

商品コード	全長	価格
03-001-67	15.3cm	¥28,000
03-001-68	12.0cm	¥28,000


鋭匙

シェーデ氏骨鋭匙

ステンレス鋼製



【原寸大】

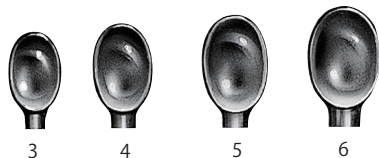

商品コード	仕様	幅	全長	価格
01-381-01	No.000	2× 4mm	19cm	¥25,000
01-381-02	No.00	3× 5mm	19cm	¥25,000
01-381-03	No.0	4× 6mm	19cm	¥25,000
01-381-04	No.1	5× 8mm	19cm	¥25,000
01-381-05	No.2	6× 9mm	19cm	¥25,000
01-381-06	No.3	7× 10mm	19cm	¥25,000
01-381-07	No.4	8× 11mm	19cm	¥25,000
01-381-08	No.5	9× 12mm	19cm	¥25,000
01-381-09	No.6	10× 13mm	19cm	¥25,000

●骨孔の中や骨断端に残った骨片を削り取るのに用います。


ホルクマン氏両頭鋭匙

ステンレス鋼製



商品コード	全長	幅	価格
01-386-01	16cm	3×5mm／4×6mm	¥25,000
01-386-02	16cm	5×8mm／6×9mm	¥25,000

【原寸大】

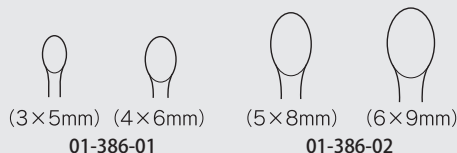

01-386-01

01-386-02

骨のみ・ハンマー

バランスハンマー

動物用

ステンレス鋼製



商品コード	全長	仕様	価格
51-530-00	18.5cm	ヘッド部: φ3cm	¥32,000



●ハンマーを振り出す際の重心バランスが良く、のみへの力の伝達に優れています。3cm径の大きなハンマーヘッドはヒッティングポイントの面積が広く、術野を見ながらの刃先操作に集中できるよう設計されています。また、ヘッド部中心に設けられたフラットな部分は、インプラントを加工する際の台として使用することも可能です。

ナイロンハンマー

頭部：耐熱硬質ナイロン製
柄：アルミ合金製


商品コード	全長	仕様	価格
01-413-01	26.0cm	大	¥30,000
01-413-02	24.0cm	小	¥25,000
03-002-04	18.5cm	極小	¥21,000

京大式手術のみ

ステンレス鋼製



01-393-09



01-393-14

両刃


商品コード	仕様	刃幅	全長	価格
01-393-05	両刃	10mm	17cm	¥16,000
01-393-07	両刃	7mm	17cm	¥16,000
01-393-09	両刃	5mm	17cm	¥16,000
01-393-11	両刃	4mm	17cm	¥16,000
01-393-13	両刃	3mm	17cm	¥16,000
01-393-15	両刃反型	5mm	17cm	¥16,000
01-393-16	両刃反型	3mm	17cm	¥16,000

片刃

商品コード	仕様	刃幅	全長	価格
01-393-06	片刃	10mm	17cm	¥16,000
01-393-08	片刃	7mm	17cm	¥16,000
01-393-10	片刃	5mm	17cm	¥16,000
01-393-12	片刃	4mm	17cm	¥16,000
01-393-14	片刃	3mm	17cm	¥16,000


●両刃

【原寸大】

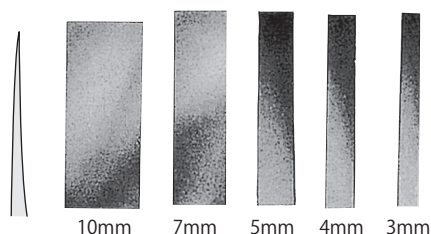


●片刃

【原寸大】

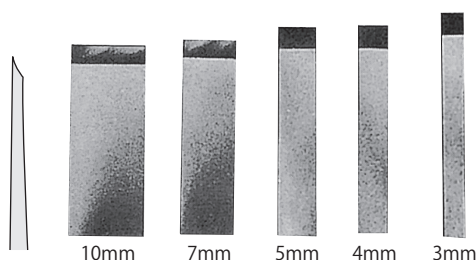

●両刃反型

【原寸大】

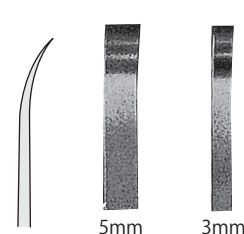
トイ・カットフル
プレートシステム

S A骨接合用
内固定システム

小動物用
スクリュー

小動物用
プレート

プレート用
手術器具

鋼線・ワイヤー
手術器具

骨鉗子・
整復器

剥離子・起子

鋭匙

骨のみ・
ハンマー

リーマー

ロソジュール

鉤

インター
ロッキングネイル

電動ドリル

田島式 オステオトーム

ステンレス鋼製




03-001-61



03-001-62

商品コード	刃幅	全長	価格
03-001-61	10mm	15cm	¥23,000
03-001-62	5mm	15cm	¥23,000

刃先形状

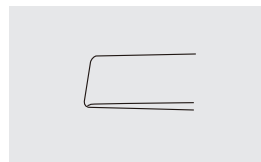

田島式 平ノミ

ステンレス鋼製



商品コード	刃幅	全長	価格
03-001-63	4mm	16.5cm	¥22,000

田島式 丸ノミ

ステンレス鋼製



商品コード	刃幅	全長	価格
03-001-64	4mm	15cm	¥22,000

●指骨関節固定術、指骨および中手骨切り術、腱の骨への付着等に用います。

整形外科のみ

ステンレス鋼製

両刃



01-396-02

両刃

商品コード	刃幅	全長	価格
01-396-00	3mm	22cm	¥15,500
01-396-01	4mm	22cm	¥15,500
01-396-02	6mm	22cm	¥15,500
01-396-03	8mm	22cm	¥15,500
01-396-04	10mm	22cm	¥15,500
01-396-05	12mm	22cm	¥15,500
01-396-06	15mm	22cm	¥15,500
01-396-07	20mm	22cm	¥20,000
01-396-10	40mm	22cm	¥20,000

片刃



01-396-22

片刃

商品コード	刃幅	全長	価格
01-396-19	3mm	22cm	¥15,500
01-396-20	4mm	22cm	¥15,500
01-396-21	6mm	22cm	¥15,500
01-396-22	8mm	22cm	¥15,500
01-396-23	10mm	22cm	¥15,500
01-396-24	12mm	22cm	¥15,500
01-396-25	15mm	22cm	¥15,500
01-396-26	20mm	22cm	¥20,000

生田式指骨用骨のみ

ステンレス鋼製



03-002-07

商品コード	刃幅	全長	価格
03-002-07	2mm	16cm	¥36,000
03-002-08	4mm	16cm	¥36,000
03-002-09	6mm	16cm	¥36,000
03-002-10	10mm	16cm	¥36,000

リーマー

ハンドリーマー


動物用

ステンレス鋼製



ペットサイズに適合した髓腔リーマー

みなとよこはま動物病院 理事長 永岡勝好先生 開発協力

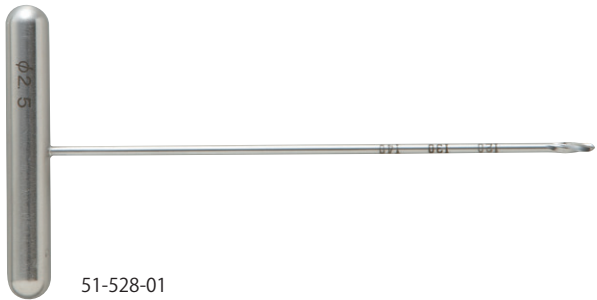


51-528-01

- 1 どんぐり状の先端は、リーミング性能を高めるだけでなく、皮質骨を貫通させる危険性を減少させ、軟部組織の損傷を軽減させます。
- 2 T字型のグリップは握りやすく、わずかな手動力でリーミングを可能にします。
- 3 丸軸シャフトにはわずかな柔軟性を持たせてあるので、髓腔内に沿ったリーミングが可能となり、髓内進行をサポートします。
- 4 先端サイズは、φ2.5mm、3.0mm、3.5mm、4.0mmの4種類をラインナップ。

臨床応用



- 膝蓋骨脱臼矯正術
- 関節内靱帯貫通孔の作製
- 四肢骨のインターロッキング、ピンニング前の骨髓リーミング
- 海綿骨スクリュー用の作孔
- 海綿骨採取の皮質骨開窓

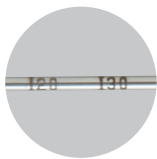

リーミングの深さがわかるメモリ付き。

商品コード	径	全長	価格
51-528-01	φ2.5mm	120mm	¥28,000
51-528-02	φ3.0mm	120mm	¥28,000
51-528-03	φ3.5mm	120mm	¥28,000
51-528-04	φ4.0mm	120mm	¥28,000

膝蓋骨脱臼滑車溝造深術(トンネルリセクション)

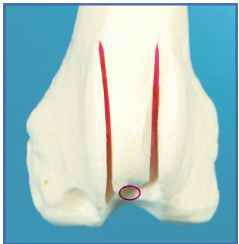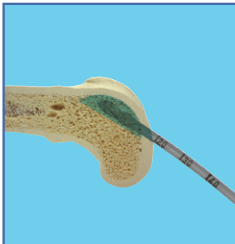

軟骨下骨下を滑車溝に平行に滑車の近位までリーミングする。

鋭匙でさらに滑車下(軟骨下骨下)の余剰な海面骨を掻き出す。


滑車稜の内側を滑車稜に平行にしてオシレートソーもしくはハンドソーにてのこぎり目を入れ、軟骨溝の底面を陥凹しやすくした後、下骨を押し込む。

トイ・カットプル
プレートシステム
S A 骨接合用
小動物用
スクリュー
小動物用
プレート
プレート用
手術器具
鋼線・ワイヤー
手術器具
骨鉗子・
整復器
剥離子・起子
鋭匙
骨のみ・
ハンマー
リーマー
ロングジュール
鉤
インター
ロッキングネール
電動ドリル

ロングジュール

動物用側弯丸のみ鉗子 **MZ-MODEL**



とがさき動物病院 諸角元二先生 開発協力

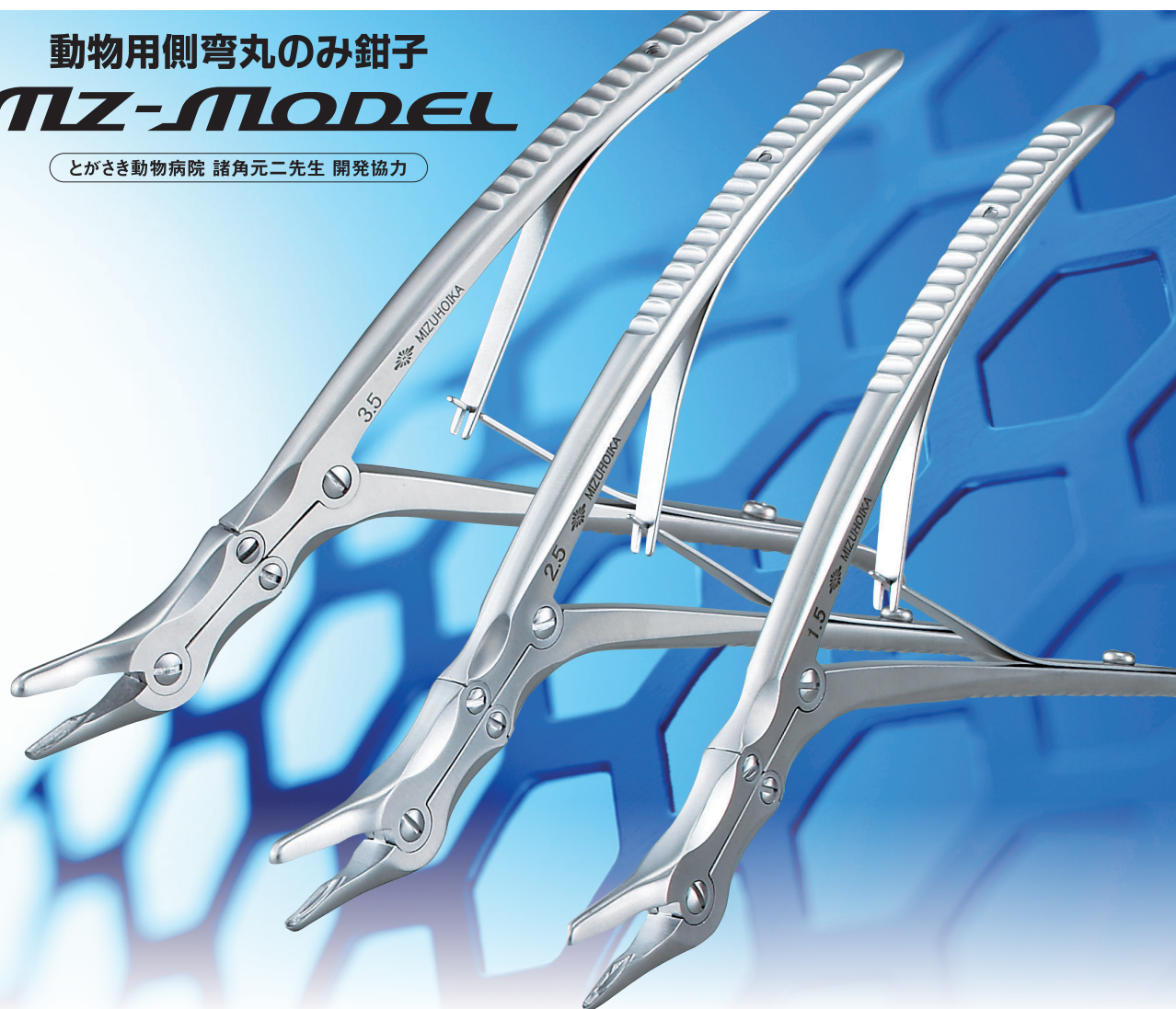

側弯丸のみ鉗子 MZ-MODEL

動物用 ステンレス鋼製

商品コード	先端幅	全長	価格
51-513-11	1.5mm	17cm	¥75,000
51-513-12	2.5mm	17cm	¥75,000
51-513-13	3.5mm	17cm	¥75,000

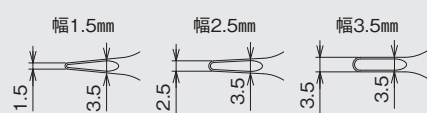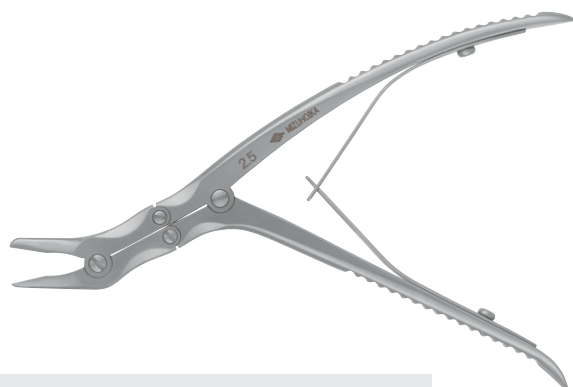


二連関節丸のみ鉗子

動物用 ステンレス鋼製


商品コード	仕様	先端幅	全長	価格
51-513-21	直型	1.5mm	15.5cm	¥75,000
51-513-22	直型	2.5mm	15.5cm	¥75,000
51-513-31	反型	1.5mm	15.5cm	¥75,000
51-513-32	反型	2.5mm	15.5cm	¥75,000



【直型】

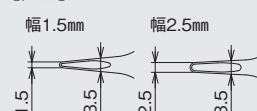

【反型】

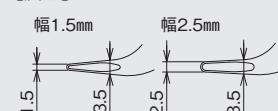


指骨形成用骨鉗子

ステンレス鋼製



商品コード	先端幅	全長	価格
03-028-17	2.5mm	14.5cm	¥25,000

【原寸大】

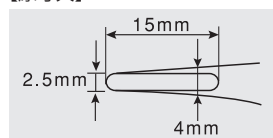


丸のみ鉗子 曲

ステンレス鋼製



商品コード	先端幅	全長	価格
41-513-01	2.5mm	14cm	¥36,000

【原寸大】

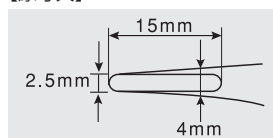


小型丸のみ鉗子 反型

ステンレス鋼製




商品コード	先端幅	全長	価格
01-301-01	2.6mm	15cm	¥25,000
01-301-02	3.0mm	15cm	¥25,000
01-301-03	3.6mm	15cm	¥25,000

【原寸大】

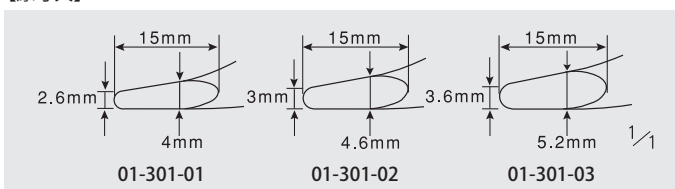

マイクロロンジャー

ステンレス鋼製

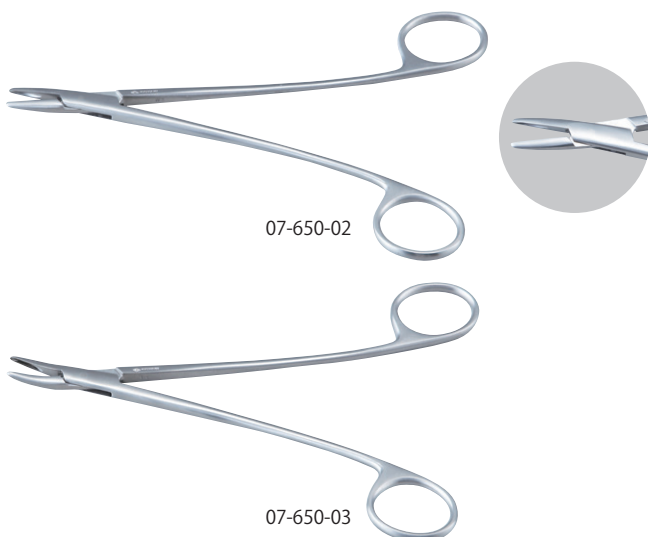

商品コード	仕様	全長	価格
07-650-00	直型	19cm	¥32,000
07-650-01	反型	19cm	¥32,000
07-650-02	直型	16cm	¥32,000
07-650-03	反型	16cm	¥32,000

- ピストル型に比べ先端部の安定したコントロールが可能です。
- 通常のケリソソパンチ、リウエル鉗子では
刺入しにくい部位に使用できます。
- 特殊スリムシャフトの採用で細部まで届きます。


側彎二連関節丸のみ鉗子

ステンレス鋼製



商品コード	先端幅	全長	価格
02-073-02	3.2mm	24cm	¥89,000

【原寸大】

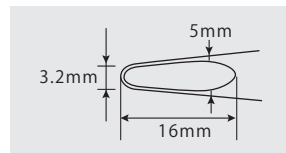


リウエル氏丸のみ鉗子

ステンレス鋼製



商品コード	仕様	先端幅	全長	価格
01-300-01	No1 直型	5.5mm	18cm	¥25,000
01-300-02	No1 反型	5.5mm	18cm	¥25,000
01-300-03	No2 直型	7.0mm	18cm	¥25,000
01-300-04	No2 反型	7.0mm	18cm	¥25,000
01-300-05	No3 直型	9.0mm	22cm	¥30,000
01-300-06	No3 反型	9.0mm	22cm	¥30,000
01-300-07	No4 直型	11.0mm	22cm	¥30,000
01-300-08	No4 反型	11.0mm	22cm	¥30,000

【原寸大】

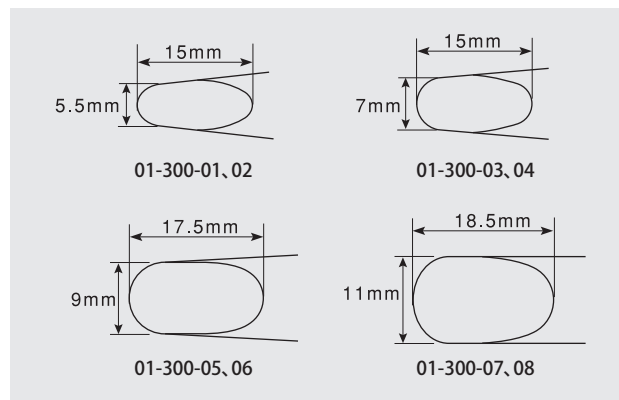

リストン氏骨剪刀

ステンレス鋼製



商品コード	仕様	全長	価格
01-311-01	直型	17cm	¥21,000
01-311-02	反型	17cm	¥21,000

東氏棘状突起切除鉗子

ステンレス鋼製



商品コード	全長	価格
02-085-00	23cm	¥68,000



「3つのD」

1 Detachable

分解しやすく(Detachable)組み立てやすい
シンプルな構造で、隅々まで確実に洗浄できます。



2 Durability

新レール機構およびDLCコーティングの採用により、
刃部の精密な嵌合かつスムーズな摺動を実現。
これにより、シャープな切れ味と
滑らかな操作性を長期間維持します。

3 DLC coating

DLCコーティング※を採用した
ツヤ消しブラックのボディは、耐摩耗性に優れ、
術中のハレーション予防にも効果を発揮します。

※Diamond Like Carbon

Tri-Dケリソン骨パンチ 斜型35°

ステンレス鋼製



Tri-Dケリソン骨パンチ 彎曲 斜型35°

ステンレス鋼製



商品コード	先端厚み	刃幅	有効長	価格
02-095-41	1.8mm	1mm	15cm	¥152,000
02-095-42	2.0mm	2mm	15cm	¥152,000
02-095-43	2.5mm	3mm	15cm	¥152,000
02-095-44	3.0mm	4mm	15cm	¥152,000
02-095-45	3.2mm	5mm	15cm	¥152,000
02-095-46	3.5mm	6mm	15cm	¥152,000
02-095-51	1.8mm	1mm	20cm	¥152,000
02-095-52	2.0mm	2mm	20cm	¥152,000
02-095-53	2.5mm	3mm	20cm	¥152,000
02-095-54	3.0mm	4mm	20cm	¥152,000
02-095-55	3.2mm	5mm	20cm	¥152,000
02-095-56	3.5mm	6mm	20cm	¥152,000

商品コード	先端厚み	刃幅	有効長	価格
02-095-62	2.0mm	2mm	15cm	¥152,000
02-095-63	2.5mm	3mm	15cm	¥152,000
02-095-64	3.0mm	4mm	15cm	¥152,000
02-095-72	2.0mm	2mm	20cm	¥152,000
02-095-73	2.5mm	3mm	20cm	¥152,000
02-095-74	3.0mm	4mm	20cm	¥152,000

トイ・カッター
プレートシステム
内固定システム

小動物用
スクリュー

小動物用
プレート

プレート用
手術器具

鋼線・ワイヤー
手術器具

骨鉗子・
整復器

剥離子・起子

鋭匙

骨のみ・
ハンマー

リーマー

ロングジュール

鉤

インター
ロッキングナイフ

電動ドリル

パンチシャフト

ステンレス鋼製

商品コード	刃幅	有効長	仕様	価格
02-100-30	2mm	15cm	斜型35°上向	¥65,000
02-100-31	3mm	15cm	斜型35°上向	¥65,000
02-100-32	4mm	15cm	斜型35°上向	¥65,000
02-100-33	5mm	15cm	斜型35°上向	¥63,000



360°
自由回転

- シャフトが360°自由回転するため、パンチの操作に死角が生じることなく使用できます。
- 前方よりの椎体骨棘切除、靱帯骨化の切離など繊細な前方除圧操作に効果的です。
- パンチシャフトとグリップハンドルは着脱方式で、自由にシャフトの交換・着脱ができます。

グリップハンドル


ステンレス鋼製

商品コード	仕様	価格
02-100-50	共用	¥60,000



ケリソン骨パンチ 斜型35°上向

ステンレス鋼製

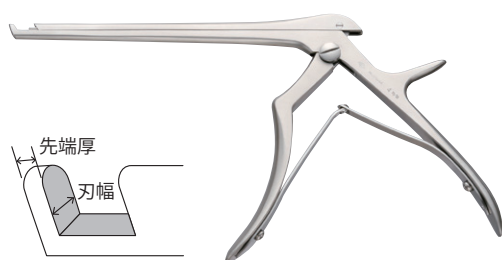

商品コード	先端厚み	刃幅	有効長	価格
02-095-08	1.2mm	1mm	18cm	¥100,000
02-095-01	2.0mm	2mm	15cm	¥100,000
02-095-02	2.5mm	3mm	15cm	¥100,000
02-095-03	3.0mm	4mm	15cm	¥100,000
02-095-04	3.0mm	5mm	15cm	¥100,000
02-095-05	2.5mm	3mm	18cm	¥100,000
02-095-06	3.0mm	4mm	18cm	¥100,000
02-095-07	3.0mm	5mm	18cm	¥100,000

ケリソン骨パンチ 直角上向

ステンレス鋼製



商品コード	先端厚み	刃幅	有効長	価格
02-093-01	1.8mm	2mm	15cm	¥100,000
02-093-02	1.8mm	3mm	15cm	¥100,000
02-093-03	2.2mm	4mm	15cm	¥100,000
02-093-04	2.2mm	5mm	15cm	¥100,000
02-093-05	1.8mm	3mm	18cm	¥100,000
02-093-06	2.2mm	4mm	18cm	¥100,000
02-093-07	2.2mm	5mm	18cm	¥100,000

ケリソン骨パンチ 直角下向

ステンレス鋼製



商品コード	先端厚み	刃幅	有効長	価格
02-094-01	1.8mm	3mm	15cm	¥100,000
02-094-02	2.2mm	4mm	15cm	¥100,000
02-094-03	2.2mm	5mm	15cm	¥100,000
02-094-04	1.8mm	3mm	18cm	¥100,000
02-094-05	2.2mm	4mm	18cm	¥100,000
02-094-06	2.2mm	5mm	18cm	¥100,000

髄核鋭匙鉗子

ステンレス鋼製



商品コード	仕様	先端幅	有効長	価格
02-803-98	直	2.3mm	18cm	¥92,000
02-803-99	弱弯	2.3mm	18cm	¥92,000

椎間板鋭匙鉗子

ステンレス鋼製



商品コード	仕様	先端幅	有効長	価格
02-084-01	直型	3mm	14cm	¥89,000
02-084-02	直型	4mm	14cm	¥89,000
02-084-03	上向型	3mm	14cm	¥89,000
02-084-04	上向型	4mm	14cm	¥89,000

トイ・カットフル
プレートシステム

S A骨接合用
内固定システム

小動物用
スクリュー

小動物用
プレート

プレート用
手術器具

鋼線・ワイヤー
手術器具

骨鉗子・
整復器

剥離子・起子

鋭匙

骨のみ・
ハンマー

リーマー

ロングジュール

鉤

インター
ロッキングネール

電動ドリル

鉤

クライエンビュール型血管兼神経鉤


ステンレス鋼製




商品コード	全長	仕様	価格
07-850-00	19cm	玉付小	¥16,000
07-851-00	19cm	玉付大	¥16,000

●精密な操作を要する部位の神経や血管の剥離や牽引に用いられます。

【原寸大】

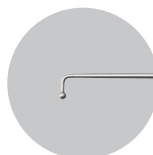

07-850-00

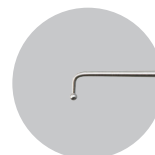

07-851-00

岡大改良型動脈瘤剥離子(先端銀製取換式)

ステンレス鋼・銀製



商品コード	全長	仕様	価格
07-968-00	19cm	スぺアー付	¥23,000

- 軟性で自由に曲げることができ、先端が小球状になっているので、血管を剥離するとき便利です。
- 小球状の銀製先端部がスぺアー交換できるようになっています。布ヤスリで好みの太さに細工することができます。

【原寸大】



岡大改良型銀先ゾンデ(交換用)

銀製

商品コード	全長	価格
07-969-00	4.5cm	¥5,000

ファインソーブレード

ステンレス鋼製



ひとつのブレードを有効活用!

ひとつのブレードを有効活用できる「ファインブレード」は、4つのカットゾーンが分かりやすいように、ブレード盤表面に電解マーキングを施しています。

耐久寿命が約3倍アップ!

従来品よりもさらに硬質な素材を採用するとともに、仕上げ加工にもこだわり、耐久寿命を約3倍アップ※させることに成功しました。石膏やシンセティックギプス、ファイバークラスキャストなどにも容易に切断できます。 ※当社比

リーズナブルなコストを実現!

性能や品質とともにコストパフォーマンスを追求し、リーズナブルなコストを実現しました。

PENTA-Nail System


インターロッキングネイル

手術現場の状況や要求から、低労力で短時間に正確な整復が成し得る装置を開発。

5つのコンセプト～「PENTA」は「5」を表す接頭語です～

より円滑・確実な手術をサポートするために

5つのコンセプトに注目

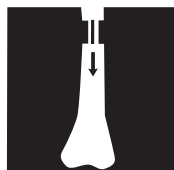

Bone Traction／骨牽引

スライド式による牽引機構によって、強縮した筋肉であってスムーズに牽引できます。




Leglength Retention／脚長保持

骨牽引・圧迫機能により、術中の脚長保持がスムーズに行えます。



Bone Reduction／骨整復

アライメントの調整が取りやすいので、手術がスムーズに行えます。

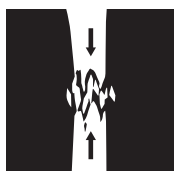


Compression／圧迫

骨折部に圧力を均等に加えるので骨癒合スピードが早まります。



Rotation Prevention／回旋防止


横止スクリューによって回旋が防げます。

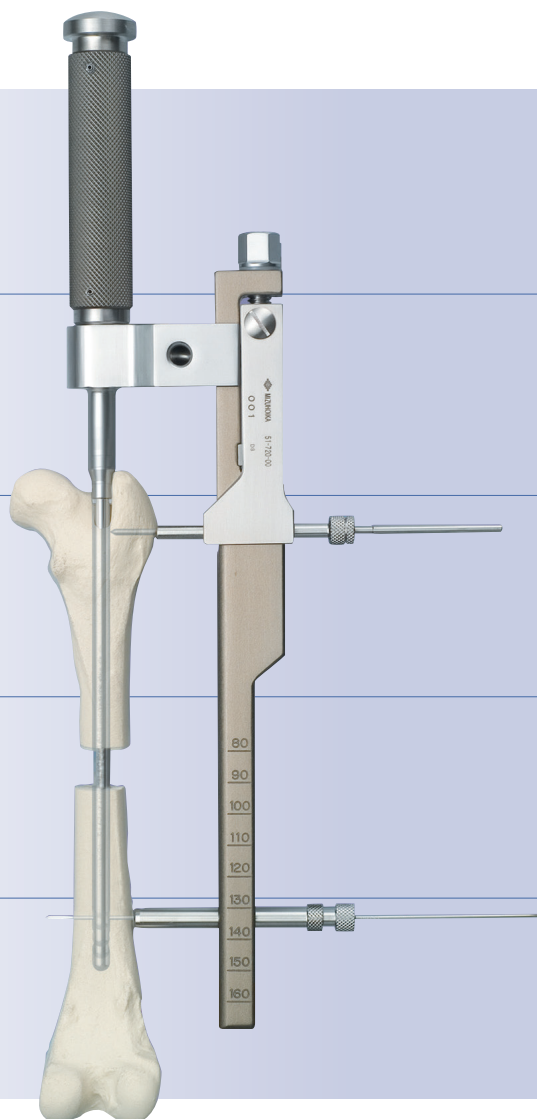

柴犬 6ヶ月 体重7.75 kg
大腿骨遠位部骨折



バーニーズ 1才3ヶ月 体重30.5kg
大腿骨粉碎骨折

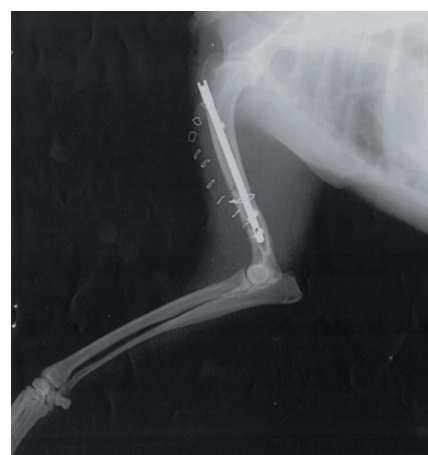

甲斐犬 2才 体重13.8kg
上腕骨粉碎骨折

トイ・カット
プレートシステム
SA骨接合用
内固定システム

小動物用
スクリュー

小動物用
プレート

プレート用
手術器具

鋼線・ワイヤー
手術器具

骨鉗子・
整復器

剥離子・起子

鋭匙

骨のみ・
ハンマー

リーマー

ロングジュール

鉤


インター
ロッキングネイル

電動ドリル

インターロッキングネイル

PENTA インプラントセット

動物用

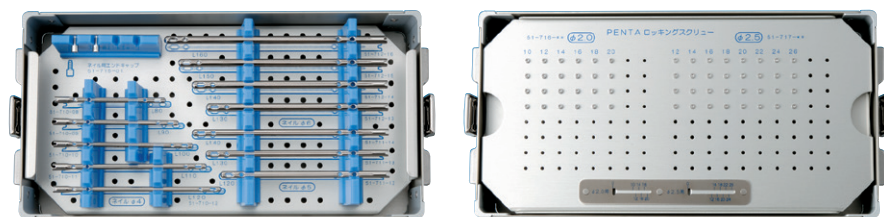

※写真は滅菌ケースを使用した場合の収納例です。


商品コード	全長	スタンダードセット セット数	ベーシックセット セット数
PENTAネイルφ4			
51-710-08	80mm	1	1
51-710-09	90mm	1	1
51-710-10	100mm	1	1
51-710-11	110mm	1	1
51-710-12	120mm	1	1
PENTAネイルφ5			
51-711-12	120mm	1	—
51-711-13	130mm	1	—
51-711-14	140mm	1	—
PENTAネイルφ6			
51-712-13	130mm	1	—
51-712-14	140mm	1	—
51-712-15	150mm	1	—
51-712-16	160mm	1	—

商品コード	全長	スタンダードセット セット数	ベーシックセット セット数
PENTAロッキングスクリューM2.0			
51-716-10	10mm	4	4
51-716-12	12mm	4	4
51-716-14	14mm	4	4
51-716-16	16mm	4	4
51-716-18	18mm	4	4
51-716-20	20mm	4	4
PENTAロッキングスクリューM2.5			
51-717-12	12mm	4	—
51-717-14	14mm	4	—
51-717-16	16mm	4	—
51-717-18	18mm	4	—
51-717-20	20mm	4	—
51-717-22	22mm	4	—
51-717-24	24mm	4	—
51-717-26	26mm	4	—

商品コード	全長	スタンダードセット セット数	ベーシックセット セット数
PENTAネイル用エンドキャップ			
51-715-01	ネイルφ4・5・6用	2	2
ネイル用滅菌ケース			
51-590-51	W309×D152×H73.5mm	1	1
ロッキングスクリュー用滅菌ケース			
51-590-52	W309×D152×H73.5mm	1	1
セット名		価格	
PENTAインプラントスタンダードセット (ネイルφ4・5・6mm対応)		¥807,600	
PENTAインプラントベーシックセット (ネイルφ4mm対応)		¥475,600	

PENTA インストゥルメントセット

動物用

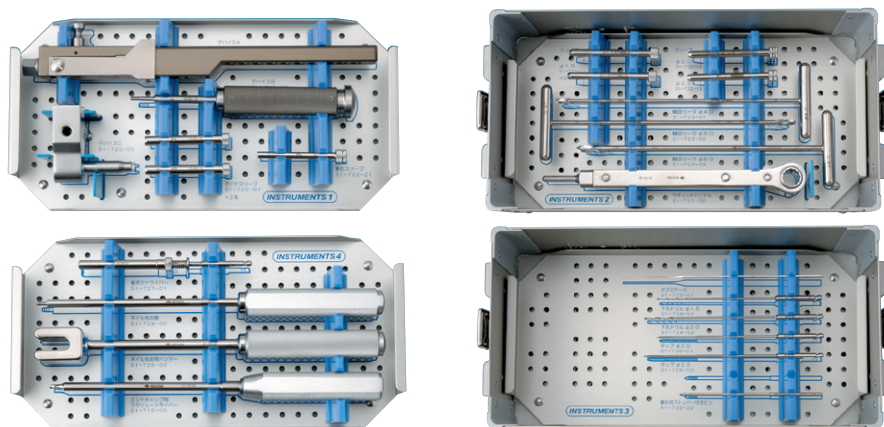



※写真は滅菌ケースを使用した場合の収納例です。

商品コード	仕様	スタンダードセット セット数	ベーシックセット セット数
PENTAネイル打込器(牽引機能付)			
51-720-00	—	1	1
PENTAガイドスリーブ			
51-722-01	6cm	2	2
PENTAスリーブ			
51-722-11	φ1.5mm	2	2
51-722-12	φ2.0mm	1	1
51-722-13	φ2.5mm	1	—
PENTA牽引スリーブ			
51-722-21	—	1	1
PENTA牽引用ストッパー付きピン			
51-722-22	—	1	1

商品コード	仕様	スタンダードセット セット数	ベーシックセット セット数
PENTA髓腔リーマ			
51-723-01	φ4mm	1	1
51-723-02	φ5mm	1	1
51-723-03	φ6mm	1	—
PENTA下孔ドリル			
51-724-01	φ1.5mm	1	1
51-724-02	φ2.0mm	1	—
PENTAデプスゲージ			
51-725-01	—	1	1
PENTAタップ			
51-726-01	M2.0用	1	1
51-726-02	M2.5用	1	—

商品コード	仕様	スタンダードセット セット数	ベーシックセット セット数
PENTA骨ネジドライバーシャフト(ヘキサローブ)			
51-727-01	12.5cm	1	1
PENTAラチェットハンドル			
51-721-00	20.5cm	1	1
PENTAネイル除去器			
51-728-01	25cm	1	1
PENTAネイル抜去ハンマー			
51-729-00	25cm	1	1
PENTAスクレイドライバー(エンドキャップ用)			
51-715-00	28.3cm	1	1
PENTAインストゥルメント用滅菌ケース			
51-590-50	W309×D152×H106.5mm	1	1

セット名	価格
PENTAインストゥルメントスタンダードセット(ネイルφ4・5・6mm対応)	¥1,396,000
PENTAインストゥルメントベーシックセット(ネイルφ4mm対応)	¥1,294,000

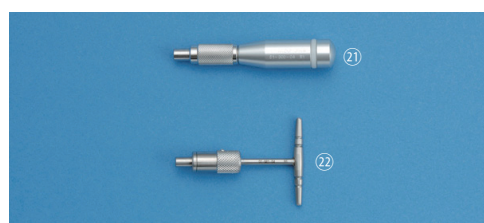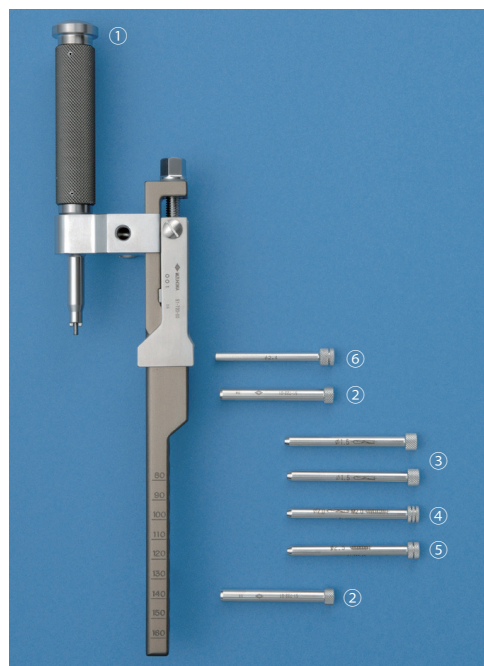

デバイス

商品コード	商品名	価格
51-720-00	①PENTAネイル打込器（牽引機能付）	¥360,000

スリーブ類

商品コード	商品名	価格
51-722-01	②PENTAガイドスリーブ	¥16,000
51-722-11	③PENTAスリーブφ1.5（M2.0下孔ドリル・仮固定用）	¥16,000
51-722-12	④PENTAスリーブφ2.0（M2.0タップ・M2.5下孔ドリル用）	¥16,000
51-722-13	⑤PENTAスリーブφ2.5（M2.5タップ用）	¥16,000
51-722-21	⑥PENTA牽引スリーブ	¥16,000

リーマ・ドリル他

商品コード	商品名	価格
51-722-22	⑦PENTA牽引用ストッパー付きピン	¥8,000
51-723-01	⑧PENTA髓空リーマーφ4	¥52,000
51-723-02	⑨PENTA髓空リーマーφ5	¥52,000
51-723-03	⑩PENTA髓空リーマーφ6	¥52,000
51-724-01	⑪PENTA下孔ドリルφ1.5（M2.0スクリュー用）	¥10,000
51-724-02	⑫PENTA下孔ドリルφ2.0（M2.5スクリュー用）	¥10,000
51-725-01	⑬PENTAデブスゲージ	¥28,000
51-726-01	⑭PENTAタップM2.0	¥24,000
51-726-02	⑮PENTAタップM2.5	¥24,000
51-727-01	⑯PENTA骨ネジドライバースhaft（ヘキサローブ）	¥240,000

抜去器・その他

商品コード	商品名	価格
51-721-00	⑰PENTAラチェットハンドル	¥38,000
51-728-00	⑱PENTAネイル抜去器	¥32,000
51-729-00	⑲PENTA抜去用ハンマー	¥42,000
51-715-00	⑳スクリウドライバー（エンドキャップ用）	¥60,000

ハンドル類（オプション）

商品コード	商品名	価格
51-300-04	㉑マルチハンドル	¥48,000
01-981-04	㉒ワンタッチハンドルA	¥28,000

トイ・カッター
プレートシステム

S A骨接合台用
内固定システム

小動物用
スクリュー

小動物用
プレート

プレート用
手術器具

鋼線・ワイヤー
手術器具

骨鉗子・
整復器

剥離子・起子

鋭匙

骨のみ・
ハンマー


リーマー

ロングジュール


鉤

インター
ロッキングネイル


電動ドリル

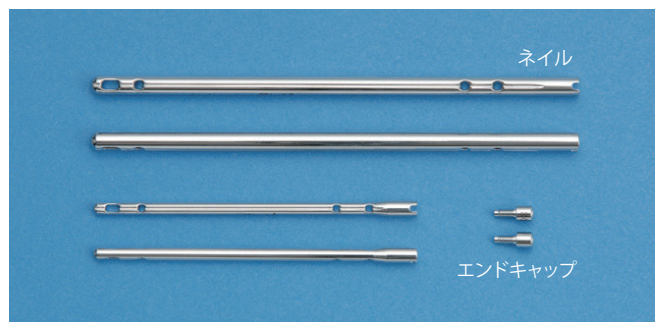



PENTAネイル φ4

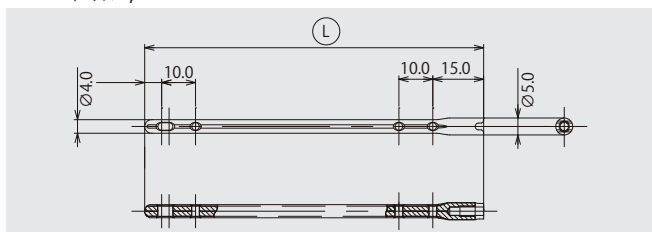

PENTAネイル φ5

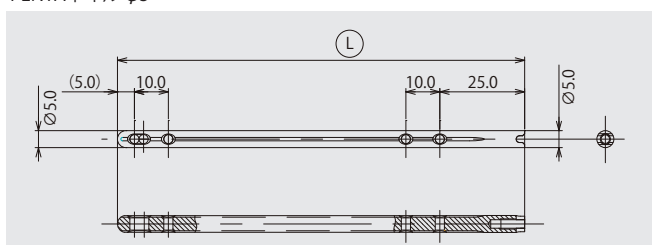


PENTAネイル φ6

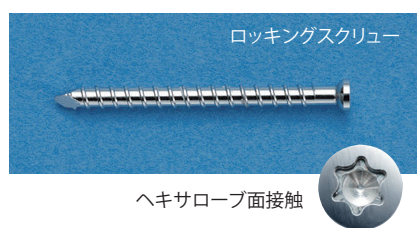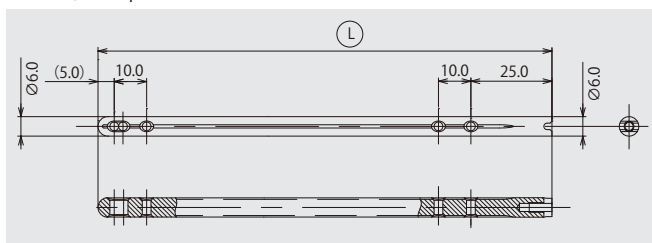


ヘッド部に「ヘキサローブ」を採用
スクリューヘッド部に、ドライバーのスベリやカジリを防ぎ、挿入・抜去を容易にする「ヘキサローブレンチ機構」を採用しました。

PENTAロッキングスクリュー2.0

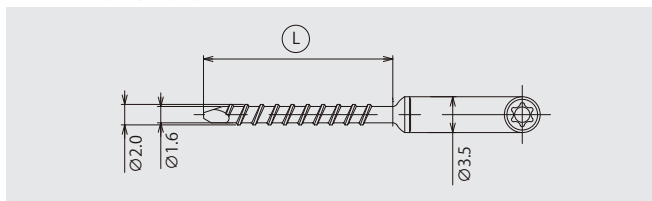

PENTAロッキングスクリュー2.5

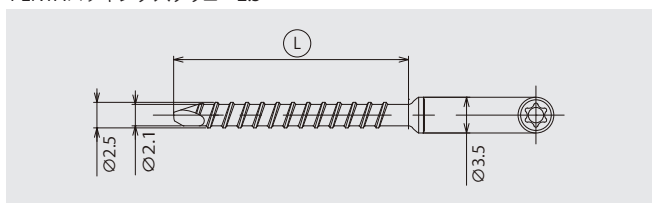

PENTAネイル φ4

商品コード	全長	径	価格
51-710-08	80mm	φ4	¥20,000
51-710-09	90mm	φ4	¥20,000
51-710-10	100mm	φ4	¥20,000
51-710-11	110mm	φ4	¥20,000
51-710-12	120mm	φ4	¥20,000

PENTAネイル φ5

商品コード	全長	径	価格
51-711-12	120mm	φ5	¥20,000
51-711-13	130mm	φ5	¥20,000
51-711-14	140mm	φ5	¥20,000

PENTAネイル φ6

商品コード	全長	径	価格
51-712-13	130mm	φ6	¥20,000
51-712-14	140mm	φ6	¥20,000
51-712-15	150mm	φ6	¥20,000
51-712-16	160mm	φ6	¥20,000

エンドキャップ

商品コード	商品名	価格
51-715-01	PENTAネイル用エンドキャップ	¥5,800

PENTAロッキングスクリュー2.0 (ネイルφ4用)

商品コード	全長	価格
51-716-10	10mm	¥6,000
51-716-12	12mm	¥6,000
51-716-14	14mm	¥6,000
51-716-16	16mm	¥6,000
51-716-18	18mm	¥6,000
51-716-20	20mm	¥6,000

PENTAロッキングスクリュー2.5 (ネイルφ5・6用)

商品コード	全長	価格
51-717-12	12mm	¥6,000
51-717-14	14mm	¥6,000
51-717-16	16mm	¥6,000
51-717-18	18mm	¥6,000
51-717-20	20mm	¥6,000
51-717-22	22mm	¥6,000
51-717-24	24mm	¥6,000
51-717-26	26mm	¥6,000

電動ドリル

プリマド2 製品ラインナップ

Primado2 Product

製造販売元:株式会社ナカニシ

アタッチメント/ハンドピース



WCA
PCA



JCA-1



JCA-2



ACA



SSA



PD-SA-R



P200-SAG



P200-REC



P200-OSC



PD-2SDM



PD-2ADM



ワイヤービンドライバー
P200-WPD



P200-BMH



P200-BMH-HS

ボーンソーモーター



P200-HMH



P200-HMH-HS

ハイトルクモーター

抜群のトルクと安定性を実現し、
各種アタッチメントの交換で
多様な外科手術に対応します。



プリマド2 コントロールユニット



フットコントロール

トイ・カッター
プレートシステム
S A 骨接合用
内固定システム

小動物用
スクリーナー

小動物用
プレート

プレート用
手術器具

鋼線・ワイヤー
手術器具

骨鉗子・
整復器

剥離子・起子

鋭匙

骨のみ・
ハンマー

リーマー

ロングジュール

鉤

インター
ロッキングネイル

電動ドリル

ブリマド2

Primado 2

Total Surgical System

妥協なき高性能と洗練のデザインを融合したトータルサージカルシステム。

6.5インチ液晶タッチパネルを採用し、誰でも簡単に操作できるように、
良く使うボタンをホーム画面に集約しました。
また、コンパクトなデザインによりセッティングが容易で、
2本のモーターハンドピースが接続でき、切替も簡単です。



ブリマド2 コントロールユニット

製品名 プリマド2 コントロールユニット(100V)
製品番号 P200-CU-100
標準価格 ¥1,280,000
セット内容 コントロールユニット、イリゲーションボール、電源コード

■コントロールユニット

仕様	
最大注水量	75mL/min
電源	AC100V 50/60Hz
質量	6.9kg
寸法	W278×D268×H160mm
定格入力	48VA

※上記標準価格は本体コントロールユニットのみの価格となります。様々な症例内容や術者のニーズにそった内容でご検討できるよう全て単品にて販売しております。

特長—ブリマド2

■豊富なオプションメニュー

コントロールユニット、フットコントロール、モニターハンドピース、アタッチメントに関して、オペレーターの好みに合わせた設定が可能です。

■コントロールユニット

- 明るさ調整 ●ボリューム調整
- 言語選択(日本語、英語、ドイツ語、フランス語、スペイン語、イタリア語)

■モーターハンドピース

- アクセル調整(最高回転数になるまでの時間を調整可能/10%ごと)
- ブレーキ調整(停止するまでの時間を調整可能/10%ごと)
- トルク調整(トルクを調整可能/10%ごと)
- オシレート数調整(ワイヤービンドライバーのみオシレート数を調整可能/1~5回)

■アタッチメント

- アタッチメント選択(使用中のアタッチメントに見合った回転数表示)

■モーターハンドピースの自動認識

4種類のモーターハンドピースを自動認識し、それぞれに見合ったモデルや回転数を表示することが可能です。

■イリゲーションポンプを標準装備

最大75mL/minの注水が可能で、さらに細かい設定が可能なので、様々なニーズに対応できます。



■3分割のタッチパネル

■メインパネル

スピード調整、注水量調整、回転方向、プライミング(送水機能)といったよく使う機能をメインパネルに表示

■サブパネル

各フットコントロールボタンに割り当てられた機能を、サブパネルに常に表示し誤動作を防止

■ミニパネル

オプション設定ボタンを表示

■ラストメモリー機能

オプション設定した場合、最後の設定を記憶していますので、次に使用する際に前回設定した状態から使用することが可能で、毎回の設定の必要がありません。(アタッチメント選択は記憶されません)



プリマド2 フットコントロール

Primado2 Foot Control

シングルタイプ（1 ボタン）、マルチタイプ（3 ボタン）の2種類のラインナップを取り揃えました。
それぞれのボタンに、様々な機能を割り当てることが可能で、あらゆるニーズに対応しています。
また、十分なストロークのあるオープンペダルデザインを採用し、足元の操作を繊細かつ容易にしました。



■各ボタンにお好みの機能を割り当て可能

- Foot ON/OFF（フットコントロールによる操作の ON/OFF 切替）
- A ⇄ B（モーターハンドピースの切替）
- Speed（回転速度の切替／30%⇒デフォルト⇒100%のローテーション）
- Rotation Mode（回転方向の切替）
- Irrigation ON/OFF（イリゲーションの ON/OFF 切替）
- Flush（100%の注水）
- Disable（未選択／割り当て機能なし）



プリマド2 フットコントロール(シングル)

製品番号 FC-73
標準価格 ¥225,000

- 1 ペダル、1 ボタン
- スピードコントロール：バリエーション
- 保護等級：IPX8



プリマド2 フットコントロール(マルチ)

製品番号 FC-74
標準価格 ¥315,000

- 1 ペダル、3 ボタン
- スピードコントロール：バリエーション
- 保護等級：IPX8

トイ・カッター
プレートシステム

内固定システム
S A 骨接合用

小動物用
スクリーナー

小動物用
プレート

手術器具
プレート用

鋼線・ワイヤー
手術器具

骨鉗子・
整復器

剥離子・起子

鋭匙

骨のみ・
ハンマー

リーマー

ロソジュー
ル

鉤

インター
ロッキング
ネイル


電動ドリル

プリマド2 ワイヤーピンドライバー

Primado2 Wire Pin Driver

高機能・高性能を実現 プリマド2 ワイヤーピンドライバー

小動物整形外科分野においてのワイヤリング/ピンニング/ドリリング/骨切術と、多種多様なニーズに対応可能な高性能/多機能型ハンドピースです。
(ハンドスイッチ/オシレーティング機能付)

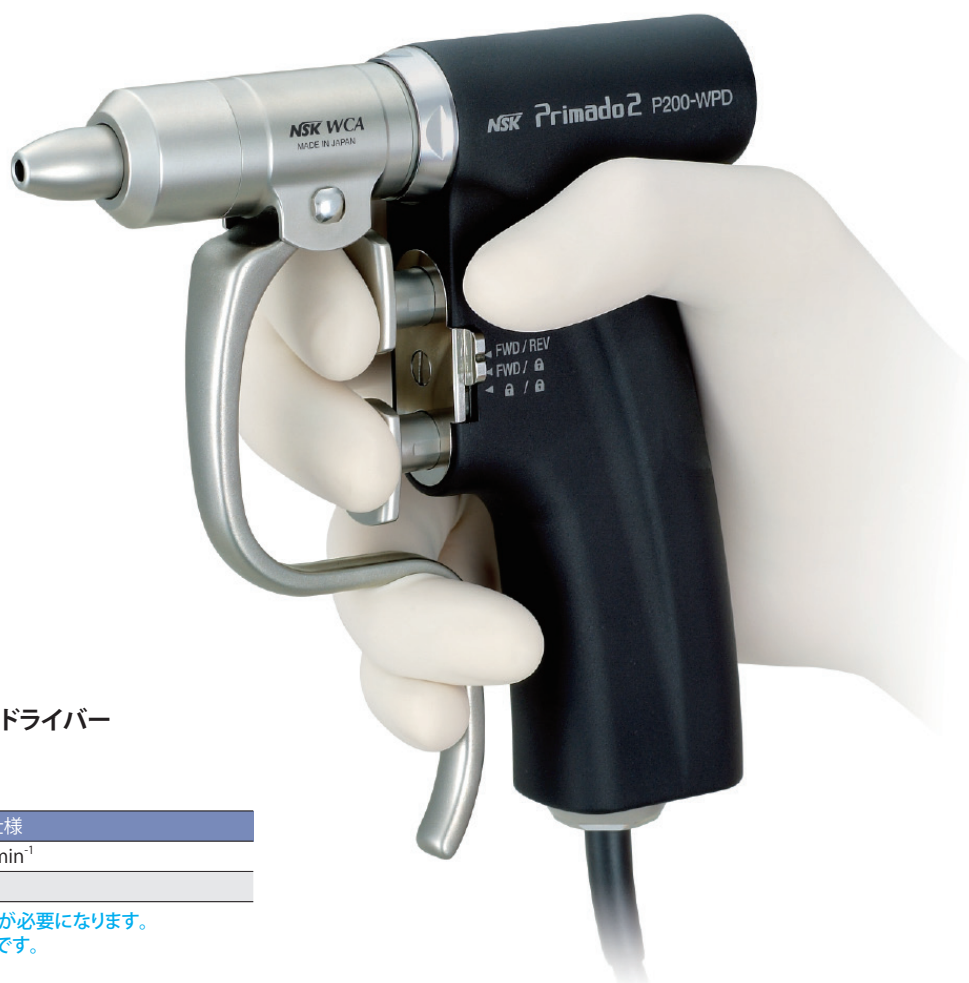

プリマド2 ワイヤーピンドライバー

製品番号 P200-WPD

標準価格 ¥695,000

仕様	
回転速度	Max. 1,200min ⁻¹
トルク	125N・cm

※ご使用時、本体(プリマド2)が必要になります。

■各種アタッチメントは別売りです。

■抜群の操作性を実現

抜群のグリップ感とトータルバランスに優れストレスを軽減し最適な手術を可能にします。

■デュアルトリガー機能搭載

手元で正逆回転/オシレーティング機能がワンハンドでスムーズに切り替えでき、高い操作性を実現します。

■オシレーティング機能搭載

組織の巻き込み及び骨の滑りを防止し、より最適なピンニング/ドリリングを可能にします。

■ハイパフォーマンス

様々な部位や状況に応じてアクセル/ブレーキ/トルク/オシレート数調整等、プリマド2コントロールユニットで細かな設定ができストレスのない手術が可能です。

■オートクレーブ滅菌可能

ワイヤーピンドライバー(コード付)/各種アタッチメント等、すべてオートクレーブ滅菌が可能です。

各種アタッチメント

Attachments


適用ハンドピース



P200-WPD

ワイヤリング

- 0.6～1.9mmのワイヤーがご使用可能です。

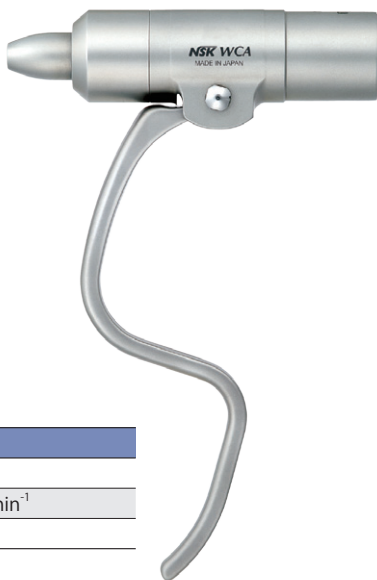


ワイヤーチャックアタッチメント WCA

製品名 WCA
製品番号 SH150
標準価格 ￥193,000

仕様	
チャック径	0.6～1.9mm
回転速度	Max. 1,200min ⁻¹
トルク	125N・cm

ピンニング

- 2.0～3.2mmのピンがご使用可能です。

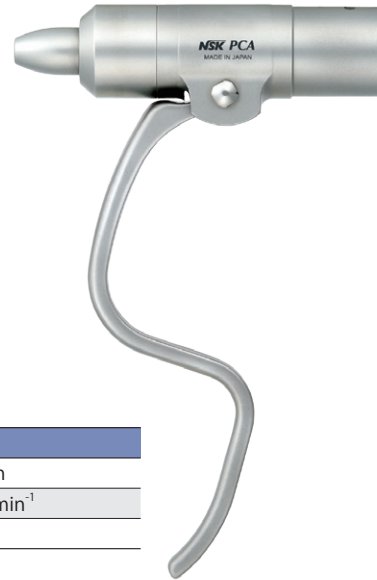

ピンチャックアタッチメント PCA

製品名 PCA
製品番号 SH149
標準価格 ￥193,000

仕様	
チャック径	2.0～3.2mm
回転速度	Max. 1,200min ⁻¹
トルク	125N・cm

ドリリング

- 0.5～4.0mmのドリル先及びピン等がご使用可能です。



ジャコブスチャックアタッチメント JCA-1

製品名 JCA-1
製品番号 SH151
標準価格 ￥80,000

仕様	
チャック径	0.5～4.0mm
回転速度	Max. 1,200min ⁻¹
トルク	125N・cm

- 0.5～6.5mmのドリル先及びピン等がご使用可能です。



ジャコブスチャックアタッチメント JCA-2

製品名 JCA-2
製品番号 SH152
標準価格 ￥80,000

仕様	
チャック径	0.5～6.5mm
回転速度	Max. 1,200min ⁻¹
トルク	125N・cm

- AOチャックの各種器具がワンタッチで装着可能です。



AOチャックアタッチメント ACA

製品名 ACA
製品番号 SH167
標準価格 ￥80,000

仕様	
回転速度	Max. 1,200min ⁻¹
トルク	125N・cm

サジタルソーアタッチメント／ボーンソー

- 各種骨切除・骨形成術に幅広くご使用可能です。
- ワンタッチで5方向にブレードがセットできます (SSA)。
- 抜群のトルクと安定性を実現。



サジタルソー アタッチメント SSA

製品名 SSA
製品番号 SH148
標準価格 ￥286,000

仕様	
回転速度	Max. 12,000CPM
イリゲーションノズル ※各種先端ブレードは別売	



レシプロケーティングソー アタッチメント

製品番号 PD-SA-R
標準価格 ￥365,000

仕様	
回転速度	Max. 12,000CPM
※各種先端ブレードは別売	

上記の回転速度は、プリマド2ワイヤービンドライバーと接続した場合の速度を表しています

トイ・カタフル
プレートシステム

内固定システム
S A 骨接合用

小動物用
スクリュー

小動物用
プレート

手術器具
プレート用

手術器具
鋼線・ワイヤー

骨鉗子・
整復器

剥離子・起子

鋭匙

骨のみ・
ハンマー

リーマー

ロングジョー
ル

鉤

インター
ロッキングネール

電動ドリル

プリマド2 マイクロボーンソー

Primado2 Micro Bone Saw Motor

ストレスを軽減するスリム&コンパクトなモーターハンドピース

ナカニシのマイクロボーンソーは小動物の多様な骨切り術を主な目的として開発されました。

超精密加工技術によって低ノイズ、低振動、ハイパワー、そして高い耐久性を実現しました。

臨床部位や用途に応じて多数のブレードを取り揃えておりますので様々な部位の骨切術を効果的に、正確に、そして容易に行うことが可能です。



■スリム&コンパクト

スリム・軽量タイプで、バランスよくハンドリングできるデザインとし、狭い部位へのアプローチが容易となりました。

■高い切削力

抜群の切削力、振動の少なさを實現し、ストレスのない骨切術が可能です。

■2種類のモーターハンドピース

モーターハンドピースを2種類用意しました。ハンドスイッチタイプは手元にスイッチが付いているので、指先で繊細な回転速度の調節が可能です。

モーターハンドピース



プリマド2 ボーンソー モーターハンドピース

製品番号 P200-BMH

標準価格 ¥350,000

※ご使用時フットコントロールが必要になります。



プリマド2 ボーンソー モーターハンドピース (HS)

製品番号 P200-BMH-HS

標準価格 ¥460,000

●ハンドスイッチタイプ

各種アタッチメント

Attachments



プリマド2 サジタルソー アタッチメント

製品番号 P200-SAG

標準価格 ¥330,000

仕様	
振動角	8°
回転速度	Max. 20,000min ⁻¹

※各種先端ブレード、イリゲーションノズルは別売。



プリマド2 レシプロソー アタッチメント

製品番号 P200-REC

標準価格 ¥370,000

仕様	
ストローク	2.5mm
回転速度	Max. 20,000min ⁻¹

※各種先端ブレード、イリゲーションノズルは別売。



プリマド2 オシレートソー アタッチメント

製品番号 P200-OSC

標準価格 ¥330,000

仕様	
振動角	8°
回転速度	Max. 20,000min ⁻¹

※各種先端ブレード、イリゲーションノズルは別売。



イリゲーションノズル200 (ボーンソー用)


製品番号 P200-IN-B5

標準価格 ¥55,000




サージカルブレード

Surgical Saw Blades

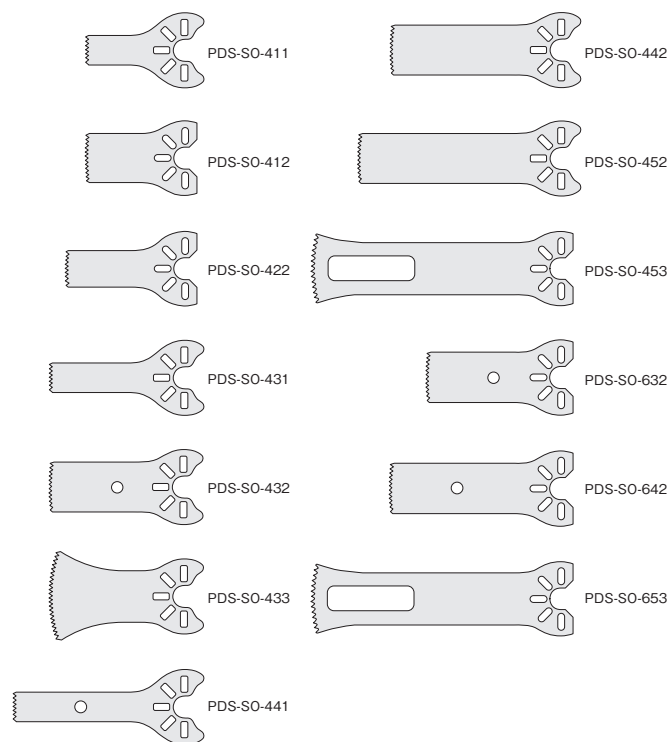

上記ブレードは全てディスポーザブルです。当製品は全て滅菌済です。

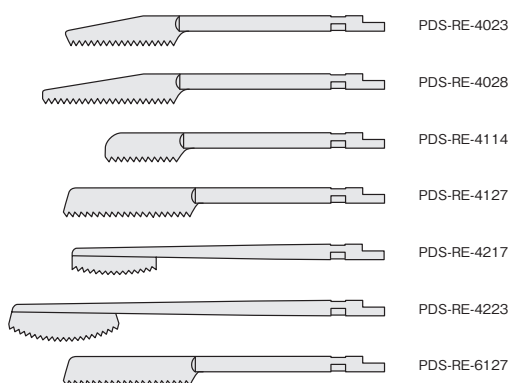

上記ブレードは全てディスポーザブルです。当製品は全て滅菌済です。

ボーンソー

適用アタッチメント



製品番号	標準価格	サイズ
PDS-SO-411	¥9,800	・ 深さ :11.5mm ・ 厚み :0.4mm ・ 幅 :5.5mm
PDS-SO-412	¥9,800	・ 深さ :11.5mm ・ 厚み :0.4mm ・ 幅 :9.0mm
PDS-SO-422	¥9,800	・ 深さ :15.0mm ・ 厚み :0.4mm ・ 幅 :7.0mm
PDS-SO-431	¥9,800	・ 深さ :18.0mm ・ 厚み :0.4mm ・ 幅 :5.5mm
PDS-SO-432	¥9,800	・ 深さ :18.0mm ・ 厚み :0.4mm ・ 幅 :9.0mm
PDS-SO-433	¥9,800	・ 深さ :18.5mm ・ 厚み :0.4mm ・ 幅 :16.5mm
PDS-SO-441	¥9,800	・ 深さ :25.0mm ・ 厚み :0.4mm ・ 幅 :5.5mm
PDS-SO-442	¥9,800	・ 深さ :25.0mm ・ 厚み :0.4mm ・ 幅 :9.3mm
PDS-SO-452	¥9,800	・ 深さ :31.0mm ・ 厚み :0.4mm ・ 幅 :9.0mm
PDS-SO-453	¥9,800	・ 深さ :39.0mm ・ 厚み :0.4mm ・ 幅 :13.2mm
PDS-SO-632	¥9,800	・ 深さ :18.0mm ・ 厚み :0.6mm ・ 幅 :9.0mm
PDS-SO-642	¥9,800	・ 深さ :25.0mm ・ 厚み :0.6mm ・ 幅 :9.3mm
PDS-SO-653	¥9,800	・ 深さ :39.0mm ・ 厚み :0.6mm ・ 幅 :13.2mm

レシプロケーティングソー用ブレード

適用アタッチメント



製品番号	標準価格	サイズ
PDS-RE-4023	¥24,000	・ 刃長 :23.4mm ・ 厚み :0.38mm
PDS-RE-4028	¥24,000	・ 刃長 :28.0mm ・ 厚み :0.38mm
PDS-RE-4114	¥24,000	・ 刃長 :14.5mm ・ 厚み :0.4mm
PDS-RE-4127	¥24,000	・ 刃長 :27.0mm ・ 厚み :0.4mm
PDS-RE-4217	¥24,000	・ 刃長 :17.5mm ・ 厚み :0.4mm
PDS-RE-4223	¥24,000	・ 刃長 :23.0mm ・ 厚み :0.4mm
PDS-RE-6127	¥24,000	・ 刃長 :27.0mm ・ 厚み :0.6mm

トイ・カッター
プレットシステム

S A 骨接合用
内固定システム

小動物用
スクリュー

小動物用
プレット

プレート用
手術器具

鋼線・ワイヤー
手術器具

骨鉗子・
整復器

剥離子・
起子

鋭匙

骨のみ・
ハンマー

リーマー

ロソジュール

鉤

インター
ロッキングネール

電動ドリル

プリマド2 ブラシレスハイトルクモーター

Primado2 High Torque Motor

ストレスを軽減するスリム&コンパクトなモーターハンドピース

スリム・軽量・コンパクトを兼ね備えたデザインにより、長時間の手術でもストレスなく使用することが可能です。



■超高性能ブラシレスマイクロモーター

低振動／低ノイズを実現したモーターハンドピースで最高60,000回転を実現。またハンドスイッチタイプは手元にスイッチが付いているので指先で繊細な回転速度の調整が可能です。

プリマド2 ハイトルク モーターハンドピース (HS)

製品番号 P200-HMH-HS

標準価格 ¥435,000

ハイスイッチタイプ

仕様	
回転速度	Max. 60,000min ⁻¹

プリマド2 ハイトルク モーターハンドピース

製品番号 P200-HMH

標準価格 ¥325,000

仕様	
回転速度	Max. 60,000min ⁻¹

※ご使用時フットコントロールが必要になります。

プリマド2 ドリルアタッチメント

Primado2 Drill Attachment

主にヘルニア(頸部・腰部椎間板)治療や様々な骨切削に最適です。
また、様々な部位に対応できるように、ストレートタイプとアングルタイプを取り揃えました。



ドリルアタッチメント(ストレート)

製品番号 PD-2SDM

標準価格 ¥111,000

仕様	
使用バー	φ2.35mm
回転速度	Max. 60,000min ⁻¹

※イリゲーションノズルは別売



ドリルアタッチメント(アングル)

製品番号 PD-2ADM

標準価格 ¥145,000

仕様	
使用バー	φ2.35mm
回転速度	Max. 60,000min ⁻¹

※イリゲーションノズルは別売



イリゲーションノズルドリル用

製品番号 PD-IN-D

標準価格 ¥25,000

●ドリルアタッチメント用



イリゲーションチューブ(10本入)

製品番号 PD-IT-S

標準価格 ¥45,000

サージカルバー

Surgical Burs

ダイヤモンドバー

Diamond Burs



ヘッドサイズD	製品番号	最高許容回転速度	標準価格
0.6	ES-2DM-S06	80,000 min ⁻¹	1本入 ¥11,000
0.8	ES-2DM-S08		
1.0	ES-2DM-S10		
1.4	ES-2DM-S14		
1.8	ES-2DM-S18		
2.3	ES-2DM-S23		
2.7	ES-2DM-S27	40,000 min ⁻¹	1本入 ¥12,000
3.1	ES-2DM-S31		
3.5	ES-2DM-S35		
4.0	ES-2DM-S40		
4.5	ES-2DM-S45		
5.0	ES-2DM-S50		
6.0	ES-2DM-S60		1本入 ¥13,000
7.0	ES-2DM-S70		

ステンレスバー

Stainless Steel Burs



ヘッドサイズD	製品番号	最高許容回転速度	標準価格
0.6	ES-2SS-S06	80,000 min ⁻¹	1本入 ¥7,500
0.8	ES-2SS-S08		
1.0	ES-2SS-S10		
1.4	ES-2SS-S14		
1.8	ES-2SS-S18		
2.3	ES-2SS-S23		
2.7	ES-2SS-S27	20,000 min ⁻¹	1本入 ¥8,000
3.1	ES-2SS-S31		
3.5	ES-2SS-S35		
4.0	ES-2SS-S40		
4.5	ES-2SS-S45		
5.0	ES-2SS-S50		
6.0	ES-2SS-S60		1本入 ¥9,000
7.0	ES-2SS-S70		

ツイストドリル

Twist Drills



ヘッドサイズD×L	製品番号	最高許容回転速度	標準価格
1.0 × 7	ES-TD-S10	40,000 min ⁻¹	1本入 ¥6,000
1.5 × 10	ES-TD-S15		
2.0 × 10	ES-TD-S20		

適用ハンドピース
(プリマド2)


PD-2SDM

PD-2ADM

超硬カーバイトバー

Tungsten Carbide Burs



ヘッドサイズD	製品番号	最高許容回転速度	標準価格
0.6	ES-2CB-S06	80,000 min ⁻¹	1本入 ¥9,500
0.8	ES-2CB-S08		
1.0	ES-2CB-S10		
1.4	ES-2CB-S14		
1.8	ES-2CB-S18		
2.3	ES-2CB-S23		
2.7	ES-2CB-S27	20,000 min ⁻¹	1本入 ¥10,500
3.1	ES-2CB-S31		
3.5	ES-2CB-S35		
4.0	ES-2CB-S40		
4.5	ES-2CB-S45		
5.0	ES-2CB-S50		
6.0	ES-2CB-S60		1本入 ¥11,500
7.0	ES-2CB-S70		

ステンレスエッグバー


Stainless Egg Burs



ヘッドサイズD×L	製品番号	最高許容回転速度	標準価格
4.0 × 8.0	ES-SE-S40	20,000 min ⁻¹	1本入 ¥8,500
5.0 × 9.5	ES-SE-S50		1本入 ¥8,500
6.0 × 11.0	ES-SE-S60		1本入 ¥9,500

ステンレスエッグバー <クロスカット>


Stainless Egg Burs Cross-Cut

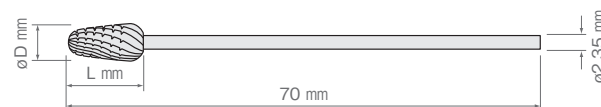

ヘッドサイズD×L	製品番号	最高許容回転速度	標準価格
4.0 × 8.0	ES-SEC-S40	20,000 min ⁻¹	1本入 ¥9,500
5.0 × 9.5	ES-SEC-S50		1本入 ¥9,500
6.0 × 11.0	ES-SEC-S60		1本入 ¥10,500

ダイヤモンドディスク

Diamond Disc

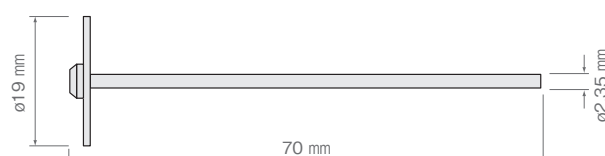

ヘッドサイズD	製品番号	最高許容回転速度	標準価格
19	ES-DD-S19	5,000 min ⁻¹	1本入 ¥6,000

上記ブレードは全てディスプレイ用です。当製品は未滅菌ですので、ご使用前に滅菌の上ご使用下さい。

トイ・カット
プレットシステム

S A骨
内固定システム

小動物用
スクリュー

小動物用
プレート

手術器具
プレート用

鋼線・ワイヤー
手術器具

骨鉗子・
整復器

剥離子・起子

鋭匙

骨のみ・
ハンマー

リーマー

ロソ
ジョー
ジュール

鉤

イン
タ
イ
グ
ネ
イ
ル


電動ドリル

メンテナンス

Maintenance

プリマド2専用 EZスプレー

EZスプレーメディカルセットは、スプレーグリップとハンドピースを確実に装着してオイルの洗浄・注油が行えるので、人によるバラつきがなく、誰が行っても簡単・確実にオイルメンテナンスが行えます。

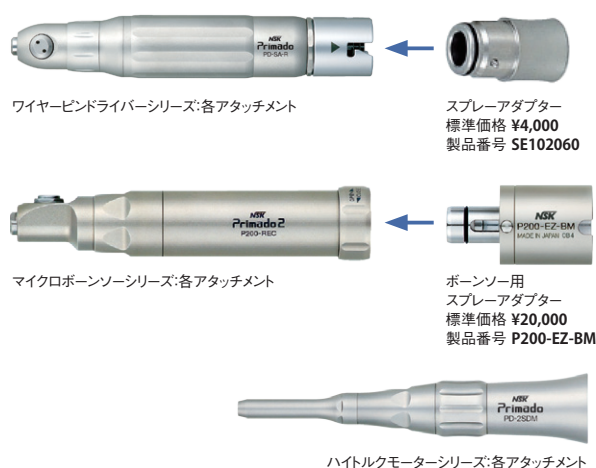

プリマド2用EZスプレー メディカルセット

- 製品番号 PD-EZ-M
標準価格 ¥45,000
セット内容
- EZスプレーグリップ
 - 切換バルブ
 - グリップホルダー
 - コイルチューブ
 - スプレーミスト吸収パック (1パック)

※ナカニシのパナスプレープラス専用です。
※パナスプレープラスは付属しておりません。

パナスプレー プラス

パナスプレープラスには、アルコール含有の特殊な潤滑油が採用されており、日常のメンテナンスに使用することにより、確実にハンドピースの寿命を延ばします。

パナスプレープラス

- 製品番号 Z182100
標準価格 ¥4,700
- 各種ハンドピース用
 - 480mL ●アルコール含



パナスプレープラス 6本セット

- 製品番号 Y900630
標準価格 ¥24,000

スプレーミスト吸収パック

スプレーによるハンドピースの注油時、ミスト状のオイルが飛散し、周囲を汚す可能性があります。このスプレーミスト吸収パックにより、オイルミストを効果的に吸収し、診療室をクリーンに維持できます。



- 製品名 スプレーミスト吸収パック
製品番号 Y900084
標準価格 ¥4,700
- 10パック入り



一般外科用手術器具

Surgical Instruments



外科手術器具セット

剪刀

持針器

鉗子

タオル鉗子

鑷子

マイクロ手術用器具

ゲルピー開創器

鉤

開創器・開胸器

結紮クリップ

縫合針

その他

外科手術器具セット



※カスタマイズご対応致します。

外科手術器具セット

■スタンダードセット

商品コード	商品名／仕様	数量
09-060-00	メーヨー式剪刀 直 14cm	1
09-063-00	メーヨー式剪刀 反 14cm	1
09-079-00	メッツェンバウム剪刀 反 14cm	1
04-001-13	両尖剪刀 直 10.5cm	1
03-001-19	スティーブン型剪刀 13cm	1
41-001-00	抜糸剪刀 12.5cm	1
03-001-34	田島式縫合用鋼線鉗 11cm	1
04-001-06	アドソン型鑷子 無鉤 12cm	1
04-001-07	アドソン型鑷子 有鉤 12cm	1
06-636-00	モスキート止血鉗子 直 無鉤 12cm	6
06-638-00	モスキート止血鉗子 反 無鉤 12cm	6
06-622-00	コッヘル止血鉗子 直 無鉤 14.5cm	6
06-628-00	コッヘル止血鉗子 反 無鉤 14.5cm	6
09-123-00	バックハウスタオル鉗子 11cm	8
09-214-00	アリス有鉤鉗子 15cm	2
09-216-00	バブコック組織鉗子 16cm	2
41-177-00	ベビーバルファーク創器	1
09-230-21	小児用腸鉗子 直 15cm	1
09-230-22	小児用腸鉗子 反 15cm	1
06-798-00	メーヨー・ヘガール型持針器 超硬チップ付 16cm	1
04-001-05	グレフェー型鑷子 12cm	1

価格	¥493,400
----	----------

■ベーシックセット

商品コード	商品名／仕様	数量
09-063-00	メーヨー式剪刀 反 14cm	1
09-079-00	メッツェンバウム剪刀 反 14cm	1
41-001-00	抜糸剪刀 12.5cm	1
03-001-34	田島式縫合用鋼線鉗 11cm	1
04-001-06	アドソン型鑷子 無鉤 12cm	1
04-001-07	アドソン型鑷子 有鉤 12cm	1
06-636-00	モスキート止血鉗子 直 無鉤 12cm	4
06-638-00	モスキート止血鉗子 反 無鉤 12cm	4
06-622-00	コッヘル止血鉗子 直 無鉤 14.5cm	2
06-628-00	コッヘル止血鉗子 反 無鉤 14.5cm	2
09-123-00	バックハウスタオル鉗子 11cm	4
09-216-00	バブコック組織鉗子 16cm	2
06-798-00	メーヨー・ヘガール型持針器 超硬チップ付 16cm	1

価格	¥219,200
----	----------

■スターターセット

商品コード	商品名／仕様	数量
09-063-00	メーヨー式剪刀 反 14cm	1
09-079-00	メッツェンバウム剪刀 反 14cm	1
06-636-00	モスキート止血鉗子 直 無鉤 12cm	2
06-638-00	モスキート止血鉗子 反 無鉤 12cm	2
06-622-00	コッヘル止血鉗子 直 無鉤 14.5cm	1
06-628-00	コッヘル止血鉗子 反 無鉤 14.5cm	1
06-798-00	メーヨー・ヘガール型持針器 超硬チップ付 16cm	1

価格	¥65,300
----	---------

剪刀


外科手術剪刀

ステンレス鋼製



反型両鈍
09-042-00


商品コード	全長	仕様	価格
09-030-00	14cm	直型 先鋭	¥5,000
09-031-00	14cm	直型 片鋭片鈍	¥5,000
09-032-00	14cm	直型 両鈍	¥5,000
09-033-00	18cm	直型 先鋭	¥6,500
09-034-00	18cm	直型 両鈍	¥6,500
09-040-00	14cm	反型 先鋭	¥6,000
09-041-00	14cm	反型 片鋭片鈍	¥6,000
09-042-00	14cm	反型 両鈍	¥6,000
09-043-00	18cm	反型 先鋭	¥6,700
09-044-00	18cm	反型 両鈍	¥6,700

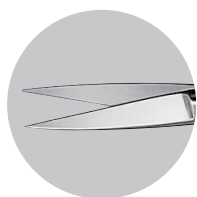


直型先鋭




直型片鋭片鈍

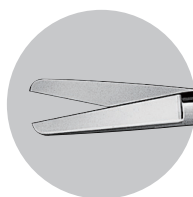

直型両鈍

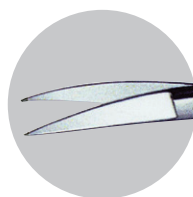

反型先鋭

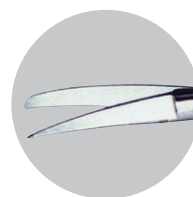

反型片鋭片鈍

メッツェンバウム剪刀

ステンレス鋼製



直型



反型

商品コード	全長	仕様	価格
09-069-00	14.0cm	直型	¥9,000
09-070-00	16.0cm	直型	¥9,200
09-071-00	18.0cm	直型	¥9,600
09-230-07	12.5cm	反型	¥12,000
09-079-00	14.0cm	反型	¥9,000
09-080-00	16.0cm	反型	¥9,200
09-081-00	18.0cm	反型	¥9,600

●先端の刃が薄く、操作に便利です。また、剥離用としても利用されます。

メーヨー式剪刀

ステンレス鋼製



直型



反型

商品コード	全長	仕様	価格
09-060-00	14cm	直型	¥5,800
09-061-00	16cm	直型	¥6,400
09-062-00	18cm	直型	¥7,900
09-063-00	14cm	反型	¥5,900
09-064-00	16cm	反型	¥6,500
09-065-00	18cm	反型	¥8,000

外科手術器具
セット

剪刀

持針器

鉗子

タオル鉗子

鑷子

手術用器具
マイクロ開創器
ゲルビー

鉤

開創器・開胸器

結紮クリップ


縫合針

眼科剪刀

ステンレス鋼製



直型 先鋭

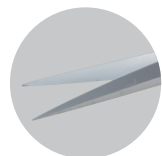

直型 先鋭



反型 先鋭



反型 先鋭

商品コード	全長	仕様	価格
09-207-00	11cm	直型 先鋭	¥6,300
09-208-00	11cm	直型 先鈍	¥6,300
09-209-00	11cm	反型 先鋭	¥6,300
09-210-00	11cm	反型 先鈍	¥6,300

両尖剪刀

ステンレス鋼製



直型



反型

商品コード	全長	仕様	価格
04-001-13	10.5cm	直型	¥13,000
04-001-14	10.5cm	反型	¥13,000

スティーブン型剪刀

ステンレス鋼製



商品コード	全長	仕様	価格
03-001-19	13cm	反型	¥17,000

外科手術器具
セット

剪

持針器

鉗子

タオル鉗子

鑷子

手術用器具
マイクロ

開創器
ゲルビー

鉤

開創器・開胸器

結紮クリップ

縫合針

硬膜切開剪刀

ステンレス鋼製



商品コード	全長	仕様	価格
02-061-01	16cm	直型	¥25,000
02-061-02	16cm	反型	¥25,000

クラウゼ氏硬膜剪刀

ステンレス鋼製



商品コード	全長	価格
02-060-00	17cm	¥15,000

硬膜膝状剪刀

ステンレス鋼製



商品コード	全長	価格
07-128-00	15cm	¥45,000

●硬膜を切開する際、硬膜の下、脳、脊髄を損傷しないように先端が工夫された剪刀です。

包帯剪刀

ステンレス鋼製



商品コード	全長	価格
05-005-00	14.5cm	¥9,500

抜糸剪刀

ステンレス鋼製



商品コード	全長	価格
41-001-00	12.5cm	¥7,500

販売終了

外科手術器具
セット

剪刀

持針器

鉗子

タオル鉗子

鑑子

手術用器具
マイクロ

開創器
ゲルビー

鉤

開創器・開胸器

結紮クリップ

縫合針

持針器

メーヨー・ヘガール型持針器 超硬チップ付

ステンレス鋼製



商品コード	全長	価格
06-796-00	12.5cm	¥11,900
06-797-00	14.0cm	¥15,000
06-798-00	16.0cm	¥15,000
06-799-00	19.0cm	¥15,000
06-800-00	21.0cm	¥15,000

●硬膜縫合時の小さい丸針の持針器として確実な使用ができます。また皮下および僧帽腱膜層の縫合にも、最小丸針の縫合に適します。噛合部分は超硬金属ですので非常に硬く縫合針を強く噛む必要がありません。ただし衝撃には幾分のモロサがありますので使用上注意が肝要です。

※チップの交換、承ります。


【原寸大】




06-796-00



06-797-00

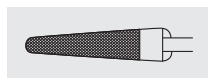

06-798-00

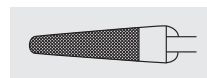

06-799-00

マッシュュー型持針器 超硬チップ付


ステンレス鋼製




商品コード	全長	価格
06-804-00	16cm	¥17,200
06-805-00	19cm	¥17,700
06-806-00	21cm	¥18,200

※チップの交換、承ります。


【原寸大】

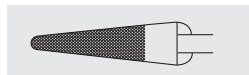

06-804-00

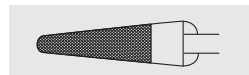

06-805-00

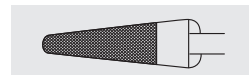

06-806-00

ローゼル型持針器 超硬チップ付


ステンレス鋼製




商品コード	全長	価格
06-810-00	19cm	¥25,200
06-811-00	21cm	¥25,200

※チップの交換、承ります。

【原寸大】

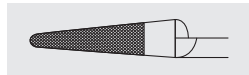

06-810-00

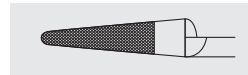

06-811-00

ミズホ製手術器具の修理メンテナンス

ミズホは、製品をより長く使って頂けるよう『通常製品と同等の機能を有する修理』として、修理依頼部分だけではなく、新品同様の使用感でご満足頂ける点検・整備を行っております。

こんなときはご連絡ください。

- 持針器でつかむ針がずれる
- 剪刀、ロンジュールの切れが落ちてきた
- 鑷子・鉗子の噛み合わせが良くない


おまかせください!

製造した人々が、修理の仕方を一番良く知っています。


※器具をお送りいただければ事前見積を致します。
※器具の状況により修理不能とさせていただきます。

修理例 メーヨー・ヘガール型持針器 チップ交換

チップ交換に併せて、その他の不具合の点検・調整、表面研磨、金メッキ等を行い新品同様にしてお戻しいたします。

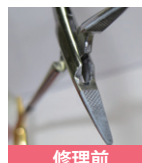

修理前

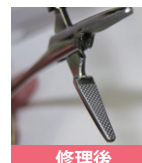

修理後


メーヨー・ヘガール型持針器

ステンレス鋼製



商品コード	全長	価格
06-777-00	16cm	¥9,700
06-778-00	19cm	¥9,900
06-779-00	21cm	¥10,100


【原寸大】

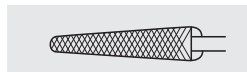

06-777-00



06-778-00

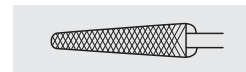

06-779-00


マッチュー型持針器

ステンレス鋼製




商品コード	全長	価格
06-771-00	16cm	¥15,200
06-772-00	19cm	¥15,700
06-773-00	21cm	¥15,700


【原寸大】

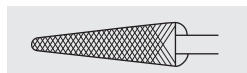

06-771-00

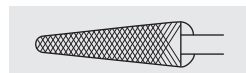

06-772-00

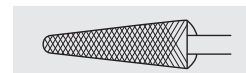

06-773-00

オルセン・ヘガール持針器

ステンレス鋼製



商品コード	全長	価格
06-823-00	12cm	¥19,000
06-824-00	14cm	¥19,000
06-825-00	17cm	¥19,000

● 1人で縫合しそのまま鋼線又は糸を切ることができます。

マイクロ手術持針器

ステンレス鋼製



07-861-02



07-861-03

商品コード	全長	仕様	価格
07-861-02	13cm	反型	¥34,000
07-861-03	13cm	ガンギ付	¥55,000

外科手術器具
セット

剪刀

持針器

鉗子

タオル鉗子

鉗子

手術用器具
マイクロ

開創器
ゲルビー

鉤

開創器・開胸器

結紮クリップ

縫合針

鉗子

コッヘル止血鉗子

ステンレス鋼製



直型 有鉤




反型 有鉤

商品コード	全長	仕様	価格
06-621-00	14.5cm	直型 有鉤	¥5,900
06-622-00	14.5cm	直型 無鉤	¥5,900
06-623-00	18.5cm	直型 有鉤	¥6,700
06-624-00	18.5cm	直型 無鉤	¥6,700
06-627-00	14.5cm	反型 有鉤	¥5,900
06-628-00	14.5cm	反型 無鉤	¥5,900
06-629-00	18.5cm	反型 有鉤	¥6,700
06-630-00	18.5cm	反型 無鉤	¥6,700

【原寸大】



直型 有鉤

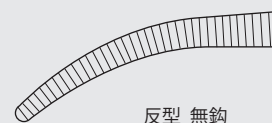

反型 無鉤

小児外科用止血鉗子

ステンレス鋼製




直型 有鉤




反型 有鉤

商品コード	全長	仕様	価格
06-655-00	14.5cm	直型 有鉤	¥8,500
06-656-00	14.5cm	直型 無鉤	¥8,500
06-657-00	14.5cm	反型 有鉤	¥8,500
06-658-00	14.5cm	反型 無鉤	¥8,500

【原寸大】

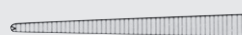

直型 有鉤

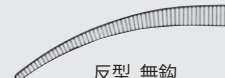

反型 無鉤

モスキート止血鉗子

ステンレス鋼製



直型 無鉤



反型 有鉤

商品コード	全長	仕様	価格
06-635-00	12cm	直型 有鉤	¥5,900
06-636-00	12cm	直型 無鉤	¥5,900
06-637-00	12cm	反型 有鉤	¥5,900
06-638-00	12cm	反型 無鉤	¥5,900

【原寸大】



直型 有鉤



反型 無鉤


田島式モスキート鉗子

ステンレス鋼製



商品コード	全長	仕様	価格
03-001-12	12.5cm	直型 無鉤	¥12,000
03-001-13	12.5cm	反型 無鉤	¥12,000

【原寸大】

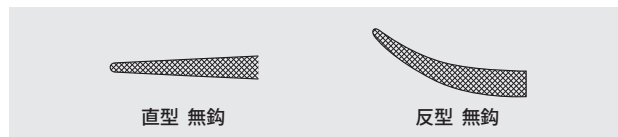

直型 無鉤

反型 無鉤

幼小児用モスキート鉗子

ステンレス鋼製



商品コード	全長	仕様	価格
09-230-03	12.5cm	直型 無鉤	¥11,000
09-230-04	12.5cm	反型 無鉤	¥11,000

【原寸大】



直型 無鉤

反型 無鉤


微小血管用モスキート鉗子

ステンレス鋼製



商品コード	全長	仕様	価格
09-230-01	12.5cm	直型 無鉤	¥16,000
09-230-02	12.5cm	反型 無鉤	¥16,000

【原寸大】

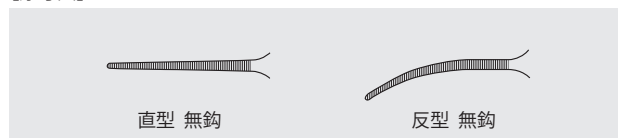

直型 無鉤

反型 無鉤

外科手術器具
セット

剪刀

持針器

鉗子

タオル鉗子

鑷子

手術用器具
マイクロ

開創器
ゲルビー

鉤

開創器・開胸器

結紮クリップ

縫合針

ケリー止血鉗子

ステンレス鋼製



直型 有鉤

反型 無鉤

商品コード	全長	仕様	価格
06-675-00	22cm	直型 有鉤	¥8,500
06-676-00	22cm	直型 無鉤	¥8,500
06-677-00	22cm	反型 有鉤	¥8,500
06-678-00	22cm	反型 無鉤	¥8,500
06-679-00	24cm	直型 有鉤	¥8,700
06-680-00	24cm	直型 無鉤	¥8,700
06-681-00	24cm	反型 有鉤	¥8,700
06-682-00	24cm	反型 無鉤	¥8,700

【原寸大】

直型 有鉤



反型 無鉤



剥離鉗子

ステンレス鋼製



直型

アングル型

商品コード	全長	仕様	価格
06-691-00	19cm	直型	¥12,200
06-692-00	19cm	弱弯型	¥12,200
06-693-00	19cm	強弯型	¥12,200
06-694-00	19cm	アングル型	¥12,200
06-695-00	22cm	直型	¥13,400
06-696-00	22cm	弱弯型	¥13,400
06-697-00	22cm	強弯型	¥13,400
06-698-00	22cm	アングル型	¥13,400

【原寸大】

直型



06-691-00
06-695-00

弱弯型



06-692-00
06-696-00

強弯型



06-693-00
06-697-00

アングル型



06-694-00
06-698-00

ミクリッチ腹膜鉗子

ステンレス鋼製



商品コード	全長	価格
09-181-00	20cm	¥11,000




リスター鉗子

ステンレス鋼製

商品コード	全長	仕様	価格
06-710-01	18.5cm	直型タテ筋	¥13,000
06-710-02	18.5cm	反型タテ筋	¥13,000

【原寸大】


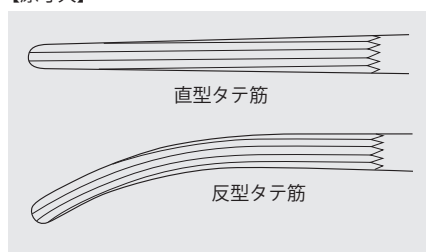


三村式鉗子

ステンレス鋼製

商品コード	全長	仕様	価格
06-712-01	18cm	弱弯	¥25,000
06-712-02	18cm	強弯	¥25,000

【原寸大】

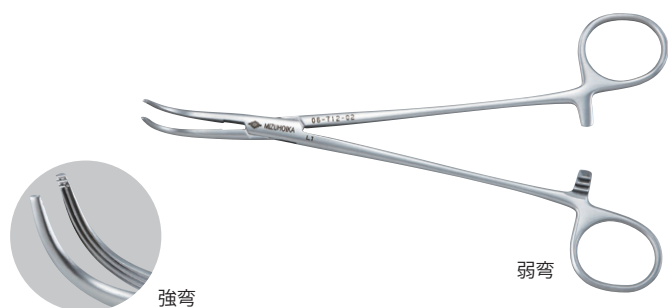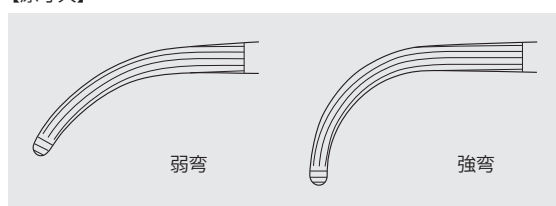

小サテンスキー血管鉗子

ステンレス鋼製

商品コード	全長	価格
09-230-24	13cm	¥40,000



バブコック組織鉗子

ステンレス鋼製

商品コード	全長	価格
09-216-00	16cm	¥29,000
09-217-00	20cm	¥30,000


外科手術器具
セット

剪刀

持針器

鉗子

タオル鉗子

鑑子

マイクロー
手術用器具

ゲルビー
開創器

鉤

開創器・開胸器

結紮クリップ

縫合針


小児用腸鉗子

ステンレス鋼製




商品コード	全長	仕様	価格
09-230-21	15cm	直型	¥35,000
09-230-22	15cm	反型	¥35,000

【原寸大】

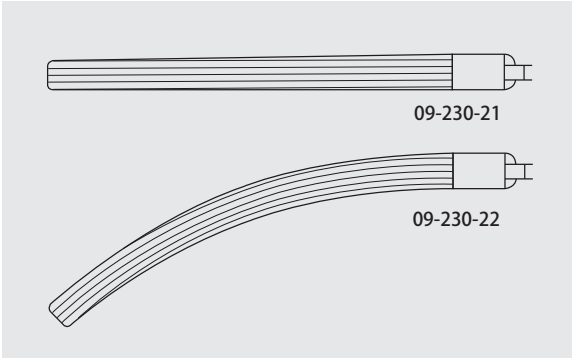

胃腸鉗子

ステンレス鋼製

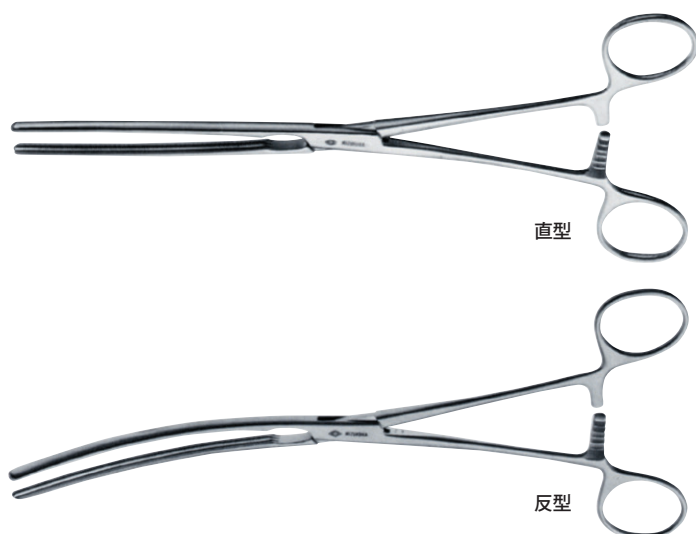


商品コード	全長	仕様	価格
09-189-21	22cm	直型	¥40,000
09-189-22	22cm	反型	¥40,000

アリス有鉤鉗子

ステンレス鋼製



商品コード	全長	仕様	価格
09-214-00	15cm	5×6爪	¥7,800

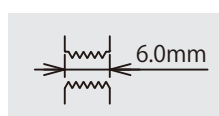


田島式腱鉗子

ステンレス鋼製



商品コード	全長	仕様	価格
03-001-38	12.5cm	5×6爪	¥11,500

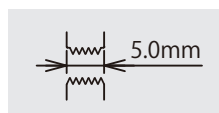

●特定の腱を牽引するのに用います。
先端の鉤は腱や神経に傷害を与えないよう滑らかにしてあります。


田島式直角鉗子

ステンレス鋼製



商品コード	全長	価格
03-001-39	12cm	¥30,000

【原寸大】

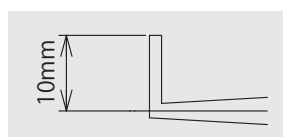外科手術器具
セット

剪刀

持針器

鉗子

タオル鉗子

鑷子

マイクロー
手術用器具ゲルビー
開創器

鉤

開創器・開胸器

結紮クリップ

縫合針

タオル鉗子

バックハウスタオル鉗子

ステンレス鋼製



商品コード	仕様	価格
09-123-00	小 全長 11cm	¥5,500
09-124-00	大 全長 13cm	¥6,500

M式タオル鉗子

ステンレス鋼製



商品コード	全長	価格
09-126-00	13.5cm	¥6,500

ウエック型タオル鉗子

ステンレス鋼製



商品コード	仕様	価格
09-127-00	小 全長 10.5cm	¥6,500
09-128-00	大 全長 13.5cm	¥7,400

M式タオル鉗子 チューブホルダー付

ステンレス鋼製



商品コード	全長	ホルダー内径	価格
09-130-06	13cm	φ 6mm	¥11,000
09-130-09	13cm	φ 9mm	¥11,000
09-130-12	13cm	φ 12mm	¥11,000



チューブホルダー付

タオル鑷子

ステンレス鋼製



商品コード	全長	価格
09-129-00	8.5cm	¥6,000

外科手術器具
セット

剪刀

持針器

鉗子

タオル鉗子

鑷子

手術用器具
マイクロ

グリップ
開創器

鉤

開創器・開胸器


結紮クリップ

縫合針

鑷子

外科鑷子

ステンレス鋼製

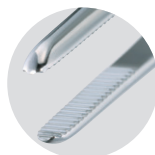

無鉤




有鉤


商品コード	全長	仕様	価格
09-090-00	13cm	無鉤	¥2,200
09-091-00	15cm	無鉤	¥2,500
09-092-00	18cm	無鉤	¥2,800
09-093-00	23cm	無鉤	¥3,200
09-100-00	13cm	有鉤	¥2,300
09-101-00	15cm	有鉤	¥2,600
09-102-00	18cm	有鉤	¥3,100
09-103-00	23cm	有鉤	¥3,500

眼科鑷子

ステンレス鋼製

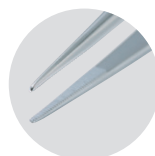

無鉤

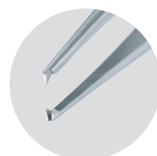


有鉤


商品コード	全長	仕様	価格
09-205-00	11cm	無鉤	¥5,400
09-206-00	11cm	有鉤	¥5,600

アドソン型鑷子

ステンレス鋼製

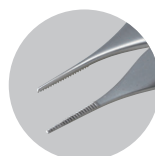

無鉤

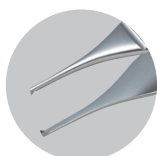

有鉤

商品コード	全長	仕様	価格
04-001-06	12cm	無鉤	¥10,000
04-001-07	12cm	有鉤	¥10,000

マカンド型鑷子

ステンレス鋼製



無鉤



有鉤

商品コード	全長	仕様	価格
04-001-08	15cm	無鉤	¥12,000
04-001-09	15cm	有鉤	¥12,000

●主として止血に用いられる鑷子で、普通の鑷子としても用いられます。


外科手術器具
セット剪
刀持
針
器鉗
子タ
オ
ル
鉗
子鉗
子マイ
ク
ロ
手
術
用
器
具ゲ
ル
ビ
ー
開
創
器

鉤

開
創
器
・
開
胸
器結
紮
ク
リ
ップ縫
合
針

グレフェー型鑷子


ステンレス鋼製

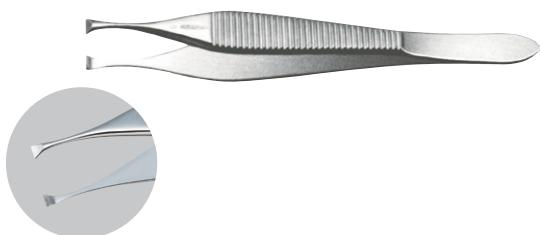

商品コード	全長	先端幅	仕様	価格
04-001-05	12cm	4.5mm	7×8爪	¥10,000

組織把持鑷子

ステンレス鋼製

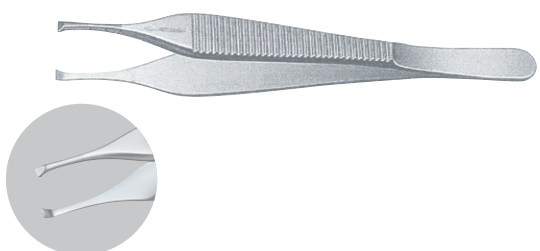

商品コード	全長	先端幅	仕様	価格
03-001-15	12cm	3.0mm	5×6爪	¥12,000

●皮膚その他膜状構造の創縁を確実にしかも無損傷的に把持できます。抜糸の際にも把持力が強く便利です。

形成鑷子

ステンレス鋼製



商品コード	全長	先端幅	価格
03-001-14	12.0cm	1.6mm	¥12,000

●皮膚創縁の把持をはじめ広く用いられます。

田島式 腱鑷子

ステンレス鋼製

商品コード	全長	価格
03-001-36	12cm	¥15,000



田島式 神経鑷子

ステンレス鋼製

商品コード	全長	価格
03-001-37	12cm	¥17,000



腫瘍把持鑷子

ステンレス鋼製

商品コード	全長	先端幅	価格
07-155-00	18cm	大先端幅 10mm	¥28,000
07-156-00	18cm	小先端幅 7mm	¥28,000



ルーツェ鑷子

ステンレス鋼製

商品コード	全長	仕様	価格
07-110-00	17cm	無鉤	¥20,000

●耳科用鑷子ともいい、小さいものをつかむのに多用途です。



外科手術器具
セット

剪刀

持針器

鉗子

タオル鉗子

鑷子

手術用器具
マイクロ

ゲルビー
開創器

鉤

開創器・開胸器

結紮クリップ



縫合針

マイクロ手術用器具


マイクロシザー ストリームライン

ステンレス鋼製

商品コード	仕様	全長	有効長(A)	持手長(B)	価格
07-814-01	Sストレート	17.5cm	8.5cm	7cm	¥120,000
07-814-02	Sカーブ	17.5cm	8.5cm	7cm	¥120,000
07-814-03	Mストレート	19cm	8.5cm	8.5cm	¥120,000
07-814-04	Mカーブ	19cm	8.5cm	8.5cm	¥120,000
07-814-05	Lストレート	22cm	11.5cm	8.5cm	¥120,000
07-814-06	Lカーブ	22cm	11.5cm	8.5cm	¥120,000

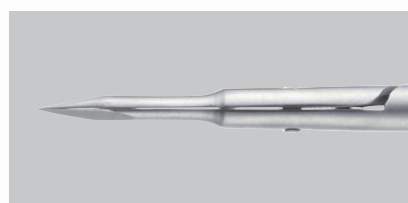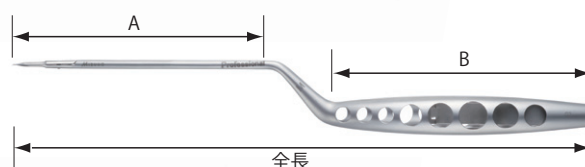

ストレートタイプ

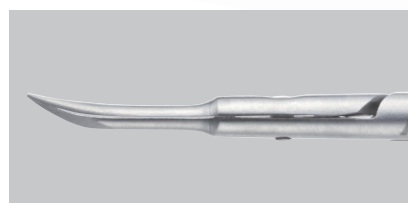

カーブタイプ

07-814-03

- 切れ味の鋭い刃先を追求しました。
- 持手はラウンドタイプにし、さらにパネを内側に入れることによりマイクロ操作性が向上しています。また、顕微鏡に干渉しにくい構造にしました。
- 刃先はストレートタイプとカーブタイプの2種類、長さはS・M・Lの3種類の合計6種類をラインナップしており、状況に応じた使い分けが可能です。

マイクロ手術剪刀


ステンレス鋼製

商品コード	全長	仕様	価格
07-862-00	13cm	反型 先鋭	¥44,000
07-862-01	13cm	反型 片鈍	¥44,000



07-862-00

【原寸大】

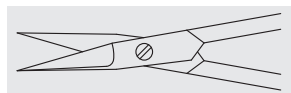


反型 先鋭



07-862-01

【原寸大】

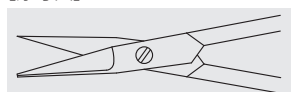

反型 片鈍

外科手術器具
セット剪
刀持
針
器鉗
子タ
オル
鉗
子鑑
子マイクロ
手術用器具ゲルビ
ー
開創器

鉤

開創器・開
胸器

結紮クリップ

縫
合
針

MRマイクロ操作用鑷子

ステンレス鋼製・チタン合金

■ マイクロサージャリー用

先端0.2mmの無鉤鑷子は、微細操作はもとより、内面を粗面加工し微小縫合針の把持が確実に
行えるようにされているので、
微小血管吻合にご使用いただけます。

先端把持面に1mm径の
カップタイプをラインナップ。
深部硬膜、腫瘍カプセルの把持や
少量の組織採取など多くの用途に
ご使用いただけます。

柄部は太めに加工しているため
微細な鑷子先端が
交差することはありません。

拇指あてにリングを装着したため安定性が向上し、
更にリングは目で鑷子の種別が判別できるように
色分けされております。
(青…無鉤／赤…有鉤／黄…カップ)

商品コード	全長	先端幅	仕様	価格
07-007-55	15cm	1.0mm	軟部組織・硬膜操作用（無鉤）	¥55,000
07-007-56	15cm	2.0mm	軟部組織・硬膜操作用（有鉤）	¥48,000
07-007-57	15cm	1.0mm	軟部組織・硬膜操作用（有鉤）	¥55,000
07-007-58	15cm	0.2mm	くも膜・浅部微細操作用（無鉤）	¥55,000
07-007-59	15cm	φ 1.0mm	くも膜・浅部微細操作用（カップ付）	¥55,000
07-007-20	20cm	0.2mm	深部操作用・バイオネット型（無鉤）	¥95,000
07-007-21	20cm	1.0mm	深部操作用・バイオネット型（無鉤）	¥95,000
07-007-22	20cm	0.5mm	深部操作用・バイオネット型（有鉤）	¥95,000
07-007-23	20cm	φ 3.0mm	深部操作用・バイオネット型先端カップ付	¥95,000
07-007-24	20cm	φ 1.0mm 直	深部操作用・バイオネット型先端カップ付	¥62,000
07-007-25	20cm	φ 1.0mm 上向	深部操作用・バイオネット型先端カップ付	¥62,000

デュアルニードルホルダー

ステンレス鋼製
(金メッキ有)

マイクロ鑷子の機能を兼ね備えた持針器です。
持針器と鑷子を持ち替える必要がない為スムーズな手術操作が行えます。



ストレート



カーブ

商品コード	全長	仕様	価格
07-861-04	13cm	ストレート	¥60,000
07-861-05	13cm	カーブ	¥60,000

マイクロ手術持針器

ステンレス鋼製



07-861-02



07-861-03

商品コード	全長	仕様	価格
07-861-02	13cm	反型	¥34,000
07-861-03	13cm	ガンギ付	¥55,000

マイクロ鑷子

ステンレス鋼製



商品コード	全長	価格
03-001-55	12cm	¥20,000

外科手術器具
セット

剪刀

持針器

鉗子

タオル鉗子

鑷子

手術用器具
マイクロ

ゲルビー
開創器

鉤

開創器・開胸器

結紮クリップ

縫合針

ゲルピー開創器


ゲルピー・ラミネクトミー開創器

ステンレス鋼製



商品コード	全長	開口幅	深さ	価格
02-009-01	大 17.5cm	9cm	52mm	¥40,000
02-009-02	小 16cm	7cm	42mm	¥40,000

●脊髄手術のみならず、長管骨手術などでも筋の開創保持に便利です。

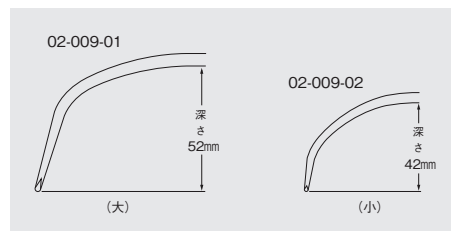

ゲルピー開創器

ステンレス鋼製



商品コード	全長	開口幅	仕様	価格
02-008-00	18.9cm	10cm	—	¥40,000
02-009-03	13cm	7cm	弱弯	¥40,000
51-519-02	13cm	7cm	強弯	¥38,000
41-519-03	9cm	4cm	ミニ	¥32,000

動物用

外科手術器具
セット

剪刀

持針器

鉗子

タオル鉗子

鑷子

手術用器具
マイクロ

ゲルピー
開創器

鉤

開創器・開胸器

結紮クリップ

縫合針

鉤


大単鋭鉤

ステンレス鋼製



商品コード	全長	深さ	価格
03-001-20	18cm	6.0mm	¥9,000

【原寸大】

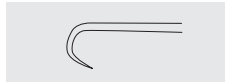

中単鋭鉤

ステンレス鋼製



商品コード	全長	深さ	価格
03-001-21	18cm	3.5mm	¥9,000

【原寸大】



小単鋭鉤

ステンレス鋼製



商品コード	全長	深さ	価格
03-001-22	18cm	2.0mm	¥9,000

【原寸大】



単鉤

ステンレス鋼製



商品コード	全長	価格
04-001-10	16cm	¥7,000

【原寸大】



双鉤

ステンレス鋼製



商品コード	全長	価格
04-001-11	16cm	¥8,000

【原寸大】



田島式二爪・筋鉤

ステンレス鋼製



商品コード	全長	幅	深さ	価格
03-001-23	16.5cm	5.0mm	11mm	¥7,400

田島式三爪・筋鉤

ステンレス鋼製



商品コード	全長	幅	深さ	価格
03-001-25	16.5cm	6.5mm	17mm	¥7,400

●創縁の大きさ、深さに応じて両端が用いられます。

外科手術器具
セット

剪刀

持針器

鉗子

タオル鉗子

鑷子

マイクロス
手術用器具ゲルビー
開創器

鉤

開創器・開胸器

結紮クリップ


縫合針

小筋鉤

ステンレス鋼製

商品コード	全長	幅	深さ	価格
03-001-24	18cm	4mm	10mm	¥7,400

【原寸大】

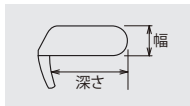


小筋鉤

ステンレス鋼製

商品コード	全長	幅	深さ	価格
04-001-12	16cm	4mm	15mm	¥9,000

【原寸大】

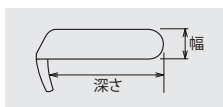


小扁平鉤

ステンレス鋼製

商品コード	全長	幅	深さ	価格
09-230-09	17.5cm	7mm	17mm	¥7,000
09-230-10	17.5cm	5mm	17mm	¥7,000

【原寸大】

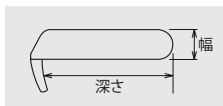

宮本氏扁平鉤

ステンレス鋼製

商品コード	全長	幅	価格
03-010-01	15cm	6mm	¥6,000
03-010-02	15cm	4mm	¥6,000

脳用柔軟性箆

銅製・黒クロムメッキ

商品コード	全長	幅	入数	価格
07-956-65	210mm	10mm	1	¥3,000
07-956-66	210mm	15mm	1	¥3,000
07-956-67	210mm	20mm	1	¥3,000
07-956-68	210mm	30mm	1	¥3,000
07-956-69	140mm	10mm	1	¥3,000
07-956-70	140mm	15mm	1	¥3,000
07-956-71	140mm	20mm	1	¥3,000

●柔軟性ですので適当な深さに曲げて使用できます。



使用イメージ



07-956-65



07-956-66



07-956-67

開創器・開胸器

新大型 開腹用開創器

ステンレス鋼製

最大開口幅 (大) 17.5cm
(小) 14.0cm




商品コード	種類	開口幅	価格
09-176-01	大 全長30cm	17.5cm	¥230,000
09-176-02	小 全長25cm	14.0cm	¥230,000

ゴッセ開創器

ステンレス鋼製

最大開口幅 (大) 18cm
(小) 10cm

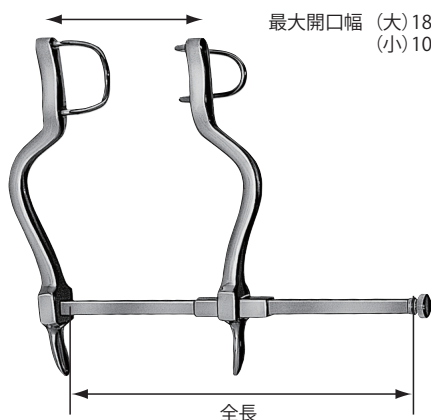


商品コード	種類	開口幅	価格
09-172-00	大 全長25cm	18cm	¥25,000
09-173-00	小 全長15cm	10cm	¥27,000

バルファーク開創器

ステンレス鋼製

最大開口幅18cm

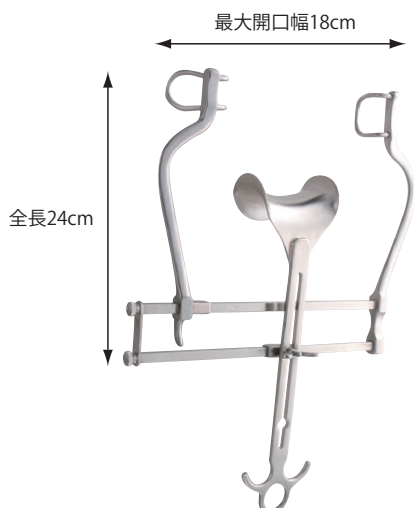

商品コード	全長	開口幅	価格
09-177-00	24cm	18cm	¥85,000

外科手術器具
セット

剪刀

持針器

鉗子

タオル鉗子

鑷子

手術用器具
マイクロ開創器
ゲルビー

鉤


開創器・開胸器

結紮クリップ

縫合針

ベビーバルファークレーター


ステンレス鋼製

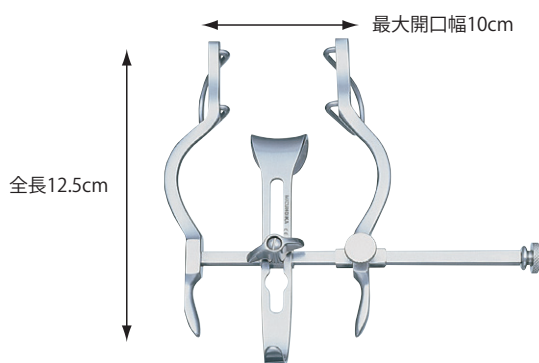

商品コード	全長	開口幅	価格
41-177-00	12.5cm	10cm	¥50,000

幼児開胸器


ステンレス鋼製

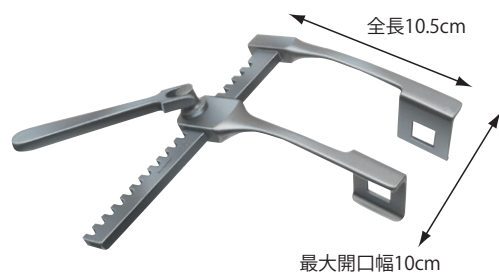

商品コード	全長	開口幅	価格
09-230-12	10.5cm	10cm	¥120,000

新生児開胸器

ステンレス鋼製

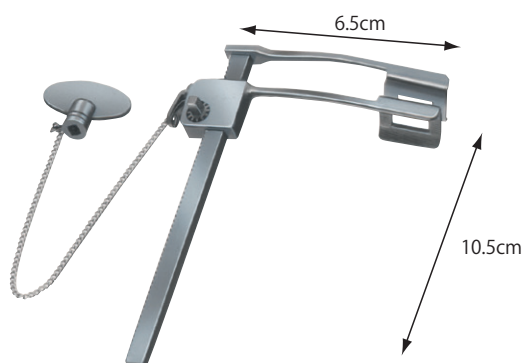

商品コード	全長	開口幅	価格
09-230-13	6.5cm	10.5cm	¥250,000

外科手術器具
セット

剪刀

持針器

鉗子

タオル鉗子

鑷子

手術用器具
マイクロ

開創器
ゲルビー

鉤

開創器・開胸器

結紮クリップ

縫合針


東大改良型開創器

ステンレス鋼製

最大開口幅8cm



最大開口幅5cm

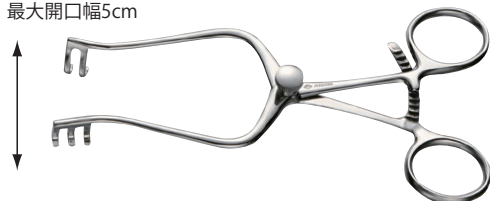

商品コード	全長	開口幅	価格
07-056-00	17cm	8cm	¥50,000
07-057-00	15cm	5cm	¥65,000


●穿頭術など、狭くて、いずれも表在性の手術野の開創に用いられるもので、先端が鈍鉤になっております。

レニー型頭皮クリップ

ステンレス鋼製




07-061-01

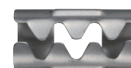

07-061-02

商品コード	仕様	入数	価格
07-061-01	把持力：800g以上	10	¥1,850
07-061-02	把持力：600g以下	10	¥1,850

●頭皮膚切開縁の一時止血に用いる器具です。
ガーゼの上から創縁にかけてご使用ください。
●2回までの滅菌が可能です。

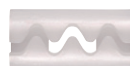

ポリセタール樹脂

商品コード	入数	価格
07-062-00	50	¥2,500

●高圧蒸気滅菌とEOG滅菌が可能です。EOG滅菌を推奨します。
●単回使用品です。



レニー型頭皮クリップ鉗子

ステンレス鋼製



商品コード	全長	価格
07-063-00	19cm	¥20,000
07-064-00	17cm	¥20,000

外科手術器具
セット

剪刀

持針器

鉗子

タオル鉗子

鉗子

手術用器具
マイクロ

開創器
ゲルビー


鉤

開創器・開胸器
結紮クリップ


縫合針

縫合針

外科強彎針

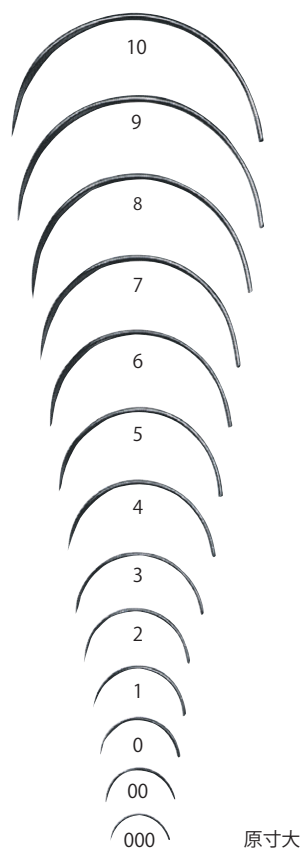

原寸大

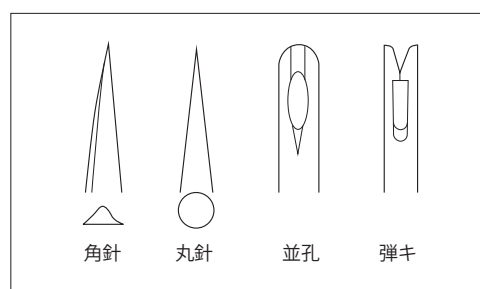

■角針・弾キ (10本入)

商品コード	仕様	価格
06-751-01	No. 1	¥1,150
06-751-02	No. 2	¥1,150
06-751-03	No. 3	¥1,100
06-751-04	No. 4	¥1,100
06-751-05	No. 5	¥1,100
06-751-06	No. 6	¥1,100
06-751-07	No. 7	¥1,200
06-751-08	No. 8	¥1,200
06-751-09	No. 9	¥1,200
06-751-10	No. 10	¥1,200
06-751-11	No. 0	¥1,200
06-751-12	No. 00	¥1,450
06-751-13	No. 000	¥1,900

■角針・並孔 (10本入)

商品コード	仕様	価格
06-751-21	No. 1	¥1,150
06-751-22	No. 2	¥1,150
06-751-23	No. 3	¥1,100
06-751-24	No. 4	¥1,100
06-751-25	No. 5	¥1,100
06-751-26	No. 6	¥1,100
06-751-27	No. 7	¥1,150
06-751-28	No. 8	¥1,150
06-751-29	No. 9	¥1,150
06-751-30	No. 10	¥1,150

■丸針・弾キ (10本入)

商品コード	仕様	価格
06-751-41	No. 1	¥1,150
06-751-42	No. 2	¥1,150
06-751-43	No. 3	¥1,100
06-751-44	No. 4	¥1,100
06-751-45	No. 5	¥1,100
06-751-46	No. 6	¥1,100
06-751-47	No. 7	¥1,150
06-751-48	No. 8	¥1,150
06-751-49	No. 9	¥1,150
06-751-50	No. 10	¥1,150

外科手術器具
セット

剪刀

持針器

鉗子

タオル鉗子

鑑子

手術用器具
マイクロゲルビ
開創器


鉤

開創器・開胸器

結紮クリップ

縫合針

外科弱彎針

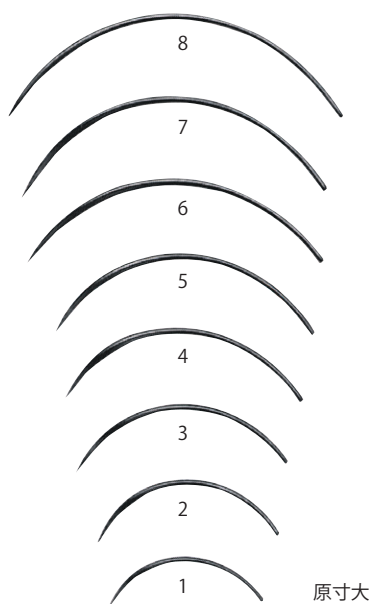

■角針・弾キ (10本入)

ステンレス鋼製

商品コード	仕様	価格
06-752-01	No. 1	¥1,100
06-752-02	No. 2	¥1,100
06-752-03	No. 3	¥1,100
06-752-04	No. 4	¥1,100
06-752-05	No. 5	¥1,150
06-752-06	No. 6	¥1,150
06-752-07	No. 7	¥1,250
06-752-08	No. 8	¥1,250

■角針・並孔 (10本入)

ステンレス鋼製


商品コード	仕様	価格
06-752-11	No. 1	¥1,100
06-752-12	No. 2	¥1,100
06-752-13	No. 3	¥1,100
06-752-14	No. 4	¥1,100
06-752-15	No. 5	¥1,150
06-752-16	No. 6	¥1,150
06-752-17	No. 7	¥1,250
06-752-18	No. 8	¥1,250

■丸針・弾キ (10本入)

ステンレス鋼製

商品コード	仕様	価格
06-752-21	No. 1	¥1,100
06-752-22	No. 2	¥1,100
06-752-23	No. 3	¥1,100
06-752-24	No. 4	¥1,100
06-752-25	No. 5	¥1,150
06-752-26	No. 6	¥1,150
06-752-27	No. 7	¥1,250
06-752-28	No. 8	¥1,250

腸用針

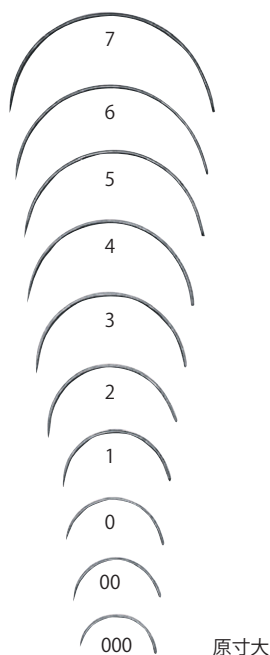

■丸針・弾キ (10本入)

ステンレス鋼製

商品コード	仕様	価格
06-753-01	No. 1	¥1,100
06-753-02	No. 2	¥1,100
06-753-03	No. 3	¥1,100
06-753-04	No. 4	¥1,250
06-753-05	No. 5	¥1,250
06-753-06	No. 6	¥1,250
06-753-07	No. 7	¥1,400
06-753-11	No. 0	¥1,250
06-753-12	No. 00	¥1,500
06-753-13	No. 000	¥1,900

■丸針・並孔 (10本入)

ステンレス鋼製

商品コード	仕様	価格
06-753-21	No. 1	¥1,100
06-753-22	No. 2	¥1,100
06-753-23	No. 3	¥1,100
06-753-31	No. 0	¥1,250
06-753-32	No. 00	¥1,500
06-753-33	No. 000	¥1,900

医薬品

ボーンワックス

医薬品

ボーンワックスは、ミツロウを主成分とする骨髓止血剤で、骨の手術部位に塗布することにより、骨からの出血を物理的に阻止します。

日本標準商品分類番号:873329
承認番号:13800AZY00179000
販売開始年:1963年
再評価結果の公表年月:1992年6月
薬価基準未収載

商品コード	仕様	価格
06-841-02	2.5g×12個入	¥8,500

製造販売元:株式会社東京エム・アイ商会



組成・性状

無菌製剤

組成:2.5g中 ミツロウ 1.925g
アーモンド油 0.525g
サリチル酸 0.050g

性状:白色～淡黄色の軟膏状で、体温で軟化する。
融点58～62.8℃

効能・効果

手術時の骨髓止血

用法及び用量

1回(1手術時)通常約1～1.5gを軟化しながら骨の手術部位に塗布する。

使用上の注意

重要な基本的注意

- (1) 本剤の使用は縫合、結紮等の止血に代わるものではないことに留意すること。
- (2) 骨再生の癒合を妨げる可能性があるので、過量に使用しないこと。また過剰に使用した場合は手術部位から除去すること。

副作用

適用した周囲の隣接組織に異物反応が起こり、マクロファージ、異物巨細胞、多形核白血球、リンパ球などが局部的に集積し、炎症、浮腫が起こる。更にその周囲を肉芽組織ないし繊維性結合組織が取り囲むこともある。また、それが異物性肉芽種となる場合もあることが報告されている。

適用上の注意

- (1) 使用直前に開封し、汚染や乾燥し過ぎることを防ぐこと。
- (2) 再滅菌(煮沸)または再使用しないこと。

その他の注意

- (1) 動物実験で骨に細菌を接種し、ボーンワックスを更に埋め込んだところ細菌が増殖し網状組織骨の本来持つ細菌除去機能が損なわれたという報告がある。
- (2) 動物実験で、胸骨に使用して肺に微小塞栓が生じたという報告がある。

薬効・薬理


骨の出血部位に塗布することにより、出血部分を塞いで物理的に骨の局所的な止血をする。
生体による吸収は極わずかである。

取扱上の注意

貯法:室温、ただし温度の高くなるところには保存しないこと。
有効期間:製造時より5年。

包装

2.5g包(滅菌二重包装)
1箱1ダース入り

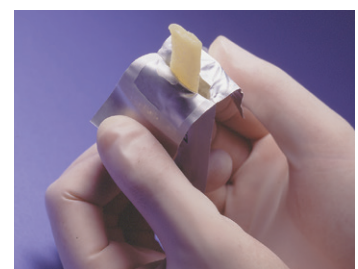

注意: 本品は医薬品ですので、販売には医薬品販売業許可が必要となります。

通信販売のご案内

1. ご注文方法

ご注文はお電話・FAX又はEメールにてお願いいたします。ご注文の際は、品違いを防ぐため、必ず商品番号・商品名、数量、病院名、住所、電話番号を明記いただきますようお願いいたします。

お電話でのご注文の場合

専用フリーダイヤル  **0120-88-7554**

営業時間／平日 9:00～12:00 12:45～17:30（土・日・祝日は休み）

FAXでのご注文の場合

専用FAX  **0120-78-7554** (24時間受付)

営業時間／平日 9:00～12:00 12:45～17:30（土・日・祝日は休み）

弊社所定の注文用紙にご記入のうえ、ご送信願います。

Eメールでのご注文の場合

Eメール **V@mizuho.co.jp** (24時間受付)

※FAX・Eメールは24時間受付。但し、商品出荷は平日のみとさせていただきます。

2. 商品のお届け

- 当日発送は注文日の **15:30** までとさせていただきます。15:30以降のご注文は翌営業日の発送となります。
- 在庫がない場合は弊社より、FAXでご連絡いたします。
- お届け日は一部地域または天候、交通事情により遅れることがありますので、あらかじめご了承ください。
- 到着日時をご指定される場合は、ご注文時にご用命ください。
(但し、時間指定料金が発生する場合はお客様のご負担となります。)
- 到着日が指定されていない場合は、一部の地域によっては、土曜日・日曜日・祝日には配達されない場合がありますのでご了承ください。
- お客様がご不在の場合は、ご指定日・ご指定時間にお届けできない場合がございますので、ご了承ください。
- 商品のお届けはヤマトグローバルエクスプレス便・ヤマト運輸便にておこないます。
 - ①ヤマトグローバルエクスプレス便 お振込・引落し・カード払いの場合
 - ②ヤマト運輸のコレクト便 現金にてお支払いの場合（代金引換便）

3. 荷造送料について

- 1回のお買上げ額が **10,000円**（消費税除く）以上の場合は弊社が負担させていただきますが、**10,000円**（消費税除く）未満の場合はお客様のご負担とさせていただきますので、ご了承ください。
- 上記弊社送料負担は、発送1ヶ所に限らせていただきますので、ご了承ください。

■配送料金表（体圧分散 温風マット、ホームナース Pet を除く）

（単位：円 税別）

	北海道	北東北	南東北	関東	信越	北陸	中部	関西	中国	四国	九州	沖縄
配送エリア	北海道	青森 秋田 岩手	宮城 福島 山形	東京 千葉 埼玉 神奈川 群馬 栃木 茨城 山梨	新潟 長野	富山 石川 福井	静岡 愛知 三重 岐阜	大阪 京都 滋賀 奈良 和歌山 兵庫	岡山 広島 山口 鳥取 島根	香川 徳島 愛媛 高知	福岡 佐賀 長崎 熊本 大分 宮崎 鹿児島	沖縄
5kg以内送料	1,000	790	500	500	500	500	500	550	790	960	1,000	1,210
お届け日数	翌日中	翌日中	翌日午前中	翌日午前中	翌日中	翌日中	翌日午前中	翌日中	翌日中	翌日中	翌日中	翌日中

※お届け日数は目安です。天候・交通事情により遅れる場合がございます。 ※一部離島地域は翌々日配達になります。

※コレクト便を使用する場合、北海道・九州・沖縄は翌々日着となります。 ※タイムサービスをご利用される場合は、上記料金に300円が加算されます。

■体圧分散 温風マット、ホームナース Pet 配送料金表（単位：円 税別）



※受注生産によるメーカー直送品のため、ご注文後2週間ほどの納期をいただいております。

配送エリア	北海道	北東北	南東北	関東	信越	北陸	中部	関西	中国	四国	九州	沖縄
5kg以内送料	1,000	700	650	350	500	500	350	350	550	700	700	※別途相談

4. お支払い方法

代金のお支払い方法は、各種用意しております。

①代金引換え

ヤマト運輸のコレクト便を利用しております。商品と引換えで配達人にお支払い下さい。

②クレジットカードによるお支払い

右記のクレジットカードがご利用できます。
お支払いは1回、2回払いがございいます。



③口座自動引落とし払い

毎月末締めとさせていただきます、お買い上金額は翌々月5日にご指定の口座より自動引落しさせていただきます。

④郵便振替

月末にご請求書と共に郵便振替用紙を送付させていただきます。

(振替手数料はお客様のご負担となります。)

商品代金を郵便振替用紙に記載されている弊社指定口座にご送金ください。

⑤銀行振込

請求書に記載されている弊社の指定口座にお振込ください。

(振込手数料はお客様のご負担となります。)

※お支払い方法等の詳細につきましては、弊社までお問い合わせください。

5. 交換・返品について

●商品到着後 14 日以内にお申し出いただきますようお願いいたします。

- ・弊社への交換・返品は商品の到着を確認後、所定の方法にてご返金させていただきます。
- ・お客様のご都合による交換・返品の場合、商品の配送・梱包料金はお客様のご負担とさせていただきます。

●次の商品の交換・返品はお受けいたしかねます。

※開封済のインプラント商品

※お届け後 15 日以上経過したもの

※ご使用になられたもの

※お客様が汚損・破損されたもの

※特別注文にて造られたもの

6. 修理について

●故障箇所を詳しくご記入のうえ、弊社小動物課までお送りください。

なお、配送料金はお客様のご負担となります。

●保証期間内のものに関しては、弊社規定により無償修理とさせていただきます。

7. Mizuho Member 入会のご案内

●入会金・会費は無料です。

●動物病院と弊社を直接結ぶ特別メンバー制度で、直販の場合は弊社製品がすべてメンバー特別価格でお求めになれます。

●メンバーの方々には様々なキャンペーンをご案内し、更なる特別価格をご用意しております。

ご注意 以下の場合にはメンバー特別割引は適用されませんのでご了承ください。

●特価商品

●別途見積もりにより特別割引された商品

●修理品

●別型品

●本カタログ記載の価格には、消費税は含まれておりません。

●カタログに記載の価格は、2017 年 10 月現在の価格です。

●カタログに記載の製品のデザイン・仕様・価格等は予告なく変更することがあります。

●掲載の写真およびイラストはすべてイメージによるものです。

●在庫切れの場合は、お待ちいただくこともあります。

●ご不明の点は、弊社小動物課までお問い合わせください。

注文書

ミズホ株式会社 行

年 月 日

●ご注文商品

商品コード	商 品 名	数 量	単 価

●お申し込み者

		会員番号							
病院名 又は お名前	フリガナ	ご連絡先 電話番号	()						
		FAX 番 号	()						
様									
ご住所	フリガナ								
	〒								

●お支払い方法

1. 代金引換（宅配便コレクト）

2. クレジットカード UC・VISA・マスター

1回・2回

カード NO.														
---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

カード有効期限	年	月まで有効	口座名義人	
---------	---	-------	-------	--

3. 預金口座自動引落とし

4. 郵便・銀行振込み（振込手数料はお客様負担）

●FAX 注文専用フリーダイヤル

小動物課



0120-78-7554

※ご注文の場合はコピーしてご使用ください。

あ

東氏棘状突起切除鉗子	76
東氏骨膜剥離子	69
アドソン型鑷子	109
アリゲータープレート	50
アリス有鉤鉗子	107

い

生田式指骨用骨のみ	72
胃腸鉗子	107
インジケーターアロー	21
インストゥルメント用滅菌ケース	37

う

ウエック型タオル鉗子	108
ウエックヘモクリップ	120
ウォルトン外科吸引管	15
ウルリッヒ骨鉗子ミニ	65

え

M1.5スクリュー用滅菌ケース	37
MRマイクロ操作用鑷子	112
M式タオル鉗子	108
M式タオル鉗子チューブホルダー付	108
M式ワイヤーカッター兼プライヤー溝入り	59
MUT-300型用X線カセット格納枠	9
MUT-500SR型・500型用X線 カセット格納枠	7
MUT-500SR型用フットスイッチ	5
MUT-500型用フットスイッチ	7
LED無影灯PulareⅣ	13
LED Light HOSPILITE L1-S	14
L型スクリーン掛	9
エレバ・ラスバトリウム	69
エレバトリウム	70

お

オーバーヘッド器械台	10
岡大改良型動脈瘤剥離子	80
オルセン・ヘガール持針器	101

か

海綿骨スクリュー	41
カセット挿入ホルダー	9
眼科鑷子	109
眼科剪刀	98

き

吸引器アスピレーター	15
臼蓋プレート	50
京大式手術のみ	71
強力ピンカッター	58
キルシュナー鋼線	56
キルシュナー鋼線用ワンタッチキャップ	57
筋鉤	116

く

クライエンビュール型血管兼神経鉤	80
クラウゼ氏 硬膜剪刀	99
クリンプキルシュナー鋼線カッター	57
グレフェー型鑷子	110

け

形成鑷子	110
外科強彎針	121
外科弱彎針	122
外科手術剪刀	97
外科鑷子	109
ケリー止血鉗子	104
ケリソン骨パンチ	79
ゲルピー開創器	114
ゲルピー・ラミネクトミー開創器	114

こ

鋼線曲鉗子	61
硬膜膝状剪刀	99
硬膜切開剪刀	99
小型丸のみ鉗子 反型	75
ゴッセ開創器	117
骨折整復把持鉗子	68
骨折部整復維持器	66
骨折部整復牽引器	67
骨ネジタップ	53
骨ネジドライバー	27,55
骨ネジ用ピンセット	54
骨ネジワッシャー	41
コッヘル改良型プレート骨把持鉗子	63
コッヘル止血鉗子	102

さ

先爪交換式骨鉗子	67
----------------	----

し

シェーデ氏骨鋭匙	70
指骨形成用骨鉗子	75
指骨把持鉗子	64
下孔ドリル	53
下孔ドリル(グライディングホール用)	53
自由変形創外固定副子	61
手術台取付用カメラアーム	10
腫瘍把持鉗子	110
小筋鉤	116
小骨把持鉗子	64
小サテンスキー血管鉗子	105
消毒盤台 固定金具付	10
小児外科用止血鉗子	102
小児用腸鉗子	106
小扁平鉤	116
シリコンパッド	21
新生児開胸器	118
新大式開腹用開創器	117
新大指骨 骨把持鉗子	64

す

髄核鋭匙鉗子	79
スーチャーワイヤー	62
スクリュー支点型骨整復鉗子	66
スクリュー用滅菌ケース	37
スティープン型剪刀	98
スティック型プレートベンダー	52
ステンレスエッグバー	93
ステンレスバー	93
スモールスネークプレート	50
スモールT型プレート	47
スモールプレート	49
スモールプレートⅡ	49
スモールラディアルプレート 左カーブ	44
スモールラディアルプレート 右カーブ	45

せ

整形外科のみ	72
整復用鉗子	65
脊椎プレート	50
セッター骨把持鉗子	65
Z式鋼線締結器	62
セルフセンターリング鉗子	65

そ

双鉤	115
側彎二連関節丸のみ鉗子	76
側彎丸のみ鉗子Mz-Model	74
組織把持鉗子	110

た

体圧分散・温風マット	11
ダイヤモンドディスク	93
ダイヤモンドバー	93
タオル鉗子	108
田島式 エレバ・ラスパ	69
田島式 オステオトーム	72
田島式 K鋼線カッター	59
田島式 腱鉗子	107
田島式 腱鉗子	110
田島式三爪・筋鉤	115
田島式 神経鉗子	110
田島式 直角鉗子	107
田島式二爪・筋鉤	115
田島式 平ノミ	72
田島式 ピンバイス	60
田島式 ペンチ	61
田島式縫合用鋼線鉗	59
田島式 丸ノミ	72
田島式モスキート鉗子	103
単鋭鉤	115
単鉤	115
単鈍鉤・エレバトリウム	69

ち

チップ付ヤング鉗子	61
超硬カーバイトバー	93
腸用針	122

つ

椎間板鋭匙鉗子	79
ツイストドリル	93

て

T型カッタブルプレート	46
データーカード	21
デシャンブ動脈瘤針	62
デプスゲージ	27,54
デュアルニードルホルダー	113
電気メス	17
電動手術台MUT-300	8
電動油圧手術台MUT-500SR型	5
電動油圧手術台MUT-500型	7

と

トイ・カッタブルプレートシステムセット	26
トイ・カッタブルプレート	46
トイラディアルプレート 左カーブ	44
トイラディアルプレート 右カーブ	45
東大改良型開創器	119
Triangoスタンド式TR-30XLF	14
Tri-Dケリソン骨パンチ	77
ドリルアダプター	54
ドリルガイド	27,54
ドリルガイド付骨片把持鉗子	63
ドリルガイド付骨片把持鉗子(頭部回転式)	63

な

ナイロンハンマー	71
ナロープレートII	49

に

二連関節ピンカッター	58
二連関節丸のみ鉗子	74

の

脳用柔軟性筥	116
--------	-----

は

バイポーラ鉗子	18
バイポーラ用ピンセットコード	18
剥離鉗子	104
剥離子	69
白金双極性止血鉗子	18
バックハウスタオル鉗子	108
抜糸剪刀	99
パナスプレー	94
バブコック組織鉗子	105
バランスハンマー	71
パルファ開創器	117
ハンドチャック	60
ハンドベンディングプライヤー	52
ハンドリーマー	73

ひ

皮質骨スクリュー	38
微小血管用モスキート鉗子	103
微小骨鋼線刺入子(ピンバイス)	60
ピンカッター	58
ピンバイス	60

ふ

ファインソーブレード	80
V型マットレス	9
フィルターペーパー	21
Primado2	86
フレージャー吸引管	15
プレートベンダー	52
プレート用滅菌ケース	37
プレス型プレート曲器	52
ブロードプレートII	49

へ

米式ペンチ	61
米式ワイヤーカッター兼プライヤー	58
ベビーバルファ開創器	118
ヘモクリップ	120
PENTAガイドスリーブ	83
PENTA牽引スリーブ	83
PENTA牽引用ストッパー付ピン	83
PENTA骨ネジドライバー	83
PENTA下孔ドリル	83
PENTA髓腔リーマー	83
PENTAスクリュードライバー	83
PENTAスリーブ	83
PENTAタップ	83
PENTAデプスゲージ	83
PENTAネイル	84
PENTAネイル打込器	83
PENTAネイル抜き器	83
PENTAネイル用エンドキャップ	84
PENTAネイル抜き用ハンマー	83
PENTAラチェットハンドル	83
PENTAロッキングスクリュー	84

ほ

包帯剪刀	99
ホームナースPet	22
ボーンソー	91
ボーンレトラクター	70
ボーンワックス	123
ホルクマン氏両頭鋭匙	70

ま

マイクロ・ロンジャー	75
マイクロシザー ストリームライン	111
マイクロ手術持針器	101,113
マイクロ手術剪刀	111
マイクロ鉗子	113
マカンド型鉗子	109
マッチュー型持針器	101
マッチュー型持針器 超硬チップ付	100
丸型スクリーン掛	9
マルチハンドル	53,83
丸のみ鉗子 曲	75

み

ミクリッチ腹膜鉗子	104
水野氏両頭骨膜起子	69
ミニストレートプレート	46
ミニスネークプレート	50
ミニT型プレート	47
ミニプレート	48
ミニプレートII	48
ミニプレートプラス	48
ミニラディアルプレート75°曲 左カーブ	44
ミニラディアルプレート75°曲 右カーブ	45
ミニラディアルプレート 左カーブ	44
ミニラディアルプレート 右カーブ	45
三村式鉗子	105
宮本氏扁平鉤	116
ミルクテックS	19
無影灯	13

め

メーヨー式剪刀	97
メーヨー・ヘガール型持針器	101
メーヨー・ヘガール型持針器 超硬チップ付	100
滅菌コンテナ	20
メッソエンバウム剪刀	97

も

モスキート改良型プレート骨把持鉗子	63
モスキート止血鉗子	102
本島氏両頭骨膜剥離子	70

ゆ

油圧昇降手術椅子	10
ユニバーサルアングルケリソノ骨パンチ	78

よ

幼児開胸器	118
幼小児用モスキート鉗子	103

り

リウエル氏丸のみ鉗子	76
リコンストラクションプレート	47
リコンストラクションプレートミニ	47
リスター鉗子	105
リストン氏骨剪刀	76
両尖剪刀	98

る

ルーツェ鑷子	110
--------------	-----

れ

レール固定金具(大型) Ver. 2	10
レール保定金具	9
レシプロケーティング用ブレード	91
レニー型頭皮クリップ	119
レニー型頭皮クリップ鉗子	119

ろ

ローゼル型持針器 超硬チップ付 ...	100
ロングボルト	51

わ

ワイヤーカッター	59
ワイヤーカッター兼プライヤー超硬刃付	58
ワイヤー剪刀	59
ワイヤーパッサ	62
若杉式骨整復器	68
ワンタッチハンドル	53,83

商品名一覧

商品コード	商品名	JAN	承認・認証・届出番号	クラス分類		掲載ページ
				厚労省	農水省	
01-061-01	キルシュナーワンタッチキャップ径1.5 5個入	4946329004328	14600BZZ00232000	Ⅲ		57
01-061-02	キルシュナーワンタッチキャップ径2.0 5個入	4946329004335	14600BZZ00232000	Ⅲ		57
01-061-03	キルシュナーワンタッチキャップ径2.4 5個入	4946329004342	14600BZZ00232000	Ⅲ		57
01-061-04	キルシュナーワンタッチキャップ径3.0 5個入	4946329004359	14600BZZ00232000	Ⅲ		57
01-061-20	クリンPK鋼線カッター	4946329146684	13B1X00306G10009	I		57
01-063-21	キルシュナー鋼線 片尖 φ1.0×300mm	4946329004410	14600BZZ00232000	Ⅲ		56
01-063-22	キルシュナー鋼線 片尖 φ1.2×300mm	4946329004427	14600BZZ00232000	Ⅲ		56
01-063-23	キルシュナー鋼線 片尖 φ1.5×300mm	4946329004434	14600BZZ00232000	Ⅲ		56
01-063-24	キルシュナー鋼線 片尖 φ1.8×300mm	4946329004441	14600BZZ00232000	Ⅲ		56
01-063-25	キルシュナー鋼線 片尖 φ2.0×300mm	4946329004458	14600BZZ00232000	Ⅲ		56
01-063-26	キルシュナー鋼線 片尖 φ2.4×300mm	4946329004465	14600BZZ00232000	Ⅲ		56
01-063-27	キルシュナー鋼線 片尖 φ3.0×300mm	4946329004472	14600BZZ00232000	Ⅲ		56
01-063-31	キルシュナー鋼線 ネジ付 3cm φ2.0×230mm	4946329004489	14600BZZ00232000	Ⅲ		56
01-063-32	キルシュナー鋼線 ネジ付 3cm φ2.4×230mm	4946329004496	14600BZZ00232000	Ⅲ		56
01-063-33	キルシュナー鋼線 ネジ付 3cm φ3.0×230mm	4946329004502	14600BZZ00232000	Ⅲ		56
01-063-34	キルシュナー鋼線 ネジ付 3cm φ4.0×230mm	4946329004519	14600BZZ00232000	Ⅲ		56
01-065-11	キルシュナー鋼線 両尖 φ1.0×300mm	4946329004557	14600BZZ00232000	Ⅲ		56
01-065-12	キルシュナー鋼線 両尖 φ1.2×300mm	4946329004564	14600BZZ00232000	Ⅲ		56
01-065-13	キルシュナー鋼線 両尖 φ1.5×300mm	4946329004571	14600BZZ00232000	Ⅲ		56
01-065-14	キルシュナー鋼線 両尖 φ1.8×300mm	4946329004588	14600BZZ00232000	Ⅲ		56
01-065-15	キルシュナー鋼線 両尖 φ2.0×300mm	4946329004595	14600BZZ00232000	Ⅲ		56
01-065-16	キルシュナー鋼線 両尖 φ2.4×300mm	4946329004601	14600BZZ00232000	Ⅲ		56
01-065-17	キルシュナー鋼線 両尖 φ3.0×300mm	4946329004618	14600BZZ00232000	Ⅲ		56
01-130-10	キルシュナー鋼線 片尖 φ0.8×150mm	4946329007237	14600BZZ00232000	Ⅲ		56
01-130-11	キルシュナー鋼線 片尖 φ1.0×150mm	4946329007244	14600BZZ00232000	Ⅲ		56
01-130-12	キルシュナー鋼線 片尖 φ1.2×150mm	4946329007251	14600BZZ00232000	Ⅲ		56
01-130-13	キルシュナー鋼線 片尖 φ1.4×150mm	4946329007268	14600BZZ00232000	Ⅲ		56
01-130-14	キルシュナー鋼線 片尖 φ1.5×150mm	4946329007275	14600BZZ00232000	Ⅲ		56
01-130-15	キルシュナー鋼線 片尖 φ1.6×150mm	4946329007282	14600BZZ00232000	Ⅲ		56
01-130-16	キルシュナー鋼線 片尖 φ1.8×150mm	4946329007299	14600BZZ00232000	Ⅲ		56
01-130-17	キルシュナー鋼線 片尖 φ2.0×150mm	4946329007305	14600BZZ00232000	Ⅲ		56
01-130-18	キルシュナー鋼線 片尖 φ2.4×150mm	4946329007312	14600BZZ00232000	Ⅲ		56
01-130-50	キルシュナー鋼線 片尖 φ0.8×300mm	4946329007329	14600BZZ00232000	Ⅲ		56
01-130-53	キルシュナー鋼線 片尖 φ1.4×300mm	4946329007336	14600BZZ00232000	Ⅲ		56
01-130-55	キルシュナー鋼線 片尖 φ1.6×300mm	4946329007343	14600BZZ00232000	Ⅲ		56
01-130-60	キルシュナー鋼線 片尖 φ4.0×300mm	4946329007350	14600BZZ00232000	Ⅲ		56
01-132-10	キルシュナー鋼線 両尖 φ0.8×150mm	4946329007565	14600BZZ00232000	Ⅲ		56
01-132-11	キルシュナー鋼線 両尖 φ1.0×150mm	4946329007572	14600BZZ00232000	Ⅲ		56
01-132-12	キルシュナー鋼線 両尖 φ1.2×150mm	4946329007589	14600BZZ00232000	Ⅲ		56
01-132-13	キルシュナー鋼線 両尖 φ1.4×150mm	4946329007596	14600BZZ00232000	Ⅲ		56
01-132-14	キルシュナー鋼線 両尖 φ1.5×150mm	4946329007602	14600BZZ00232000	Ⅲ		56
01-132-15	キルシュナー鋼線 両尖 φ1.6×150mm	4946329007619	14600BZZ00232000	Ⅲ		56
01-132-16	キルシュナー鋼線 両尖 φ1.8×150mm	4946329007626	14600BZZ00232000	Ⅲ		56
01-132-17	キルシュナー鋼線 両尖 φ2.0×150mm	4946329007633	14600BZZ00232000	Ⅲ		56
01-132-18	キルシュナー鋼線 両尖 φ2.4×150mm	4946329007640	14600BZZ00232000	Ⅲ		56
01-132-50	キルシュナー鋼線 両尖 φ0.8×300mm	4946329007657	14600BZZ00232000	Ⅲ		56
01-132-53	キルシュナー鋼線 両尖 φ1.4×300mm	4946329007664	14600BZZ00232000	Ⅲ		56
01-132-55	キルシュナー鋼線 両尖 φ1.6×300mm	4946329007671	14600BZZ00232000	Ⅲ		56
01-132-60	キルシュナー鋼線 両尖 φ4.0×300mm	4946329007688	14600BZZ00232000	Ⅲ		56
01-138-10	キルシュナーワンタッチキャップφ0.8 5個入	4946329008012	14600BZZ00232000	Ⅲ		57
01-138-11	キルシュナーワンタッチキャップφ1.0 5個入	4946329008029	14600BZZ00232000	Ⅲ		57
01-138-12	キルシュナーワンタッチキャップφ1.2 5個入	4946329008036	14600BZZ00232000	Ⅲ		57
01-138-13	キルシュナーワンタッチキャップφ1.4 5個入	4946329008043	14600BZZ00232000	Ⅲ		57
01-138-15	キルシュナーワンタッチキャップφ1.6 5個入	4946329008050	14600BZZ00232000	Ⅲ		57
01-138-16	キルシュナーワンタッチキャップφ1.8 5個入	4946329008067	14600BZZ00232000	Ⅲ		57
01-138-20	キルシュナーワンタッチキャップφ4.0 5個入	4946329008074	14600BZZ00232000	Ⅲ		57
01-176-10	米式ペンチ SS製	4946329140446	13B1X00306G00603	I		61
01-225-00	Z式鋼線締結器	4946329010176	13B1X00306H00142	I		62
01-226-20	スーチャーワイヤー#20 0.91mm 5m巻	4946329109849	14600BZZ00244000	Ⅲ		62
01-226-21	スーチャーワイヤー#22 0.71mm 5m巻	4946329109856	14600BZZ00244000	Ⅲ		62
01-226-22	スーチャーワイヤー#24 0.55mm 5m巻	4946329109863	14600BZZ00244000	Ⅲ		62
01-226-23	スーチャーワイヤー#34 0.23mm 5m巻	4946329109887	14600BZZ00244000	Ⅲ		62
01-226-24	スーチャーワイヤー#36 0.19mm 5m巻	4946329109900	14600BZZ00244000	Ⅲ		62
01-226-25	スーチャーワイヤー#38 0.15mm 5m巻	4946329109924	14600BZZ00244000	Ⅲ		62
01-226-26	スーチャーワイヤー#40 0.12mm 5m巻	4946329109948	14600BZZ00244000	Ⅲ		62

商品コード	商品名	JAN	承認・認証・届出番号	クラス分類		掲載ページ
				厚労省	農水省	
01-235-10	米式ワイヤーカッター兼プライヤーSS製	4946329140439	13B1X00306G01403	I		58
01-236-11	M式ワイヤカッター兼プライヤー 溝入りB	4946329213942	13B1X00306G10488	I		59
01-237-20	ミズホ二連関節ピンカッター	4946329010435	13B1X00306G00606	I		58
01-238-10	ワイヤーカッター兼プライヤー超硬刃付21cm	4946329010442	13B1X00306G00607	I		58
01-239-10	ワイヤーカッター(ステンレス製)	4946329010459	13B1X00306Y10014	I		59
01-240-00	ピンカッター	4946329010466	13B1X00306G00609	I		58
01-241-10	強力ピンカッター (ハンドル着脱式)全長57cm	4946329149050	13B1X00306Y10006	I		58
01-250-00	小骨把持鉗子	4946329010572	13B1X00306G00774	I		64
01-296-01	骨折整復把持鉗子 大	4946329124675	13B1X00306G00783	I		68
01-296-02	骨折整復把持鉗子 小	4946329124682	13B1X00306G00783	I		68
01-296-03	骨折整復把持鉗子 ストッパー付 大	4946329124699	13B1X00306G00783	I		68
01-296-04	骨折整復把持鉗子 ストッパー付 小	4946329124705	13B1X00306G00783	I		68
01-300-01	リウエル氏丸のみ鉗子 No1 直	4946329010688	13B1X00306G00332	I		76
01-300-02	リウエル氏丸のみ鉗子 No1 反	4946329010695	13B1X00306G00332	I		76
01-300-03	リウエル氏丸のみ鉗子 No2 直	4946329010701	13B1X00306G00332	I		76
01-300-04	リウエル氏丸のみ鉗子 No2 反	4946329010718	13B1X00306G00332	I		76
01-300-05	リウエル氏丸のみ鉗子 No3 直	4946329010725	13B1X00306G00332	I		76
01-300-06	リウエル氏丸のみ鉗子 No3 反	4946329010732	13B1X00306G00332	I		76
01-300-07	リウエル氏丸のみ鉗子 No4 直	4946329010749	13B1X00306G00332	I		76
01-300-08	リウエル氏丸のみ鉗子 No4 反	4946329010756	13B1X00306G00332	I		76
01-301-01	小型丸のみ鉗子 反型 A	4946329010763	13B1X00306G00333	I		75
01-301-02	小型丸のみ鉗子 反型 B	4946329010770	13B1X00306G00333	I		75
01-301-03	小型丸のみ鉗子 反型 C	4946329010787	13B1X00306G00333	I		75
01-311-01	リストン氏骨剪刀 17cm 直型	4946329010886	13B1X00306G01214	I		76
01-311-02	リストン氏骨剪刀 17cm 反型	4946329010893	13B1X00306G01214	I		76
01-361-01	本島氏両頭骨膜剥離子 大 21cm	4946329011197	13B1X00306H00050	I		70
01-361-02	本島氏両頭骨膜剥離子 小 14cm	4946329011203	13B1X00306H00050	I		70
01-381-01	シェーデ氏骨鋭匙 No000	4946329011371	13B1X00306G00233	I		70
01-381-02	シェーデ氏骨鋭匙 No00	4946329011388	13B1X00306G00233	I		70
01-381-03	シェーデ氏骨鋭匙 No0	4946329011395	13B1X00306G00233	I		70
01-381-04	シェーデ氏骨鋭匙 No1	4946329011401	13B1X00306G00233	I		70
01-381-05	シェーデ氏骨鋭匙 No2	4946329011418	13B1X00306G00233	I		70
01-381-06	シェーデ氏骨鋭匙 No3	4946329011425	13B1X00306G00233	I		70
01-381-07	シェーデ氏骨鋭匙 No4	4946329011432	13B1X00306G00233	I		70
01-381-08	シェーデ氏骨鋭匙 No5	4946329011449	13B1X00306G00233	I		70
01-381-09	シェーデ氏骨鋭匙 No6	4946329011456	13B1X00306G00233	I		70
01-386-01	ホルクマン氏両頭鋭匙 A	4946329011487	13B1X00306G00234	I		70
01-386-02	ホルクマン氏両頭鋭匙 B	4946329011494	13B1X00306G00234	I		70
01-393-05	京大手術のみ 両刃状 5A 10mm	4946329011869	13B1X00306G00501	I		71
01-393-06	京大手術のみ 片刃状 6B 10mm	4946329011876	13B1X00306G00501	I		71
01-393-07	京大手術のみ 両刃状 7A 7mm	4946329011883	13B1X00306G00501	I		71
01-393-08	京大手術のみ 片刃状 8B 7mm	4946329011890	13B1X00306G00501	I		71
01-393-09	京大手術のみ 両刃状 9A 5mm	4946329011906	13B1X00306G00501	I		71
01-393-10	京大手術のみ 片刃状 10B 5mm	4946329011913	13B1X00306G00501	I		71
01-393-11	京大手術のみ 両刃状 11A 4mm	4946329011920	13B1X00306G00501	I		71
01-393-12	京大手術のみ 片刃状 12B 4mm	4946329011937	13B1X00306G00501	I		71
01-393-13	京大手術のみ 両刃状 13A 3mm	4946329011944	13B1X00306G00501	I		71
01-393-14	京大手術のみ 片刃状 14B 3mm	4946329011951	13B1X00306G00501	I		71
01-393-15	京大手術のみ 両刃反型 15C 5mm	4946329011968	13B1X00306G00501	I		71
01-393-16	京大手術のみ 両刃反型 16C 3mm	4946329011975	13B1X00306G00501	I		71
01-396-00	整形外科のみ 両刃 3mm(金属柄)	4946329012033	13B1X00306G00500	I		72
01-396-01	整形外科のみ 両刃 4mm(金属柄)	4946329012040	13B1X00306G00500	I		72
01-396-02	整形外科のみ 両刃 6mm(金属柄)	4946329012057	13B1X00306G00500	I		72
01-396-03	整形外科のみ 両刃 8mm(金属柄)	4946329012064	13B1X00306G00500	I		72
01-396-04	整形外科のみ 両刃10mm(金属柄)	4946329012071	13B1X00306G00500	I		72
01-396-05	整形外科のみ 両刃12mm(金属柄)	4946329012088	13B1X00306G00500	I		72
01-396-06	整形外科のみ 両刃15mm(金属柄)	4946329012095	13B1X00306G00500	I		72
01-396-07	整形外科のみ 両刃20mm(金属柄)	4946329012101	13B1X00306G00500	I		72
01-396-10	整形外科のみ 両刃40mm(金属柄)	4946329012132	13B1X00306G00500	I		72
01-396-19	整形外科のみ 片刃 3mm(金属柄)	4946329012149	13B1X00306G00500	I		72
01-396-20	整形外科のみ 片刃 4mm(金属柄)	4946329012156	13B1X00306G00500	I		72
01-396-21	整形外科のみ 片刃 6mm(金属柄)	4946329012163	13B1X00306G00500	I		72
01-396-22	整形外科のみ 片刃 8mm(金属柄)	4946329012170	13B1X00306G00500	I		72
01-396-23	整形外科のみ 片刃10mm(金属柄)	4946329012187	13B1X00306G00500	I		72
01-396-24	整形外科のみ 片刃12mm(金属柄)	4946329012194	13B1X00306G00500	I		72

商品名一覧

商品コード	商品名	JAN	承認・認証・届出番号	クラス分類		掲載ページ
				厚労省	農水省	
01-396-25	整形外科のみ 片刃15mm(金属柄)	4946329012200	13B1X00306G00500	I		72
01-396-26	整形外科のみ 片刃20mm(金属柄)	4946329012217	13B1X00306G00500	I		72
01-413-01	ナイロンハンマー 大	4946329012507	13B1X00306H00016	I		71
01-413-02	ナイロンハンマー 小	4946329012514	13B1X00306H00016	I		71
01-521-00	ハンドチャック	4946329015065	13B1X00306G00765	I		60
01-981-02	JP骨ネジドライバ(保持スリーブ付) M3.5,M2.7用	4946329034950	13B1X00306G01172	I		55
01-981-04	JPワンタッチハンドル A	4946329034974	13B1X00306G00997	I		53,83
01-982-35	JP,骨ネジタップ M3.5用	4946329035063	13B1X00306G00909	I		53
01-983-05	JPユニバーサルドリルガイド M3.5用	4946329035148	13B1X00306G01150	I		54
01-983-10	JPドリルアダプター	4946329035186	13B1X00306G01081	I		54
01-983-21	JP下孔ドリル φ2.0 ロング	4946329035223	13B1X00306G01099	I		53
01-983-26	JP下孔ドリル φ2.5 ロング	4946329035247	13B1X00306G01099	I		53
01-983-40	JP骨ネジ用ピンセット M2.0,2.7,3.5用	4946329035339	13B1X00306G00999	I		54
02-008-00	ゲルピー開創器	4946329037098	13B1X00306G10893	I		114
02-009-01	ゲルピー, ラミネクトミー開創器 大	4946329037104	13B1X00306G00688	I		114
02-009-02	ゲルピー, ラミネクトミー開創器 小	4946329037111	13B1X00306G00688	I		114
02-009-03	ゲルピー開創器 小児用	4946329037128	13B1X00306G10893	I		114
02-035-00	水野氏両頭骨膜起子	4946329038118	13B1X00306H00008	I		69
02-036-00	東氏骨膜剥離子	4946329038125	13B1X00306H00053	I		69
02-060-00	クラウゼ氏 硬膜剪刀	4946329038958	13B1X00306H00153	I		99
02-061-01	硬膜切開剪刀 直型	4946329038965	13B1X00306G00124	I		99
02-061-02	硬膜切開剪刀 反型	4946329038972	13B1X00306G00124	I		99
02-073-02	ミズホ側彎二連関節丸のみ鉗子 B	4946329039047	13B1X00306G00341	I		76
02-084-01	椎間板鋭匙鉗子 A型 直 3mm	4946329039238	13B1X00306G00347	I		79
02-084-02	椎間板鋭匙鉗子 A型 直 4mm	4946329039245	13B1X00306G00347	I		79
02-084-03	椎間板鋭匙鉗子 A型 上向 3mm	4946329039252	13B1X00306G00347	I		79
02-084-04	椎間板鋭匙鉗子 A型 上向 4mm	4946329039269	13B1X00306G00347	I		79
02-085-00	東氏棘状突起切除鉗子	4946329039320	13B1X00306G00348	I		76
02-093-01	ケリソン骨パンチ 直角上向 15×2mm	4946329039429	13B1X00306G00353	I		79
02-093-02	ケリソン骨パンチ 直角上向 15×3mm	4946329039436	13B1X00306G00353	I		79
02-093-03	ケリソン骨パンチ 直角上向 15×4mm	4946329039443	13B1X00306G00353	I		79
02-093-04	ケリソン骨パンチ 直角上向 15×5mm	4946329039450	13B1X00306G00353	I		79
02-093-05	ケリソン骨パンチ 直角上向 18×3mm	4946329039467	13B1X00306G00353	I		79
02-093-06	ケリソン骨パンチ 直角上向 18×4mm	4946329039474	13B1X00306G00353	I		79
02-093-07	ケリソン骨パンチ 直角上向 18×5mm	4946329039481	13B1X00306G00353	I		79
02-094-01	ケリソン骨パンチ 直角下向 15×3mm	4946329039528	13B1X00306G00353	I		79
02-094-02	ケリソン骨パンチ 直角下向 15×4mm	4946329039535	13B1X00306G00353	I		79
02-094-03	ケリソン骨パンチ 直角下向 15×5mm	4946329039542	13B1X00306G00353	I		79
02-094-04	ケリソン骨パンチ 直角下向 18×3mm	4946329039559	13B1X00306G00353	I		79
02-094-05	ケリソン骨パンチ 直角下向 18×4mm	4946329039566	13B1X00306G00353	I		79
02-094-06	ケリソン骨パンチ 直角下向 18×5mm	4946329039573	13B1X00306G00353	I		79
02-095-01	ケリソン骨パンチ 斜型35°上向 15×2mm	4946329039580	13B1X00306G00353	I		79
02-095-02	ケリソン骨パンチ 斜型35°上向 15×3mm	4946329039597	13B1X00306G00353	I		79
02-095-03	ケリソン骨パンチ 斜型35°上向 15×4mm	4946329039603	13B1X00306G00353	I		79
02-095-04	ケリソン骨パンチ 斜型35°上向 15×5mm	4946329039610	13B1X00306G00353	I		79
02-095-05	ケリソン骨パンチ 斜型35°上向 18×3mm	4946329039627	13B1X00306G00353	I		79
02-095-06	ケリソン骨パンチ 斜型35°上向 18×4mm	4946329039634	13B1X00306G00353	I		79
02-095-07	ケリソン骨パンチ 斜型35°上向 18×5mm	4946329039641	13B1X00306G00353	I		79
02-095-08	ケリソン骨パンチ 斜型35°上向 18×1mm	4946329039658	13B1X00306G00353	I		79
02-095-41	Tri-Dケリソン骨パンチ 斜型35°上向1×150	4946329195644	13B1X00306G10439	I		77
02-095-42	Tri-Dケリソン骨パンチ 斜型35°上向2×150	4946329195651	13B1X00306G10439	I		77
02-095-43	Tri-Dケリソン骨パンチ 斜型35°上向3×150	4946329195668	13B1X00306G10439	I		77
02-095-44	Tri-Dケリソン骨パンチ 斜型35°上向4×150	4946329195675	13B1X00306G10439	I		77
02-095-45	Tri-Dケリソン骨パンチ 斜型35°上向5×150	4946329195682	13B1X00306G10439	I		77
02-095-46	Tri-Dケリソン骨パンチ 斜型35°上向6×150	4946329195699	13B1X00306G10439	I		77
02-095-51	Tri-Dケリソン骨パンチ 斜型35°上向1×200	4946329195705	13B1X00306G10439	I		77
02-095-52	Tri-Dケリソン骨パンチ 斜型35°上向2×200	4946329195712	13B1X00306G10439	I		77
02-095-53	Tri-Dケリソン骨パンチ 斜型35°上向3×200	4946329195729	13B1X00306G10439	I		77
02-095-54	Tri-Dケリソン骨パンチ 斜型35°上向4×200	4946329195736	13B1X00306G10439	I		77
02-095-55	Tri-Dケリソン骨パンチ 斜型35°上向5×200	4946329195743	13B1X00306G10439	I		77
02-095-56	Tri-Dケリソン骨パンチ 斜型35°上向6×200	4946329195750	13B1X00306G10439	I		77
02-095-62	Tri-Dケリソン骨パンチ 彎曲 斜型35°上向2×150	4946329195767	13B1X00306G10439	I		77
02-095-63	Tri-Dケリソン骨パンチ 彎曲 斜型35°上向3×150	4946329195774	13B1X00306G10439	I		77
02-095-64	Tri-Dケリソン骨パンチ 彎曲 斜型35°上向4×150	4946329195781	13B1X00306G10439	I		77
02-095-72	Tri-Dケリソン骨パンチ 彎曲 斜型35°上向2×200	4946329195798	13B1X00306G10439	I		77

商品コード	商品名	JAN	承認・認証・届出番号	クラス分類		掲載ページ
				厚労省	農水省	
02-095-73	Tri-Dケリソノ骨パンチ 彎曲 斜型35°上向3×200	4946329195804	13B1X00306G10439	I		77
02-095-74	Tri-Dケリソノ骨パンチ 彎曲 斜型35°上向4×200	4946329195811	13B1X00306G10439	I		77
02-100-30	パンチシャフト 2×15 35°	4946329088113	13B1X00306G00360	I		78
02-100-31	パンチシャフト 3×15 35°	4946329088120	13B1X00306G00360	I		78
02-100-32	パンチシャフト 4×15 35°	4946329088137	13B1X00306G00360	I		78
02-100-33	パンチシャフト 5×15 35°	4946329088144	13B1X00306G00360	I		78
02-100-50	グリップハンドル	4946329088151	13B1X00306G00360	I		78
02-803-98	MISET 髓核鋭匙鉗子 直2.3mm	4946329150155	13B1X00306H00154	I		79
02-803-99	MISET 髓核鋭匙鉗子 弱弯2.3mm	4946329134605	13B1X00306H00154	I		79
03-001-12	田島式モスキート鉗子 直 無鉤	4946329046137	13B1X00306G00390	I		103
03-001-13	田島式彎曲モスキート鉗子	4946329046144	13B1X00306G00390	I		103
03-001-14	形成鑷子	4946329046151	13B1X00306G01398	I		110
03-001-15	田島式組織把持鑷子 12cm	4946329046168	13B1X00306G00182	I		110
03-001-19	スティーブン型剪刀 小 130mm	4946329046205	13B1X00306G00126	I		98
03-001-20	大単鋭鉤 尖端彎曲部細巾5.9mm	4946329046212	13B1X00306G10418	I		115
03-001-21	中単鋭鉤 尖端彎曲部細巾3.3mm	4946329046229	13B1X00306G10418	I		115
03-001-22	小単鋭鉤 尖端彎曲部細巾1.8mm	4946329046236	13B1X00306G10418	I		115
03-001-23	田島式 二爪・筋鉤	4946329046243	13B1X00306H00011	I		115
03-001-24	小筋鉤	4946329046250	13B1X00306H00012	I		116
03-001-25	田島式 三爪・筋鉤	4946329046267	13B1X00306H00011	I		115
03-001-34	田島式 縫合用 鋼線鉗	4946329046359	13B1X00306G10429	I		59
03-001-36	田島式 腱鑷子	4946329046373	13B1X00306G00185	I		110
03-001-37	田島式 神経鑷子	4946329046380	13B1X00306G00186	I		110
03-001-38	田島式 腱鉗子	4946329046397	13B1X00306H00013	I		107
03-001-39	田島式 直角鉗子	4946329046403	13B1X00306G00393	I		107
03-001-52	田島式 単鈍鉤・エレバ	4946329046533	13B1X00306G00270	I		69
03-001-53	田島式 ビンバイス	4946329046540	13B1X00306G00766	I		60
03-001-55	田島式マイクロ鑷子 A	4946329046564	13B1X00306G00187	I		113
03-001-58	田島式 ペンチ	4946329046595	13B1X00306G00769	I		61
03-001-59	田島式 K鋼線カッター	4946329046601	13B1X00306G00612	I		59
03-001-60	田島式 エレバ・ラスパ	4946329046618	13B1X00306G00567	I		69
03-001-61	田島式 オステオーム 10mm	4946329046625	13B1X00306G00514	I		72
03-001-62	田島式 オステオーム 5mm	4946329046632	13B1X00306G00514	I		72
03-001-63	田島式 平ノミ 4mm	4946329046649	13B1X00306G00515	I		72
03-001-64	田島式 丸ノミ 4mm	4946329046656	13B1X00306G00516	I		72
03-001-67	ボーンレトラクター A	4946329046670	13B1X00306G00547	I		70
03-001-68	ボーンレトラクター B	4946329046687	13B1X00306G00547	I		70
03-001-81	田島キルシュナー0.7×100 10本	4946329046755	14600BZZ00232000	Ⅲ		56
03-001-82	田島キルシュナー1.0×120 10本	4946329046762	14600BZZ00232000	Ⅲ		56
03-001-83	田島キルシュナー1.2×120 10本	4946329046779	14600BZZ00232000	Ⅲ		56
03-001-84	田島キルシュナー1.5×120 10本	4946329046786	14600BZZ00232000	Ⅲ		56
03-001-85	田島キルシュナー1.4×120 10本	4946329088946	14600BZZ00232000	Ⅲ		56
03-001-86	田島キルシュナー1.6×120 10本	4946329088953	14600BZZ00232000	Ⅲ		56
03-001-87	田島キルシュナー1.8×120 10本	4946329088960	14600BZZ00232000	Ⅲ		56
03-001-88	田島キルシュナー2.0×120 10本	4946329088977	14600BZZ00232000	Ⅲ		56
03-002-04	ナイロンハンマー 極小	4946329046847	13B1X00306H00016	I		71
03-002-07	生田式指骨用骨のみ 刃巾 2mm	4946329046878	13B1X00306G00517	I		72
03-002-08	生田式指骨用骨のみ 刃巾 4mm	4946329046885	13B1X00306G00517	I		72
03-002-09	生田式指骨用骨のみ 刃巾 6mm	4946329046892	13B1X00306G00517	I		72
03-002-10	生田式指骨用骨のみ 刃巾 10mm	4946329046908	13B1X00306G00517	I		72
03-002-12	エレバ・ラスパトリウム 小	4946329046922	13B1X00306G00548	I		69
03-002-13	エレバトリウム(3mm・5mm)	4946329046939	13B1X00306G00549	I		70
03-010-01	宮本氏扁平鉤 大	4946329046991	13B1X00306H00062	I		116
03-010-02	宮本氏扁平鉤 小	4946329047004	13B1X00306H00062	I		116
03-028-17	指骨形成用骨鉗子	4946329047080	13B1X00306G00364	I		75
03-028-18	微小骨鋼線刺入子 (ピンバイス)	4946329047097	13B1X00306G00767	I		60
03-028-28	指骨把持鉗子 大	4946329047110	13B1X00306H00064	I		64
03-028-29	指骨把持鉗子 小	4946329047127	13B1X00306H00064	I		64
03-050-27	新大指骨 骨把持鉗子 A 10cm	4946329047578	13B1X00306G00786	I		64
03-050-28	新大指骨 骨把持鉗子 B 12cm	4946329047585	13B1X00306G00786	I		64
03-050-29	新大指骨 骨把持鉗子 C 12cm	4946329047592	13B1X00306G00786	I		64
03-050-30	新大指骨 骨把持鉗子 D 12cm	4946329047608	13B1X00306G00786	I		64
04-001-05	グレフェー型鑷子 12cm	4946329048032	13B1X00306G00194	I		110
04-001-06	アドソン型鑷子 無鉤	4946329048049	13B1X00306G01396	I		109
04-001-07	アドソン型鑷子 有鉤	4946329048056	13B1X00306G01396	I		109

商品名一覧

商品コード	商品名	JAN	承認・認証・届出番号	クラス分類		掲載ページ
				厚労省	農水省	
04-001-08	マカンド型鑷子(止血鑷子)無鉤 15cm	4946329048063	13B1X00306G00229	I		109
04-001-09	マカンド型鑷子(止血鑷子)有鉤 15cm	4946329048070	13B1X00306G00229	I		109
04-001-10	単鉤 16cm	4946329048087	13B1X00306H00018	I		115
04-001-11	双鉤 16cm	4946329048094	13B1X00306H00065	I		115
04-001-12	筋鉤 4×15mm 16cm	4946329048100	13B1X00306H00066	I		116
04-001-13	両尖剪刀 直 10.5cm	4946329048117	13B1X00306G00133	I		98
04-001-14	両尖剪刀 反 10.5cm	4946329048124	13B1X00306G00133	I		98
05-003-10	ファインソーブレード	4946329128673	13B1X00306G00491	I		80
05-005-00	包帯剪刀	4946329176186	13B1X00306G10274	I		99
06-621-00	コッヘル止血鉗子 直有 14.5B/ L	4946329048896	13B1X00306G00402	I		102
06-622-00	コッヘル止血鉗子 直無 14.5B/ L	4946329048902	13B1X00306G00402	I		102
06-623-00	コッヘル止血鉗子 直有 18.5B/ L	4946329048919	13B1X00306G00402	I		102
06-624-00	コッヘル止血鉗子 直無 18.5B/ L	4946329048926	13B1X00306G00402	I		102
06-627-00	コッヘル止血鉗子 反有 14.5B/ L	4946329048933	13B1X00306G00402	I		102
06-628-00	コッヘル止血鉗子 反無 14.5B/ L	4946329048940	13B1X00306G00402	I		102
06-629-00	コッヘル止血鉗子 反有 18.5B/ L	4946329048957	13B1X00306G00402	I		102
06-630-00	コッヘル止血鉗子 反無 18.5B/ L	4946329048964	13B1X00306G00402	I		102
06-635-00	モスキート止血鉗子 直有 B/ L 12cm	4946329048971	13B1X00306G00404	I		102
06-636-00	モスキート止血鉗子 直無 B/ L 12cm	4946329048988	13B1X00306G00404	I		102
06-637-00	モスキート止血鉗子 反有 B/ L 12cm	4946329048995	13B1X00306G00404	I		102
06-638-00	モスキート止血鉗子 反無 B/ L 12cm	4946329049008	13B1X00306G00404	I		102
06-655-00	小児外科止血鉗子 直有 B/ L 14.5cm	4946329049138	13B1X00306G00407	I		102
06-656-00	小児外科止血鉗子 直無 B/ L 14.5cm	4946329049145	13B1X00306G00407	I		102
06-657-00	小児外科止血鉗子 反有 B/ L 14.5cm	4946329049152	13B1X00306G00407	I		102
06-658-00	小児外科止血鉗子 反無 B/ L 14.5cm	4946329049169	13B1X00306G00407	I		102
06-675-00	ケリー止血鉗子 直有 22cm 螺子止	4946329049251	13B1X00306H00022	I		104
06-676-00	ケリー止血鉗子 直無 22cm 螺子止	4946329049268	13B1X00306H00022	I		104
06-677-00	ケリー止血鉗子 反有 22cm 螺子止	4946329049275	13B1X00306H00022	I		104
06-678-00	ケリー止血鉗子 反無 22cm 螺子止	4946329049282	13B1X00306H00022	I		104
06-679-00	ケリー止血鉗子 直有 24cm 螺子止	4946329049299	13B1X00306H00022	I		104
06-680-00	ケリー止血鉗子 直無 24cm 螺子止	4946329049305	13B1X00306H00022	I		104
06-681-00	ケリー止血鉗子 反有 24cm 螺子止	4946329049312	13B1X00306H00022	I		104
06-682-00	ケリー止血鉗子 反無 24cm 螺子止	4946329049329	13B1X00306H00022	I		104
06-691-00	ミズホ剥離鉗子 B/ L 直型 19cm	4946329049398	13B1X00306G00410	I		104
06-692-00	ミズホ剥離鉗子 B/ L 弱彎型 19cm	4946329049404	13B1X00306G00410	I		104
06-693-00	ミズホ剥離鉗子 B/ L 強彎型 19cm	4946329049411	13B1X00306G00410	I		104
06-694-00	ミズホ剥離鉗子 B/ L アングル型 19cm	4946329049428	13B1X00306G00410	I		104
06-695-00	ミズホ剥離鉗子 B/ L 直型 22cm	4946329049435	13B1X00306G00410	I		104
06-696-00	ミズホ剥離鉗子 B/ L 弱彎型 22cm	4946329049442	13B1X00306G00410	I		104
06-697-00	ミズホ剥離鉗子 B/ L 強彎型 22cm	4946329049459	13B1X00306G00410	I		104
06-698-00	ミズホ剥離鉗子 B/ L アングル型 22cm	4946329049466	13B1X00306G00410	I		104
06-710-01	リスター鉗子 直 B/ L 18.5cm	4946329049510	13B1X00306G00411	I		105
06-710-02	リスター鉗子 反 B/ L 18.5cm	4946329049527	13B1X00306G00411	I		105
06-712-01	三村式鉗子 弱彎 B/ L 18cm	4946329049534	13B1X00306G00412	I		105
06-712-02	三村式鉗子 強彎 B/ L 18cm	4946329049541	13B1X00306G00412	I		105
06-751-01	外科強彎針(角.弾キ)No1 10本	4946329049558	13B1X00306H00023	I		121
06-751-02	外科強彎針(角.弾キ)No2 10本	4946329049565	13B1X00306H00023	I		121
06-751-03	外科強彎針(角.弾キ)No3 10本	4946329049572	13B1X00306H00023	I		121
06-751-04	外科強彎針(角.弾キ)No4 10本	4946329049589	13B1X00306H00023	I		121
06-751-05	外科強彎針(角.弾キ)No5 10本	4946329049596	13B1X00306H00023	I		121
06-751-06	外科強彎針(角.弾キ)No6 10本	4946329049602	13B1X00306H00023	I		121
06-751-07	外科強彎針(角.弾キ)No7 10本	4946329049619	13B1X00306H00023	I		121
06-751-08	外科強彎針(角.弾キ)No8 10本	4946329049626	13B1X00306H00023	I		121
06-751-09	外科強彎針(角.弾キ)No9 10本	4946329049633	13B1X00306H00023	I		121
06-751-10	外科強彎針(角.弾キ)No10 10本	4946329049640	13B1X00306H00023	I		121
06-751-11	外科強彎針(角.弾キ)No0 10本	4946329049657	13B1X00306H00023	I		121
06-751-12	外科強彎針(角.弾キ)No00 10本	4946329049664	13B1X00306H00023	I		121
06-751-13	外科強彎針(角.弾キ)No000 10本	4946329049671	13B1X00306H00023	I		121
06-751-21	外科強彎針(角.並孔)No1 10本	4946329049688	13B1X00306H00023	I		121
06-751-22	外科強彎針(角.並孔)No2 10本	4946329049695	13B1X00306H00023	I		121
06-751-23	外科強彎針(角.並孔)No3 10本	4946329049701	13B1X00306H00023	I		121
06-751-24	外科強彎針(角.並孔)No4 10本	4946329049718	13B1X00306H00023	I		121
06-751-25	外科強彎針(角.並孔)No5 10本	4946329049725	13B1X00306H00023	I		121
06-751-26	外科強彎針(角.並孔)No6 10本	4946329049732	13B1X00306H00023	I		121
06-751-27	外科強彎針(角.並孔)No7 10本	4946329049749	13B1X00306H00023	I		121

商品コード	商品名	JAN	承認・認証・届出番号	クラス分類		掲載ページ
				厚労省	農水省	
06-751-28	外科強彎針(角.並孔)No8 10本	4946329049756	13B1X00306H00023	I		121
06-751-29	外科強彎針(角.並孔)No9 10本	4946329049763	13B1X00306H00023	I		121
06-751-30	外科強彎針(角.並孔)No10 10本	4946329049770	13B1X00306H00023	I		121
06-751-41	外科強彎針(丸.弾キ)No1 10本	4946329049787	13B1X00306H00023	I		121
06-751-42	外科強彎針(丸.弾キ)No2 10本	4946329049794	13B1X00306H00023	I		121
06-751-43	外科強彎針(丸.弾キ)No3 10本	4946329049800	13B1X00306H00023	I		121
06-751-44	外科強彎針(丸.弾キ)No4 10本	4946329049817	13B1X00306H00023	I		121
06-751-45	外科強彎針(丸.弾キ)No5 10本	4946329049824	13B1X00306H00023	I		121
06-751-46	外科強彎針(丸.弾キ)No6 10本	4946329049831	13B1X00306H00023	I		121
06-751-47	外科強彎針(丸.弾キ)No7 10本	4946329049848	13B1X00306H00023	I		121
06-751-48	外科強彎針(丸.弾キ)No8 10本	4946329049855	13B1X00306H00023	I		121
06-751-49	外科強彎針(丸.弾キ)No9 10本	4946329049862	13B1X00306H00023	I		121
06-751-50	外科強彎針(丸.弾キ)No10 10本	4946329049879	13B1X00306H00023	I		121
06-752-01	外科弱彎針(角.弾キ)No1 10本	4946329049886	13B1X00306H00023	I		122
06-752-02	外科弱彎針(角.弾キ)No2 10本	4946329049893	13B1X00306H00023	I		122
06-752-03	外科弱彎針(角.弾キ)No3 10本	4946329049909	13B1X00306H00023	I		122
06-752-04	外科弱彎針(角.弾キ)No4 10本	4946329049916	13B1X00306H00023	I		122
06-752-05	外科弱彎針(角.弾キ)No5 10本	4946329049923	13B1X00306H00023	I		122
06-752-06	外科弱彎針(角.弾キ)No6 10本	4946329049930	13B1X00306H00023	I		122
06-752-07	外科弱彎針(角.弾キ)No7 10本	4946329049947	13B1X00306H00023	I		122
06-752-08	外科弱彎針(角.弾キ)No8 10本	4946329049954	13B1X00306H00023	I		122
06-752-11	外科弱彎針(角.並孔)No1 10本	4946329049961	13B1X00306H00023	I		122
06-752-12	外科弱彎針(角.並孔)No2 10本	4946329049978	13B1X00306H00023	I		122
06-752-13	外科弱彎針(角.並孔)No3 10本	4946329049985	13B1X00306H00023	I		122
06-752-14	外科弱彎針(角.並孔)No4 10本	4946329049992	13B1X00306H00023	I		122
06-752-15	外科弱彎針(角.並孔)No5 10本	4946329050004	13B1X00306H00023	I		122
06-752-16	外科弱彎針(角.並孔)No6 10本	4946329050011	13B1X00306H00023	I		122
06-752-17	外科弱彎針(角.並孔)No7 10本	4946329050028	13B1X00306H00023	I		122
06-752-18	外科弱彎針(角.並孔)No8 10本	4946329050035	13B1X00306H00023	I		122
06-752-21	外科弱彎針(丸.弾キ)No1 10本	4946329050042	13B1X00306H00023	I		122
06-752-22	外科弱彎針(丸.弾キ)No2 10本	4946329050059	13B1X00306H00023	I		122
06-752-23	外科弱彎針(丸.弾キ)No3 10本	4946329050066	13B1X00306H00023	I		122
06-752-24	外科弱彎針(丸.弾キ)No4 10本	4946329050073	13B1X00306H00023	I		122
06-752-25	外科弱彎針(丸.弾キ)No5 10本	4946329050080	13B1X00306H00023	I		122
06-752-26	外科弱彎針(丸.弾キ)No6 10本	4946329050097	13B1X00306H00023	I		122
06-752-27	外科弱彎針(丸.弾キ)No7 10本	4946329050103	13B1X00306H00023	I		122
06-752-28	外科弱彎針(丸.弾キ)No8 10本	4946329050110	13B1X00306H00023	I		122
06-753-01	腸用針(丸.弾キ)No1 10本入	4946329050127	13B1X00306H00023	I		122
06-753-02	腸用針(丸.弾キ)No2 10本入	4946329050134	13B1X00306H00023	I		122
06-753-03	腸用針(丸.弾キ)No3 10本入	4946329050141	13B1X00306H00023	I		122
06-753-04	腸用針(丸.弾キ)No4 10本入	4946329050158	13B1X00306H00023	I		122
06-753-05	腸用針(丸.弾キ)No5 10本入	4946329050165	13B1X00306H00023	I		122
06-753-06	腸用針(丸.弾キ)No6 10本入	4946329050172	13B1X00306H00023	I		122
06-753-07	腸用針(丸.弾キ)No7 10本入	4946329050189	13B1X00306H00023	I		122
06-753-11	腸用針(丸.弾キ)No0 10本入	4946329050196	13B1X00306H00023	I		122
06-753-12	腸用針(丸.弾キ)No00 10本入	4946329050202	13B1X00306H00023	I		122
06-753-13	腸用針(丸.弾キ)No000 10本入	4946329050219	13B1X00306H00023	I		122
06-753-21	腸用針(丸.並孔)No1 10本入	4946329050226	13B1X00306H00023	I		122
06-753-22	腸用針(丸.並孔)No2 10本入	4946329050233	13B1X00306H00023	I		122
06-753-23	腸用針(丸.並孔)No3 10本入	4946329050240	13B1X00306H00023	I		122
06-753-31	腸用針(丸.並孔)No0 10本入	4946329050295	13B1X00306H00023	I		122
06-753-32	腸用針(丸.並孔)No00 10本入	4946329050301	13B1X00306H00023	I		122
06-753-33	腸用針(丸.並孔)No000 10本入	4946329050318	13B1X00306H00023	I		122
06-771-00	マッチュー型持針器 B/L チップ無 16cm	4946329051452	13B1X00306G00070	I		101
06-772-00	マッチュー型持針器 B/L チップ無 19cm	4946329051469	13B1X00306G00070	I		101
06-773-00	マッチュー型持針器 B/L チップ無 21cm	4946329051476	13B1X00306G00070	I		101
06-777-00	メーヨー・ヘガール型持針器 16cm	4946329051483	13B1X00306G00072	I		101
06-778-00	メーヨー・ヘガール型持針器 19cm	4946329051490	13B1X00306G00072	I		101
06-779-00	メーヨー・ヘガール型持針器 21cm	4946329051506	13B1X00306G00072	I		101
06-796-00	メーヨー・ヘガール型持針器 12.5cm 超硬チップ付	4946329051575	13B1X00306G00072	I		100
06-797-00	メーヨー・ヘガール型持針器 14cm 超硬チップ付	4946329051582	13B1X00306G00072	I		100
06-798-00	メーヨー・ヘガール型持針器 16cm 超硬チップ付	4946329051599	13B1X00306G00072	I		100
06-799-00	メーヨー・ヘガール型持針器 19cm 超硬チップ付	4946329051605	13B1X00306G00072	I		100
06-800-00	メーヨー・ヘガール型持針器 21cm 超硬チップ付	4946329051612	13B1X00306G00072	I		100
06-804-00	マッチュー型持針器チップ付 B/L 16cm	4946329051636	13B1X00306G00070	I		100

商品名一覧

商品コード	商品名	JAN	承認・認証・届出番号	クラス分類		掲載ページ
				厚労省	農水省	
06-805-00	マッチュー型持針器チップ付 B/L 19cm	4946329051643	13B1X00306G00070	I		100
06-806-00	マッチュー型持針器チップ付 B/L 21cm	4946329051650	13B1X00306G00070	I		100
06-810-00	19cm 超硬チップ付	4946329051674	13B1X00306G00074	I		100
06-811-00	21cm超硬チップ付	4946329051681	13B1X00306G00074	I		100
06-823-00	オルセン・ヘガール持針器 12cm	4946329100013	13B1X00306Y10021	I		101
06-824-00	オルセン・ヘガール持針器 14cm	4946329100020	13B1X00306Y10021	I		101
06-825-00	オルセン・ヘガール持針器 17cm	4946329100037	13B1X00306Y10021	I		101
07-007-20	MRマイクロ鑷子バイオネット 無鉤 0.2mm 20cm	4946329148985	13B1X00306G10003	I		112
07-007-21	MRマイクロ鑷子バイオネット 無鉤 1.0mm 20cm	4946329148992	13B1X00306G10003	I		112
07-007-22	MRマイクロ鑷子バイオネット 有鉤 0.5mm 20cm	4946329149005	13B1X00306G10003	I		112
07-007-23	MRマイクロ鑷子バイオネット カップ型 φ3 20cm	4946329149012	13B1X00306G10003	I		112
07-007-24	MRマイクロ鑷子バイオネット カップ型 φ1直 20cm	4946329149029	13B1X00306G10003	I		112
07-007-25	MRマイクロ鑷子バイオネット カップ型 φ1上向 20cm	4946329149036	13B1X00306G10003	I		112
07-007-55	MRマイクロ鑷子 無鉤 1.0mm 15cm	4946329148930	13B1X00306G10003	I		112
07-007-56	MRマイクロ鑷子 有鉤 2.0mm 15cm	4946329148947	13B1X00306G10003	I		112
07-007-57	MRマイクロ鑷子 有鉤 1.0mm 15cm	4946329148954	13B1X00306G10003	I		112
07-007-58	MRマイクロ鑷子 無鉤 0.2mm 15cm	4946329148961	13B1X00306G10003	I		112
07-007-59	MRマイクロ鑷子 カップ型 φ1.0 15cm	4946329148978	13B1X00306G10003	I		112
07-056-00	東大改良開創器中ウエイトラナー開創器	4946329053302	13B1X00306G00697	I		119
07-057-00	東大改良型開創器 小	4946329053319	13B1X00306G00697	I		119
07-061-01	レニー型頭皮クリップ(10ヶ入)	4946329131369	13B1X00306G00097	I		119
07-061-02	レニー型頭皮クリップ低圧タイプ(10ヶ入1袋)	4946329141979	13B1X00306G00097	I		119
07-062-00	レニー型頭皮クリップ(プラ製)	4946329053364	22000BZX00711000	II		119
07-063-00	レニー型頭皮クリップ鉗子 19cm	4946329053371	13B1X00306H00025	I		119
07-064-00	レニー型頭皮クリップ鉗子 17cm	4946329053388	13B1X00306H00025	I		119
07-110-00	ルーツェ鑷子 無鉤 17cm	4946329053876	13B1X00306G00203	I		110
07-112-01	フレーション吸引管φ1mm 22cm	4946329053913	13B1X00306G00616	I		15
07-112-02	フレーション吸引管φ1.5mm 22cm	4946329053920	13B1X00306G00616	I		15
07-112-03	フレーション吸引管φ2mm 22cm	4946329053937	13B1X00306G00616	I		15
07-112-04	フレーション吸引管φ2.5mm 22cm	4946329053944	13B1X00306G00616	I		15
07-112-05	フレーション吸引管φ3mm 22cm	4946329053951	13B1X00306G00616	I		15
07-112-06	フレーション吸引管φ3.5mm 22cm	4946329053968	13B1X00306G00616	I		15
07-112-07	フレーション吸引管φ4mm 22cm	4946329053975	13B1X00306G00616	I		15
07-112-08	フレーション吸引管φ5mm 22cm	4946329053982	13B1X00306G00616	I		15
07-128-00	硬膜膝状剪刀	4946329054217	13B1X00306G00138	I		99
07-155-00	腫瘍把持鑷子 大	4946329054583	13B1X00306G00208	I		110
07-156-00	腫瘍把持鑷子 小	4946329054590	13B1X00306G00208	I		110
07-650-00	マイクロ・ロンジャー (長・直)	4946329056754	13B1X00306G00374	I		75
07-650-01	マイクロ・ロンジャー (長・反)	4946329056761	13B1X00306G00374	I		75
07-650-02	マイクロ・ロンジャー (短・直)	4946329056778	13B1X00306G00374	I		75
07-650-03	マイクロ・ロンジャー (短・反)	4946329056785	13B1X00306G00374	I		75
07-781-41	白金双極性鑷子 15cm バックコーティング付 (0.5mm)	4946329102024	22000BZX00708000	II		18
07-781-42	白金双極性鑷子 15cm バックコーティング付 (0.8mm)	4946329102031	22000BZX00708000	II		18
07-781-50	白金双極性鑷子 17cm バックコーティング付 (0.2mm)	4946329102048	22000BZX00708000	II		18
07-781-51	白金双極性鑷子 17cm バックコーティング付 (0.5mm)	4946329057591	22000BZX00708000	II		18
07-781-52	白金双極性鑷子 17cm バックコーティング付 (0.8mm)	4946329102055	22000BZX00708000	II		18
07-781-53	白金双極性鑷子 17cm バックコーティング付 (2.0mm)	4946329102062	22000BZX00708000	II		18
07-781-60	白金双極性鑷子 20cm バックコーティング付 (0.2mm)	4946329102079	22000BZX00708000	II		18
07-781-61	白金双極性鑷子 20cm バックコーティング付 (0.5mm)	4946329102086	22000BZX00708000	II		18
07-781-62	白金双極性鑷子 20cm バックコーティング付 (0.8mm)	4946329102093	22000BZX00708000	II		18
07-781-71	白金双極性鑷子 22.5cm バックコーティング付 (0.5mm)	4946329102109	22000BZX00708000	II		18
07-781-72	白金双極性鑷子 22.5cm バックコーティング付 (0.8mm)	4946329102116	22000BZX00708000	II		18
07-781-81	白金双極性鑷子 アドソンタイプ バックコーティング付 (0.5mm)	4946329102123	22000BZX00708000	II		18
07-781-82	白金双極性鑷子 アドソンタイプ バックコーティング付 (0.8mm)	4946329102161	22000BZX00708000	II		18
07-782-41	白金双極性鑷子 15cm バックコーティング無 (0.5mm)	4946329120196	22000BZX00708000	II		18
07-782-42	白金双極性鑷子 15cm バックコーティング無 (0.8mm)	4946329120202	22000BZX00708000	II		18
07-782-50	白金双極性鑷子 17cm バックコーティング無 (0.2mm)	4946329121018	22000BZX00708000	II		18
07-782-51	白金双極性鑷子 17cm バックコーティング無 (0.5mm)	4946329120219	22000BZX00708000	II		18
07-782-52	白金双極性鑷子 17cm バックコーティング無 (0.8mm)	4946329120226	22000BZX00708000	II		18
07-782-53	白金双極性鑷子 17cm バックコーティング無 (2.0mm)	4946329121025	22000BZX00708000	II		18
07-782-60	白金双極性鑷子 20cm バックコーティング無 (0.2mm)	4946329121032	22000BZX00708000	II		18
07-782-61	白金双極性鑷子 20cm バックコーティング無 (0.5mm)	4946329121049	22000BZX00708000	II		18
07-782-62	白金双極性鑷子 20cm バックコーティング無 (0.8mm)	4946329121056	22000BZX00708000	II		18
07-782-71	白金双極性鑷子 22.5cm バックコーティング無 (0.5mm)	4946329121063	22000BZX00708000	II		18
07-782-72	白金双極性鑷子 22.5cm バックコーティング無 (0.8mm)	4946329121070	22000BZX00708000	II		18

商品コード	商品名	JAN	承認・認証・届出番号	クラス分類		掲載ページ
				厚労省	農水省	
07-782-81	白金双極性鑷子 アドソンタイプ バックコーティング無 (0.5mm)	4946329120233	22000BZX00708000	Ⅱ		18
07-782-82	白金双極性鑷子 アドソンタイプ バックコーティング無 (0.8mm)	4946329120240	22000BZX00708000	Ⅱ		18
07-785-03	双極性止血鑷子差替コード(5本入)	4946329057645	13B1X00306E10008	I		18
07-785-10	パイポラ用リユース差替えコード	4946329124132	13B1X00306E10005	I		17,18
07-814-01	マイクロシザース ストリームライン S 175mmストレートSuper Professional	4946329150216	13B1X00306G10034	I		111
07-814-02	マイクロシザース ストリームライン S 175mmカーブSuper Professional	4946329150223	13B1X00306G10034	I		111
07-814-03	マイクロシザース ストリームライン M 190mmストレートProfessional	4946329150230	13B1X00306G10034	I		111
07-814-04	マイクロシザース ストリームライン M 190mmカーブProfessional	4946329150247	13B1X00306G10034	I		111
07-814-05	マイクロシザース ストリームライン L 220mmストレートSpecial	4946329150254	13B1X00306G10034	I		111
07-814-06	マイクロシザース ストリームライン L 220mmカーブSpecial	4946329150261	13B1X00306G10034	I		111
07-850-00	クライエンビュール型血管兼神経鉤 玉付 小	4946329058871	13B1X00306G00287	I		80
07-851-00	クライエンビュール型血管兼神経鉤 玉付 大	4946329058888	13B1X00306G00287	I		80
07-861-02	マイクロ手術持針器 B 13cm	4946329058963	13B1X00306G00084	I		101,113
07-861-03	マイクロ手術持針器(ガンギ付) C 13cm	4946329058970	13B1X00306G00084	I		101,113
07-861-04	デュアルニードルホルダー ストレート	4946329205695	13B1X00306G10445	I		113
07-861-05	デュアルニードルホルダー カーブ	4946329205701	13B1X00306G10445	I		113
07-862-00	マイクロ手術剪刀13cm	4946329058987	13B1X00306G00158	I		111
07-862-01	マイクロ手術剪刀 A 片鈍13cm	4946329058994	13B1X00306G00158	I		111
07-956-65	脳用柔軟性筥 長 210×10 黒	4946329062540	13B1X00306G00527	I		116
07-956-66	脳用柔軟性筥 長 210×15 黒	4946329062557	13B1X00306G00527	I		116
07-956-67	脳用柔軟性筥 長 210×20 黒	4946329062564	13B1X00306G00527	I		116
07-956-68	脳用柔軟性筥 長 210×30 黒	4946329062571	13B1X00306G00527	I		116
07-956-69	脳用柔軟性筥 短 140×10 黒	4946329062588	13B1X00306G00527	I		116
07-956-70	脳用柔軟性筥 短 140×15 黒	4946329062595	13B1X00306G00527	I		116
07-956-71	脳用柔軟性筥 短 140×20 黒	4946329062601	13B1X00306G00527	I		116
07-968-00	岡大改良型動脈瘤剥離子(銀先取換式)	4946329063264	13B1X00306G00590	I		80
07-969-00	岡大改良型銀先ゾンデ	4946329063271	13B1X00306G00590	I		80
08-062-05	L型スクリーン掛 φ12mm 650mm 固定金具付	4946329208375	13B1X00306N10006	I		9
08-091-00	カセット挿入ホルダー(大陸用)	4946329068214	13B1X00306N10015	I		9
08-092-00	カセット挿入ホルダー(四ッ切用)	4946329068221	13B1X00306N10015	I		9
08-093-00	カセット挿入ホルダー(大角用)	4946329068238	13B1X00306N10015	I		9
08-094-00	カセット挿入ホルダー(半切用)	4946329127461	13B1X00306N10015	I		9
08-097-03	消毒盤台 720mm (固定金具付)	4946329174274	13B1X00306N10023	I		10
08-110-01	レール固定金具(大型)Ver.2	4946329173970	13B1X00306N10006	I		10
08-144-00	ミズホ電気手術器 MESS-2000	4946329187021	223AGBZX00127000	Ⅱ特管		17
08-144-11	MESS-2000用カート	4946329237016	—	—	—	17
08-144-21	IC専用鉗子カーブSmall	4946329237023	227AGBZX00007000	Ⅱ		17
08-144-22	IC専用鉗子カーブLarge	4946329237030	227AGBZX00007000	Ⅱ		17
08-144-23	IC鉗子用コード3m	4946329237047	13B1X00306N10251	I		17
08-191-00	パイポラフットスイッチ	4946329187045	13B1X00306H10029	I		17
08-226-20	ウォルトン外科吸引管-M 径12mm	4946329231694	13B1X00306G10591	I		15
08-226-21	ウォルトン外科吸引管-M 径10mm	4946329231663	13B1X00306G10591	I		15
08-226-22	ウォルトン外科吸引管-M 径8mm	4946329231670	13B1X00306G10591	I		15
08-334-01	オーバーヘッド器械台 A	4946329070583	13B1X00306N10222	I		10
08-365-00	油圧昇降手術椅子 (丸型, 背無)	4946329070996	—			10
08-366-00	油圧昇降手術椅子 (丸型, 背付)	4946329071009	—			10
08-367-00	油圧昇降手術椅子 (鞍型, 背付)	4946329071016	—			10
08-370-79	LED Light HOSPILITE L1-S	—	13B3X00306000018	I		14
08-395-00	ミルクテック 4000cc入	4946329071207	—			19
08-631-01	CD0-3B ミニサイズコンテナ 底穴有	4946329071825	—			20
08-631-02	CD0-4B フォーターサイズコンテナ 底穴有	4946329071832	—			20
08-631-03	CD1-4B ハーフサイズコンテナ 底穴有	4946329071849	—			20
08-631-04	CD1-5B ハーフサイズコンテナ 底穴有	4946329071856	—			20
08-631-05	CD1-6B ハーフサイズコンテナ 底穴有	4946329071863	—			20
08-635-01	BP0-1A ミニサイズバスケット	4946329072143	—			20
08-636-01	BP0-2V パンチング(バーチカル) 1/4サイズ	4946329072327	—			20
08-636-02	BP1-2V パンチング(バーチカル) HF5.0	4946329072334	—			20
08-636-03	BP1-3V パンチング(バーチカル) HF7.6	4946329072341	—			20
08-636-04	BP1-4V パンチング(バーチカル) HF10.0	4946329072358	—			20
08-639-03	AS2-2 インジケータアロー 蒸気用500本	4946329072686	—			21
08-639-04	AS2-3 インジケータアロー 蒸気用1000本	4946329072693	—			21
08-640-17	DST-1 フィルターペーパー 500枚入ミニサイズ用	4946329215830	—			21
08-640-18	DST-2 フィルターペーパー 500枚入フォーターエンド用	4946329215847	—			21
08-640-19	DST-3 フィルターペーパー 1000枚入H、M、F、R用	4946329215854	—			21
08-641-01	MD1-1 データーカード 500枚	4946329072761	—			21

商品名一覧

商品コード	商品名	JAN	承認・認証・届出番号	クラス分類		掲載ページ
				厚労省	農水省	
08-644-01	SX2-0 シリコンパット ミニサイズ	4946329073058	—			21
08-644-02	SX2-1 シリコンパット ハーフサイズ	4946329073065	—			21
08-644-04	SX2-5 シリコンパット クォーターサイズ	4946329073089	—			21
09-030-00	外科手術剪刀 直型 先鋭 140mm	4946329074994	13B1X00306G00161	I		97
09-031-00	外科手術剪刀 直型 片鋭片鈍 140mm	4946329075007	13B1X00306G00161	I		97
09-032-00	外科手術剪刀 直型 両鈍 140mm	4946329075014	13B1X00306G00161	I		97
09-033-00	外科手術剪刀 直型 先鋭 180mm	4946329075021	13B1X00306G00161	I		97
09-034-00	外科手術剪刀 直型 両鈍 180mm	4946329075038	13B1X00306G00161	I		97
09-040-00	外科手術剪刀 反型 先鋭 140mm	4946329075069	13B1X00306G00161	I		97
09-041-00	外科手術剪刀 反型 片鋭片鈍 140mm	4946329075076	13B1X00306G00161	I		97
09-042-00	外科手術剪刀 反型 両鈍 140mm	4946329075083	13B1X00306G00161	I		97
09-043-00	外科手術剪刀 反型 先鋭 180mm	4946329075090	13B1X00306G00161	I		97
09-044-00	外科手術剪刀 反型 両鈍 180mm	4946329075106	13B1X00306G00161	I		97
09-060-00	メーヨー式剪刀 直型 14cm 螺子止	4946329075137	13B1X00306G00163	I		97
09-061-00	メーヨー式剪刀 直型 16cm 螺子止	4946329075144	13B1X00306G00163	I		97
09-062-00	メーヨー式剪刀 直型 18cm 螺子止	4946329075151	13B1X00306G00163	I		97
09-063-00	メーヨー式剪刀 反型 14cm 螺子止	4946329075168	13B1X00306G00163	I		97
09-064-00	メーヨー式剪刀 反型 16cm 螺子止	4946329075175	13B1X00306G00163	I		97
09-065-00	メーヨー式剪刀 反型 18cm 螺子止	4946329075182	13B1X00306G00163	I		97
09-069-00	メッツェンバウム剪刀 直14cm螺子止	4946329075199	13B1X00306H00036	I		97
09-070-00	メッツェンバウム剪刀 直16cm螺子止	4946329075205	13B1X00306H00036	I		97
09-071-00	メッツェンバウム剪刀 直18cm螺子止	4946329075212	13B1X00306H00036	I		97
09-079-00	メッツェンバウム剪刀 反14cm螺子止	4946329075250	13B1X00306H00036	I		97
09-080-00	メッツェンバウム剪刀 反16cm螺子止	4946329075267	13B1X00306H00036	I		97
09-081-00	メッツェンバウム剪刀 反18cm螺子止	4946329075274	13B1X00306H00036	I		97
09-090-00	外科鑷子 無鉤 13cm	4946329075311	13B1X00306G00223	I		109
09-091-00	外科鑷子 無鉤 15cm	4946329075328	13B1X00306G00223	I		109
09-092-00	外科鑷子 無鉤 18cm	4946329075335	13B1X00306G00223	I		109
09-093-00	外科鑷子 無鉤 23cm	4946329075342	13B1X00306G00223	I		109
09-100-00	外科鑷子 有鉤 13cm	4946329075359	13B1X00306G00223	I		109
09-101-00	外科鑷子 有鉤 15cm	4946329075366	13B1X00306G00223	I		109
09-102-00	外科鑷子 有鉤 18cm	4946329075373	13B1X00306G00223	I		109
09-103-00	外科鑷子 有鉤 23cm	4946329075380	13B1X00306G00223	I		109
09-118-01	デシャンブ動脈瘤針 鈍 大 右	4946329075441	13B1X00306H00078	I		62
09-118-02	デシャンブ動脈瘤針 鈍 大 左	4946329075458	13B1X00306H00078	I		62
09-118-03	デシャンブ動脈瘤針 鈍 中 右	4946329075465	13B1X00306H00078	I		62
09-118-04	デシャンブ動脈瘤針 鈍 中 左	4946329075472	13B1X00306H00078	I		62
09-118-05	デシャンブ動脈瘤針 鈍 小 右	4946329075489	13B1X00306H00078	I		62
09-118-06	デシャンブ動脈瘤針 鈍 小 左	4946329075496	13B1X00306H00078	I		62
09-118-07	デシャンブ動脈瘤針 鈍 極小 右	4946329075502	13B1X00306H00078	I		62
09-118-08	デシャンブ動脈瘤針 鈍 極小 左	4946329075519	13B1X00306H00078	I		62
09-123-00	バックハウスタオル鉗子 小BL 11	4946329075540	13B1X00306Y10011	I		108
09-124-00	バックハウスタオル鉗子 大BL 13	4946329075557	13B1X00306Y10011	I		108
09-126-00	M式タオル鉗子	4946329075564	13B1X00306G00428	I		108
09-127-00	ウエック型タオル鉗子 小 10cm	4946329075571	13B1X00306G00430	I		108
09-128-00	ウエック型タオル鉗子 大 13.5cm	4946329075588	13B1X00306G00430	I		108
09-129-00	タオル鑷子 8.5cm	4946329075595	13B1X00306G00225	I		108
09-130-06	M式タオル鉗子 チューブホルダー付 φ6	4946329075601	13B1X00306G00431	I		108
09-130-09	M式タオル鉗子 チューブホルダー付 φ9	4946329075618	13B1X00306G00431	I		108
09-130-12	M式タオル鉗子 チューブホルダー付 φ12	4946329075625	13B1X00306G00431	I		108
09-172-00	ゴッセ開創器 大	4946329075908	13B1X00306H00082	I		117
09-173-00	ゴッセ開創器 小	4946329075915	13B1X00306H00082	I		117
09-176-01	新大式開腹用開創器 大	4946329075946	13B1X00306G00719	I		117
09-176-02	新大式開腹用開創器 小	4946329075953	13B1X00306G00719	I		117
09-177-00	バルファー開創器	4946329075960	13B1X00306H00084	I		117
09-181-00	ミクリッチ腹膜鉗子 B/L	4946329076103	13B1X00306H00038	I		104
09-189-21	胃腸鉗子 小直	4946329076196	13B1X00306G00435	I		107
09-189-22	胃腸鉗子 小反	4946329076202	13B1X00306G00435	I		107
09-205-00	眼科鑷子 無鉤 11cm	4946329076233	13B1X00306G01397	I		109
09-206-00	眼科鑷子 有鉤 11cm	4946329076240	13B1X00306G01397	I		109
09-207-00	眼科剪刀 直型 先鋭 11cm	4946329076257	13B1X00306G00178	I		98
09-208-00	眼科剪刀 直型 先鈍 11cm	4946329076264	13B1X00306G00178	I		98
09-209-00	眼科剪刀 反型 先鋭 11cm	4946329076271	13B1X00306G00178	I		98
09-210-00	眼科剪刀 反型 先鈍 11cm	4946329076288	13B1X00306G00178	I		98
09-214-00	アリス有鉤鉗子	4946329076318	13B1X00306G00438	I		107

商品コード	商品名	JAN	承認・認証・届出番号	クラス分類		掲載ページ
				厚労省	農水省	
09-216-00	バブコック組織鉗子 16cm	4946329076325	13B1X00306G00439	I		105
09-217-00	バブコック組織鉗子 20cm	4946329076332	13B1X00306G00439	I		105
09-230-01	微小血管モスキート鉗子 無鉤 直B/L	4946329077452	13B1X00306G00446	I		103
09-230-02	微小血管モスキート鉗子 無鉤 反B/L	4946329077469	13B1X00306G00446	I		103
09-230-03	幼小児モスキート鉗子 無鉤 直B/L	4946329077476	13B1X00306G00447	I		103
09-230-04	幼小児モスキート鉗子 無鉤 反B/L	4946329077483	13B1X00306G00447	I		103
09-230-07	メツツェンバウム剪刀 反12.5cm螺子止	4946329077490	13B1X00306H00036	I		97
09-230-09	小扁平鉗 大 7×17mm	4946329077506	13B1X00306H00039	I		116
09-230-10	小扁平鉗 小 5×17mm	4946329077513	13B1X00306H00039	I		116
09-230-12	幼児開胸器	4946329077520	13B1X00306G00724	I		118
09-230-13	新生児開胸器	4946329077537	13B1X00306G00725	I		118
09-230-21	小児用腸鉗子 直	4946329077544	13B1X00306G00448	I		106
09-230-22	小児用腸鉗子 反	4946329077551	13B1X00306G00448	I		106
09-230-24	小サテンスキー血管鉗子	4946329077568	13B1X00306G00449	I		105
17-086-01	ヘモクリップアプライヤー Sカーブ15cm 5231-400	4026704429462	13B1X00178000032	I		120
17-086-02	ヘモクリップアプライヤー Sカーブ19cm 5231-500	4026704429479	13B1X00178000032	I		120
17-086-11	ヘモクリップアプライヤー Mライトアングル 19cm 5231-050	4026704429387	13B1X00178000032	I		120
17-086-14	ヘモクリップアプライヤー Mカーブ19cm 5231-100	4026704429417	13B1X00178000032	I		120
17-086-21	ヘモクリップアプライヤー M-Lカーブ20cm 5231-650	4026704429493	13B1X00178000032	I		120
17-086-23	ヘモクリップアプライヤー M-Lライトアングル 20cm 5231-670	4026704429516	13B1X00178000032	I		120
17-086-32	ヘモクリップアプライヤー Lライトアングル 20cm 5231-770	4026704429547	13B1X00178000032	I		120
17-086-33	ヘモクリップアプライヤー Lライトアングル 27cm 5231-780	4026704429554	13B1X00178000032	I		120
17-086-34	ヘモクリップアプライヤー Lカーブ27cm 5231-800	4026704429561	13B1X00178000032	I		120
17-089-01	ウエックヘモクリップ25×12 S 5237-350	4026704418107	22400BZX00089000	Ⅲ		120
17-089-02	ウエックヘモクリップ10×24 S 5238-350	4026704418145	22400BZX00089000	Ⅲ		120
17-089-11	ウエックヘモクリップ25×10 M 5237-000	4026704418091	22400BZX00089000	Ⅲ		120
17-089-12	ウエックヘモクリップ10×20 M 5238-000	4026704418138	22400BZX00089000	Ⅲ		120
17-089-20	ウエックヘモクリップ10×20 M-L 5237-600	4026704418114	22400BZX00089000	Ⅲ		120
17-089-21	ウエックヘモクリップ10×16 M-L 5238-600	4026704418152	22400BZX00089000	Ⅲ		120
17-089-31	ウエックヘモクリップ15×10 L 5237-700	4026704418121	22400BZX00089000	Ⅲ		120
17-089-32	ウエックヘモクリップ10×12 L 5238-700	4026704418169	22400BZX00089000	Ⅲ		120
18-307-01	滅菌ハンドル(調光ボタン付) H-1	4946329209297	13B3X00306000028	I		13
18-307-06	カメラカバーCH-2(白)	4946329300635	13B3X00306000028	I		13
18-310-01	PULIV5	4946329299847	13B3X00306000028	I		13
18-310-02	PULIV7	4946329299854	13B3X00306000028	I		13
18-310-03	PULIV55	4946329299861	13B3X00306000028	I		13
18-314-23	PULIV5S スタンド	4946329300567	13B3X00306000028	I		13
18-315-01	PULIVCB-2FLATフラット	4946329300574	13B3X00306000028	I		13
18-315-02	PULIVCB-22FLATフラット	4946329300581	13B3X00306000028	I		13
18-315-04	PULIVCB-2BOXボックス	4946329300604	13B3X00306000028	I		13
18-315-05	PULIVCB-22BOXボックス	4946329300611	13B3X00306000028	I		13
41-001-00	抜糸剪刀	4946329159318	13B1X00306Y10029	I		99
41-003-00	ワイヤー剪刀 12cm	4946329159325	13B1X00306Y10026	I		59
41-140-31	ロングボルトガイド	4946329158755	13B1X00306G10898	I		51
41-177-00	ベビーパルフォー開創器	4946329159332	13B1X00306Y10025	I		118
41-201-00	吸引器アスピレーター SP20	4946329161014	21900BZX00807000	Ⅱ		15
41-202-00	吸引器アスピレーター SP30	4946329161021	21900BZX00808000	Ⅱ		15
41-203-00	吸引器アスピレーター SP40	4946329161038	21900BZX00809000	Ⅱ		15
41-500-01	若杉式骨整復器 大	4946329159004	13B1X00306G10438	I		68
41-500-02	若杉式骨整復器 中	4946329159011	13B1X00306G10438	I		68
41-500-03	若杉式骨整復器 小	4946329159028	13B1X00306G10438	I		68
41-513-01	丸のみ鉗子 曲	4946329157932	13B1X00306G10349	I		75
41-516-01	鋼線曲鉗子	4946329158830	13B1X00306H10006	I		61
41-517-03	爪交換式骨鉗子ケース付	4946329184259	13B1X00306H10008	I		67
41-519-03	ゲルビー開創器 ミニ	4946329159035	13B1X00306H10010	I		114
41-522-00	セルフセンタリング鉗子	4946329159349	13B1X00306Y10024	I		65
41-523-00	セッター骨把持鉗子 16cm	4946329159356	13B1X00306Y10023	I		65
41-524-00	整復用鉗子 14cm	4946329159363	13B1X00306Y10028	I		65
51-101-10	動物用 3.5皮質骨ネジ 10mm	4946329084320	19動薬第1872号		管理	39
51-101-12	動物用 3.5皮質骨ネジ 12mm	4946329084337	19動薬第1872号		管理	39
51-101-14	動物用 3.5皮質骨ネジ 14mm	4946329084344	19動薬第1872号		管理	39
51-101-16	動物用 3.5皮質骨ネジ 16mm	4946329084351	19動薬第1872号		管理	39
51-101-18	動物用 3.5皮質骨ネジ 18mm	4946329084368	19動薬第1872号		管理	39
51-101-20	動物用 3.5皮質骨ネジ 20mm	4946329084375	19動薬第1872号		管理	39
51-101-22	動物用 3.5皮質骨ネジ 22mm	4946329084382	19動薬第1872号		管理	39

商品名一覧

商品コード	商品名	JAN	承認・認証・届出番号	クラス分類		掲載ページ
				厚労省	農水省	
51-101-24	動物用 3.5皮質骨ネジ 24mm	4946329084399	19動業第1872号		管理	39
51-101-26	動物用 3.5皮質骨ネジ 26mm	4946329084405	19動業第1872号		管理	39
51-101-28	動物用 3.5皮質骨ネジ 28mm	4946329084412	19動業第1872号		管理	39
51-101-30	動物用 3.5皮質骨ネジ 30mm	4946329084429	19動業第1872号		管理	39
51-101-32	動物用 3.5皮質骨ネジ 32mm	4946329084436	19動業第1872号		管理	39
51-101-34	動物用 3.5皮質骨ネジ 34mm	4946329084443	19動業第1872号		管理	39
51-101-36	動物用 3.5皮質骨ネジ 36mm	4946329084450	19動業第1872号		管理	39
51-101-40	動物用 3.5皮質骨ネジ 40mm	4946329084467	19動業第1872号		管理	39
51-102-06	動物用 2.7皮質骨ネジ 6mm	4946329084498	19動業第1872号		管理	39
51-102-08	動物用 2.7皮質骨ネジ 8mm	4946329084504	19動業第1872号		管理	39
51-102-10	動物用 2.7皮質骨ネジ 10mm	4946329084511	19動業第1872号		管理	39
51-102-12	動物用 2.7皮質骨ネジ 12mm	4946329084528	19動業第1872号		管理	39
51-102-14	動物用 2.7皮質骨ネジ 14mm	4946329084535	19動業第1872号		管理	39
51-102-16	動物用 2.7皮質骨ネジ 16mm	4946329084542	19動業第1872号		管理	39
51-102-18	動物用 2.7皮質骨ネジ 18mm	4946329084559	19動業第1872号		管理	39
51-102-20	動物用 2.7皮質骨ネジ 20mm	4946329084566	19動業第1872号		管理	39
51-102-22	動物用 2.7皮質骨ネジ 22mm	4946329084573	19動業第1872号		管理	39
51-102-24	動物用 2.7皮質骨ネジ 24mm	4946329084580	19動業第1872号		管理	39
51-102-26	動物用 2.7皮質骨ネジ 26mm	4946329084597	19動業第1872号		管理	39
51-102-28	動物用 2.7皮質骨ネジ 28mm	4946329084603	19動業第1872号		管理	39
51-102-30	動物用 2.7皮質骨ネジ 30mm	4946329084610	19動業第1872号		管理	39
51-102-32	動物用 2.7皮質骨ネジ 32mm	4946329084627	19動業第1872号		管理	39
51-102-34	動物用 2.7皮質骨ネジ 34mm	4946329084634	19動業第1872号		管理	39
51-102-36	動物用 2.7皮質骨ネジ 36mm	4946329084641	19動業第1872号		管理	39
51-102-38	動物用 2.7皮質骨ネジ 38mm	4946329084658	19動業第1872号		管理	39
51-103-06	動物用 2.4皮質骨ネジ 6mm	4946329084665	19動業第1872号		管理	39
51-103-08	動物用 2.4皮質骨ネジ 8mm	4946329084672	19動業第1872号		管理	39
51-103-10	動物用 2.4皮質骨ネジ 10mm	4946329084689	19動業第1872号		管理	39
51-103-12	動物用 2.4皮質骨ネジ 12mm	4946329084696	19動業第1872号		管理	39
51-103-14	動物用 2.4皮質骨ネジ 14mm	4946329084702	19動業第1872号		管理	39
51-103-16	動物用 2.4皮質骨ネジ 16mm	4946329084719	19動業第1872号		管理	39
51-103-18	動物用 2.4皮質骨ネジ 18mm	4946329084726	19動業第1872号		管理	39
51-103-20	動物用 2.4皮質骨ネジ 20mm	4946329084733	19動業第1872号		管理	39
51-103-22	動物用 2.4皮質骨ネジ 22mm	4946329084740	19動業第1872号		管理	39
51-103-24	動物用 2.4皮質骨ネジ 24mm	4946329084757	19動業第1872号		管理	39
51-104-06	動物用 2.0皮質骨ネジ 6mm	4946329084764	19動業第1872号		管理	39
51-104-08	動物用 2.0皮質骨ネジ 8mm	4946329084771	19動業第1872号		管理	39
51-104-10	動物用 2.0皮質骨ネジ 10mm	4946329084788	19動業第1872号		管理	39
51-104-12	動物用 2.0皮質骨ネジ 12mm	4946329084795	19動業第1872号		管理	39
51-104-14	動物用 2.0皮質骨ネジ 14mm	4946329084801	19動業第1872号		管理	39
51-104-16	動物用 2.0皮質骨ネジ 16mm	4946329084818	19動業第1872号		管理	39
51-104-18	動物用 2.0皮質骨ネジ 18mm	4946329084825	19動業第1872号		管理	39
51-104-20	動物用 2.0皮質骨ネジ 20mm	4946329084832	19動業第1872号		管理	39
51-104-22	動物用 2.0皮質骨ネジ 22mm	4946329084849	19動業第1872号		管理	39
51-104-24	動物用 2.0皮質骨ネジ 24mm	4946329084856	19動業第1872号		管理	39
51-105-10	動物用 4.0海綿骨ネジ 10mm	4946329084863	19動業第1872号		管理	41
51-105-12	動物用 4.0海綿骨ネジ 12mm	4946329084870	19動業第1872号		管理	41
51-105-14	動物用 4.0海綿骨ネジ 14mm	4946329084887	19動業第1872号		管理	41
51-105-16	動物用 4.0海綿骨ネジ 16mm	4946329084894	19動業第1872号		管理	41
51-105-18	動物用 4.0海綿骨ネジ 18mm	4946329084900	19動業第1872号		管理	41
51-105-20	動物用 4.0海綿骨ネジ 20mm	4946329084917	19動業第1872号		管理	41
51-105-22	動物用 4.0海綿骨ネジ 22mm	4946329084924	19動業第1872号		管理	41
51-105-24	動物用 4.0海綿骨ネジ 24mm	4946329084931	19動業第1872号		管理	41
51-105-26	動物用 4.0海綿骨ネジ 26mm	4946329084948	19動業第1872号		管理	41
51-105-28	動物用 4.0海綿骨ネジ 28mm	4946329084955	19動業第1872号		管理	41
51-105-30	動物用 4.0海綿骨ネジ 30mm	4946329084962	19動業第1872号		管理	41
51-105-35	動物用 4.0海綿骨ネジ 35mm	4946329084979	19動業第1872号		管理	41
51-105-40	動物用 4.0海綿骨ネジ 40mm	4946329084986	19動業第1872号		管理	41
51-106-16	動物用 3.5海綿骨ネジシャフト 16mm	4946329085013	19動業第1872号		管理	42
51-106-19	動物用 3.5海綿骨ネジシャフト 19mm	4946329085020	19動業第1872号		管理	42
51-106-22	動物用 3.5海綿骨ネジシャフト 22mm	4946329085037	19動業第1872号		管理	42
51-106-25	動物用 3.5海綿骨ネジシャフト 25mm	4946329085044	19動業第1872号		管理	42
51-106-28	動物用 3.5海綿骨ネジシャフト 28mm	4946329085051	19動業第1872号		管理	42
51-106-32	動物用 3.5海綿骨ネジシャフト 32mm	4946329085068	19動業第1872号		管理	42
51-106-36	動物用 3.5海綿骨ネジシャフト 36mm	4946329085075	19動業第1872号		管理	42

商品コード	商品名	JAN	承認・認証・届出番号	クラス分類		掲載ページ
				厚労省	農水省	
51-106-40	動物用 3.5海綿骨ネジシャフト 40mm	4946329085082	19動葉第1872号		管理	42
51-107-16	動物用 2.7海綿骨ネジシャフト 16mm	4946329085112	19動葉第1872号		管理	42
51-107-18	動物用 2.7海綿骨ネジシャフト 18mm	4946329085129	19動葉第1872号		管理	42
51-107-20	動物用 2.7海綿骨ネジシャフト 20mm	4946329085136	19動葉第1872号		管理	42
51-107-22	動物用 2.7海綿骨ネジシャフト 22mm	4946329085143	19動葉第1872号		管理	42
51-107-24	動物用 2.7海綿骨ネジシャフト 24mm	4946329085150	19動葉第1872号		管理	42
51-107-26	動物用 2.7海綿骨ネジシャフト 26mm	4946329085167	19動葉第1872号		管理	42
51-107-28	動物用 2.7海綿骨ネジシャフト 28mm	4946329085174	19動葉第1872号		管理	42
51-107-30	動物用 2.7海綿骨ネジシャフト 30mm	4946329085181	19動葉第1872号		管理	42
51-107-32	動物用 2.7海綿骨ネジシャフト 32mm	4946329085198	19動葉第1872号		管理	42
51-107-34	動物用 2.7海綿骨ネジシャフト 34mm	4946329085204	19動葉第1872号		管理	42
51-107-36	動物用 2.7海綿骨ネジシャフト 36mm	4946329085211	19動葉第1872号		管理	42
51-108-14	動物用 2.4海綿骨ネジシャフト 14mm	4946329085228	19動葉第1872号		管理	42
51-108-16	動物用 2.4海綿骨ネジシャフト 16mm	4946329085235	19動葉第1872号		管理	42
51-108-18	動物用 2.4海綿骨ネジシャフト 18mm	4946329085242	19動葉第1872号		管理	42
51-108-20	動物用 2.4海綿骨ネジシャフト 20mm	4946329085259	19動葉第1872号		管理	42
51-108-22	動物用 2.4海綿骨ネジシャフト 22mm	4946329085266	19動葉第1872号		管理	42
51-108-24	動物用 2.4海綿骨ネジシャフト 24mm	4946329085273	19動葉第1872号		管理	42
51-109-01	動物用 骨ネジワッシャー ラージ	4946329085280	19動葉第1872号		管理	41
51-109-02	動物用 骨ネジワッシャー スモール	4946329085297	19動葉第1872号		管理	41
51-110-06	動物用 1.5皮質骨ネジ 6mm六角/ST	4946329158021	19動葉第1872号		管理	38
51-110-07	動物用 1.5皮質骨ネジ 7mm六角/ST	4946329176438	19動葉第1872号		管理	38
51-110-08	動物用 1.5皮質骨ネジ 8mm六角/ST	4946329158038	19動葉第1872号		管理	38
51-110-09	動物用 1.5皮質骨ネジ 9mm六角/ST	4946329176445	19動葉第1872号		管理	38
51-110-10	動物用 1.5皮質骨ネジ 10mm六角/ST	4946329158045	19動葉第1872号		管理	38
51-110-11	動物用 1.5皮質骨ネジ 11mm六角/ST	4946329176452	19動葉第1872号		管理	38
51-110-12	動物用 1.5皮質骨ネジ 12mm六角/ST	4946329158052	19動葉第1872号		管理	38
51-110-14	動物用 1.5皮質骨ネジ 14mm六角/ST	4946329158069	19動葉第1872号		管理	38
51-110-16	動物用 1.5皮質骨ネジ 16mm六角/ST	4946329158076	19動葉第1872号		管理	38
51-110-18	動物用 1.5皮質骨ネジ 18mm六角/ST	4946329158083	19動葉第1872号		管理	38
51-110-20	動物用 1.5皮質骨ネジ 20mm六角/ST	4946329158090	19動葉第1872号		管理	38
51-110-22	動物用 1.5皮質骨ネジ 22mm六角/ST	4946329158106	19動葉第1872号		管理	38
51-110-24	動物用 1.5皮質骨ネジ 24mm六角/ST	4946329158113	19動葉第1872号		管理	38
51-111-04	動物用 1.1皮質骨ネジ 4mm十字/ST	4946329276572	27動葉第1404号		管理	38
51-111-05	動物用 1.1皮質骨ネジ 5mm十字/ST	4946329276589	27動葉第1404号		管理	38
51-111-06	動物用 1.1皮質骨ネジ 6mm十字/ST	4946329276596	27動葉第1404号		管理	38
51-111-07	動物用 1.1皮質骨ネジ 7mm十字/ST	4946329276602	27動葉第1404号		管理	38
51-111-08	動物用 1.1皮質骨ネジ 8mm十字/ST	4946329276619	27動葉第1404号		管理	38
51-111-09	動物用 1.1皮質骨ネジ 9mm十字/ST	4946329276626	27動葉第1404号		管理	38
51-111-10	動物用 1.1皮質骨ネジ 10mm十字/ST	4946329276633	27動葉第1404号		管理	38
51-111-11	動物用 1.1皮質骨ネジ 11mm十字/ST	4946329276640	27動葉第1404号		管理	38
51-111-12	動物用 1.1皮質骨ネジ 12mm十字/ST	4946329276657	27動葉第1404号		管理	38
51-112-04	動物用 1.3皮質骨ネジ 4mm十字/ST	4946329276664	27動葉第1404号		管理	38
51-112-05	動物用 1.3皮質骨ネジ 5mm十字/ST	4946329276671	27動葉第1404号		管理	38
51-112-06	動物用 1.3皮質骨ネジ 6mm十字/ST	4946329276688	27動葉第1404号		管理	38
51-112-07	動物用 1.3皮質骨ネジ 7mm十字/ST	4946329276695	27動葉第1404号		管理	38
51-112-08	動物用 1.3皮質骨ネジ 8mm十字/ST	4946329276701	27動葉第1404号		管理	38
51-112-09	動物用 1.3皮質骨ネジ 9mm十字/ST	4946329276718	27動葉第1404号		管理	38
51-112-10	動物用 1.3皮質骨ネジ 10mm十字/ST	4946329276725	27動葉第1404号		管理	38
51-112-11	動物用 1.3皮質骨ネジ 11mm十字/ST	4946329276732	27動葉第1404号		管理	38
51-112-12	動物用 1.3皮質骨ネジ 12mm十字/ST	4946329276749	27動葉第1404号		管理	38
51-113-06	動物用 2.4皮質骨ネジ 6mm六角/ST	4946329158229	19動葉第1872号		管理	39
51-113-08	動物用 2.4皮質骨ネジ 8mm六角/ST	4946329158236	19動葉第1872号		管理	39
51-113-10	動物用 2.4皮質骨ネジ 10mm六角/ST	4946329158243	19動葉第1872号		管理	39
51-113-12	動物用 2.4皮質骨ネジ 12mm六角/ST	4946329158250	19動葉第1872号		管理	39
51-113-14	動物用 2.4皮質骨ネジ 14mm六角/ST	4946329158267	19動葉第1872号		管理	39
51-113-16	動物用 2.4皮質骨ネジ 16mm六角/ST	4946329158274	19動葉第1872号		管理	39
51-113-18	動物用 2.4皮質骨ネジ 18mm六角/ST	4946329158281	19動葉第1872号		管理	39
51-113-20	動物用 2.4皮質骨ネジ 20mm六角/ST	4946329158298	19動葉第1872号		管理	39
51-113-22	動物用 2.4皮質骨ネジ 22mm六角/ST	4946329158304	19動葉第1872号		管理	39
51-113-24	動物用 2.4皮質骨ネジ 24mm六角/ST	4946329158311	19動葉第1872号		管理	39
51-114-06	動物用 2.0皮質骨ネジ 6mm六角/ST	4946329158120	19動葉第1872号		管理	38
51-114-08	動物用 2.0皮質骨ネジ 8mm六角/ST	4946329158137	19動葉第1872号		管理	38
51-114-10	動物用 2.0皮質骨ネジ 10mm六角/ST	4946329158144	19動葉第1872号		管理	38
51-114-12	動物用 2.0皮質骨ネジ 12mm六角/ST	4946329158151	19動葉第1872号		管理	38

商品名一覧

商品コード	商品名	JAN	承認・認証・届出番号	クラス分類		掲載ページ
				厚労省	農水省	
51-114-14	動物用 2.0皮質骨ネジ 14mm六角/ST	4946329158168	19動葉第1872号		管理	38
51-114-16	動物用 2.0皮質骨ネジ 16mm六角/ST	4946329158175	19動葉第1872号		管理	38
51-114-18	動物用 2.0皮質骨ネジ 18mm六角/ST	4946329158182	19動葉第1872号		管理	38
51-114-20	動物用 2.0皮質骨ネジ 20mm六角/ST	4946329158199	19動葉第1872号		管理	38
51-114-22	動物用 2.0皮質骨ネジ 22mm六角/ST	4946329158205	19動葉第1872号		管理	38
51-114-24	動物用 2.0皮質骨ネジ 24mm六角/ST	4946329158212	19動葉第1872号		管理	38
51-115-05	動物用 1.3皮質骨ネジ 5mm六角/ST	4946329276756	27動葉第1404号		管理	38
51-115-06	動物用 1.3皮質骨ネジ 6mm六角/ST	4946329276763	27動葉第1404号		管理	38
51-115-07	動物用 1.3皮質骨ネジ 7mm六角/ST	4946329276770	27動葉第1404号		管理	38
51-115-08	動物用 1.3皮質骨ネジ 8mm六角/ST	4946329276787	27動葉第1404号		管理	38
51-115-09	動物用 1.3皮質骨ネジ 9mm六角/ST	4946329276794	27動葉第1404号		管理	38
51-115-10	動物用 1.3皮質骨ネジ 10mm六角/ST	4946329276800	27動葉第1404号		管理	38
51-115-11	動物用 1.3皮質骨ネジ 11mm六角/ST	4946329276817	27動葉第1404号		管理	38
51-115-12	動物用 1.3皮質骨ネジ 12mm六角/ST	4946329276824	27動葉第1404号		管理	38
51-116-16	動物用 3.5海綿骨全ネジ 16mm六角/ST	4946329158496	19動葉第1872号		管理	41
51-116-19	動物用 3.5海綿骨全ネジ 19mm六角/ST	4946329162158	19動葉第1872号		管理	41
51-116-22	動物用 3.5海綿骨全ネジ 22mm六角/ST	4946329158526	19動葉第1872号		管理	41
51-116-25	動物用 3.5海綿骨全ネジ 25mm六角/ST	4946329162165	19動葉第1872号		管理	41
51-116-28	動物用 3.5海綿骨全ネジ 28mm六角/ST	4946329158557	19動葉第1872号		管理	41
51-116-32	動物用 3.5海綿骨全ネジ 32mm六角/ST	4946329162172	19動葉第1872号		管理	41
51-116-36	動物用 3.5海綿骨全ネジ 36mm六角/ST	4946329162189	19動葉第1872号		管理	41
51-116-40	動物用 3.5海綿骨全ネジ 40mm六角/ST	4946329162196	19動葉第1872号		管理	41
51-117-16	動物用 2.7海綿骨全ネジ 16mm六角/ST	4946329158380	19動葉第1872号		管理	41
51-117-18	動物用 2.7海綿骨全ネジ 18mm六角/ST	4946329158397	19動葉第1872号		管理	41
51-117-20	動物用 2.7海綿骨全ネジ 20mm六角/ST	4946329158403	19動葉第1872号		管理	41
51-117-22	動物用 2.7海綿骨全ネジ 22mm六角/ST	4946329158410	19動葉第1872号		管理	41
51-117-24	動物用 2.7海綿骨全ネジ 24mm六角/ST	4946329158427	19動葉第1872号		管理	41
51-117-26	動物用 2.7海綿骨全ネジ 26mm六角/ST	4946329158434	19動葉第1872号		管理	41
51-117-28	動物用 2.7海綿骨全ネジ 28mm六角/ST	4946329158441	19動葉第1872号		管理	41
51-117-30	動物用 2.7海綿骨全ネジ 30mm六角/ST	4946329158458	19動葉第1872号		管理	41
51-117-32	動物用 2.7海綿骨全ネジ 32mm六角/ST	4946329158465	19動葉第1872号		管理	41
51-117-34	動物用 2.7海綿骨全ネジ 34mm六角/ST	4946329158472	19動葉第1872号		管理	41
51-117-36	動物用 2.7海綿骨全ネジ 36mm六角/ST	4946329158489	19動葉第1872号		管理	41
51-118-14	動物用 2.4海綿骨全ネジ 14mm六角/ST	4946329158328	19動葉第1872号		管理	41
51-118-16	動物用 2.4海綿骨全ネジ 16mm六角/ST	4946329158335	19動葉第1872号		管理	41
51-118-18	動物用 2.4海綿骨全ネジ 18mm六角/ST	4946329158342	19動葉第1872号		管理	41
51-118-20	動物用 2.4海綿骨全ネジ 20mm六角/ST	4946329158359	19動葉第1872号		管理	41
51-118-22	動物用 2.4海綿骨全ネジ 22mm六角/ST	4946329158366	19動葉第1872号		管理	41
51-118-24	動物用 2.4海綿骨全ネジ 24mm六角/ST	4946329158373	19動葉第1872号		管理	41
51-140-01	小動物用ロングボルト	4946329085433	7畜A第1821号		管理	51
51-140-32	ロングドリルスパナ	4946329085457	11-442		一般	51
51-140-33	ドリルφ2.6×L155ロングボルト用	4946329085464	11-406		一般	51
51-200-16	動物用 ブロードプレートⅡ 76×12mm 6穴	4946329088168	19動葉第1872号		管理	49
51-200-17	動物用 ブロードプレートⅡ 89×12mm 7穴	4946329088175	19動葉第1872号		管理	49
51-200-18	動物用 ブロードプレートⅡ 100×12mm 8穴	4946329088182	19動葉第1872号		管理	49
51-200-19	動物用 ブロードプレートⅡ 113×12mm 9穴	4946329088199	19動葉第1872号		管理	49
51-200-20	動物用 ブロードプレートⅡ 125×12mm 10穴	4946329088205	19動葉第1872号		管理	49
51-200-21	動物用 ブロードプレートⅡ 137×12mm 11穴	4946329088212	19動葉第1872号		管理	49
51-200-22	動物用 ブロードプレートⅡ 148×12mm 12穴	4946329088229	19動葉第1872号		管理	49
51-200-24	動物用 ブロードプレートⅡ 174×12mm 14穴	4946329088236	19動葉第1872号		管理	49
51-201-16	動物用 ナロープレートⅡ 76×10mm 6穴	4946329088267	19動葉第1872号		管理	49
51-201-17	動物用 ナロープレートⅡ 89×10mm 7穴	4946329088274	19動葉第1872号		管理	49
51-201-18	動物用 ナロープレートⅡ 100×10mm 8穴	4946329088281	19動葉第1872号		管理	49
51-201-19	動物用 ナロープレートⅡ 113×10mm 9穴	4946329088298	19動葉第1872号		管理	49
51-201-20	動物用 ナロープレートⅡ 125×10mm 10穴	4946329088304	19動葉第1872号		管理	49
51-201-21	動物用 ナロープレートⅡ 137×10mm 11穴	4946329088311	19動葉第1872号		管理	49
51-201-22	動物用 ナロープレートⅡ 148×10mm 12穴	4946329088328	19動葉第1872号		管理	49
51-202-04	動物用 スモールプレート 35×8mm 4穴	4946329085631	19動葉第1872号		管理	49
51-202-05	動物用 スモールプレート 43.5×8mm 5穴	4946329085648	19動葉第1872号		管理	49
51-202-06	動物用 スモールプレート 52×8mm 6穴	4946329085655	19動葉第1872号		管理	49
51-202-07	動物用 スモールプレート 60.5×8mm 7穴	4946329085662	19動葉第1872号		管理	49
51-202-08	動物用 スモールプレート 69×8mm 8穴	4946329085679	19動葉第1872号		管理	49
51-202-09	動物用 スモールプレート 77.5×8mm 9穴	4946329085686	19動葉第1872号		管理	49
51-202-10	動物用 スモールプレート 86×8mm 10穴	4946329085693	19動葉第1872号		管理	49
51-202-11	動物用 スモールプレート 94.5×8mm 11穴	4946329085709	19動葉第1872号		管理	49

商品コード	商品名	JAN	承認・認証・届出番号	クラス分類		掲載ページ
				厚労省	農水省	
51-202-12	動物用 スモールプレート 103×8mm 12穴	4946329085716	19動薬第1872号		管理	49
51-202-14	動物用 スモールプレートII 37×8mm 4穴	4946329091533	19動薬第1872号		管理	49
51-202-15	動物用 スモールプレートII 44×8mm 5穴	4946329091540	19動薬第1872号		管理	49
51-202-16	動物用 スモールプレートII 52×8mm 6穴	4946329091557	19動薬第1872号		管理	49
51-202-17	動物用 スモールプレートII 60×8mm 7穴	4946329091564	19動薬第1872号		管理	49
51-202-18	動物用 スモールプレートII 68×8mm 8穴	4946329091571	19動薬第1872号		管理	49
51-202-19	動物用 スモールプレートII 76×8mm 9穴	4946329091588	19動薬第1872号		管理	49
51-202-20	動物用 スモールプレートII 84×8mm 10穴	4946329091595	19動薬第1872号		管理	49
51-202-21	動物用 スモールプレートII 93×8mm 11穴	4946329091601	19動薬第1872号		管理	49
51-202-22	動物用 スモールプレートII 100×8mm 12穴	4946329091618	19動薬第1872号		管理	49
51-203-04	動物用 ミニプレート 20×5mm 4穴	4946329085723	19動薬第1872号		管理	48
51-203-05	動物用 ミニプレート 25×5mm 5穴	4946329085730	19動薬第1872号		管理	48
51-203-06	動物用 ミニプレート 30×5mm 6穴	4946329085747	19動薬第1872号		管理	48
51-203-07	動物用 ミニプレート 35×5mm 7穴	4946329085754	19動薬第1872号		管理	48
51-203-08	動物用 ミニプレート 40×5mm 8穴	4946329085761	19動薬第1872号		管理	48
51-203-09	動物用 ミニプレート 45×5mm 9穴	4946329085778	19動薬第1872号		管理	48
51-203-10	動物用 ミニプレート 50×5mm 10穴	4946329085785	19動薬第1872号		管理	48
51-203-14	動物用 ミニプレート プラス 25×6mm 4穴	4946329085792	19動薬第1872号		管理	48
51-203-15	動物用 ミニプレート プラス 30×6mm 5穴	4946329085808	19動薬第1872号		管理	48
51-203-16	動物用 ミニプレート プラス 35×6mm 6穴	4946329085815	19動薬第1872号		管理	48
51-203-17	動物用 ミニプレート プラス 40×6mm 7穴	4946329085822	19動薬第1872号		管理	48
51-203-18	動物用 ミニプレート プラス 45×6mm 8穴	4946329085839	19動薬第1872号		管理	48
51-203-19	動物用 ミニプレート プラス 50×6mm 9穴	4946329085846	19動薬第1872号		管理	48
51-203-24	動物用 ミニプレートII 22×5mm 4穴	4946329091625	19動薬第1872号		管理	48
51-203-25	動物用 ミニプレートII 27×5mm 5穴	4946329091632	19動薬第1872号		管理	48
51-203-26	動物用 ミニプレートII 32×5mm 6穴	4946329091649	19動薬第1872号		管理	48
51-203-27	動物用 ミニプレートII 37×5mm 7穴	4946329091656	19動薬第1872号		管理	48
51-203-28	動物用 ミニプレートII 42×5mm 8穴	4946329091663	19動薬第1872号		管理	48
51-203-29	動物用 ミニプレートII 49×5mm 9穴	4946329091670	19動薬第1872号		管理	48
51-203-30	動物用 ミニプレートII 52×5mm 10穴	4946329091687	19動薬第1872号		管理	48
51-204-01	動物用 リコンストラクションプレート 200×6mm	4946329085853	19動薬第1872号		管理	47
51-204-02	動物用 リコンストラクションプレート 200×8mm	4946329085860	19動薬第1872号		管理	47
51-204-03	動物用 リコンストラクションプレートミニ 100×5×1.5mm	4946329091694	19動薬第1872号		管理	47
51-204-04	動物用 リコンストラクションプレートミニ 100×5×2.5mm	4946329158571	19動薬第1872号		管理	47
51-205-01	動物用 ミニストレートプレート 100×5×1.5mm	4946329085877	19動薬第1872号		管理	46
51-205-02	動物用 ミニストレートプレート 100×4.5×1.2mm	4946329158588	19動薬第1872号		管理	46
51-206-01	動物用 ミニT型プレート 35×5×1.5mm	4946329085884	19動薬第1872号		管理	47
51-206-12	動物用 スモールT型プレート 63×8×2mm	4946329158595	19動薬第1872号		管理	47
51-207-01	動物用 白蓋プレート 20×4.5mm 5穴	4946329085891	19動薬第1872号		管理	50
51-207-02	動物用 白蓋プレート 24×5.0mm 6穴	4946329085907	19動薬第1872号		管理	50
51-207-03	動物用 白蓋プレート 39×7.0mm 6穴	4946329085914	19動薬第1872号		管理	50
51-207-04	動物用 白蓋プレート 29×7.0mm 4穴	4946329091700	19動薬第1872号		管理	50
51-207-05	動物用 白蓋プレート フラット 31×5mm 6穴	4946329091717	19動薬第1872号		管理	50
51-208-01	動物用 アリゲータープレート 100mm	4946329085921	19動薬第1872号		管理	50
51-208-02	動物用 アリゲータープレート 141.5mm	4946329088106	19動薬第1872号		管理	50
51-209-01	動物用 スモールスネークプレート 130×7×2mm	4946329158601	19動薬第1872号		管理	50
51-210-01	動物用 ミニスネークプレート 120×6mm	4946329158618	19動薬第1872号		管理	50
51-210-02	動物用 ミニスネークプレート 100×5mm	4946329158625	19動薬第1872号		管理	50
51-211-08	動物用 スモールラディアルプレート 左 66×7mm	4946329158632	19動薬第1872号		管理	44
51-211-09	動物用 スモールラディアルプレート 左 74×7mm	4946329158649	19動薬第1872号		管理	44
51-211-18	動物用 スモールラディアルプレート 右 66×7mm	4946329158656	19動薬第1872号		管理	45
51-211-19	動物用 スモールラディアルプレート 右 74×7mm	4946329158663	19動薬第1872号		管理	45
51-212-07	動物用 ミニラディアルプレート 左 38×5mm	4946329158670	19動薬第1872号		管理	44
51-212-08	動物用 ミニラディアルプレート 左 43×5mm	4946329158687	19動薬第1872号		管理	44
51-212-17	動物用 ミニラディアルプレート 右 38×5mm	4946329158694	19動薬第1872号		管理	45
51-212-18	動物用 ミニラディアルプレート 右 43×5mm	4946329158700	19動薬第1872号		管理	45
51-213-06	動物用 ミニラディアルプレート 左 33×4.5mm	4946329158717	19動薬第1872号		管理	44
51-213-07	動物用 ミニラディアルプレート 左 38×4.5mm	4946329158724	19動薬第1872号		管理	44
51-213-16	動物用 ミニラディアルプレート 右 33×4.5mm	4946329158731	19動薬第1872号		管理	45
51-213-17	動物用 ミニラディアルプレート 右 38×4.5mm	4946329158748	19動薬第1872号		管理	45
51-214-06	動物用 ミニラディアルプレート75°曲 左 33×4.5mm	4946329214666	19動薬第1872号		管理	44
51-214-07	動物用 ミニラディアルプレート75°曲 左 38×4.5mm	4946329214673	19動薬第1872号		管理	44
51-214-08	動物用 ミニラディアルプレート75°曲 左 43×4.5mm	4946329214680	19動薬第1872号		管理	44
51-214-16	動物用 ミニラディアルプレート75°曲 右 33×4.5mm	4946329214697	19動薬第1872号		管理	45
51-214-17	動物用 ミニラディアルプレート75°曲 右 38×4.5mm	4946329214703	19動薬第1872号		管理	45

商品名一覧

商品コード	商品名	JAN	承認・認証・届出番号	クラス分類		掲載ページ
				厚労省	農水省	
51-214-18	動物用 ミニラディアルプレート75°曲 右 43×4.5mm	4946329214710	19動業第1872号		管理	45
51-215-06	動物用 トイラディアルプレート 左 26.5×3.6mm	4946329214727	19動業第1872号		管理	44
51-215-07	動物用 トイラディアルプレート 左 30.5×3.6mm	4946329214734	19動業第1872号		管理	44
51-215-08	動物用 トイラディアルプレート 左 34.5×3.6mm	4946329214741	19動業第1872号		管理	44
51-215-16	動物用 トイラディアルプレート 右 26.5×3.6mm	4946329214758	19動業第1872号		管理	45
51-215-17	動物用 トイラディアルプレート 右 30.5×3.6mm	4946329214765	19動業第1872号		管理	45
51-215-18	動物用 トイラディアルプレート 右 34.5×3.6mm	4946329214772	19動業第1872号		管理	45
51-216-01	動物用 トイ・カットプルプレート1.1用 75×3×0.9mm	4946329276534	27動業第1404号		管理	46
51-216-02	動物用 トイ・カットプルプレート1.3用 75×3.5×1.0mm	4946329276541	27動業第1404号		管理	46
51-217-01	動物用 T型カットプルプレート1.1用 100×3×0.9mm	4946329276558	27動業第1404号		管理	46
51-217-02	動物用 T型カットプルプレート1.3用 100×3.5×1.0mm	4946329276565	27動業第1404号		管理	46
51-300-01	プレートベンダー	4946329085952	11-431		一般	52
51-300-02	骨ネジドライバ―M2.0,2.4	4946329085969	11-435		一般	51,55
51-300-04	マルチハンドル	4946329085976	11-440		一般	53,83
51-300-05	下孔ドリル φ1.7×L100	4946329085983	11-406		一般	53
51-300-07	下孔ドリル φ2.2×L140	4946329085990	11-406		一般	53
51-300-08	ドリル φ2.4×L100(ロードスクリュー)	4946329086003	11-405		一般	53
51-300-09	ドリル φ2.7×L110(ロードスクリュー)	4946329086010	11-405		一般	53
51-300-10	ドリル φ3.5×L140(ロードスクリュー)	4946329086027	11-405		一般	51,53
51-300-12	ユニバーサルドリルガイド M1.7,2.4	4946329086034	11-433		一般	54
51-300-14	ユニバーサルドリルガイド M2.2	4946329086041	11-433		一般	54
51-300-17	動物用 デブスゲージ M1.3六角、M1.5、2.0、2.4用	4946329318722	28-4098		一般	54
51-300-19	動物用 デブスゲージ M1.1、M1.3用	4946329283532	28-3518		一般	54
51-300-20	デブスゲージ(M3.5、4.0用)	4946329086065	21-2966		一般	54
51-300-24	骨ネジタップ (M2.4骨皮質用)	4946329086072	11-434		一般	53
51-300-27	動物用 下孔ドリル φ0.8×65mm	4946329283549	27-3167		一般	53
51-300-28	動物用 下孔ドリル φ0.9×65mm	4946329283556	27-3167		一般	53
51-300-29	動物用 下孔ドリル φ1.0×65mm	4946329283563	27-3167		一般	53
51-300-30	下孔ドリル φ1.5×80mm	4946329150872	11-406		一般	53
51-300-31	下孔ドリル φ1.5×100mmロング	4946329150889	11-406		一般	53
51-300-33	動物用 下孔ドリル φ1.1×80mm	4946329162257	20-1220		一般	53
51-300-36	骨ネジタップ M2.0用	4946329150902	11-434		一般	53
51-300-37	骨ネジタップ M2.7用	4946329150919	11-434		一般	53
51-300-38	動物用 骨ネジタップ M1.5用	4946329162264	20-1220		一般	53
51-300-50	動物用 ユニバーサルドリルガイド M2.0用	4946329150926	20-1220		一般	54
51-300-51	ユニバーサルドリルガイド M2.7	4946329150933	11-433		一般	54
51-300-52	動物用 ユニバーサルドリルガイド M1.5用	4946329162271	20-1220		一般	54
51-300-53	動物用 ドリルガイド φ1.0,φ1.1	4946329283570	28-1872		一般	54
51-300-54	動物用 ドリルガイド φ0.8,φ0.9	4946329283587	28-1872		一般	54
51-300-60	デブスゲージ(M2.7用)	4946329150940	21-2966		一般	54
51-300-63	動物用 骨ネジピンセット M1.1、M1.3、M1.5用	4946329283594	28-1870		一般	54
51-300-64	動物用 骨ネジドライバ― M1.1,M1.3用	4946329283600	28-1869		一般	55
51-300-66	動物用 骨ネジドライバ― M1.5,M2.0・2.4用	4946329162295	20-1220		一般	55
51-400-01	小動物用自由変形創外固定副子(1枚)	4946329086331	11-449		一般	61
51-500-11	動物用 スクリュー支点型骨整復鉗子 左支点	4946329215762	24-3067		一般	66
51-500-12	動物用 スクリュー支点型骨整復鉗子 右支点	4946329215779	24-3067		一般	66
51-500-21	動物用 骨折部整復維持器	4946329215786	24-3070		一般	66
51-500-31	動物用 骨折部整復牽引器	4946329215793	25-1691		一般	67
51-510-01	動物用剥離子	4946329086386	11-398		一般	69
51-513-11	動物用 側弯丸のみ鉗子 Mz-Model 1.5mm	4946329177121	21-2885		一般	74
51-513-12	動物用 側弯丸のみ鉗子 Mz-Model 2.5mm	4946329177138	21-2885		一般	74
51-513-13	動物用 側弯丸のみ鉗子 Mz-Model 3.5mm	4946329177145	21-2885		一般	74
51-513-21	動物用 二連関節丸のみ鉗子 直型 1.5mm	4946329177152	21-2885		一般	74
51-513-22	動物用 二連関節丸のみ鉗子 直型 2.5mm	4946329177169	21-2885		一般	74
51-513-31	動物用 二連関節丸のみ鉗子 反型 1.5mm	4946329177176	21-2885		一般	74
51-513-32	動物用 二連関節丸のみ鉗子 反型 2.5mm	4946329177183	21-2885		一般	74
51-514-01	動物用ピンバイス 大(2～3)	4946329086416	21-513		一般	60
51-514-02	動物用ピンバイス 中(1～2)	4946329086423	21-513		一般	60
51-514-03	動物用ピンバイス 小(0.5～1)	4946329086430	21-513		一般	60
51-514-04	ピンバイス用 スパナ	4946329086447	—			60
51-514-05	ピンバイス用 パー	4946329086454	—			60
51-516-03	動物用 チップ付ヤング鉗子	4946329207002	24-2027		一般	61
51-518-01	プレス型プレート曲器	4946329086553	11-424		一般	52
51-519-02	小動物用ゲルピー開創器 強弯	4946329140484	21-292		一般	114
51-520-00	ワイヤーパッサ―(チューブ3種付)	4946329086577	11-441		一般	62

商品コード	商品名	JAN	承認・認証・届出番号	クラス分類		掲載ページ
				厚労省	農水省	
51-520-01	チューブ A(ワイヤーパッサー用)	4946329086584	11-441		一般	62
51-520-02	チューブ B(ワイヤーパッサー用)	4946329086591	11-441		一般	62
51-520-03	チューブ C(ワイヤーパッサー用)	4946329086607	11-441		一般	62
51-527-00	ハンドベンディングプライヤー	4946329172133	21-508		一般	52
51-528-01	ハンドリーマーφ2.5	4946329185690	22-4024		一般	73
51-528-02	ハンドリーマーφ3.0	4946329185706	22-4024		一般	73
51-528-03	ハンドリーマーφ3.5	4946329185713	22-4024		一般	73
51-528-04	ハンドリーマーφ4.0	4946329185720	22-4024		一般	73
51-529-01	動物用 ドリルガイド付骨片把持鉗子	4946329206852	24-2028		一般	63
51-529-02	動物用 ドリルガイド付骨片把持鉗子(頭部回転式)	4946329215809	24-3068		一般	63
51-530-00	動物用 バランスハンマー	4946329206869	24-2029		一般	71
51-531-00	動物用 スティック型プレートベンダー	4946329206876	24-2026		一般	52
51-531-01	動物用 スティック型プレートベンダー交換用先端	4946329206883	24-2026		一般	52
51-532-00	動物用 ウルリッヒ骨把持鉗子 ミニ	4946329206890	25-1690		一般	65
51-533-01	動物用 モスキート改良型プレート骨把持鉗子	4946329215816	24-3069		一般	63
51-533-02	動物用 コッヘル改良型プレート骨把持鉗子	4946329215823	24-3066		一般	63
51-590-60	動物用 スクリュー用滅菌ケース	4946329161878	—			37
51-590-70	動物用 プレート用滅菌ケース	4946329161885	—			37
51-590-80	動物用 インストゥルメント用滅菌ケース	4946329161892	—			37
51-590-90	動物用 M1.5スクリュー用滅菌ケース	4946329161908	—			37
51-590-95	動物用 M1.1、M1.3用スクリュートレイ	4946329318715	—			37
51-710-08	PENTAネイルφ4 80mm	4946329136838	16消安第7157号		管理	84
51-710-09	PENTAネイルφ4 90mm	4946329136845	16消安第7157号		管理	84
51-710-10	PENTAネイルφ4 100mm	4946329136852	16消安第7157号		管理	84
51-710-11	PENTAネイルφ4 110mm	4946329136869	16消安第7157号		管理	84
51-710-12	PENTAネイルφ4 120mm	4946329136876	16消安第7157号		管理	84
51-711-12	PENTAネイルφ5 120mm	4946329136883	16消安第7157号		管理	84
51-711-13	PENTAネイルφ5 130mm	4946329136890	16消安第7157号		管理	84
51-711-14	PENTAネイルφ5 140mm	4946329136906	16消安第7157号		管理	84
51-712-13	PENTAネイルφ6 130mm	4946329136913	16消安第7157号		管理	84
51-712-14	PENTAネイルφ6 140mm	4946329136920	16消安第7157号		管理	84
51-712-15	PENTAネイルφ6 150mm	4946329136937	16消安第7157号		管理	84
51-712-16	PENTAネイルφ6 160mm	4946329136944	16消安第7157号		管理	84
51-715-00	スクリュードライバー	4946329144246	17-61		一般	83
51-715-01	PENTAネイル用エンドキャップ	4946329136951	16消安第7157号		管理	84
51-716-10	PENTAロッキングスクリュー 2.0×10 φ4ネール用	4946329136968	16消安第7157号		管理	84
51-716-12	PENTAロッキングスクリュー 2.0×12 φ4ネール用	4946329136975	16消安第7157号		管理	84
51-716-14	PENTAロッキングスクリュー 2.0×14 φ4ネール用	4946329136982	16消安第7157号		管理	84
51-716-16	PENTAロッキングスクリュー 2.0×16 φ4ネール用	4946329136999	16消安第7157号		管理	84
51-716-18	PENTAロッキングスクリュー 2.0×18 φ4ネール用	4946329137002	16消安第7157号		管理	84
51-716-20	PENTAロッキングスクリュー 2.0×20 φ4ネール用	4946329137019	16消安第7157号		管理	84
51-717-12	PENTAロッキングスクリュー 2.5×12 φ5 φ6ネール用	4946329137026	16消安第7157号		管理	84
51-717-14	PENTAロッキングスクリュー 2.5×14 φ5 φ6ネール用	4946329137033	16消安第7157号		管理	84
51-717-16	PENTAロッキングスクリュー 2.5×16 φ5 φ6ネール用	4946329137040	16消安第7157号		管理	84
51-717-18	PENTAロッキングスクリュー 2.5×18 φ5 φ6ネール用	4946329137057	16消安第7157号		管理	84
51-717-20	PENTAロッキングスクリュー 2.5×20 φ5 φ6ネール用	4946329137064	16消安第7157号		管理	84
51-717-22	PENTAロッキングスクリュー 2.5×22 φ5 φ6ネール用	4946329137071	16消安第7157号		管理	84
51-717-24	PENTAロッキングスクリュー 2.5×24 φ5 φ6ネール用	4946329137088	16消安第7157号		管理	84
51-717-26	PENTAロッキングスクリュー 2.5×26 φ5 φ6ネール用	4946329137095	16消安第7157号		管理	84
51-720-00	PENTAネイル打込器	4946329137101	17-48		一般	83
51-721-00	PENTAラチェットハンドル	4946329137118	17-52		一般	83
51-722-01	PENTAガイドスリーブ	4946329137125	17-49		一般	83
51-722-11	PENTAスリーブ	4946329137132	17-50		一般	83
51-722-12	PENTAスリーブ	4946329137149	17-50		一般	83
51-722-13	PENTAスリーブ	4946329137156	17-50		一般	83
51-722-21	PENTA牽引スリーブ	4946329137163	17-51		一般	83
51-722-22	PENTA牽引用ストップパー付ピン	4946329137170	17-53		一般	83
51-723-01	PENTA髄空リーマー	4946329137187	17-54		一般	83
51-723-02	PENTA髄空リーマー	4946329137194	17-54		一般	83
51-723-03	PENTA髄空リーマー	4946329137200	17-54		一般	83
51-724-01	PENTA下孔ドリル	4946329137217	17-55		一般	83
51-724-02	PENTA下孔ドリル	4946329137224	17-55		一般	83
51-725-01	PENTAデプスゲージ	4946329137231	17-56		一般	83
51-726-01	PENTAタップ	4946329137248	17-57		一般	83
51-726-02	PENTAタップ	4946329137255	17-57		一般	83

商品名一覧

商品コード	商品名	JAN	承認・認証・届出番号	クラス分類		掲載ページ
				厚労省	農水省	
51-727-01	PENTA骨ネジドライバー	4946329137262	17-58		一般	83
51-728-00	PENTAネイル抜去器	4946329137279	17-59		一般	83
51-729-00	PENTAネイル抜去用ハンマー	4946329137286	17-60		一般	83
58-009-00	電動手術台 MUT-300型	4946329086744	21-4155		一般	8
58-010-01	電動油圧手術台 MUT-500	4946329086751	21-4156		一般	7
58-010-02	動物手術台用レール保定金具 (1個)	4946329086768	—			9
58-010-03	手術台V型マットレス 500×1520	4946329086775	—			9
58-010-08	丸型スクリーン掛(固定金具付)	4946329086768	—			9
58-010-10	手術台V型マットレス 500×1240	4946329086812	—			9
58-010-11	500型X線カセット格納枠 500×1260mm	4946329144307	—			7
58-010-12	500型X線カセット格納枠 500×240mm	4946329144314	—			7
58-010-14	300型X線カセット格納枠 500×975mm	4946329144338	—			9
58-010-15	300型X線カセット格納枠 500×240mm	4946329144345	—			9
58-010-20	手術台フットスイッチMUT-500用 新型	4946329150162	21-4156		一般	7
58-011-00	電動油圧手術台 MUT-500SR 標準付属品付	4946329127768	20-1891		一般	5
58-011-20	MUT-500SR型 手術台用フットスイッチ	4946329168044	20-1891		一般	5
58-088-01	体圧分散・温風マットレギュラー50×80	4946329214376	—			11
58-088-02	体圧分散・温風マットラージ60×100	4946329209969	—			11
58-088-03	体圧分散・温風マットレギュラー&ラージ	4946329214611	—			11
58-088-11	体圧分散・温風マット 薄型4分割レギュラー	4946329243727	—	—		11
58-088-12	体圧分散・温風マット 薄型4分割ラージ	4946329243703	—	—		11
58-088-13	体圧分散・温風 マット薄型4分割R&L	4946329243710	—	—		11
58-089-01	ホームナースpet SS	4571410781019	—			22
58-089-02	ホームナースpet S	4571410781026	—			22
58-089-03	ホームナースpet M	4571410781033	—			22
58-089-04	ホームナースpet L	4571410781040	—			22
58-089-05	ホームナースpet LL	4571410781064	—			22
58-999-99	手術台取付用カメラアーム	—	—	—	—	10
88-050-00	Triangoスタンド式TR-30XLF	4571388790150	26B3X0026TR0001	I		14
ES-2CB-S06	超硬カーバイトバー 0.6mm	4560225001979	18-638		一般	93
ES-2CB-S08	超硬カーバイトバー 0.8mm	4560225001986	18-638		一般	93
ES-2CB-S10	超硬カーバイトバー 1.0mm	4560225001993	18-638		一般	93
ES-2CB-S14	超硬カーバイトバー 1.4mm	4560225002006	18-638		一般	93
ES-2CB-S18	超硬カーバイトバー 1.8mm	4560225002013	18-638		一般	93
ES-2CB-S23	超硬カーバイトバー 2.3mm	4560225002020	18-638		一般	93
ES-2CB-S27	超硬カーバイトバー 2.7mm	4560225002037	18-638		一般	93
ES-2CB-S31	超硬カーバイトバー 3.1mm	4560225002044	18-638		一般	93
ES-2CB-S35	超硬カーバイトバー 3.5mm	4560225002051	18-638		一般	93
ES-2CB-S40	超硬カーバイトバー 4.0mm	4560225002068	18-638		一般	93
ES-2CB-S45	超硬カーバイトバー 4.5mm	4560225002075	18-638		一般	93
ES-2CB-S50	超硬カーバイトバー 5.0mm	4560225002082	18-638		一般	93
ES-2CB-S60	超硬カーバイトバー 6.0mm	4560225002099	18-638		一般	93
ES-2CB-S70	超硬カーバイトバー 7.0mm	4560225002105	18-638		一般	93
ES-2DM-S06	ダイヤモンドバー 0.6mm	4560225002396	18-638		一般	93
ES-2DM-S08	ダイヤモンドバー 0.8mm	4560225002402	18-638		一般	93
ES-2DM-S10	ダイヤモンドバー 1.0mm	4560225002419	18-638		一般	93
ES-2DM-S14	ダイヤモンドバー 1.4mm	4560225002426	18-638		一般	93
ES-2DM-S18	ダイヤモンドバー 1.8mm	4560225002433	18-638		一般	93
ES-2DM-S23	ダイヤモンドバー 2.3mm	4560225002440	18-638		一般	93
ES-2DM-S27	ダイヤモンドバー 2.7mm	4560225002457	18-638		一般	93
ES-2DM-S31	ダイヤモンドバー 3.1mm	4560225002464	18-638		一般	93
ES-2DM-S35	ダイヤモンドバー 3.5mm	4560225002471	18-638		一般	93
ES-2DM-S40	ダイヤモンドバー 4.0mm	4560225002488	18-638		一般	93
ES-2DM-S45	ダイヤモンドバー 4.5mm	4560225002495	18-638		一般	93
ES-2DM-S50	ダイヤモンドバー 5.0mm	4560225002501	18-638		一般	93
ES-2DM-S60	ダイヤモンドバー 6.0mm	4560225002518	18-638		一般	93
ES-2DM-S70	ダイヤモンドバー 7.0mm	4560225002525	18-638		一般	93
ES-2SS-S06	ステンレスバー 0.6mm	4560225002815	18-638		一般	93
ES-2SS-S08	ステンレスバー 0.8mm	4560225002822	18-638		一般	93
ES-2SS-S10	ステンレスバー 1.0mm	4560225002839	18-638		一般	93
ES-2SS-S14	ステンレスバー 1.4mm	4560225002846	18-638		一般	93
ES-2SS-S18	ステンレスバー 1.8mm	4560225002853	18-638		一般	93
ES-2SS-S23	ステンレスバー 2.3mm	4560225002860	18-638		一般	93
ES-2SS-S27	ステンレスバー 2.7mm	4560225002877	18-638		一般	93
ES-2SS-S31	ステンレスバー 3.1mm	4560225002884	18-638		一般	93

商品コード	商品名	JAN	承認・認証・届出番号	クラス分類		掲載ページ
				厚労省	農水省	
ES-2SS-S35	ステンレスパー 3.5mm	4560225002891	18-638		一般	93
ES-2SS-S40	ステンレスパー 4.0mm	4560225002907	18-638		一般	93
ES-2SS-S45	ステンレスパー 4.5mm	4560225002914	18-638		一般	93
ES-2SS-S50	ステンレスパー 5.0mm	4560225002921	18-638		一般	93
ES-2SS-S60	ステンレスパー 6.0mm	4560225002938	18-638		一般	93
ES-2SS-S70	ステンレスパー 7.0mm	4560225002945	18-638		一般	93
ES-DD-S19	ダイヤモンドディスク	4560225005243	18-638		一般	93
ES-SEC-S40	ステンレスエッグパー クロスカット 4.0mm	4560225005212	18-638		一般	93
ES-SEC-S50	ステンレスエッグパー クロスカット 5.0mm	4560225005229	18-638		一般	93
ES-SEC-S60	ステンレスエッグパー クロスカット 6.0mm	4560225005236	18-638		一般	93
ES-SE-S40	ステンレスエッグパー 4.0mm	4560225005199	18-638		一般	93
ES-SE-S50	ステンレスエッグパー 5.0mm	4560225005205	18-638		一般	93
ES-SE-S60	ステンレスエッグパー 6.0mm	4560225005182	18-638		一般	93
ES-TD-S10	ツイストドリル 1.0mm×70mm	4560225005335	18-638		一般	93
ES-TD-S15	ツイストドリル 1.5mm×10mm	4560225005342	18-638		一般	93
ES-TD-S20	ツイストドリル 2.0mm×10mm	4560225005359	18-638		一般	93
FC-73	プリマド2フットコントロール(シングル)	4560264529243	24-540		一般	87
FC-74	プリマド2フットコントロール(マルチ)	4560264529250	24-540		一般	87
P200-BMH	プリマド2ボーンソーモーターハンドピース	4560264529830	24-540		一般	90
P200-BMH-HS	プリマド2ボーンソーモーターハンドピース(HS)	4560264529847	24-540		一般	90
P200-CU-100	プリマド2コントロールユニット	4560264533820	24-540		一般	86
P200-HMH	プリマド2ハイトルクモーターハンドピース	4560264529786	24-540		一般	92
P200-HMH-HS	プリマド2ハイトルクモーターハンドピース(HS)	4560264529793	24-540		一般	92
P200-IN-BS	イリゲーションノズル200(ボーンソー用)	4560264530225	24-540		一般	90
P200-OSC	プリマド2オシレートソーアタッチメント	4560264529915	24-540		一般	90
P200-REC	プリマド2レシプロソーアタッチメント	4560264529854	24-540		一般	90
P200-SAG	プリマド2サジタルソーアタッチメント	4560264529885	24-540		一般	90
P200-WPD	プリマド2ワイヤーピンドライバー	4560264529809	24-540		一般	88
PD-2ADM	ドリルアタッチメント(アングル)	4560264530232	24-1118		一般	92
PD-2SDM	ドリルアタッチメント(ストレート)	4560264530249	24-1118		一般	92
PD-EZ-M	EZスプレーメディカルセット	4560224991080	—			94
PD-IN-D	イリゲーションノズル ドリル用	4560264533837	24-1118		一般	92
PD-IT-S	イリゲーションチューブ(10本入)	4560264500556	24-540		一般	92
PD-SA-R	レシプロケーティングソーアタッチメント	4560264510845	21-3154		一般	89
PDS-RE-4023	レシプロケーティングソー用ブレード	4560264516465	24-680		一般	91
PDS-RE-4028	レシプロケーティングソー用ブレード	4560264516472	24-680		一般	91
PDS-RE-4114	レシプロケーティングソー用ブレード	4560264516489	24-680		一般	91
PDS-RE-4127	レシプロケーティングソー用ブレード	4560264516441	24-680		一般	91
PDS-RE-4217	レシプロケーティングソー用ブレード	4560264516496	24-680		一般	91
PDS-RE-4223	レシプロケーティングソー用ブレード	4560264516502	24-680		一般	91
PDS-RE-6127	レシプロケーティングソー用ブレード	4560264516458	24-680		一般	91
PDS-SO-411	ボーンソー	4560264516298	24-680		一般	91
PDS-SO-412	ボーンソー	4560264516304	24-680		一般	91
PDS-SO-422	ボーンソー	4560264516311	24-680		一般	91
PDS-SO-431	ボーンソー	4560264516328	24-680		一般	91
PDS-SO-432	ボーンソー	4560264516335	24-680		一般	91
PDS-SO-433	ボーンソー	4560264516342	24-680		一般	91
PDS-SO-441	ボーンソー	4560264516359	24-680		一般	91
PDS-SO-442	ボーンソー	4560264516366	24-680		一般	91
PDS-SO-452	ボーンソー	4560264516373	24-680		一般	91
PDS-SO-453	ボーンソー	4560264516380	24-680		一般	91
PDS-SO-632	ボーンソー	4560264516403	24-680		一般	91
PDS-SO-642	ボーンソー	4560264516410	24-680		一般	91
PDS-SO-653	ボーンソー	4560264516625	24-680		一般	91
SH148	SSA サジタルソーアタッチメント	4560264507142	19-879		一般	89
SH149	PCA ピンチャックアタッチメント	4560264507111	19-879		一般	89
SH150	WCA ワイヤチャックアタッチメント	4560264507128	19-879		一般	89
SH151	JCA-1 ジャコブスチャックアタッチメント	4560264507098	19-879		一般	89
SH152	JCA-2 ジャコブスチャックアタッチメント	4560264507104	19-879		一般	89
SH167	ACA AOチャックアタッチメント	4560264507135	19-879		一般	89
Y900084	スプレーミスト吸収パック	4560224988325	—			94
Y900630	パナスプレープラス 6本セット	4560224988110	—			94
Z182100	パナスプレープラス	4560224988103	—			94
【医薬品】						
06-841-02	ルーケンスボーンワックス1打	4571137140014	13800AZY00179000			123

ミズホ株式会社

<http://www.mizuho.co.jp/vclub/>

本社 〒113-0033 東京都文京区本郷3丁目30番地13号
小動物課 専用TEL ☎ **0120-88-7554**
専用FAX ☎ **0120-78-7554**
E-mail v@mizuho.co.jp



注意

- 事前に取扱説明書などをよくお読みいただき、内容を正しく理解された上でご使用ください。
- 定期点検および術前、術後の点検を徹底して行ってください。
- アフターサービスに関しては、各営業所および購入店までお問い合わせください。